


Per un accesso ureterale senza precedenti.

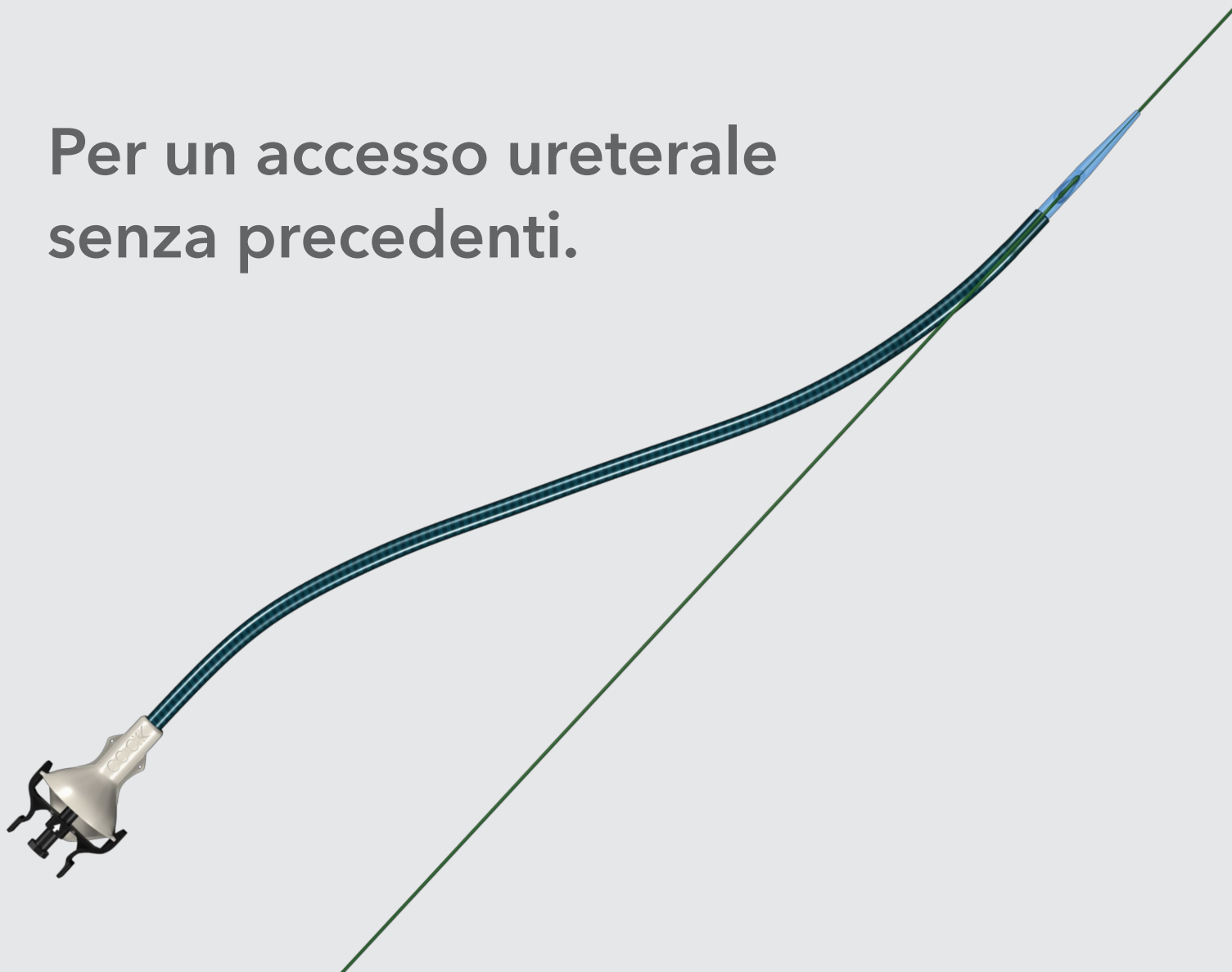


Flexor® Parallel™

RAPID RELEASE™ URETERAL ACCESS SHEATH

La guaina per accesso ureterale Flexor® Parallel™ Rapid Release™ di Cook Medical cambia il modo in cui si ottiene e si mantiene l'accesso. Con Flexor Parallel si ha l'opzione di inserire la guaina usando la tecnica di rilascio rapido, che elimina la necessità di una seconda guida o il metodo di posizionamento tradizionale Flexor.



cookmedical.eu

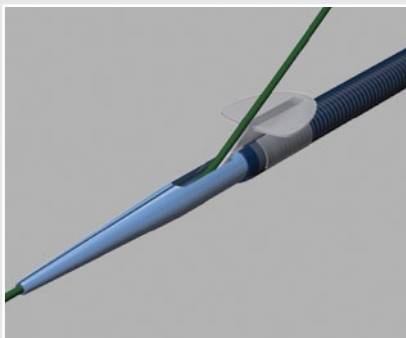


Flexor® Parallel™

RAPID RELEASE™ URETERAL ACCESS SHEATH

Quando si usa la tecnica di rilascio rapido, far avanzare Flexor Parallel su una guida precedentemente posizionata attraverso l'apertura del dilatatore. Una volta posizionata la guaina, rimuovere il dilatatore. In questo modo, la guida si sgancia rapidamente dalla punta del dilatatore e passa all'esterno della guaina. Questa tecnica fornisce un canale operativo libero e una guida di sicurezza per il mantenimento del tratto.

La tecnica di rilascio rapido elimina una fase della procedura, consente di risparmiare prodotti e ottimizza le scorte.

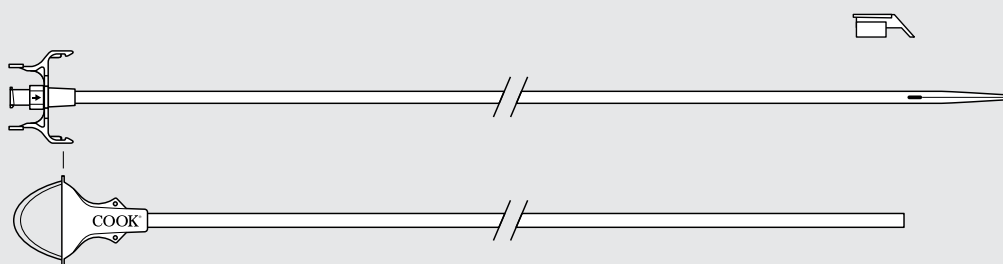

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Diametro interno Fr	Lunghezza cm	Codice di ordinazione	Codice prodotto	Diametro interno Fr	Lunghezza cm
G56428	FUS-095020-P	9,5	20	G56433	FUS-120020-P	12,0	20
G56429	FUS-095028-P	9,5	28	G56434	FUS-120028-P	12,0	28
G56430	FUS-095035-P	9,5	35	G56435	FUS-120035-P	12,0	35
G56431	FUS-095045-P	9,5	45	G56436	FUS-120045-P	12,0	45
G56432	FUS-095055-P	9,5	55	G56438	FUS-120055-P	12,0	55
G34871	FUS-107020-P	10,7	20	G56440	FUS-140028-P	14,0	28
G34872	FUS-107028-P	10,7	28	G56441	FUS-140035-P	14,0	35
G34873	FUS-107035-P	10,7	35	G56442	FUS-140045-P	14,0	45
G34874	FUS-107045-P	10,7	45	G56443	FUS-140055-P	14,0	55
G34875	FUS-107055-P	10,7	55				

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



CC, URO-A4