


# Nieźrównana jakość dostępu moczowodowego.

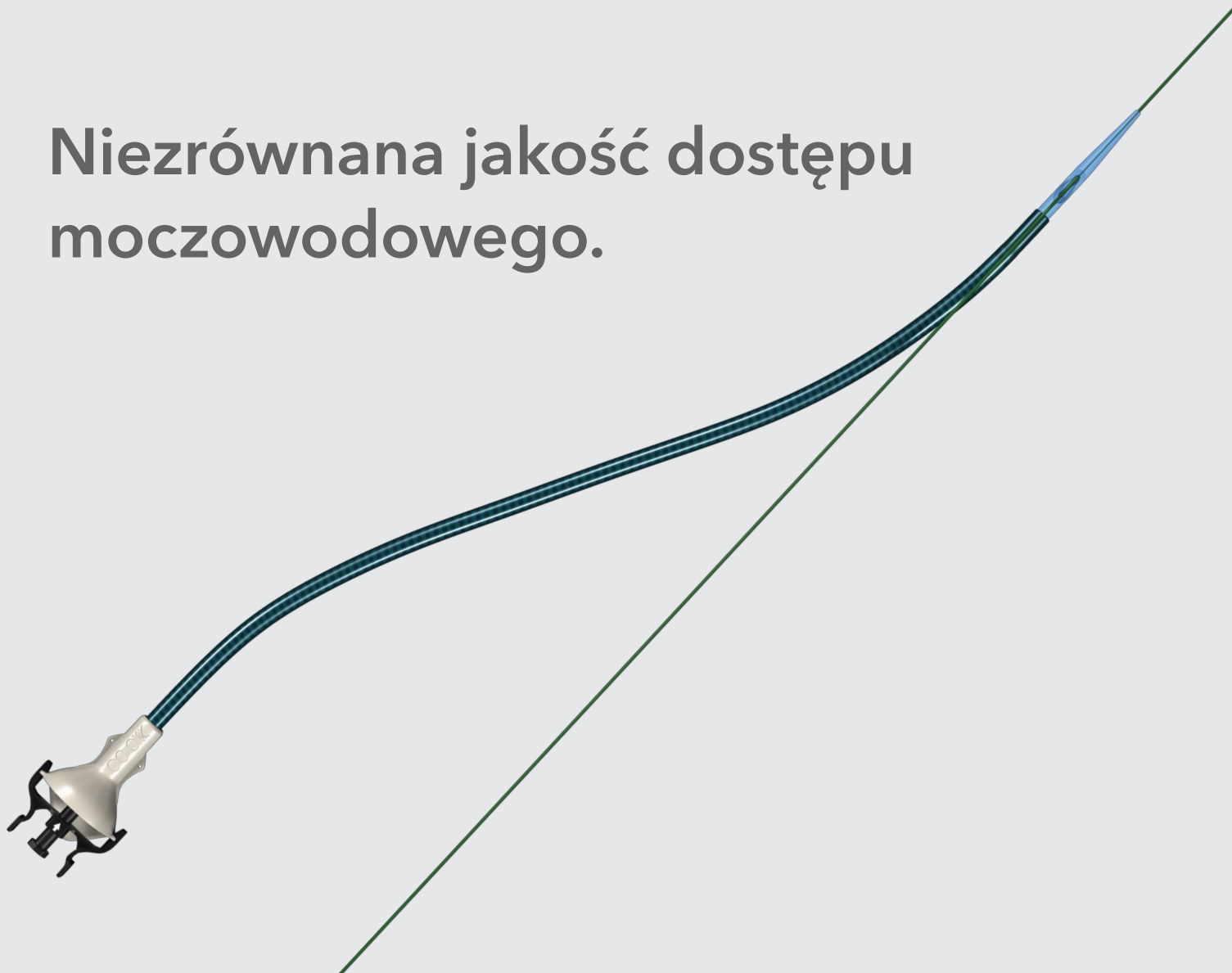


## Flexor® Parallel™

RAPID RELEASE™ URETERAL ACCESS SHEATH

Równoległa koszulka dostępu moczowodowego z szybkim zwolnieniem Flexor® Parallel™ Rapid Release™ firmy Cook Medical skutecznie zmienia sposób i zabezpieczenie dostępu. Korzystając z koszulki Flexor Parallel, można wprowadzić ją albo przy użyciu techniki szybkiego zwalniania, co eliminuje potrzebę stosowania drugiego przewodnika, albo za pomocą tradycyjnej metody umieszczania koszulki Flexor.



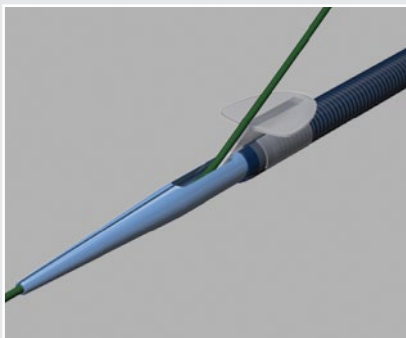


## Flexor® Parallel™

RAPID RELEASE™ URETERAL ACCESS SHEATH

Jeśli stosowana jest technika szybkiego zwalniania, należy wsunąć koszulkę Flexor Parallel przez otwór w rozszerzacz po uprzednio umieszczonym przewodniku. Po umieszczeniu koszulki usunąć rozszerzacz. Spowoduje szybkie zwolnienie przewodnika z końcówki rozszerzacza i wysunięcie poza koszulkę. Ta technika zapewnia drożny kanał roboczy i ustanowienie dodatkowego przewodnika zabezpieczającego dostęp.

Technika szybkiego zwalniania eliminuje jeden etap zabiegu, ogranicza zużycie produktu oraz usprawnia korzystanie z zasobów magazynowych.

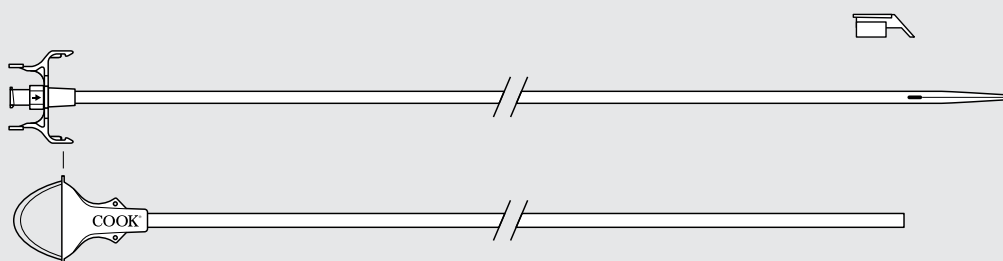

Numer zamówienia	Numer referencyjny części	Średnica wewnętrzna Fr	Długość cm	Numer zamówienia	Numer referencyjny części	Średnica wewnętrzna Fr	Długość cm
G56428	FUS-095020-P	9,5	20	G56433	FUS-120020-P	12,0	20
G56429	FUS-095028-P	9,5	28	G56434	FUS-120028-P	12,0	28
G56430	FUS-095035-P	9,5	35	G56435	FUS-120035-P	12,0	35
G56431	FUS-095045-P	9,5	45	G56436	FUS-120045-P	12,0	45
G56432	FUS-095055-P	9,5	55	G56438	FUS-120055-P	12,0	55
G34871	FUS-107020-P	10,7	20	G56440	FUS-140028-P	14,0	28
G34872	FUS-107028-P	10,7	28	G56441	FUS-140035-P	14,0	35
G34873	FUS-107035-P	10,7	35	G56442	FUS-140045-P	14,0	45
G34874	FUS-107045-P	10,7	45	G56443	FUS-140055-P	14,0	55
G34875	FUS-107055-P	10,7	55				

Niektóre produkty lub numery części mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Cook lub w dziale obsługi klienta.

### Customer Service

EU Website: [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu)  
 EDI: [cookmedical.eu/edi](http://cookmedical.eu/edi)  
 Distributors: +353 61239240, [ssc.distributors@cookmedical.com](mailto:ssc.distributors@cookmedical.com)  
 Austria: +43 179567121, [oe.orders@cookmedical.com](mailto:oe.orders@cookmedical.com)  
 Belgium: +32 27001702, [be.orders@cookmedical.com](mailto:be.orders@cookmedical.com)  
 Denmark: +45 38487607, [da.orders@cookmedical.com](mailto:da.orders@cookmedical.com)  
 Finland: +358 972519996, [fi.orders@cookmedical.com](mailto:fi.orders@cookmedical.com)  
 France: +33 171230269, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Germany: +49 6950072804, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 Hungary: +36 17779199, [hu.orders@cookmedical.com](mailto:hu.orders@cookmedical.com)  
 Ireland: +353 61239252, [ie.orders@cookmedical.com](mailto:ie.orders@cookmedical.com)  
 Italy: +39 0269682853, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Netherlands: +31 202013367, [nl.orders@cookmedical.com](mailto:nl.orders@cookmedical.com)  
 Poland: +48 223060159, [pl.orders@cookmedical.com](mailto:pl.orders@cookmedical.com)  
 Spain: +34 912702691, [es.orders@cookmedical.com](mailto:es.orders@cookmedical.com)  
 Sweden: +46 858769468, [se.orders@cookmedical.com](mailto:se.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - French: +41 448009609, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - Italian: +41 448009609, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - German: +41 448009609, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 United Kingdom: +44 2073654183, [uk.orders@cookmedical.com](mailto:uk.orders@cookmedical.com)

USA Website: [cookmedical.com](http://cookmedical.com)  
 EDI: [cookmedical.com/edi.do](http://cookmedical.com/edi.do)  
**Americas:**  
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335  
 E-mail: [customersupport@cookmedical.com](mailto:customersupport@cookmedical.com)  
**Australia:**  
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283  
 E-mail: [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)



CC, URO-A4