


EchoTip[®] Insight[™]


PORTOSYSTEMIC PRESSURE GRADIENT

Systemvorbereitung 1

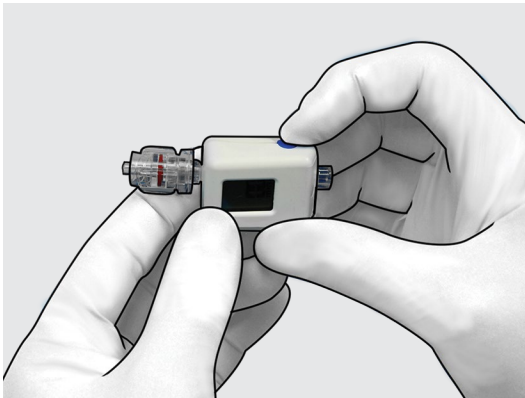


Alle Komponenten kontrollieren und aus der jeweiligen Verpackung nehmen.
Die Luer-Kappe vom Transducer abnehmen.
Den Transducer wie in der Gebrauchsanweisung für den Compass CT beschrieben einschalten.

Systemvorbereitung 2

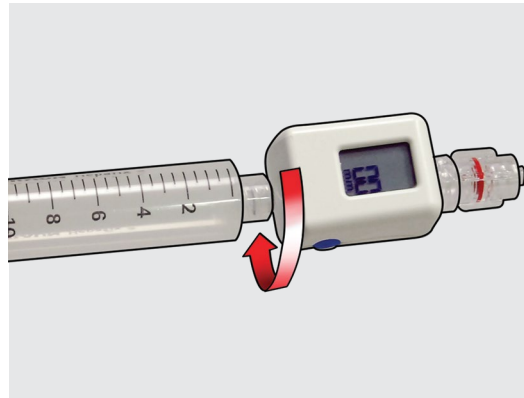


Die 10-mL-Spritze mit steriler Flüssigkeit füllen und darauf achten, dass alle größeren Luftblasen aus der Spritze entfernt werden.
Die vorbereitete Spritze an der Luer-Verbindungsbuchse des Transducers anbringen.

Systemvorbereitung 3

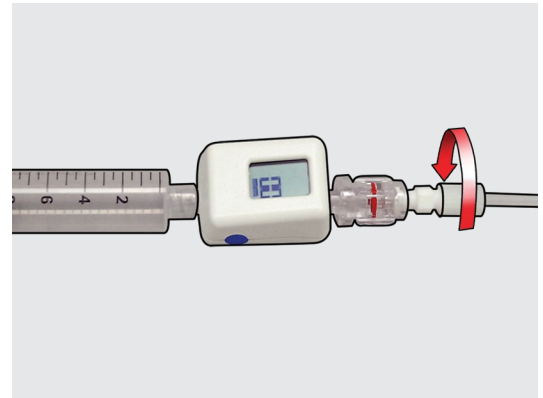

Den Luer-Lock-Stecker des Transducers an der weißen Luer-Buchse des Verbindungsschlauchs anbringen und gut festziehen.


Systemvorbereitung 4

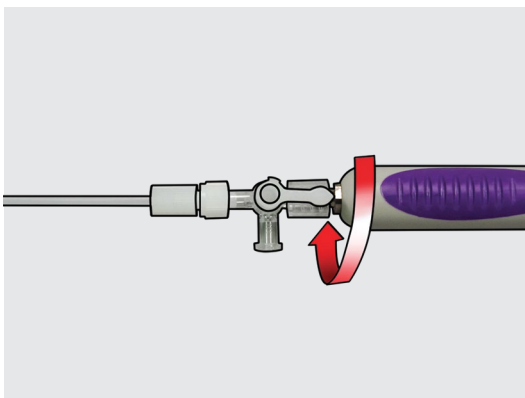

Den Luer-Lock-Stecker des Verbindungsschlauch-Absperrhahns an der Luer-Lock-Buchse des Nadelgriffs anbringen und gut festziehen.

Hinweis: Das System ist nun vollständig zusammengesetzt.


Systemvorbereitung 5

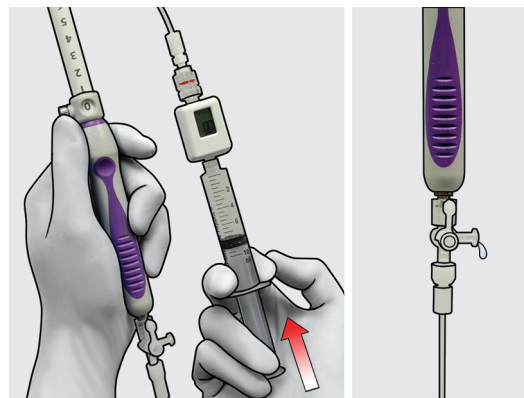

Das System bis zum Absperrhahn entlüften, indem der Kolben langsam in die Spritze geschoben wird. Dabei darauf achten, dass keine größeren Luftblasen im System vorhanden sind.

Hinweis: Am Seitenloch des Absperrhahns sollte sichtbar Flüssigkeit austreten.


Systemvorbereitung 6

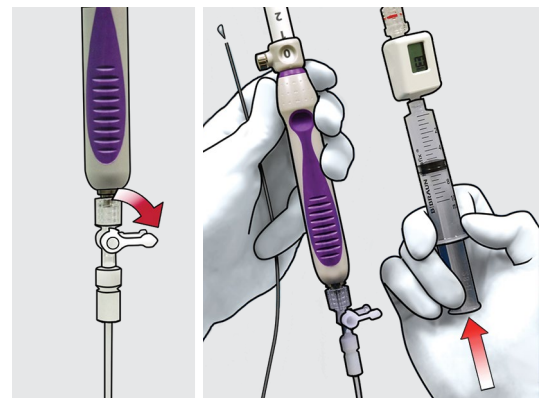

Den Absperrhahn umstellen, sodass das Seitenloch verschlossen wird, und anschließend mit dem Entlüften der Nadel mit mindestens 1 mL steriler Flüssigkeit fortfahren.


Hinweis: An der distalen Spitze der Schleuse sollte sichtbar Flüssigkeit austreten.

Schritt 1

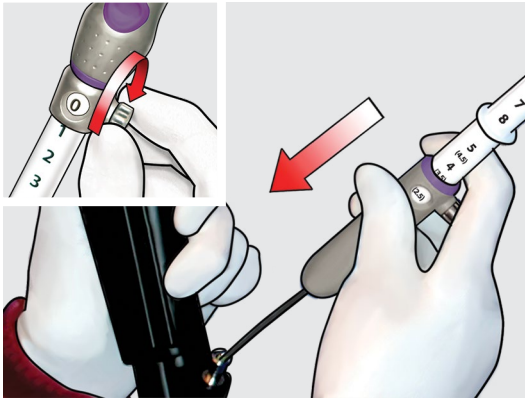


Das gewünschte Gefäß identifizieren. Vor dem Einführen des Instruments in das Endoskop sicherstellen, dass die Nadel in die Schleuse zurückgezogen ist. Das Instrument in das Endoskop vorschieben, bis sich die Verbindungen berühren. Das Instrument befestigen, indem der Griff im Uhrzeigersinn gedreht wird.

Schritt 2

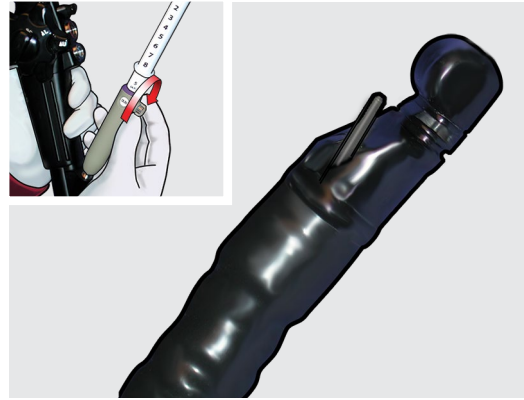


Die Schleuse in die gewünschte Position bringen, bis die Schleuse aus dem Arbeitskanal des Endoskops herauskommt.

Schritt 3

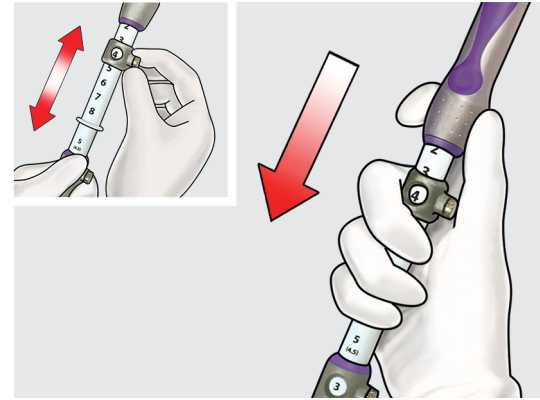

Die Ausfahrlänge der Nadel durch Lösen der Feststellschraube am Sicherheitsring und anschließendes Vorschieben, bis die gewünschte Referenzmarkierung im Sichtfenster zu sehen ist, wie gewünscht einstellen. Die Nadel in das gewünschte Gefäß (Lebervene oder Pfortader) vorschieben.

Schritt 4

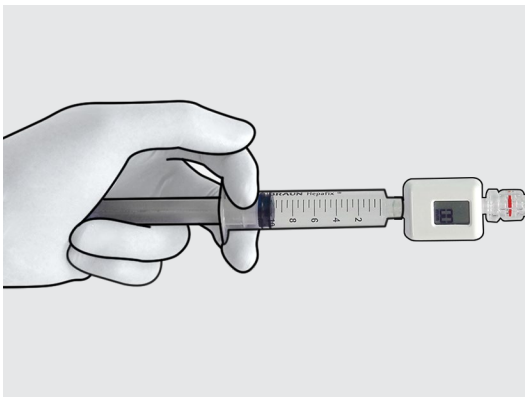


Mit der vorbereiteten Spritze bis zu 0,5 mL sterile Flüssigkeit instillieren.

Die Position sowohl der Nadelspitze als auch des Transducers beibehalten und abwarten, bis der Druckmesswert sich stabilisiert hat.

Schritt 4 wiederholen, um drei Messwerte vom selben Gefäß zu erhalten.

Schritt 5

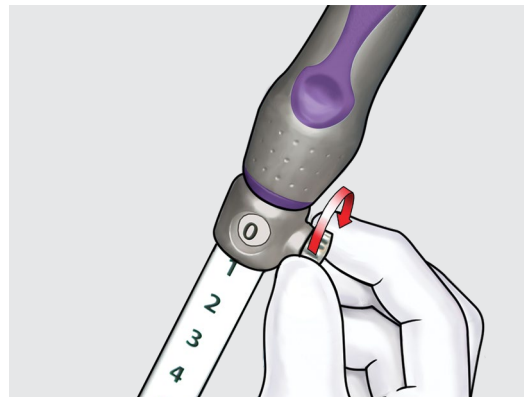


Die Nadel vollständig in die Schleuse zurückziehen und die Feststellschraube am Sicherheitsring an der 0-cm-Markierung arretieren.

Das Endoskop neu positionieren und das zweite Gefäß identifizieren, das punktiert werden soll (gegenüber dem Gefäß, das in Schritt 3 punktiert wurde).

Die Schritte 3 und 4 wiederholen, um drei Messwerte von diesem Gefäß zu erhalten.

Schritt 6

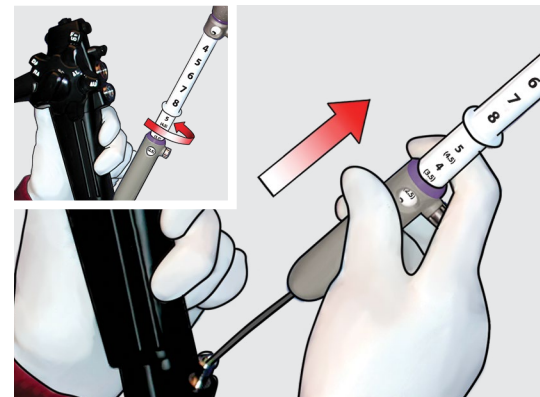

Die Nadel zurückziehen und die Feststellschraube am Sicherheitsring an der 0-cm-Markierung arretieren.

Die Nadel vom Anschluss am Endoskop trennen, indem der Griff gegen den Uhrzeigersinn gedreht und das gesamte Instrument aus dem Endoskop zurückgezogen wird.

Detaillierte Informationen zur Verwendung des Systems finden Sie in der aktuellen Anleitung.

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-8.5X11