


EchoTip® Insight™


PORTOSYSTEMIC PRESSURE GRADIENT

Preparación del sistema 1

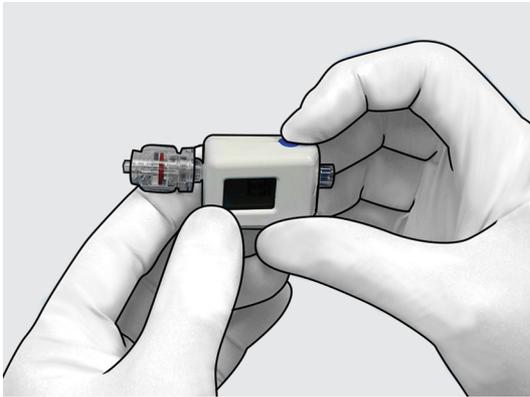


Examine y retire todos los componentes de su embalaje individual.
 Retire la tapa Luer del transductor. Encienda el transductor como se indica en las instrucciones de uso del Compass CT.

Preparación del sistema 2

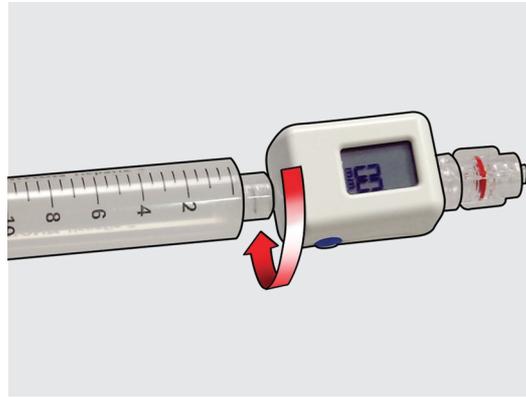


Llene la jeringa con 10 mL de líquido estéril y asegúrese de que se hayan eliminado todas las burbujas de aire grandes de la jeringa.
 Acople la jeringa preparada a la conexión Luer hembra del transductor.

Preparación del sistema 3

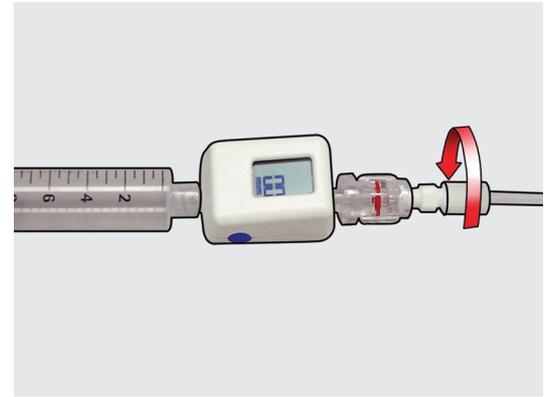

Acople la conexión Luer Lock macho del transductor a la conexión Luer hembra blanca del tubo conector y fíjelas bien.


Preparación del sistema 4

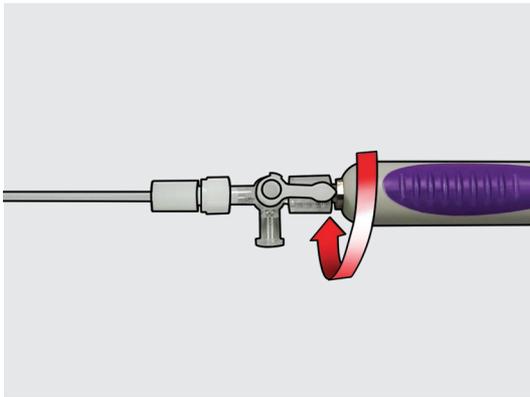

Acople la conexión Luer Lock macho de la llave de paso del tubo conector a la conexión Luer Lock hembra del mango de la aguja y fíjelas bien.

Nota: Ha terminado de montar el sistema.


Preparación del sistema 5

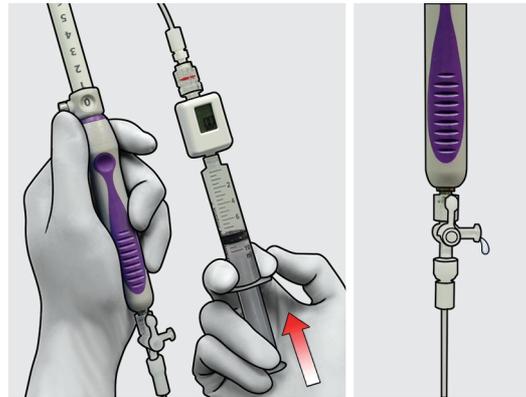

Cebe el sistema hasta la llave de paso haciendo avanzar lentamente el émbolo en el interior de la jeringa; asegúrese de que no haya burbujas de aire grandes en el sistema.

Nota: Deberá verse líquido saliendo por el orificio lateral de la llave de paso.


Preparación del sistema 6

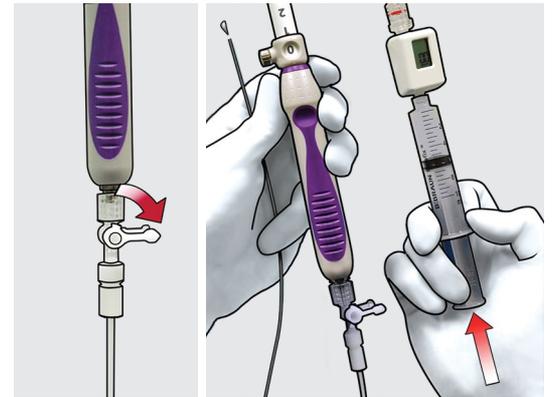

Ajuste la llave de paso para cerrar el orificio lateral antes de proceder a cebar la aguja con un mínimo de 1 mL de líquido estéril.

Nota: Deberá verse líquido saliendo por la punta distal de la vaina.

Paso 1

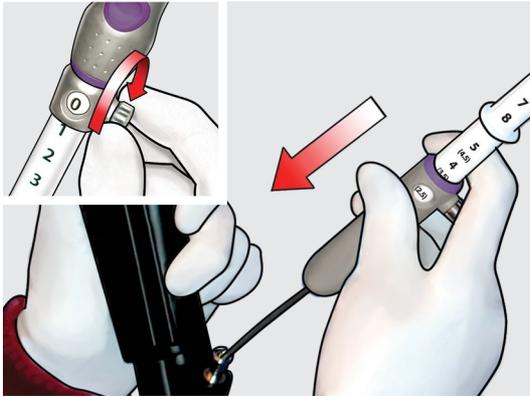


Seleccione la vasculatura que desee. Asegúrese de que la aguja se encuentra retraída en la vaina antes de introducir el dispositivo en el endoscopio. Haga avanzar el dispositivo hacia el endoscopio hasta que las conexiones queden acopladas. Acople el dispositivo haciendo girar el mango en sentido dextrógiro.

Paso 2




Ajuste la vaina en la posición deseada hasta que esta emerja del canal de trabajo del endoscopio.

Paso 3

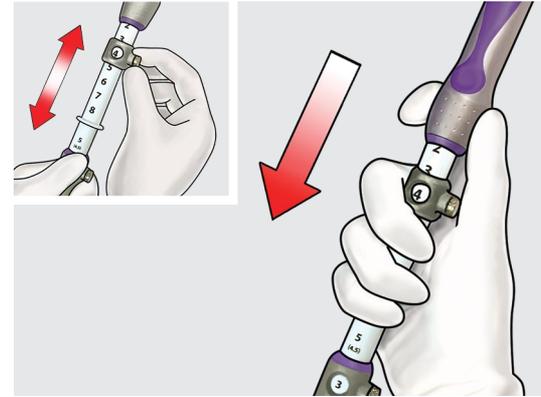

Configure la extensión de la aguja hasta la longitud que necesite. Para ello, afloje el tornillo de mano en el anillo de seguridad y hágalo avanzar hasta que aparezca la marca de referencia que se precisa en la ventana; a continuación, apriete el tornillo de mano. Haga avanzar la aguja por el vaso que desee, ya sea la vena hepática o la porta.

Paso 4

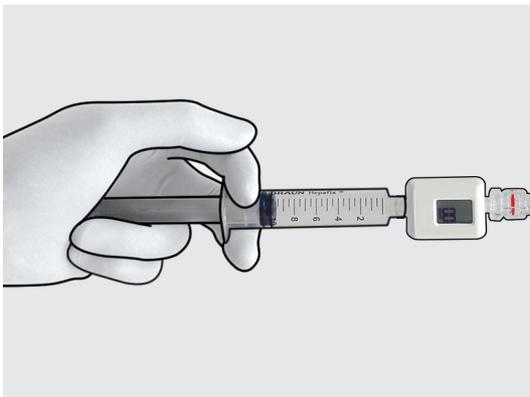


Con la aguja preparada, instile hasta 0,5 mL de líquido estéril.

Mientras mantiene la posición de la punta de la aguja y del transductor, espere a que la lectura de presión se equilibre.

Repita el paso 4 para obtener tres mediciones de un mismo vaso.

Paso 5

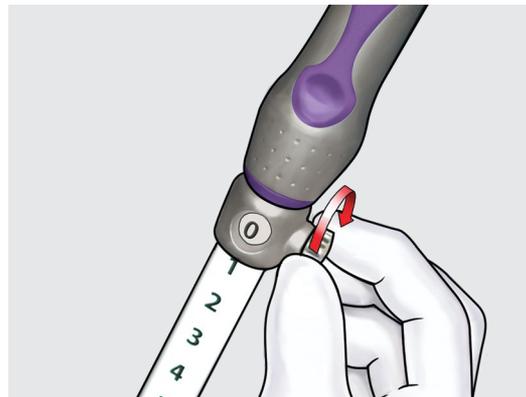


Retraiga la aguja por completo hacia la vaina y bloquee el tornillo de mano en el anillo de seguridad en la marca de 0 cm.

Cambie la posición del endoscopio e identifique el segundo vaso al que quiera accederse (opuesto al vaso al que se accedió en el paso 3).

Repita los pasos 3 y 4 para obtener tres mediciones de este vaso.

Paso 6

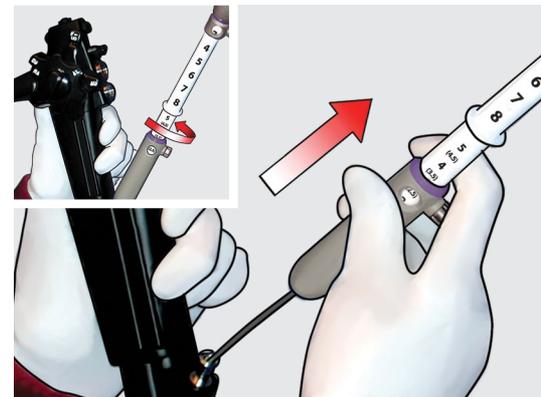

Retraiga la aguja y bloquee el tornillo de mano en el anillo de seguridad en la marca de 0 cm.

Desconecte la aguja del accesorio del endoscopio haciendo girar el mango en sentido levógiro y extraiga por completo el dispositivo del endoscopio.

Consulte las instrucciones vigentes para conocer los detalles de uso del sistema.

Algunos productos o referencias de producto pueden no estar disponibles en todos los mercados. Consulte los detalles con su representante local o centro de atención al cliente de Cook.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 8007615, IS.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do
 Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com
 Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-8.5X11