


EchoTip[®] Insight[™]

PORTOSYSTEMIC PRESSURE GRADIENT


Preparazione del sistema 1

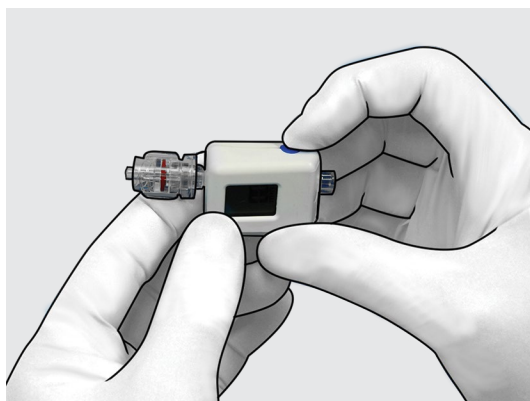

Ispezionare ed estrarre tutti i componenti dalle singole confezioni.

Staccare il cappuccio Luer del trasduttore.
Accendere il trasduttore come spiegato nelle Istruzioni per l'uso di Compass CT.


Preparazione del sistema 2

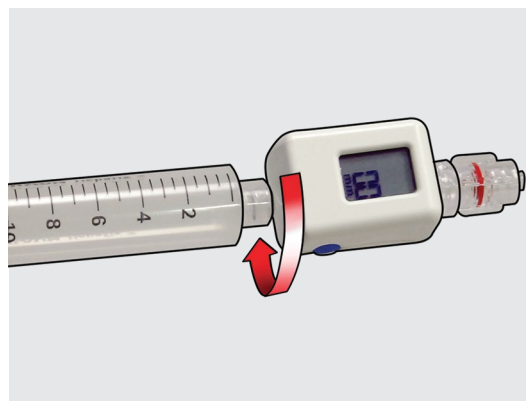

Riempire la siringa da 10 mL con liquido sterile, assicurandosi di aver eliminato tutte le grosse bolle d'aria.


Collegare la siringa preparata come indicato sopra all'attacco Luer femmina del trasduttore.

Preparazione del sistema 3

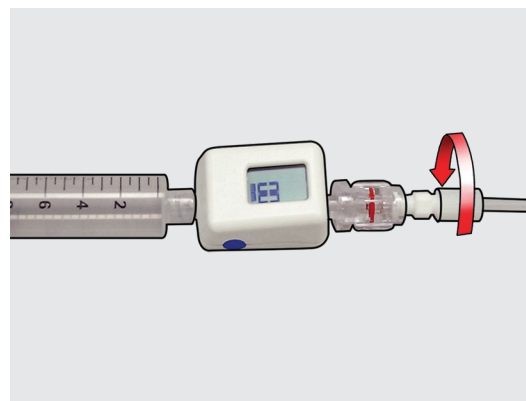

Collegare l'attacco Luer Lock maschio del trasduttore all'attacco Luer femmina bianco del tubo connettore e fissarli bene.


Preparazione del sistema 4

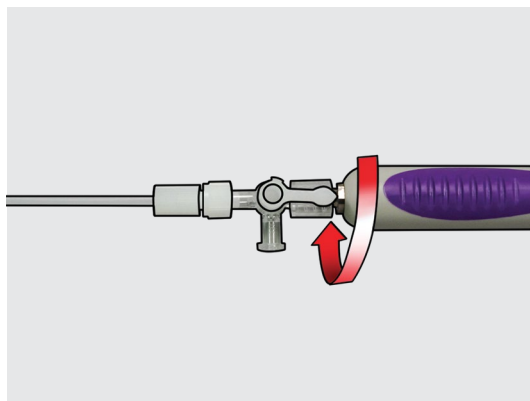

Collegare l'attacco Luer Lock maschio del rubinetto del tubo connettore all'attacco Luer femmina sull'impugnatura dell'ago e fissarli bene.

Nota: il sistema è ora completamente assemblato.


Preparazione del sistema 5

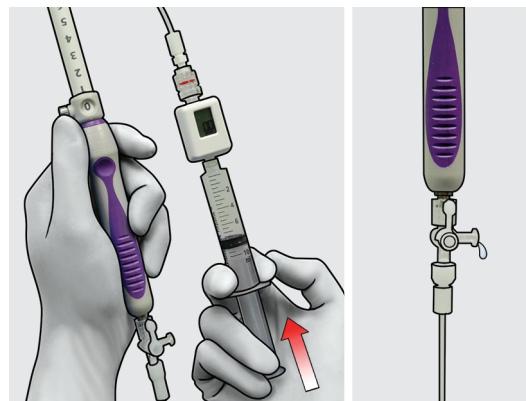

Eseguire il priming del sistema fino al rubinetto facendo avanzare lentamente lo stantuffo nella siringa, assicurandosi che non vi siano grosse bolle d'aria nel sistema.

Nota: si dovrà osservare fuoriuscita di liquido dal raccordo laterale del rubinetto.


Preparazione del sistema 6

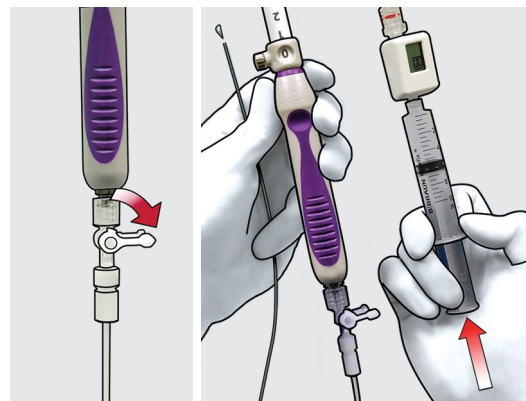

Regolare il rubinetto per chiudere il raccordo laterale prima di avviare il priming dell'ago con almeno 1 mL di liquido sterile.


Nota: si dovrà osservare fuoriuscita di liquido dall'estremità distale dell'introduttore.

Passaggio 1

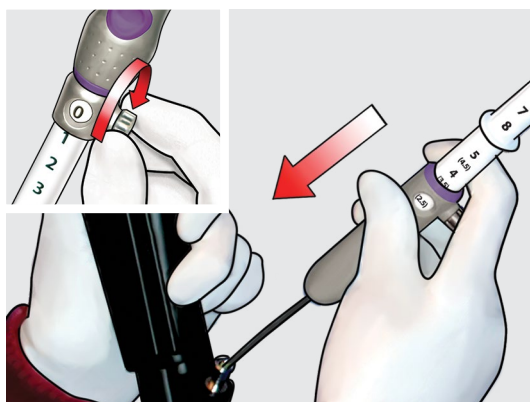


Individuare il sistema vascolare desiderato. Assicurarsi che l'ago sia represso nell'introduttore prima di inserire il dispositivo nell'endoscopio. Fare avanzare il dispositivo nell'endoscopio fino all'unione dei raccordi. Collegare il dispositivo ruotando l'impugnatura in senso orario.

Passaggio 2

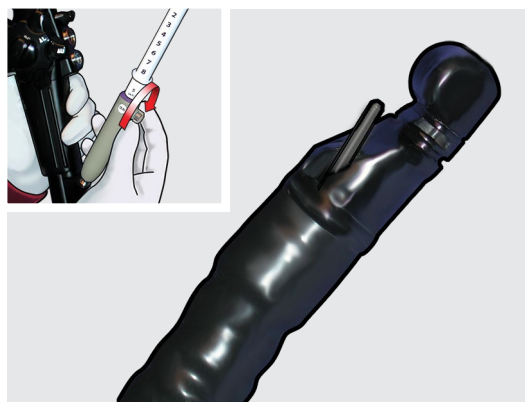


Regolare l'introduttore nella posizione desiderata fino a quando non emerge dal canale operativo dell'endoscopio.

Passaggio 3

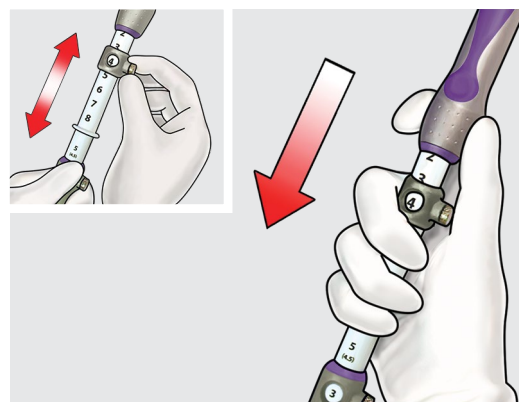

Impostare l'estensione dell'ago alla lunghezza desiderata allentando la vite a testa zigrinata sull'anello di sicurezza e fare avanzare fino a quando nella finestra non compare l'indicatore di riferimento desiderato, poi serrare la vite a testa zigrinata. Fare avanzare l'ago nel vaso desiderato, ovvero la vena epatica o porta.


Passaggio 4

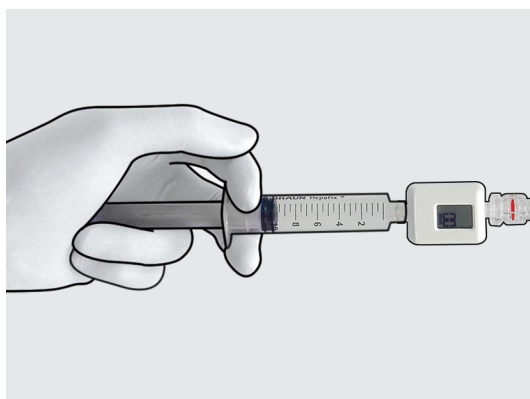

Utilizzando la siringa preparata, instillare un massimo di 0,5 mL di liquido sterile. Mantenendo in posizione sia la punta dell'ago che il trasduttore, consentire al valore della pressione di stabilizzarsi.

Ripetere il passaggio 4 per ottenere misurazioni triplicate dallo stesso vaso.

Passaggio 5

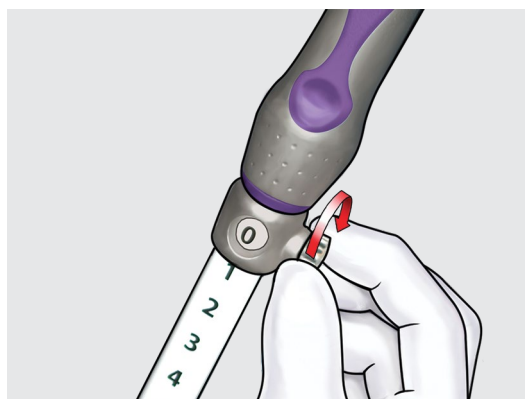


Ritirare completamente l'ago nell'introduttore e bloccare la vite a testa zigrinata sull'anello di sicurezza in corrispondenza dell'indicatore di 0 cm.

Riposizionare l'endoscopio e identificare il secondo vaso a cui accedere (in posizione opposta al vaso il cui accesso è stato eseguito al passaggio 3).

Ottenere misurazioni triplicate di questo vaso ripetendo i passaggi 3 e 4.

Passaggio 6

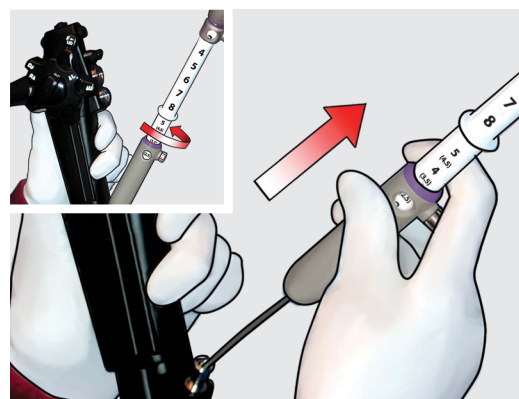

Ritirare l'ago e bloccare la vite a testa zigrinata sull'anello di sicurezza in corrispondenza dell'indicatore di 0 cm.

Scollegare l'ago dal raccordo sullo strumento ruotando l'impugnatura in senso antiorario e ritirare l'intero dispositivo dall'endoscopio.

Per dettagli sull'uso del sistema, consultare le istruzioni aggiornate.

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al Servizio clienti per maggiori informazioni.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-8.5X11