



Fusion[®]OASIS[®]

STENT-EINBRINGUNG IN EINEM SCHRITT

Hinweise


- 1) Fusion OASIS ist kompatibel mit den Kunststoff-Gallengangstents Cotton-Leung[®], Cotton-Huibregtse[®] und ST-2 Soehendra Tannenbaum[®].
- 2) Die konische Spitze des Stents oder die Seitenlöcher (falls vorhanden) müssen im Hauptgallengang positioniert werden, während das andere Ende im Duodenum verbleibt.

Schritt 1

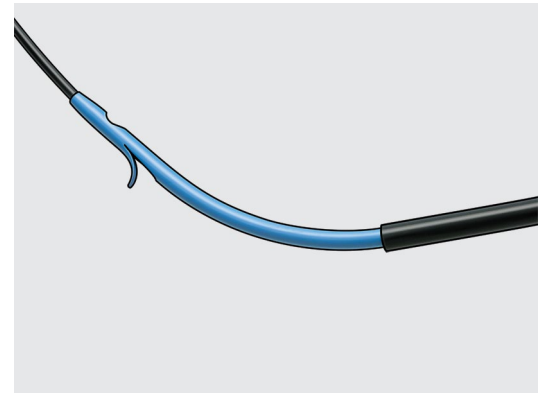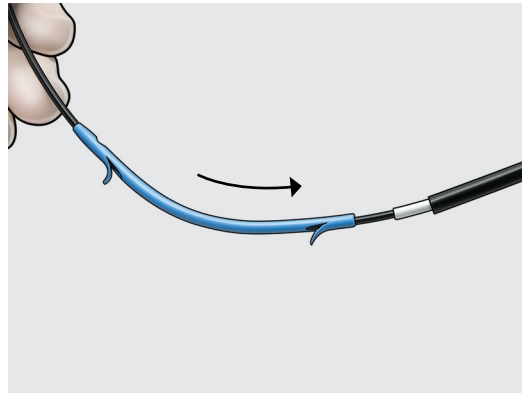


Platzieren Sie den gewünschten Stent und die Positionierungshülse auf dem Instrument und stellen Sie sicher, dass die distale Klappe des Stents bedeckt ist.

Schritt 2

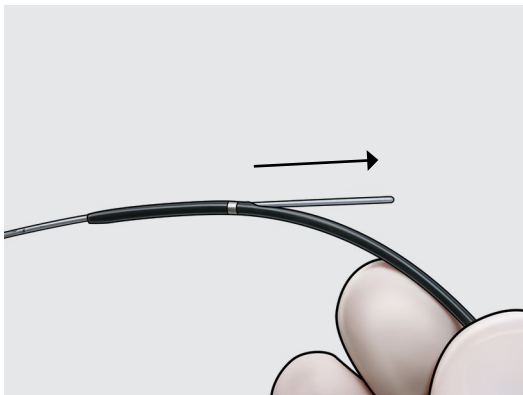


Laden Sie das Instrument retrograd auf den vorpositionierten Führungsdraht und stellen Sie sicher, dass der Führungsdraht aus dem IDE-Port austritt.

Schritt 3

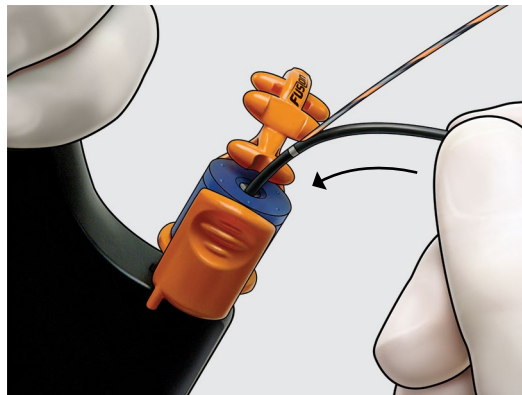


Lösen Sie den Führungsdraht aus dem Fixierungssystem und führen Sie das Instrument in den Arbeitskanal des Endoskops ein. Sobald sich der IDE-Port im Arbeitskanal befindet, verriegeln Sie den Führungsdraht wieder.

Schritt 4

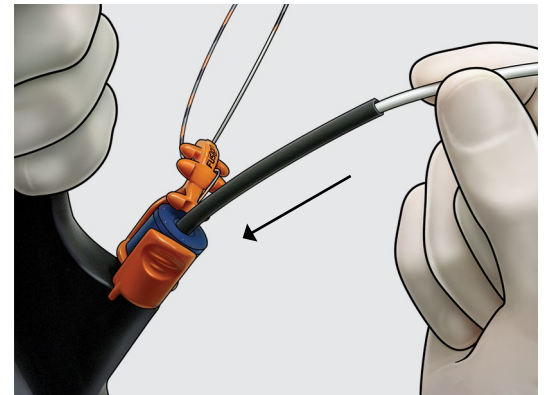


Schieben Sie das Instrument in kurzen Schritten vor, bis sich der Stent innerhalb des Arbeitskanals befindet. Schieben Sie dann die Positionierungshülse über den Schiebekatheter und halten Sie sie dabei vom Arbeitskanal fern. Fahren Sie mit dem Vorschieben des Instruments in den entsprechenden Zugang fort.

Schritt 5

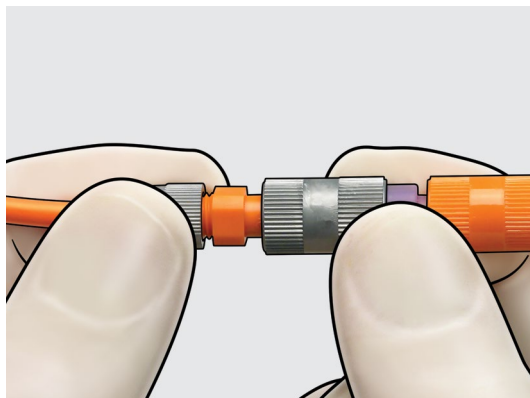


Überwachen Sie das röntgendichte Band am distalen Ende des Führungskatheters unter Durchleuchtung. Wenn sich der Führungskatheter in ausreichender Länge über der Striktur befindet, trennen Sie den Luer-Lock-Anschluss am Instrument.

Schritt 6

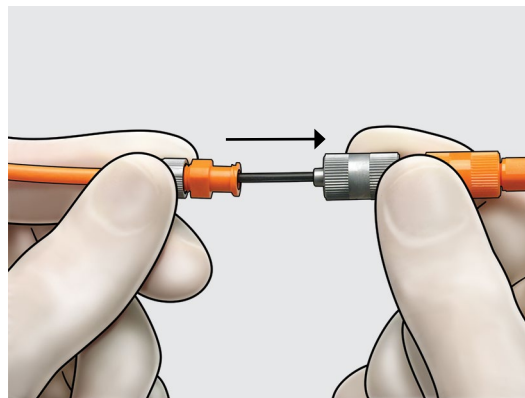


Behalten Sie die Position des Führungskatheters bei und schieben Sie den Stent mit dem Schiebekatheter in die gewünschte Position vor. Bestätigen Sie die gewünschte Stentplatzierung unter Durchleuchtung und endoskopisch.

Schritt 7

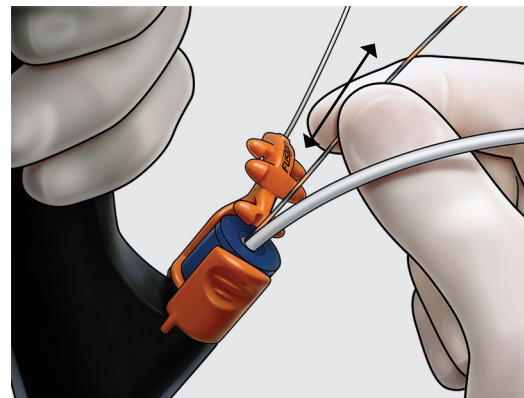


Lösen Sie den Führungsdraht aus dem Fixierungssystem. Ziehen Sie den Führungsdraht unter Durchleuchtung zurück, bis er am IDE-Port aus dem Führungskatheter austritt. Für die Platzierung mehrerer Stents schieben Sie die gelöste Führungsdrahtführung vor, um den Gangzugang aufrechtzuerhalten, und verriegeln Sie die Führungsdrahtführung wieder.


Schritt 8

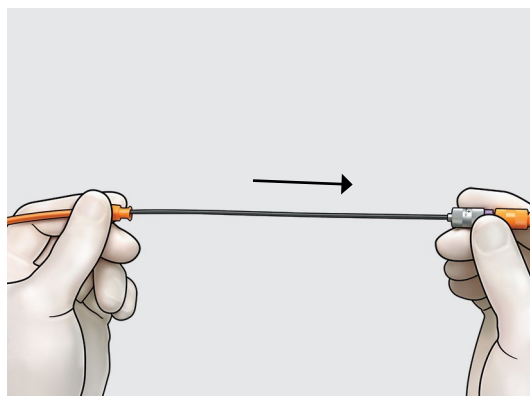

Um den Stent einzusetzen, ziehen Sie den Führungskatheter in das Endoskop zurück, während Sie die Position des Schiebekatheters beibehalten. Bestätigen Sie die Position des Stents, nachdem der Führungskatheter entfernt wurde, und entfernen Sie dann den Schiebekatheter aus dem Arbeitskanal.

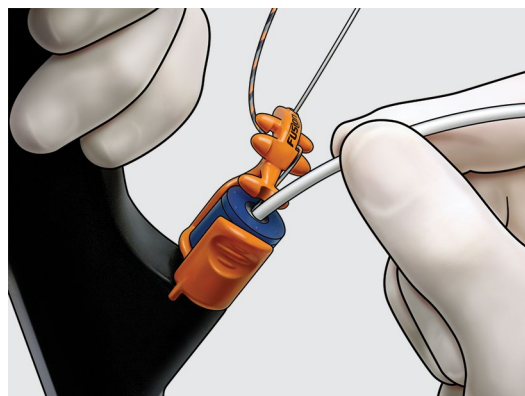

Schritt 9

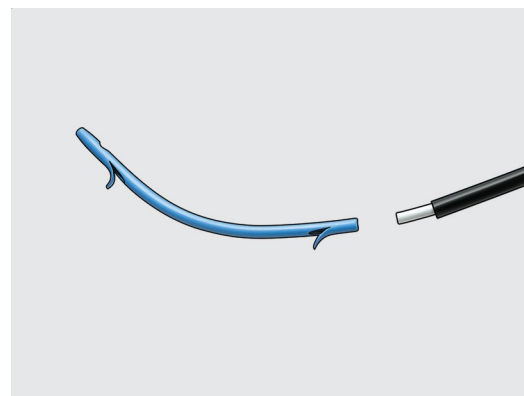

Die Einführschleuse, vom Stent getrennt.

Detaillierte Informationen zur Verwendung des Systems finden Sie in der aktuellen Anleitung. Lesen Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 8007615, IS.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-8.5X11