



# Fusion<sup>®</sup>OASIS<sup>®</sup>

SISTEMA DE INTRODUCCIÓN DE STENT DE UNA ACCIÓN

## Puntas:


- 1) Fusión OASIS es compatible con el stent biliar de plástico (PBS), Cotton-Leung<sup>®</sup>, Cotton-Huibregtse<sup>®</sup> y ST-2 Soehendra Tannenbaum<sup>®</sup>.
- 2) El extremo cónico del stent o los orificios laterales (si los hay) deben colocarse en el conducto colédoco mientras que el otro extremo permanece en el duodeno.

## Paso 1

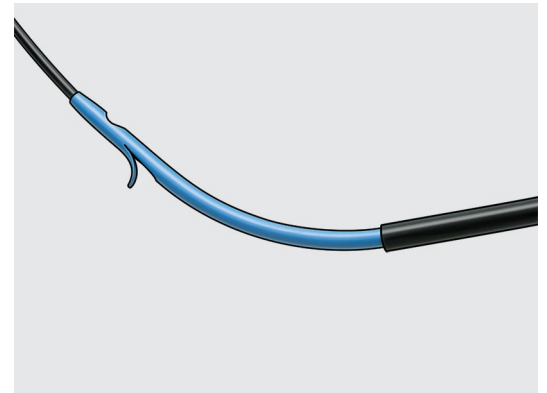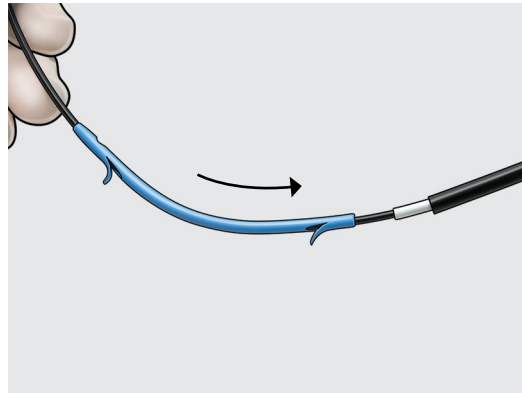


Coloque el stent deseado y la vaina de posicionamiento en el dispositivo y asegúrese de que el colgajo distal del stent esté cubierto.

## Paso 2

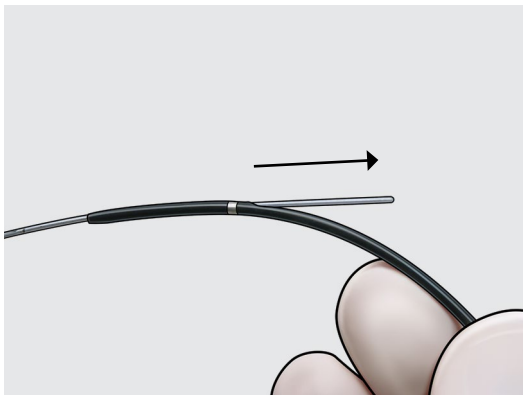


Cargue el dispositivo en la guía de alambre colocada previamente y asegúrese de que la guía de alambre salga del puerto IDE.

## Paso 3

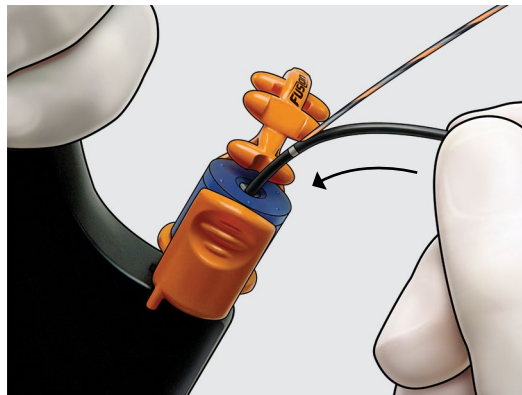


Desbloquee la guía de alambre del dispositivo de bloqueo de la guía de alambre y avance el dispositivo en el canal de accesorios del endoscopio. Una vez que el puerto IDE esté dentro del canal de accesorios, vuelva a bloquear la guía de alambre.

## Paso 4

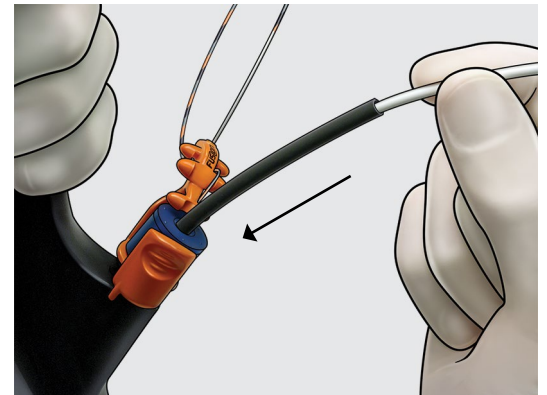


Haga avanzar el dispositivo en incrementos cortos hasta que el stent esté dentro del canal de accesorios. A continuación, deslice la vaina de posicionamiento sobre el catéter de empuje, lejos del canal de accesorios. Continúe haciendo avanzar el dispositivo en el conducto apropiado.

## Paso 5

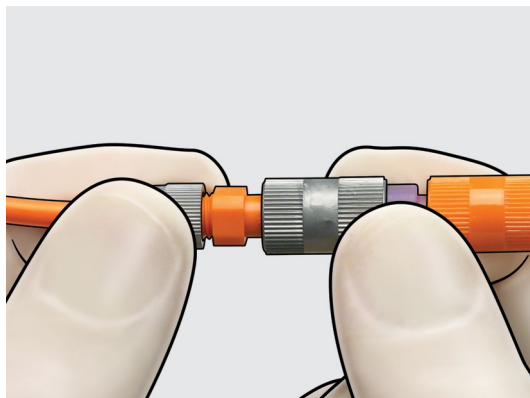


Supervise mediante radioscopia la banda radiopaca en el extremo distal del catéter guía. Cuando una longitud suficiente del catéter guía esté por encima de la estenosis, desconecte el conector Luer Lock del dispositivo.

## Paso 6

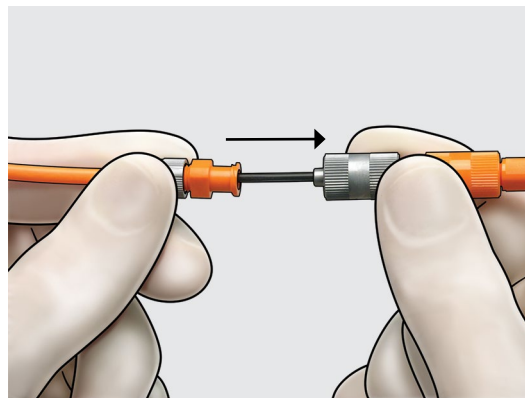


Mantenga la posición del catéter guía y haga avanzar el stent a la posición deseada usando el catéter de empuje. Confirme mediante radioscopia y endoscopia la colocación deseada del stent.

## Paso 7

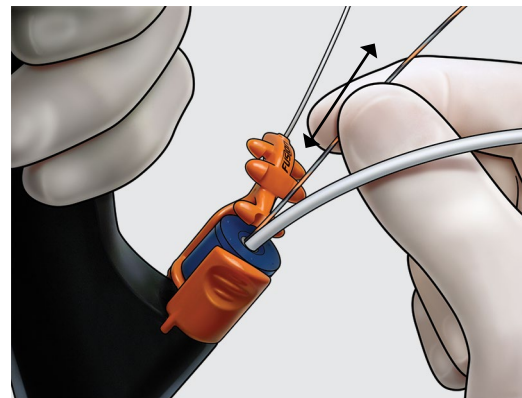


Desbloquee la guía de alambre del dispositivo de bloqueo de la guía de alambre. Utilizando radioscopia, retraiga la guía de alambre hasta que salga del catéter guía en el puerto IDE. Para la colocación de múltiples stents, avance la guía de alambre desenganchada para mantener el acceso ductal y vuelva a bloquear la guía de alambre.


## Paso 8

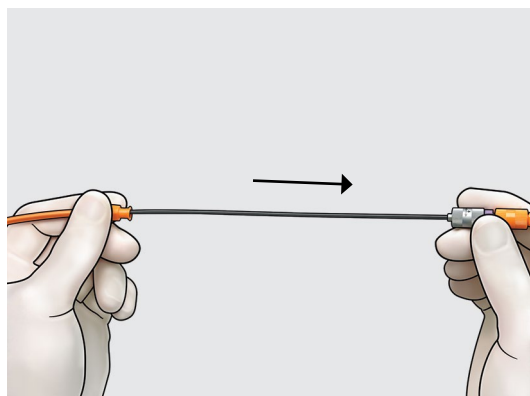

Para desplegar el stent, retraiga el catéter guía hacia el endoscopio mientras mantiene la posición del catéter de empuje. Confirme la posición del stent una vez retirado el catéter guía. A continuación, retire el catéter de empuje del canal de accesorios.

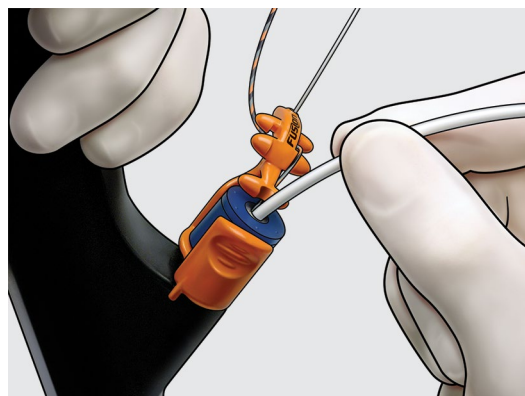

## Paso 9

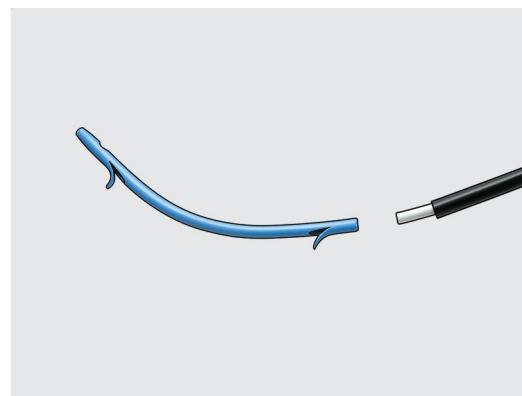

El introductor, separado del stent.

**Consulte las instrucciones actuales para conocer el uso detallado del sistema. Consulte la información sobre los riesgos del producto en las instrucciones de uso en [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu).**

### Customer Service

EU Website: [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu)  
EDI: [cookmedical.eu/edi](mailto:cookmedical.eu/edi)  
Distributors: +353 61239240, [ssc.distributors@cookmedical.com](mailto:ssc.distributors@cookmedical.com)  
Austria: +43 179567121, [oe.orders@cookmedical.com](mailto:oe.orders@cookmedical.com)  
Belgium: +32 27001702, [be.orders@cookmedical.com](mailto:be.orders@cookmedical.com)  
Denmark: +45 38487607, [da.orders@cookmedical.com](mailto:da.orders@cookmedical.com)  
Finland: +358 972519996, [fi.orders@cookmedical.com](mailto:fi.orders@cookmedical.com)  
France: +33 171230269, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
Germany: +49 6950072804, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
Hungary: +36 17779199, [hu.orders@cookmedical.com](mailto:hu.orders@cookmedical.com)  
Iceland: +354 8007615, [IS.orders@cookmedical.com](mailto:IS.orders@cookmedical.com)  
Ireland: +353 61239252, [ie.orders@cookmedical.com](mailto:ie.orders@cookmedical.com)  
Italy: +39 0269682853, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
Netherlands: +31 202013367, [nl.orders@cookmedical.com](mailto:nl.orders@cookmedical.com)  
Norway: +47 23162968, [no.orders@cookmedical.com](mailto:no.orders@cookmedical.com)  
Spain: +34 912702691, [es.orders@cookmedical.com](mailto:es.orders@cookmedical.com)  
Sweden: +46 858769468, [se.orders@cookmedical.com](mailto:se.orders@cookmedical.com)  
Switzerland - French: +41 448009609, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
Switzerland - Italian: +41 448009609, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
Switzerland - German: +41 448009609, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
United Kingdom: +44 2073654183, [uk.orders@cookmedical.com](mailto:uk.orders@cookmedical.com)

USA Website: [cookmedical.com](http://cookmedical.com)  
EDI: [cookmedical.com/edi.do](mailto:cookmedical.com/edi.do)  
Americas:  
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335  
E-mail: [customersupport@cookmedical.com](mailto:customersupport@cookmedical.com)  
Australia:  
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283  
E-mail: [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-8.5X11