


# Evolution® Duodenal

CONTROLLED-RELEASE STENT - UNCOVERED

## Merkmale




## Schritt 1

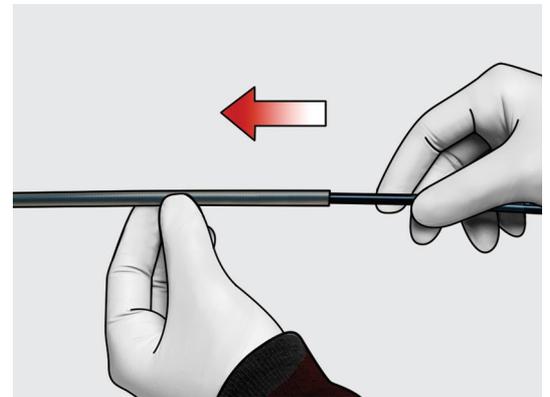

Die Schutzhülle vom Stent entfernen.


## Schritt 2

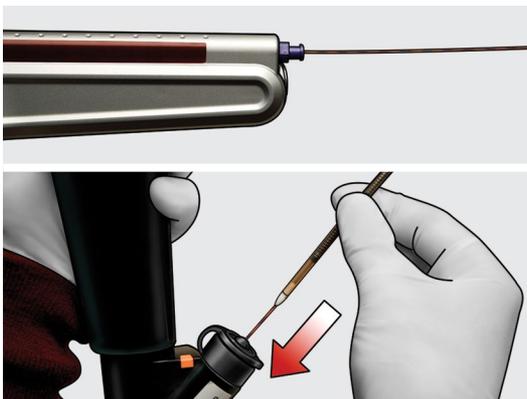

Das Platzierungssystem in kleinen Schritten über den Führungsdraht in den Arbeitskanal einführen, bis über den Sichtkanal zu erkennen ist, dass es aus dem Endoskop austritt.

**HINWEIS:** Arbeitskanal mindestens 3,7 mm

## Schritt 3a

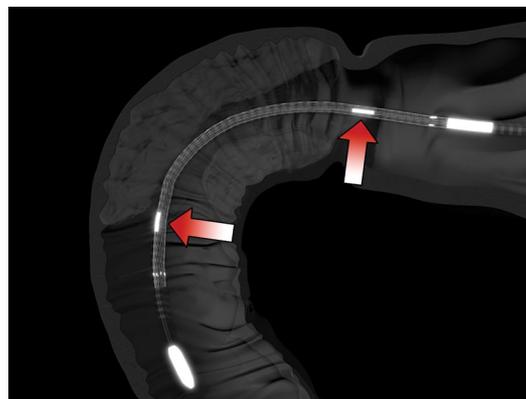


Die röntgendichten Markierungen unter Durchleuchtung hinter den Ausläufern der zu durchdringenden Striktur im Innenkatheter positionieren.

## Schritt 3b



**HINWEIS:** Die gelbe Markierung auf dem Platzierungssystem, gelegen am proximalen Ende des Stents, kann auch als endoskopische/fluoroskopische Referenz für die Positionierung des proximalen (am nächsten zum Anwender liegenden) Ende des Stents in Relation zur Striktur dienen.

## Schritt 4

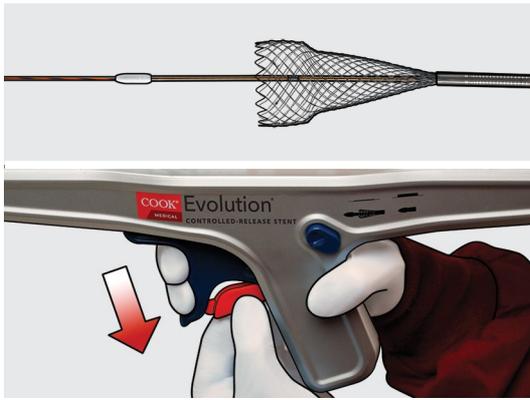


Die Position des Stents unter Durchleuchtung prüfen und den Stent durch Entfernen der roten Sicherheitsvorrichtung am Griff freisetzen. Die Freisetzung des Stents durch Betätigen des Auslösers fortsetzen.

## Schritt 5a



Ist während der Freisetzung eine Neupositionierung erforderlich, kann der Stent zurückgeholt werden. **HINWEIS:** Der Stent kann nach dem Passieren der Rückholgrenze nicht mehr zurückgeholt werden. Dies ist der Fall, sobald die Anzeige für die Stentfreisetzung oben am Einführsystem das entsprechende Symbol über dem Griff passiert.

## Schritt 5b

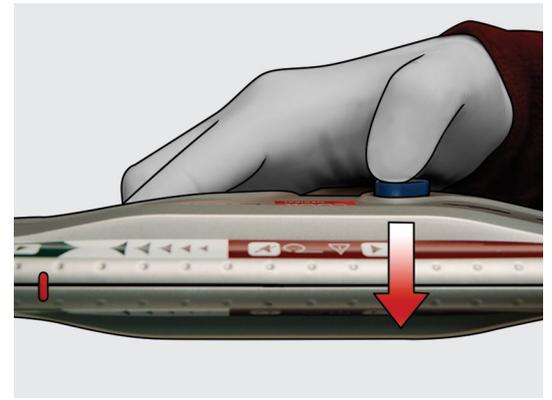


Zum Rückholen des Stents den Richtungsknopf an der Seite des Platzierungssystems in die entgegengesetzte Richtung drücken. **HINWEIS:** Den Daumen auf dem Knopf lassen, wenn der Auslöser zum ersten Mal zum Rückholen betätigt wird. Den Auslöser solange weiter drücken, bis der Stent um die gewünschte Distanz zurückgeholt wurde.

## Schritt 6




Zur Wiederaufnahme der Freisetzung den Richtungsknopf in die entgegengesetzte Richtung drücken und ihn beim ersten Drücken des Auslösers gedrückt halten.

## Schritt 7

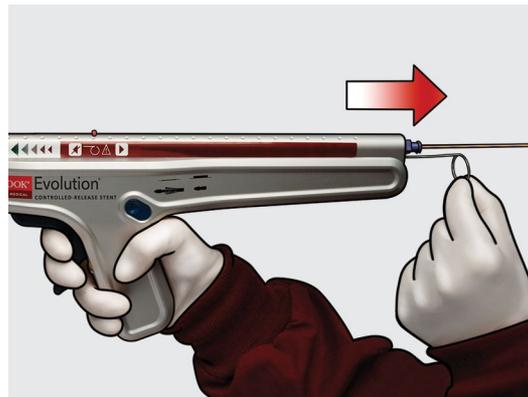

Nach Passieren der Rückholgrenze den Sicherheitsdraht neben dem Führungsdraht-Port aus dem Platzierungssystem herausziehen. Die Freisetzung des Stents durch Betätigen des Auslösers fortsetzen.

## Schritt 8

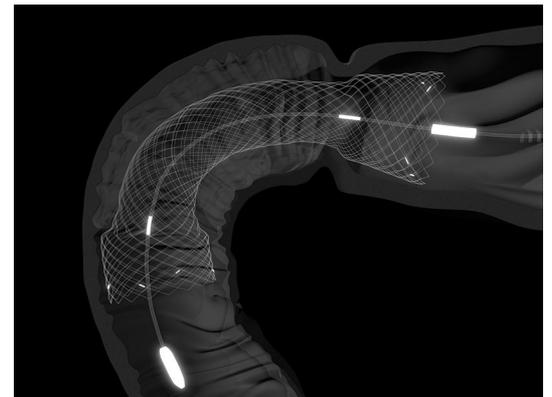

Die Expansion des Stents nach dem Einsetzen mittels Durchleuchtung bestätigen. Sobald die Expansion bestätigt ist, kann das Einführsystem gefahrlos entfernt werden.

**Detaillierte Informationen zur Verwendung des Systems finden Sie in der aktuellen Anleitung.**

**Lesen Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu).**

### Customer Service

EU Website: [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu)  
EDI: [cookmedical.eu/edi](http://cookmedical.eu/edi)  
Distributors: +353 61239240, [ssc.distributors@cookmedical.com](mailto:ssc.distributors@cookmedical.com)  
Austria: +43 179567121, [oe.orders@cookmedical.com](mailto:oe.orders@cookmedical.com)  
Belgium: +32 27001702, [be.orders@cookmedical.com](mailto:be.orders@cookmedical.com)  
Denmark: +45 38487607, [da.orders@cookmedical.com](mailto:da.orders@cookmedical.com)  
Finland: +358 972519996, [fi.orders@cookmedical.com](mailto:fi.orders@cookmedical.com)  
France: +33 171230269, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
Germany: +49 6950072804, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
Hungary: +36 17779199, [hu.orders@cookmedical.com](mailto:hu.orders@cookmedical.com)  
Iceland: +354 8007615, [IS.orders@cookmedical.com](mailto:IS.orders@cookmedical.com)  
Ireland: +353 61239252, [ie.orders@cookmedical.com](mailto:ie.orders@cookmedical.com)  
Italy: +39 0269682853, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
Netherlands: +31 202013367, [nl.orders@cookmedical.com](mailto:nl.orders@cookmedical.com)  
Norway: +47 23162968, [no.orders@cookmedical.com](mailto:no.orders@cookmedical.com)  
Spain: +34 912702691, [es.orders@cookmedical.com](mailto:es.orders@cookmedical.com)  
Sweden: +46 858769468, [se.orders@cookmedical.com](mailto:se.orders@cookmedical.com)  
Switzerland - French: +41 448009609, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
Switzerland - Italian: +41 448009609, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
Switzerland - German: +41 448009609, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
United Kingdom: +44 2073654183, [uk.orders@cookmedical.com](mailto:uk.orders@cookmedical.com)

USA Website: [cookmedical.com](http://cookmedical.com)  
EDI: [cookmedical.com/edi.do](http://cookmedical.com/edi.do)  
Americas:  
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335  
E-mail: [customersupport@cookmedical.com](mailto:customersupport@cookmedical.com)  
Australia:  
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283  
E-mail: [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-8.5X11