


Evolution® Duodenal

CONTROLLED-RELEASE STENT - UNCOVERED

Características




Paso 1

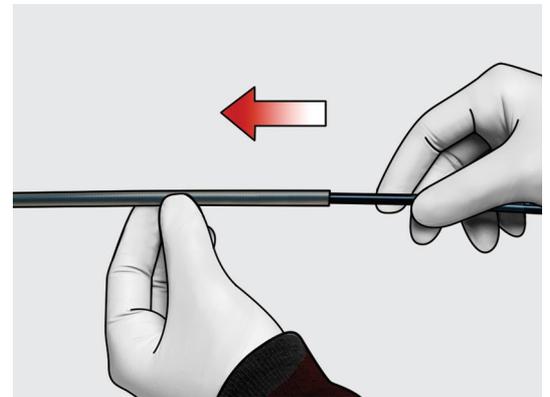


Retire el tubo protector del stent.

Paso 2

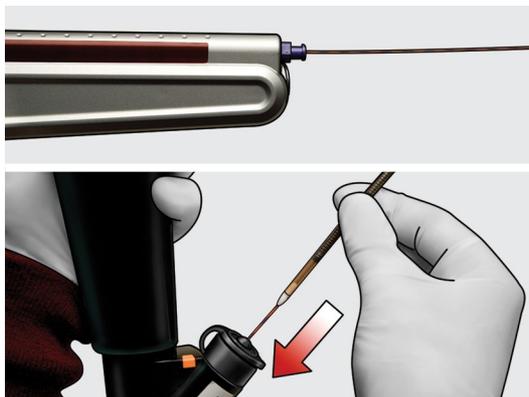

Meta poco a poco el sistema de introducción sobre la guía en el canal de accesorios, hasta que se visualice endoscópicamente saliendo del endoscopio. **NOTA:** el canal de accesorios mínimo mide 3,7 mm.

Paso 3a

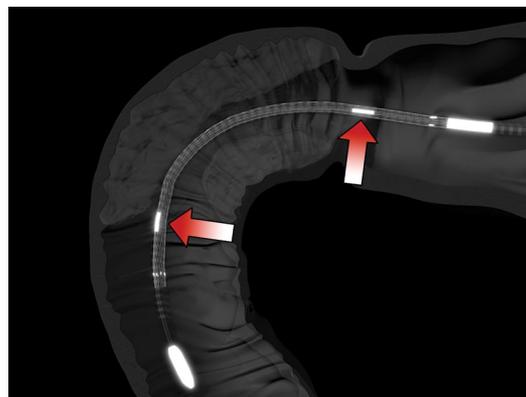


Coloque los marcadores radiopacos mediante fluoroscopia del catéter interior de forma que rebasen los extremos de la estenosis que se pretende atravesar.

Paso 3b



NOTA: el marcador amarillo del sistema de introducción situado en el extremo proximal del stent también puede servir como referencia endoscópica/fluoroscópica para la colocación del extremo proximal (el más cercano al usuario) del stent con respecto a la estenosis.

Paso 4

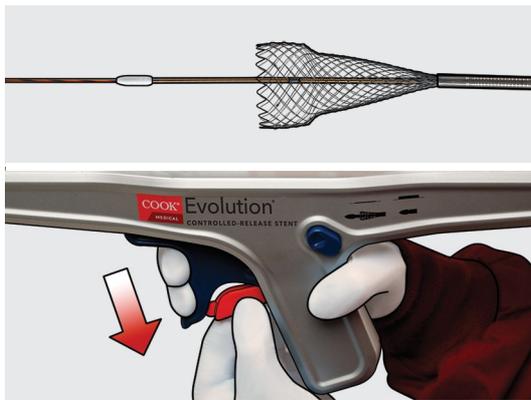


Confirme mediante fluoroscopia que ha colocado debidamente el stent y despléguelo. Para ello, retire del mango el protector de seguridad en color rojo. Continúe desplegando el stent. Para ello, apriete el gatillo.

Paso 5a



Si durante el despliegue se precisa cambiar la posición del stent, es posible recapturarlo. **NOTA:** no es posible recapturar el stent después de que haya pasado por el punto de no retorno. Esto se sabe cuando el indicador del despliegue del stent situado por encima del introductor ha pasado por el indicador del punto de no retorno del mango.

Paso 5b

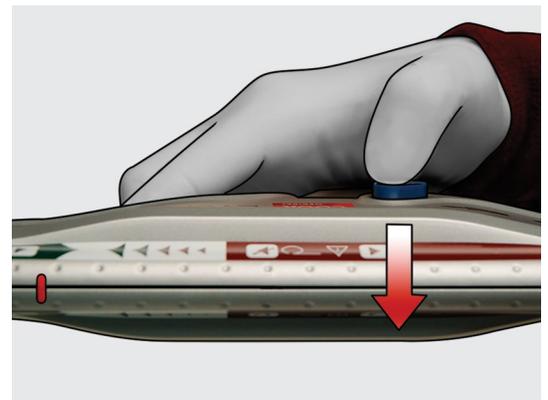


Para recapturar el stent, pulse el botón direccional que se encuentra en el lado del sistema de introducción hasta el lado opuesto. **NOTA:** mantenga el pulgar sobre el botón cuando apriete por primera vez el gatillo para efectuar la recaptura. Continúe apretando el gatillo según sea necesario para recapturar el stent en la medida deseada.

Paso 6




Para reanudar el despliegue, pulse nuevamente el botón direccional hasta el lado opuesto y mantenga pulsado el botón durante el primer accionamiento mientras aprieta el gatillo.

Paso 7

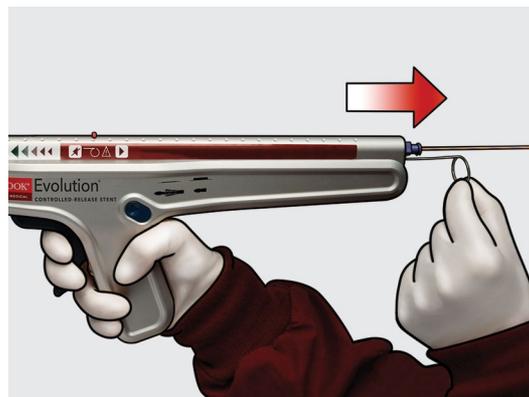

Una vez que se haya pasado el punto de no retorno, tire del estilete de seguridad para sacarlo del mango de implantación cerca del orificio para la guía. Continúe desplegando el stent. Para ello, apriete el gatillo.

Paso 8

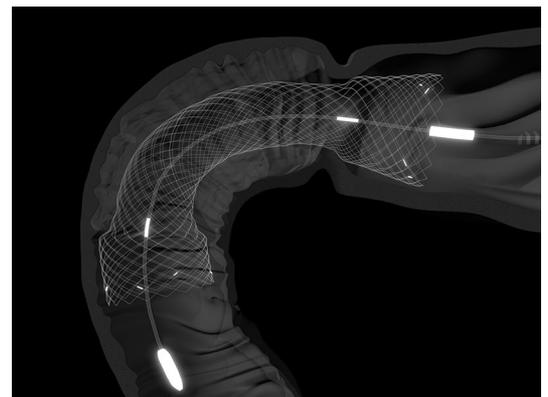

Tras el despliegue, confirme mediante fluoroscopia que el stent se ha expandido por completo. Una vez que se haya confirmado la expansión completa, el sistema de introducción puede extraerse de manera segura.

Consulte las instrucciones más recientes para obtener información detallada sobre el uso del sistema.

Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 8007615, IS.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-8.5X11