

Hemospray®


ENDOSCOPIC HEMOSTAT

Klargøring



Tag enheden ud af pakken. Aktivér CO₂-patronen ved at dreje den **røde** aktiveringsknop, indtil den stopper.

Trin 1

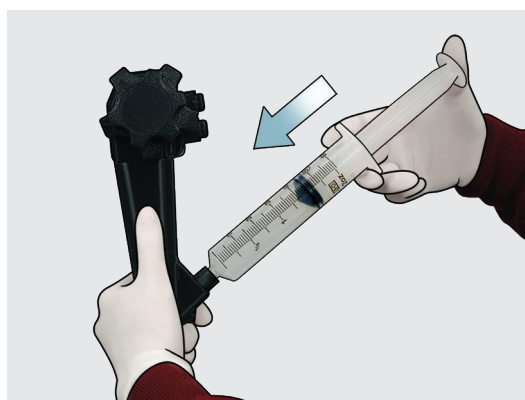


Før indføring af kateteret i tilbehørskanalen: Identifier blødningsstedet, fjern så meget blod som muligt, og skyl derefter tilbehørskanalen med luft.

Trin 2



For at begrænse indtrængning af væske i arbejdskanalen: Tilstop kateteret midlertidigt ved at placere en tommelfinger over den **røde** katetermuffe, mens kateteret føres ned gennem tilbehørskanalen.

Trin 3

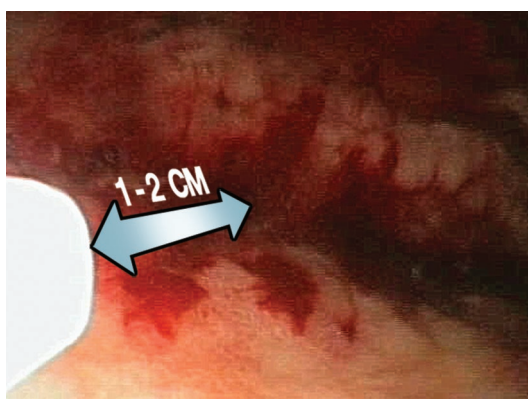

Før langsomt kateteret frem gennem tilbehørskanalen i korte trin, indtil kateterspidsen kan ses endoskopisk.
Forholdsregel: For at undgå tilstopning af kateteret må dette ikke placeres i direkte kontakt med blod og/eller slimhinder, herunder eventuelt blod, der har samlet sig, og du må ikke aspirere blod, mens kateteret er i tilbehørskanalen. For at sikre ordentlig synlighed skal kateterspidsen hele tiden være 1-2 cm væk fra blødningsstedet.

Trin 4




Fastgør kateteret til håndtaget, og sørg for, at det sidder helt fast.

Trin 5




Klargør pulveret ved at dreje den **røde** ventil til åben position. **Bemærk:** Enheden er nu aktiv og klar til brug. Tryk ikke på udløserknappen, før du ønsker at bruge pulveret.


Trin 6

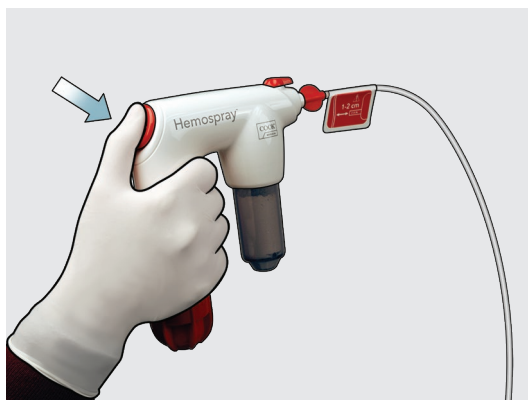

Påfør pulveret ved at holde håndtaget lodret og trykke den **røde** udløserknop ned i 1-2 sekunder og derefter slippe den. **Bemærk:** Det første tryk på udløseren giver muligvis ikke en tilstrækkelig mængde pulver. Tryk på udløseren igen for at lede mere pulver gennem systemet. Fortsæt med at påføre pulveret i korte stød, indtil stedet er fuldstændigt dækket af pulver, og der ikke ses nogen aktiv blødning. Flere påføringer kan være påkrævet, men der

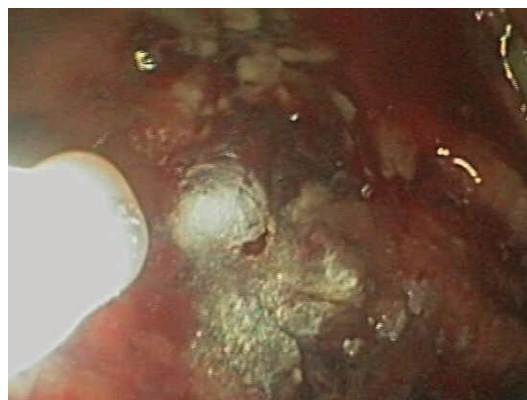


må højst anvendes 3 Hemospray-enheder pr. patient. **Bemærk:** Lad der være tilstrækkelig tid til hæmostase, før der aspireres. Skylning af det behandlede sted er ikke påkrævet efter påføring af pulver. Hvis skylning ønskes, skal der være tilstrækkelig tid til hæmostase, før der skylles med vand. For at undgå potentiel tilstopning af endoskopet må der ikke aspireres pulver ind i endoskopkanalen. Endoskopsugning kan slås fra eller frakobles

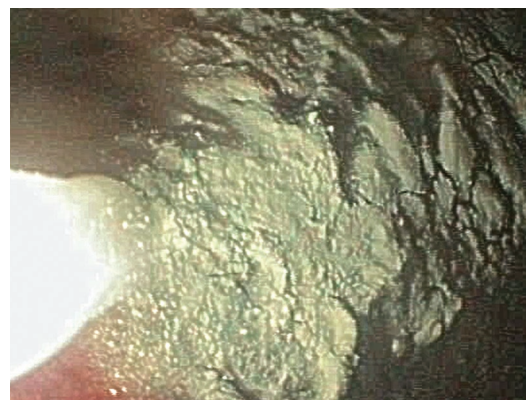


midlertidigt for at undgå utilsigtet aspiration af pulver i endoskopkanalen. Hvis kateteret bliver tilstoppet under proceduren: Drej den **røde** ventil til lukket position, fjern kateteret fra endoskopet, og udskift det med det ekstra kateter, der medfølger i pakken. Gentag derefter trin 1-6. Hvis der er behov for mere pulver, og spraydåsen eller CO₂-patronen er tom, er en ny enhed påkrævet.

Trin 7

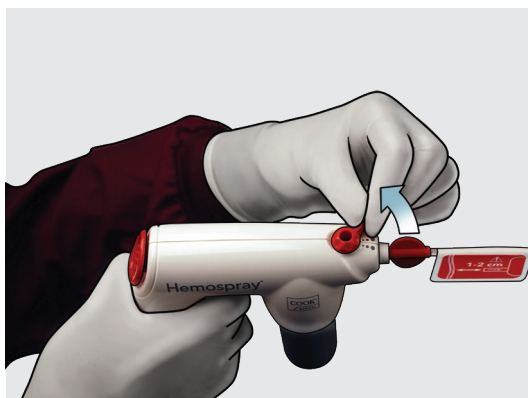

Før du fjerner Hemospray-enheden fra patienten, skal du dreje den **røde** ventil til lukket position. Fjern enheden fra endoskopet ved at tage fat i kateteret og trække langsomt.

Trin 8

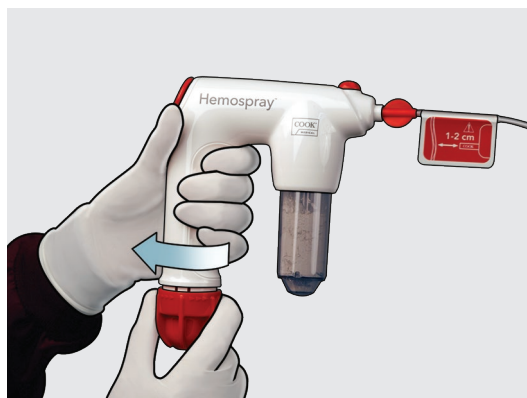

Efter afslutning af proceduren: Sænk trykket i enheden ved at dreje den **røde** aktiveringsknop, indtil trykket er helt fjernet i CO₂-patronen.

Bortskaf enheden i henhold til hospitalets retningslinjer for biologisk farligt medicinsk affald.

Se den gældende brugsanvisning vedrørende detaljeret brug af systemet.

Se venligst produktrisikoinformation i brugsanvisningen på cookmedical.eu.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do
 Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: orders@cookmedical.com
 Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-8.5X11