

Hemospray®


ENDOSCOPIC HEMOSTAT

Klargjøring



Ta enheten ut av pakningen. Aktiver CO₂-patronen ved å dreie på den **røde** aktiveringsknappen til den stopper.

Trinn 1

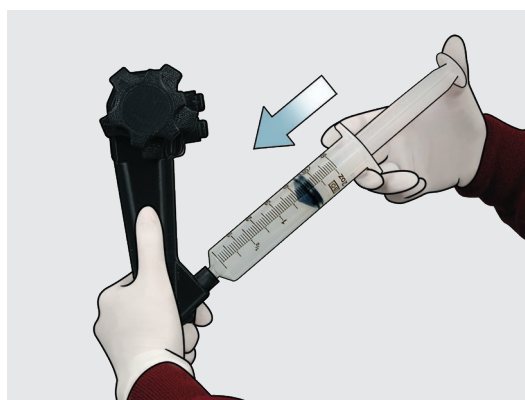


Før du setter kateteret inn i arbeidskanalen, må du finne blødningsstedet, fjerne så mye blod som mulig og deretter spyle arbeidskanalen med luft.

Trinn 2



For å hindre at det kommer væske inn i arbeidskanalen, må du okkludere kateteret midlertidig ved å plassere tommelen over den **røde** katetermuffen mens du fører kateteret ned i arbeidskanalen.

Trinn 3

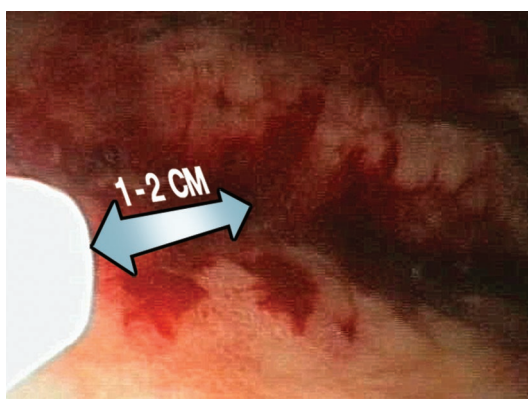

Før kateteret langsomt frem gjennom arbeidskanalen et kort stykke om gangen til kateterspissen vises i endoskopet. **Forholdsregel:** For å unngå okklusjon av kateteret må du ikke plassere det i direkte kontakt med blod og/eller slimhinner, inkludert eventuelt oppsamlet blod, og ikke aspirere blod mens kateteret er i arbeidskanalen. For å sikre god synlighet skal kateterspissen være 1-2 cm unna blødningsstedet til enhver tid.

Trinn 4






Fest kateteret til håndtaket, og pass på at tilkoblingen er sikker.

Trinn 5



For å frigjøre pulveret dreier du den **røde** ventilen til åpen stilling. **Merk:** Enheten er nå aktiv og klar til bruk. Ikke trykk på utløserknappen før du vil frigjøre pulveret.

Trinn 6

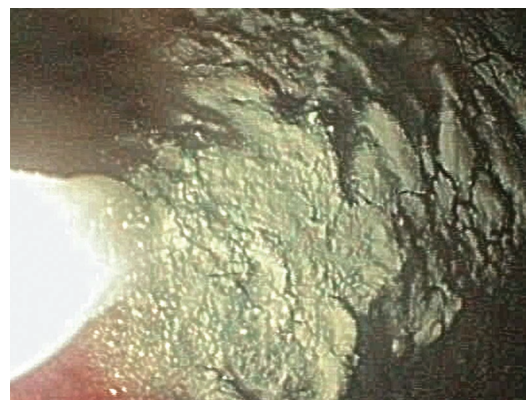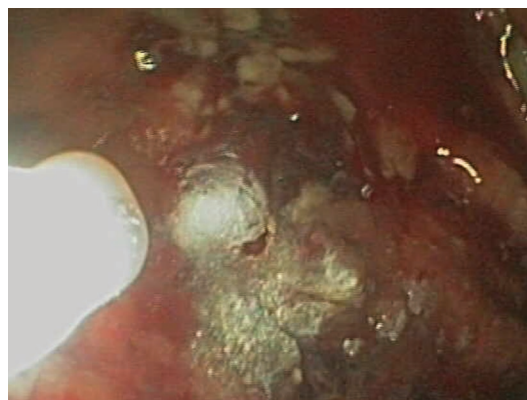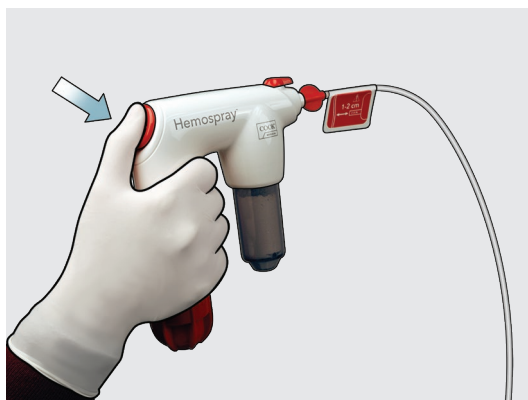


For å frigjøre pulveret holder du håndtaket i opprett stilling og trykker på den **røde** utløserknappen i 1-2 sekunder og slipper den. **Merk:** Det er ikke sikkert at det første trykket på utløseren frigjør en tilstrekkelig mengde pulver. Trykk på utløseren igjen for å fortsette å bevege pulveret gjennom systemet. Fortsett å påføre pulveret i korte støt til stedet er fullstendig dekket med pulver og ingen aktiv blødning kan ses. Det kan være nødvendig med flere påføringer, men

maksimalt 3 Hemospray-enheter skal påføres per pasient. **Merk:** Gi tid til hemostase før aspirasjon. Det er ikke nødvendig å irrigere det behandlede stedet etter frigjøring av pulver. Hvis irrigasjon er ønskelig, bør du gi tid til hemostase før irrigasjon med vann. For å unngå potensiell okklusjon av endoskopet må du unngå å aspirere pulver inn i endoskopkanalen. Sugning med skopet kan slås av eller kobles fra midlertidig for å unngå utilsiktet aspirasjon av pulver inn i skopkanalen. Hvis


kateteret blir okkludert under prosedyren, dreier du den **røde** ventilen til lukket stilling, fjerner kateteret fra endoskopet og skifter det ut med det ekstra kateteret som følger med i pakningen. Gjenta deretter trinn 1-6. Hvis det trengs mer pulver, og sprayboksen eller CO₂-patronen er tom, kreves en ny enhet.

Trinn 7

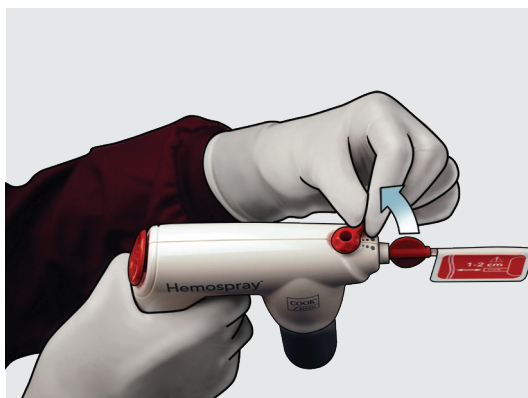

Før du fjerner Hemospray-enheten fra pasienten, dreier du den **røde** ventilen til lukket stilling. For å fjerne enheten fra endoskopet holder du i kateteret og trekker langsomt.

Trinn 8

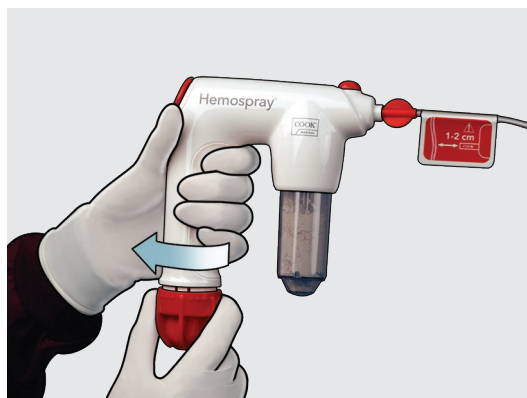

Når prosedyren er fullført, fjerner du trykket i enheten ved å dreie på den **røde** aktiveringsknappen til trykket er helt fjernet i CO₂-patronen.

Kast enheten i henhold til institusjonens retningslinjer for medisinsk biologisk farlig avfall.

Se gjeldende bruksanvisning for detaljer om bruk av systemet.

Se produktets risikoinformasjon i bruksanvisningen på cookmedical.eu.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do
 Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: orders@cookmedical.com
 Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-8.5X11