

Hemospray®


ENDOSCOPIC HEMOSTAT

Förberedelse



Avlägsna enheten från förpackningen. Aktivera CO₂-patronen genom att vrida den **röda** aktiveringsratten tills det tar stopp.

Steg 1

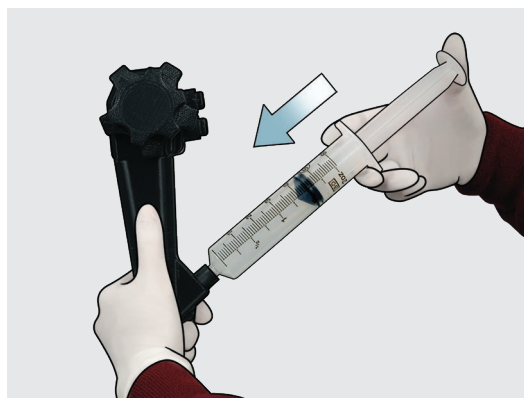


Innan du för in katetern i arbetskanalen ska du identifiera blödningsstället, avlägsna så mycket blod som möjligt och därefter spola arbetskanalen med luft.

Steg 2



Förhindra att vätska kommer in i arbetskanalen genom att tillfälligt blockera katetern genom att placera tummen över den **röda** kateterfattningen medan katetern förs genom arbetskanalen.

Steg 3

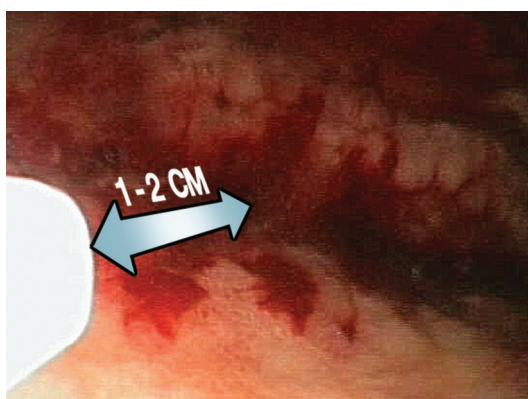

För långsamt katetern framåt genom arbetskanalen i korta steg tills kateterspetsen syns endoskopiskt. **Försiktighetsåtgärd:** Undvik kateterocklusion genom att inte placera katetern direkt i kontakt med blod och/eller en slemhinna, inklusive eventuellt samlat blod, och aspirera inte blod när katetern är i arbetskanalen. Säkerställ god sikt genom att alltid hålla kateterspetsen 1-2 cm från blödningsstället.

Steg 4




Fäst katetern på handtaget och kontrollera att den är korrekt ansluten.

Steg 5




Placera ut pulvret genom att vrida den **röda** ventilen till det öppna läget. **Obs!** Enheten är nu aktiv och redo att användas. Tryck inte på utlösarknappen förrän du vill placera ut pulvret.


Steg 6

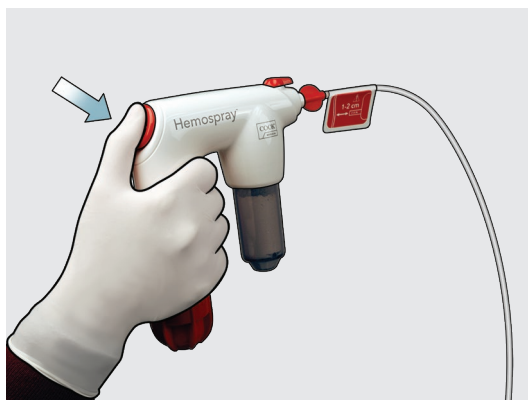

Placera ut pulvret genom att hålla handtaget upprätt, trycka in den **röda** utlösarknappen i 1–2 sekunder och därefter släppa den. **Obs!** Det första trycket på utlösaren kanske inte placerar ut en tillräcklig mängd pulver. Tryck på utlösaren igen för att fortsätta mata pulver genom systemet. Fortsätt applicera pulvret med korta pustar tills platsen är helt täckt med pulver och ingen aktiv blödning syns. Flera appliceringar kan krävas, dock ska högst tre Hemospray-enheter appliceras

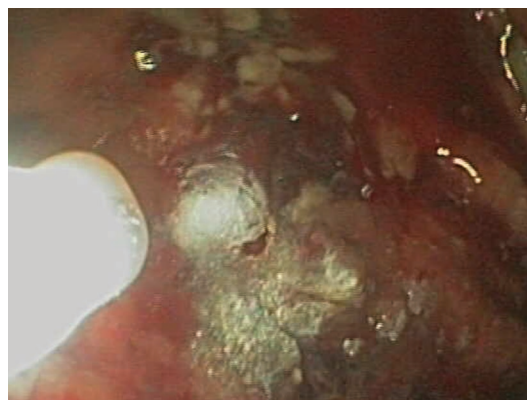


per patient. **Obs!** Invänta hemostas innan du aspirerar. Den behandlade platsen behöver inte spolras efter utplaceringen av pulver. Om spolning önskas ska du invänta hemostas innan du spolrar med vatten. Undvik potentiell ocklusion av endoskopet genom att inte aspirera pulver i endoskopkanalen. Sugfunktionen kan stängas av eller kopplas bort tillfälligt för att undvika oavsiktlig aspiration av pulver i endoskopkanalen. Om katetern blir tilltäppt under proceduren

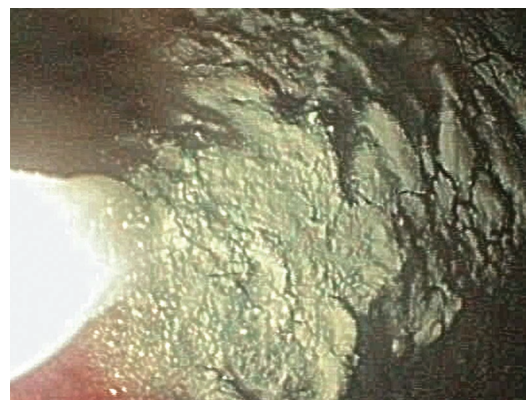


ska du vrida den **röda** ventilen till det stängda läget, avlägsna katetern från endoskopet och ersätta den med den extra katetern som följer med i förpackningen. Upprepa därefter steg 1–6. En ny enhet krävs om mer pulver behövs och spraybehållaren eller CO₂-patronen är tom.

Steg 7

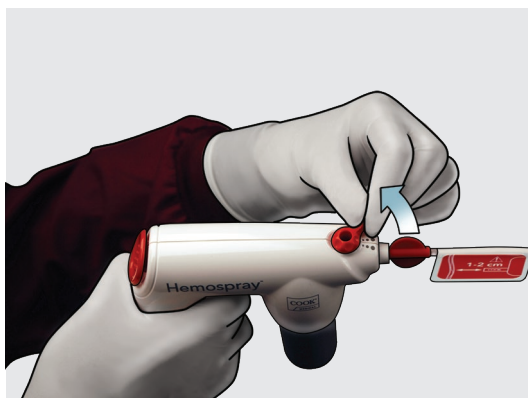

Innan du avlägsnar Hemospray-enheten från patienten ska du vrida den **röda** ventilen till det stängda läget. Avlägsna enheten från endoskopet genom att greppa katetern och dra långsamt.

Steg 8

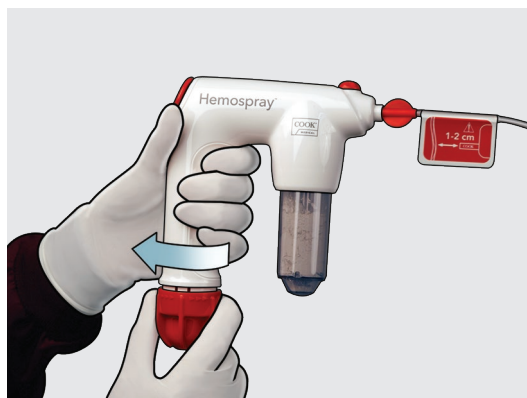

Efter avslutad procedur ska du sänka enhetens tryck genom att rotera den **röda** aktiveringsratten tills CO₂-patronen blir helt trycklös.

Kassera enheten i enlighet med institutionens riktlinjer för biologiskt farligt medicinskt avfall.

Läs aktuell bruksanvisning för detaljerad systemanvändning.

Produktriskinformation finns i bruksanvisningen på cookmedical.eu.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do
 Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: orders@cookmedical.com
 Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-8.5X11