


Fusion[®]OMNI[™]

SPHINCTEROTOME WITH DOMETIP[®]

Immer


1. Die Oberseite der Kappe des Fusion Fixierungssystems für den Führungsdraht mit wasserlöslichem Schmiermittel schmieren.
2. Das Führungsdrahtlumen des OMNI-Produkts vor der Einführung des Führungsdrahts durchspülen. Den Drahtkontroll-Port vor dem Durchspülen mit dem schwarzen Schiebedeckel oder dem Daumen verschließen.

Schritt 1

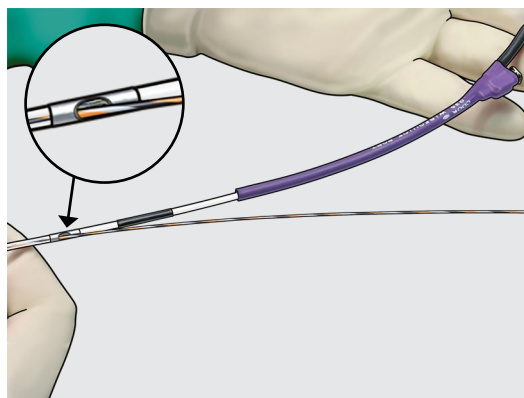


Den Führungsdraht in den Drahtkontroll-Port einführen.

Schritt 2

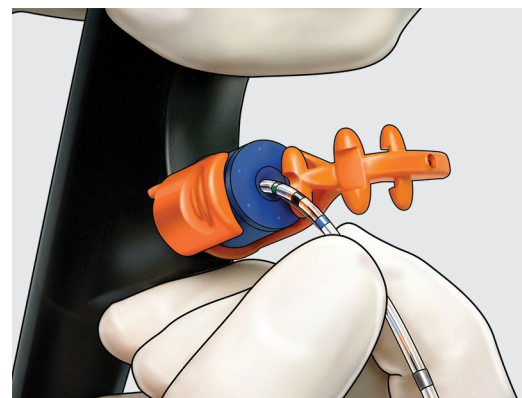


Die Spitze des OMNI-Produkts ist weich. Die Spitze sanft durch die Drahtfixierungskappe und über die innere Dichtung der Kappe hinaus führen.

Schritt 3

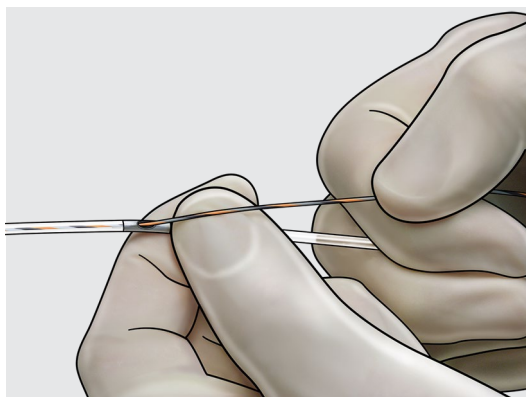


Damit der Arzt die Kontrolle über den Führungsdraht erhält, den Führungsdraht heraushebeln und bis zum Draht-Fixierungssystem aus dem Schlitz entfernen. Den Katheter und den Führungsdraht in einer Hand halten und den Führungsdraht mit dem Daumen der anderen Hand aus dem Schlitz am Drahtkontroll-Port heraushebeln.

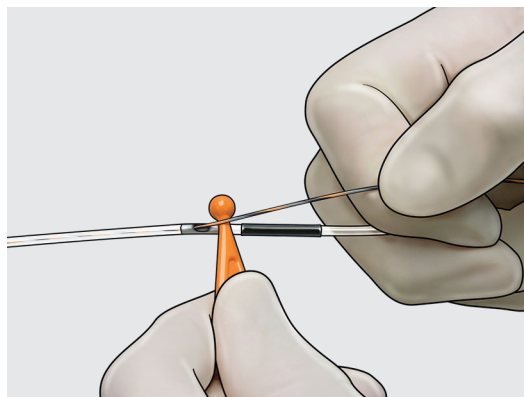


Wahlweise kann auch das im Lieferumfang des Produkts enthaltene Schiebewerkzeug verwendet werden. Den Katheter und den Führungsdraht in einer Hand halten und den Führungsdraht mit dem Schiebewerkzeug aus dem Schlitz am Drahtkontroll-Port heraushebeln.

Schritt 4

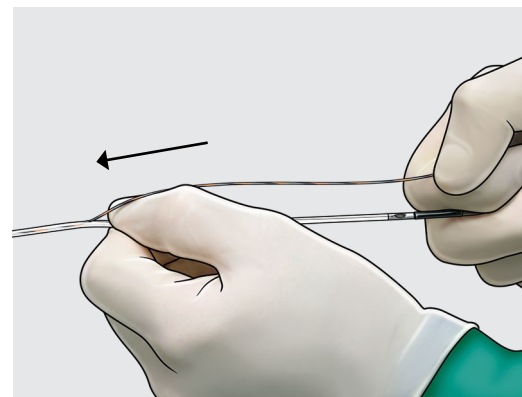


Den Führungsdraht weiter mit dem Daumen **oder** dem Schiebewerkzeug aus dem Schlitz entfernen, während der Katheter und der Führungsdraht weiter mit der anderen Hand festgehalten werden.

Schritt 5

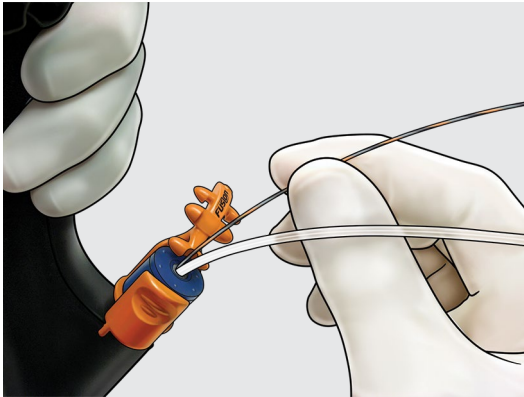


Der Arzt hat nun die Kontrolle über den Führungsdraht.

Schritt 6

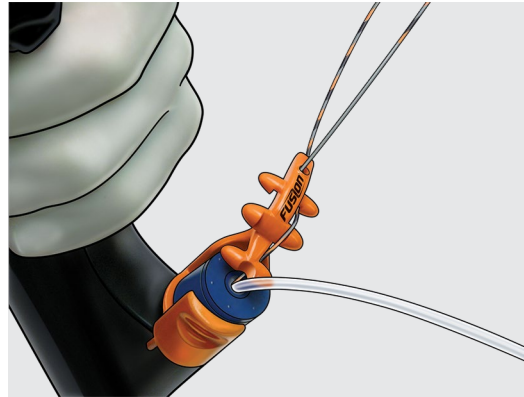


Nach Herstellung des Führungsdrahtzugangs muss der Draht im Fixierungssystem arretiert werden. Den Führungsdraht nach dem Muster „unter-über-unter“ einfädeln und das Ende des Führungsdrahts im entsprechenden Port platzieren.

Schritt 7

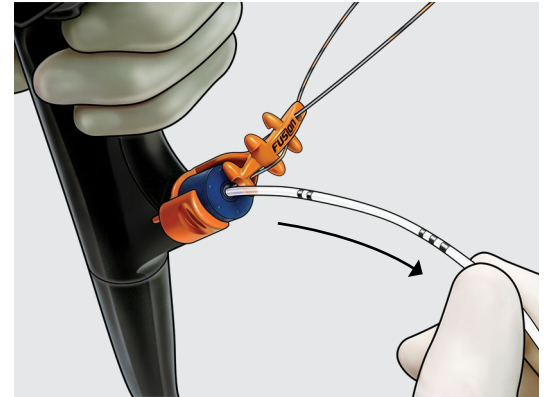


Vor dem Herausziehen des OMNI-Produkts aus dem Endoskop sicherstellen, dass sich der Albarranhebel in der **unteren** Stellung befindet. Das Produkt nach oben aus dem Endoskop ziehen, bis die röntgendichte Markierung die Kappe erreicht.

Schritt 8

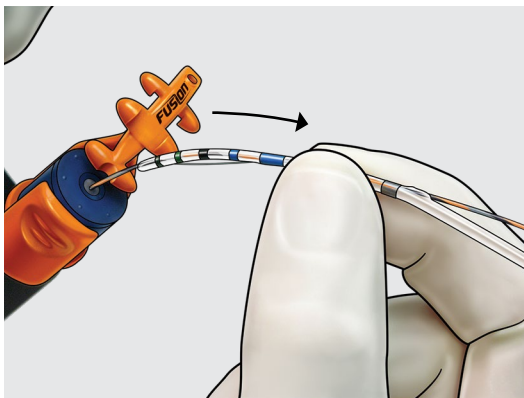

Den Führungsdraht aus dem Fixierungssystem lösen und den Wechsel vornehmen, um das OMNI-Produkt vom Führungsdraht zu entfernen.

Schritt 9

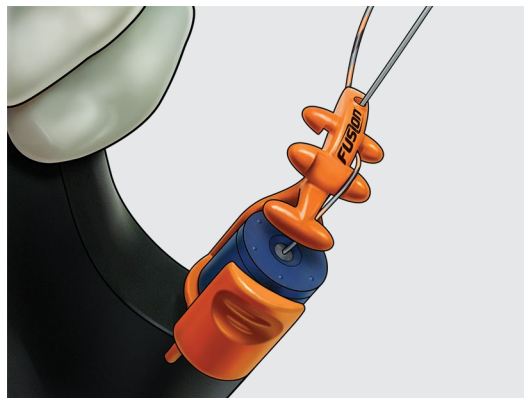

Den Führungsdraht im Fixierungssystem arretieren. Den Führungsdraht nach dem Muster „unter-über-unter“ einfädeln und das Ende des Führungsdrahts im entsprechenden Port platzieren. Mit dem nächsten Fusion Produkt fortfahren.

Detaillierte Informationen zur Verwendung des Systems finden Sie in der aktuellen Anleitung.

Sämtliche Schritt-für-Schritt-Anweisungen sind genau zu befolgen, einschließlich Angaben zu Risiken, technischen Informationen, Produktnamen und Verwendungszweck, die in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu enthalten sind. Hinweis: Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie vom zuständigen Cook Mitarbeiter.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 2161 272 3770, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do
 Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 Email: customersupport@cookmedical.com
 Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 Email: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, PI-A4