


Fusion[®] OMNI[™]

SPHINCTEROTOME WITH DOMETIP[®]

Siempre


1. Lubrique la parte superior de la tapa del dispositivo para fijación de guías Fusion con lubricante hidrosoluble.
2. Lave la luz para la guía del dispositivo OMNI antes de insertar la guía. Cubra el acceso de control de la guía con la cubierta deslizante negra o con el pulgar antes de realizar el lavado.

Paso 1

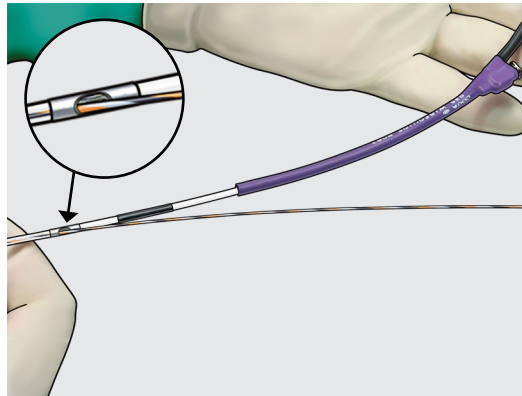


Inserte la guía en el acceso de control de la guía.

Paso 2

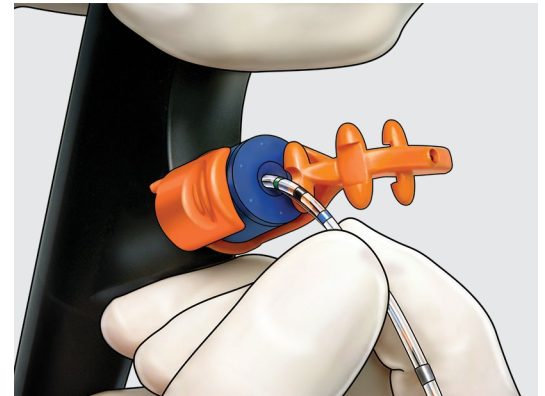


La punta del dispositivo OMNI es blanda. Con cuidado, coloque la punta dentro de la tapa de fijación de la guía de modo que se deslice más allá del sello interno de la tapa.

Paso 3

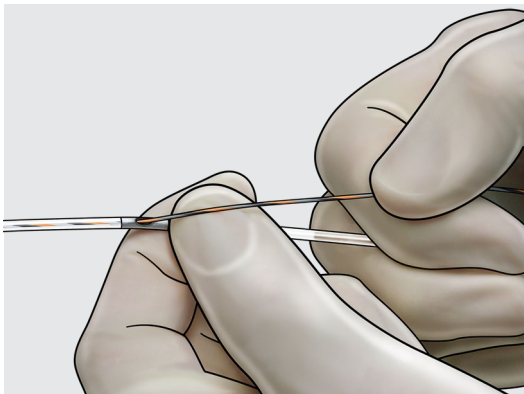


Para que el médico pueda controlar la guía, introduzca y deslice la guía hasta el dispositivo para fijación de guías. Sostenga el catéter y la guía con una mano y utilice el pulgar opuesto para introducir rápidamente la guía a través del canal de avance en el acceso de control de la guía.

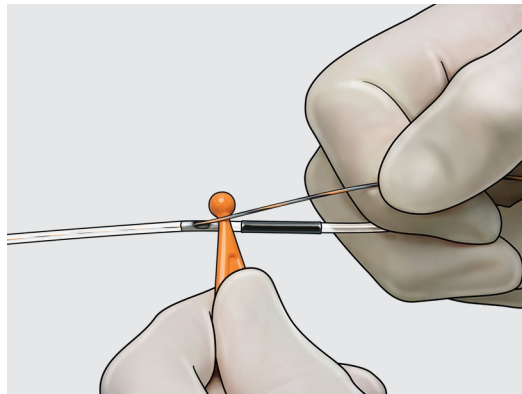


Como método alternativo, utilice la herramienta de deslizamiento que se incluye con el producto. Sostenga el catéter y la guía con una mano y utilice la herramienta de deslizamiento para introducir rápidamente la guía a través del canal de avance en el acceso de control de la guía.

Paso 4

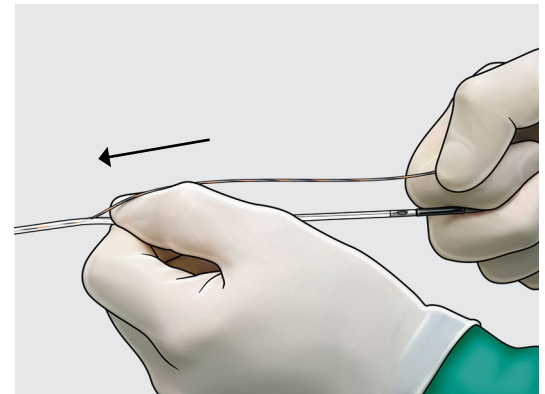


Continúe deslizando la guía hacia fuera del canal de avance con el pulgar o con la herramienta de deslizamiento mientras sigue sosteniendo el catéter y la guía con la mano opuesta.

Paso 5

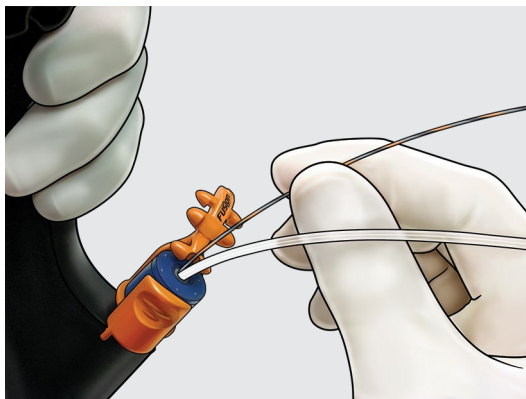


Ahora el médico controla la guía.

Paso 6

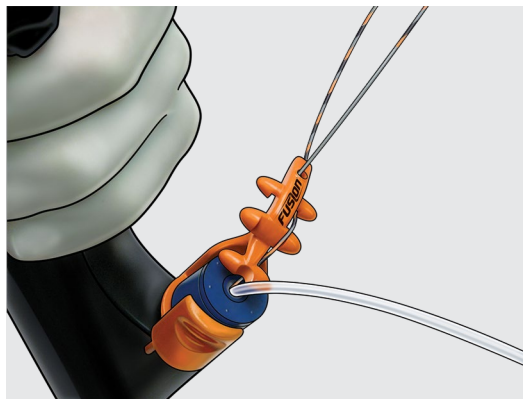


Una vez logrado el acceso con la guía, esta debe fijarse al dispositivo de fijación. Entrelace la guía siguiendo un patrón «por debajo, por encima y por debajo» e introduzca el extremo posterior de la guía en el orificio correspondiente.

Paso 7

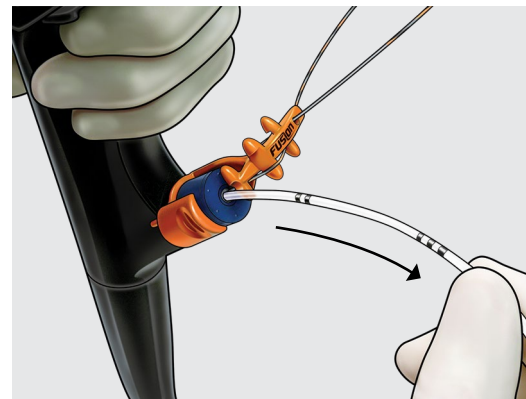


Para deslizar el dispositivo OMNI fuera del endoscopio, asegúrese de que el elevador esté **abajo**. Tire del dispositivo hacia arriba para sacarlo del endoscopio hasta que la banda radiopaca alcance la tapa.

Paso 8

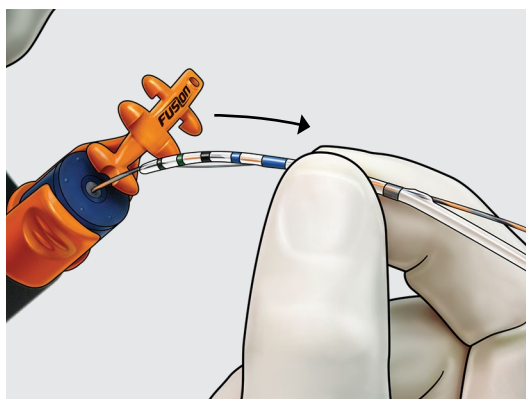

Desbloquee la guía y realice el intercambio para retirar el dispositivo OMNI de la guía.

Paso 9

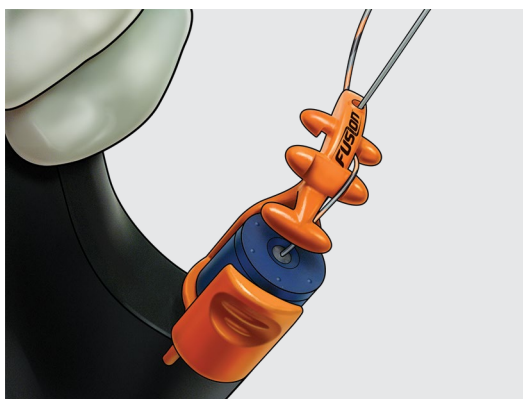

Fije la guía al dispositivo para fijación. Entrelace la guía siguiendo un patrón «por debajo, por encima y por debajo» e introduzca el extremo posterior de la guía en el orificio correspondiente. Continúe con el siguiente dispositivo Fusion.

Consulte las instrucciones vigentes para conocer los detalles de uso del sistema.

Siga atentamente todas las instrucciones paso a paso, incluida la información relativa a riesgos, datos técnicos, nombres de productos e indicaciones que se facilita en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu. Tenga en cuenta que es posible que algunos productos o números de referencia no estén disponibles en todos los mercados. Consulte los detalles con su representante de Cook.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 97251996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 2161 272 3770, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do
 Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 Email: customersupport@cookmedical.com
 Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 Email: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, PI-A4