


Fusion[®] OMNI[™]

SPHINCTEROTOME WITH DOMETIP[®]

Sempre


1. Lubrificare la parte superiore del cappuccio del sistema blocca guida Fusion con un lubrificante idrosolubile.
2. Lavare il lume per la guida del dispositivo OMNI prima di inserire la guida. Prima del lavaggio, coprire l'apertura di controllo della guida usando la copertura nera scorrevole o il pollice.

Passaggio 1

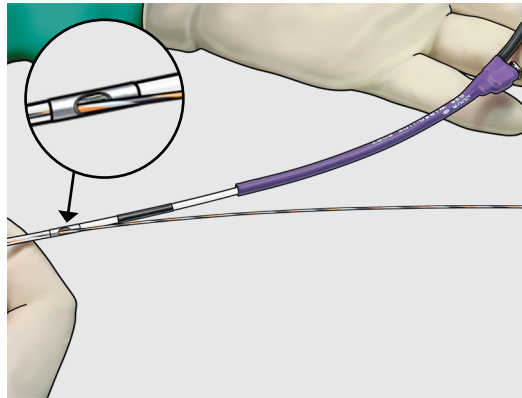


Inserire la guida all'interno dell'apertura di controllo della guida.

Passaggio 2

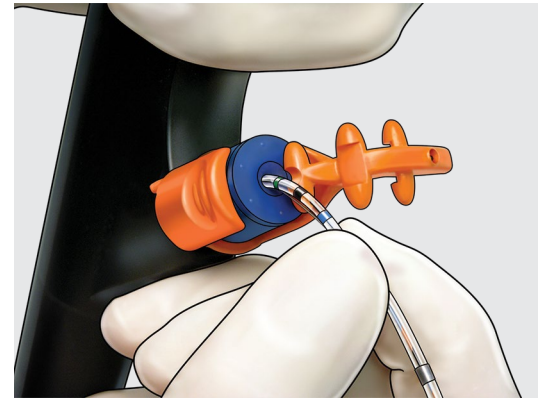


La punta del dispositivo OMNI è morbida; inserirla delicatamente nel cappuccio di blocco della guida per farla scorrere oltre la guarnizione interna del cappuccio.

Passaggio 3

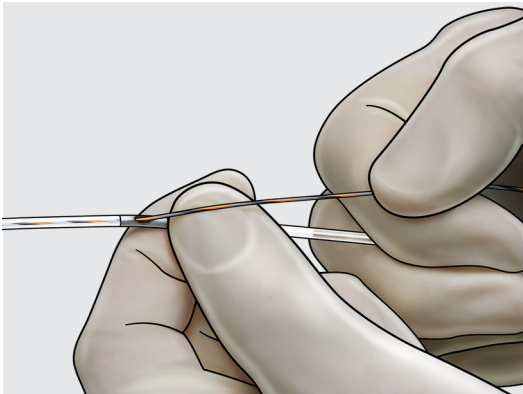


Il medico può controllare la guida inserendola e facendola scorrere fino al sistema blocca guida. Tenere il catetere e la guida in una mano e usare il pollice dell'altra mano per inserire la guida nel canale di penetrazione, con un movimento a scatto, in corrispondenza dell'apertura di controllo della guida.

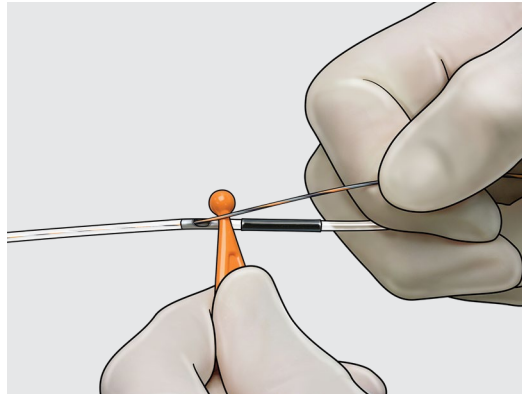


In alternativa, usare l'apposito strumento di scorrimento in dotazione con il prodotto. Tenere il catetere e la guida in una mano e usare lo strumento di scorrimento per inserire la guida nel canale di penetrazione, con un movimento a scatto, in corrispondenza dell'apertura di controllo della guida.

Passaggio 4

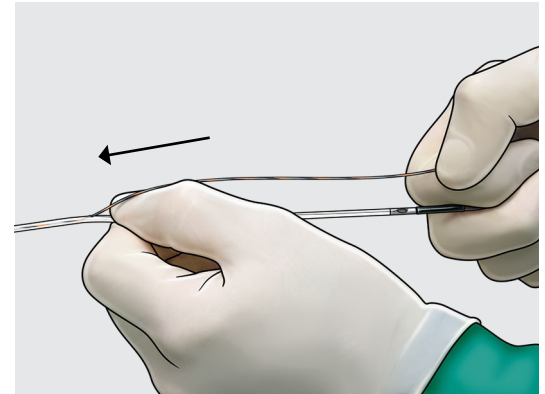


Continuare a far scorrere la guida fuori dal canale di penetrazione facendo scorrere il pollice o lo strumento di scorrimento, tenendo sempre il catetere e la guida con l'altra mano.

Passaggio 5

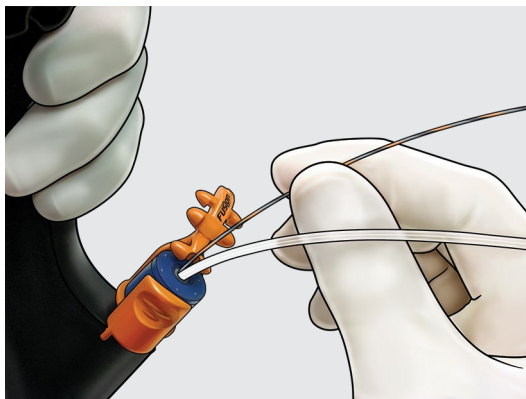


Il medico ha ora il controllo della guida.

Passaggio 6

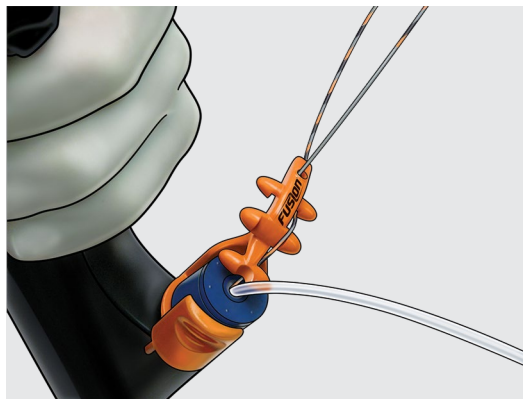


Una volta ottenuto l'accesso con la guida, questa deve essere bloccata al sistema blocca guida. Fissare la guida al sistema con un movimento "sotto-sopra-sotto" e posizionare la coda della guida nell'apposita apertura.

Passaggio 7

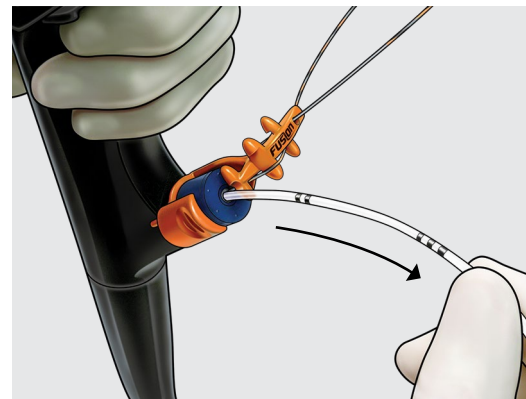


Per far scorrere il dispositivo OMNI fuori dall'endoscopio, accertarsi che l'elevatore sia **abbassato**. Tirare il dispositivo verso l'alto per estrarlo dall'endoscopio finché la banda radiopaca non raggiunge il cappuccio.

Passaggio 8

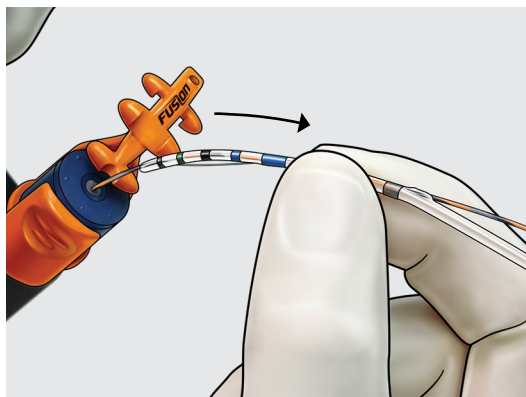

Sbloccare la guida ed eseguire lo scambio per rimuovere il dispositivo OMNI dalla guida.

Passaggio 9

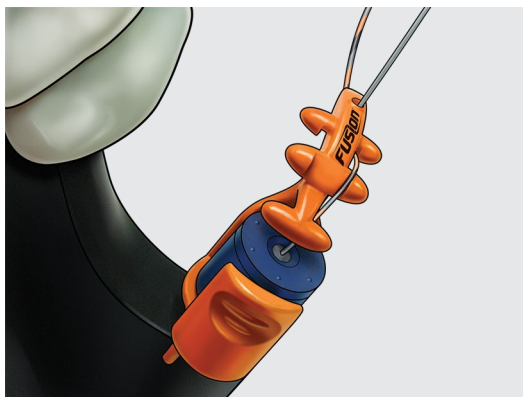

Bloccare la guida al sistema blocca guida. Fissare la guida al sistema con un movimento "sotto-sopra-sotto" e posizionare la coda della guida nell'apposita apertura. Procedere con il dispositivo Fusion successivo.

Per dettagli sull'uso del sistema, consultare le istruzioni aggiornate.

Attenersi scrupolosamente a tutte le istruzioni dettagliate, comprese le informazioni sui rischi, le specifiche tecniche, il nome del dispositivo e l'uso previsto, come indicato nelle istruzioni per l'uso (IFU) disponibili su cookmedical.eu. Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Cook.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 2161 272 3770, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do
 Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 Email: customersupport@cookmedical.com
 Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 Email: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, PI-A4