


Zilver 635[®] Biliary

SELF-EXPANDING STENT


SNELSTARTGIDS

Overzicht

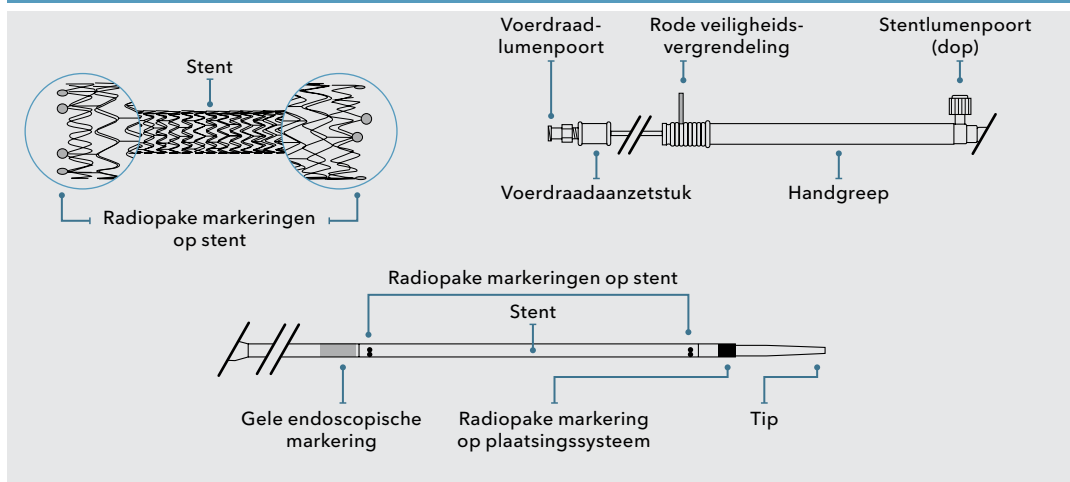


OPMERKING: Voor het zij-aan-zij aanbrengen van stents is een duodenoscoop met een minimale werkkanaaldiameter van 4,2 mm voor de accessoire vereist.

Stap 1

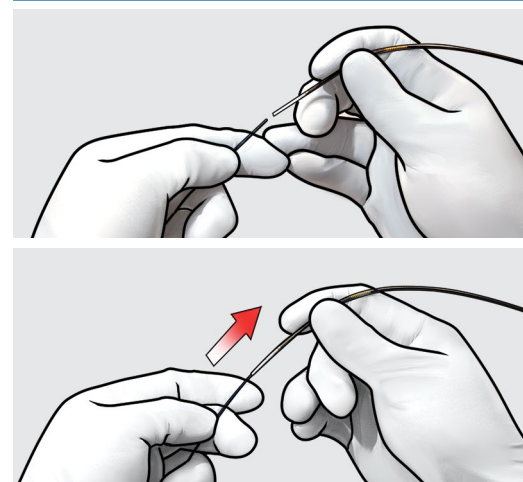


OPMERKING: Voor het beste resultaat houdt u de voerdraaden nat. Ontgrendel de voerdraad, als u een voerdraadvergrendelinstrument gebruikt. Breng het hulpmiddel van achteren aan over een vooraf gepositioneerde voerdraad en zorg dat de voerdraad via het voerdraadaanzetstuk naar buiten komt.

Stap 2a

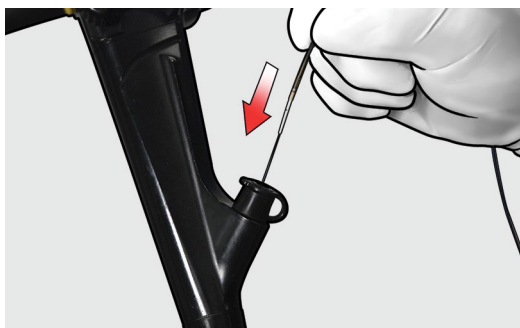


Breng het hulpmiddel in kleine stappen in het werkkanaal van de duodenoscoop in.

Stap 3a

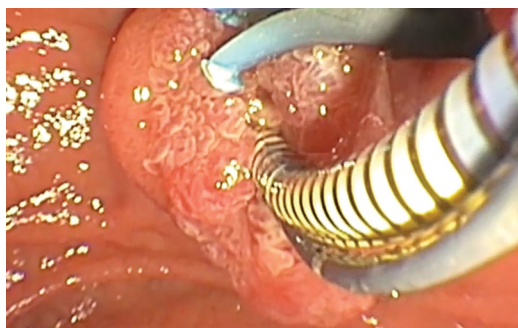


Stap 3b

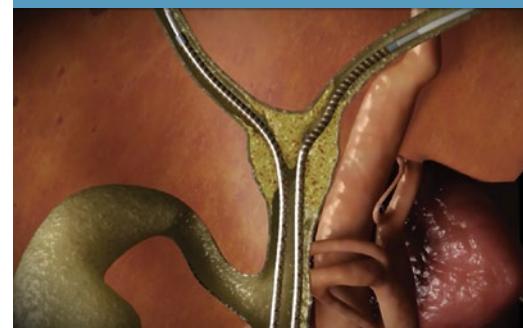


Herhaal stap 1-3a voor het tweede hulpmiddel als er gebruik wordt gemaakt van zij-aan-zij stents.

OPMERKING: Beide hulpmiddelen moeten in positie zijn voordat ze worden ontplooid.

Stap 2b

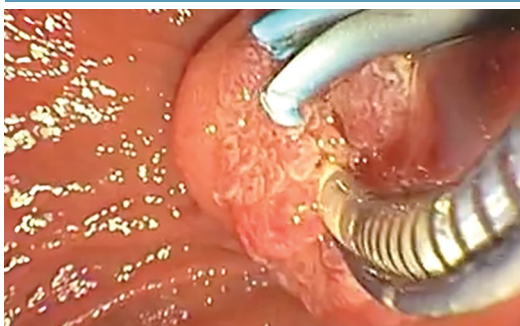


Voer het hulpmiddel, met de elevator open, in korte stappen verder op totdat het endoscopisch waarneembaar uit de duodenoscoop komt.

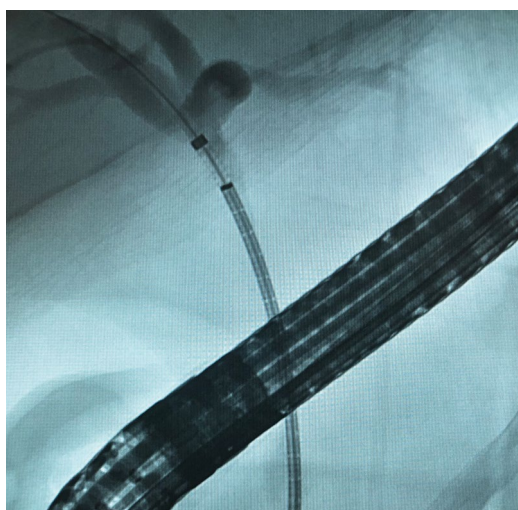

Voer het stentplaatsingssysteem, met de elevator open, onder fluoroscopische geleiding door de papilla op tot in de ductus choledochus. Voer het hulpmiddel in korte stappen op totdat de stent fluoroscopisch waarneembaar door de strictuur heen ligt. Controleer fluoroscopisch of de stent zich in de gewenste positie bevindt.


OPMERKING: Gebruik bij transpapillaire plaatsing de gele endoscopische markering om de stent in positie te brengen. Een stent die de papilla overbrugt moet na ontplooiing ongeveer 0,5 cm voorbij de papilla en in het duodenum uitsteken.

Stap 4

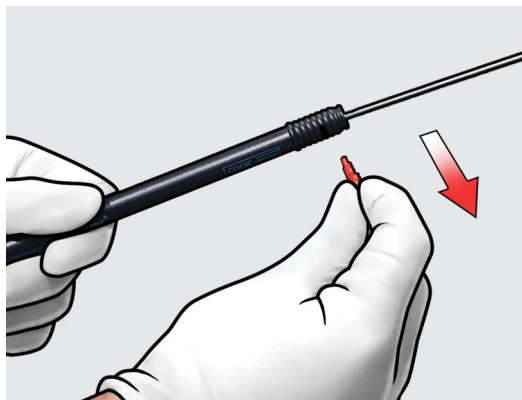

Verwijder de rode veiligheidsvergrendeling(en) vóór ontplooiing van de stent(s). **OPMERKING:** Zorg dat de rode veiligheidsvergrendeling niet onbedoeld wordt verwijderd vóór deze stap.

Stap 5

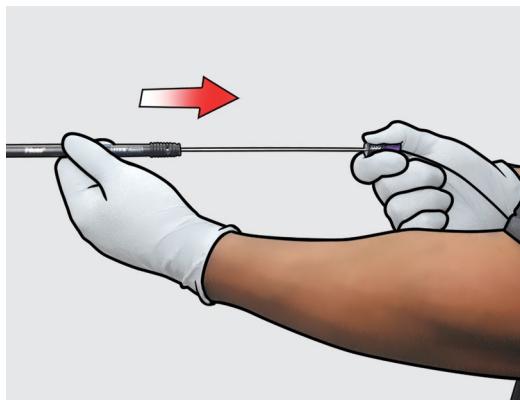

Begin onder fluoroscopische geleiding, met de elevator open, met de ontplooiing van de stent(s) door het/de voerdraadaanzetstuk(ken) stationair te houden en de handgreep/handgrepen langzaam naar achteren te trekken. Handhaaf tijdens de ontplooiing tegelijkertijd de positie van elke stent door het plaatsingssysteem/de plaatsingssystemen terug te trekken uit de duodenoscoop.

Stap 6



Blijf tegelijkertijd de handgreep/-grepen naar achteren trekken en het plaatsingssysteem/de plaatsingssystemen terugtrekken totdat fluoroscopisch is bevestigd dat beide stents helemaal zijn ontplooid. Bij transpapillaire plaatsing kan ook endoscopische bevestiging van volledige ontplooiing van de stent worden gebruikt.

Stap 7



Houd de voerdraad op zijn plaats en verwijder, met de elevator open, het plaatsingssysteem voorzichtig uit de geëxpandeerde stent. Verwijder het plaatsingssysteem uit de duodenoscoop terwijl u de positie van de stent fluoroscopisch bewaakt. **OPMERKING:** Controleer met fluoroscopie of de stent voldoende is geëxpandeerd om de tip veilig te kunnen verwijderen. **OPMERKING:** Herhaal deze stap indien nodig om ook het tweede plaatsingssysteem te verwijderen.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do
 Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com
 Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com

Raadpleeg de risico-informatie van dit hulpmiddel in de gebruiksaanwijzing op cookmedical.eu.

Afbeelding in stap 2b met dank aan Dr. Gregory Ginsberg, Hospital of the University of Pennsylvania, Verenigde Staten.
 Afbeelding in stap 3a met dank aan Dr. Mohan J. Ramchandani, AIG Hospitals, Gachibowli, India. Afbeelding in stap 7 met dank aan Dr. Sundeep Lakhtakia, AIG Hospitals, Gachibowli, India.



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-8.5X11