


# Kontrolle für die gesamte Elektrode


**Liberator<sup>®</sup>**

BEACON<sup>®</sup> TIP LOCKING STYLET

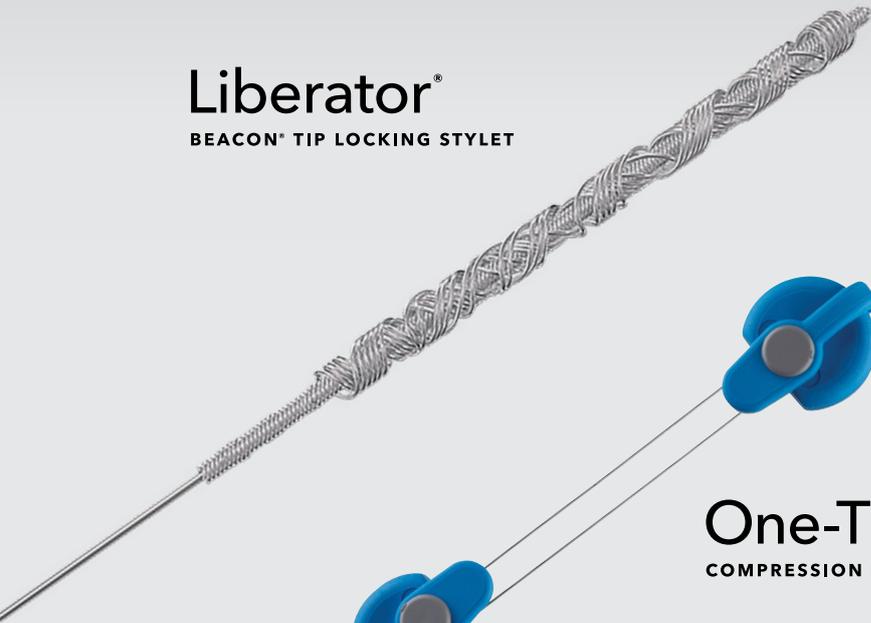


**One-Tie<sup>®</sup>**


COMPRESSION COIL

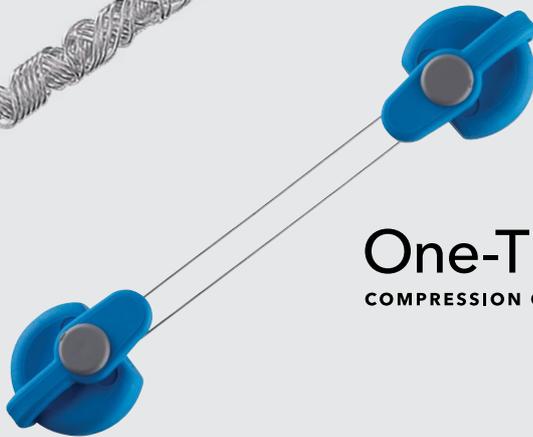




**Bulldog<sup>™</sup>**


LEAD EXTENDER

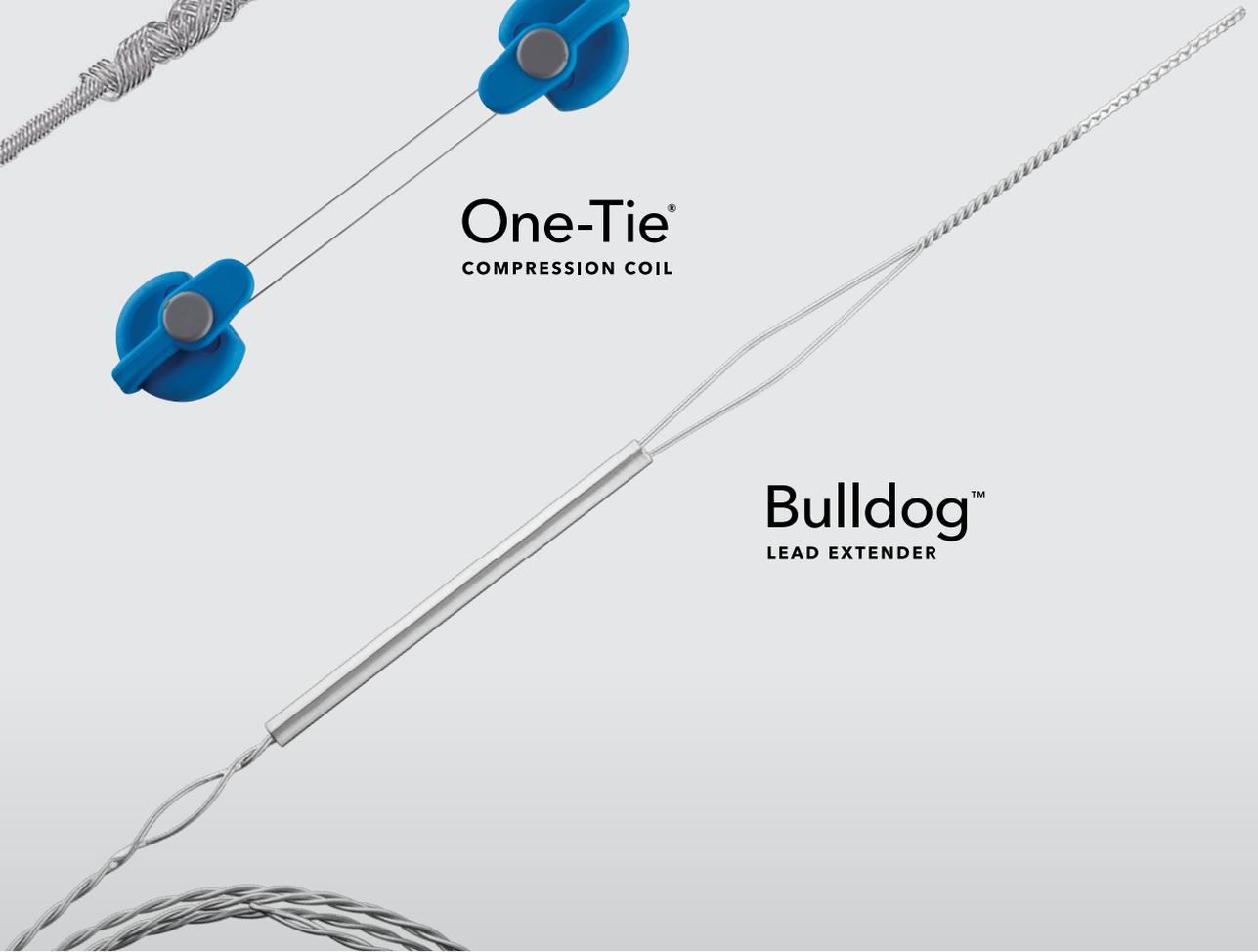

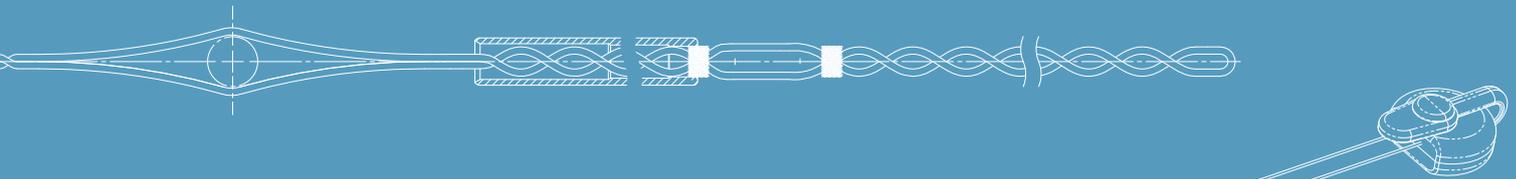

Cook Medical bietet das einzige umfassende Elektrodenkontrollsystem, das entwickelt wurde, um schwierige Elektrodenprobleme während der Extraktion zu bewältigen. Die Kontrolle der Elektrode ist ein wichtiger Schritt bei dem Verfahren und entscheidend für eine angemessene Traktion an der Zielelektrode. Erzeugen des Schieneneffekts, um die Extraktionsschleuse über die Zielelektrode zu führen und die Dissektion der eingekapselten fibrösen Bindungsstellen zu ermöglichen. Ermöglicht dem Arzt die Kontrolle von angemessener Traktion, Gegendruck und Gegenzug während der Elektrodenextraktion.

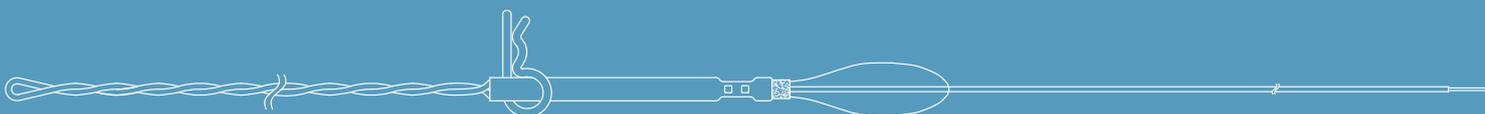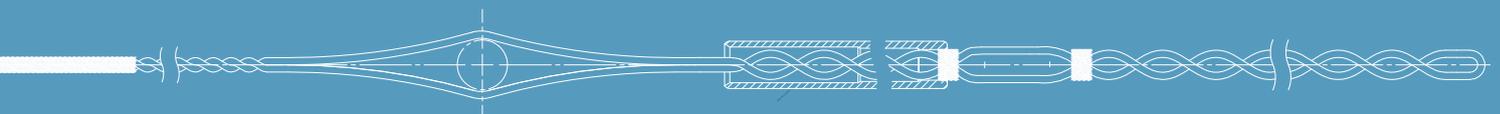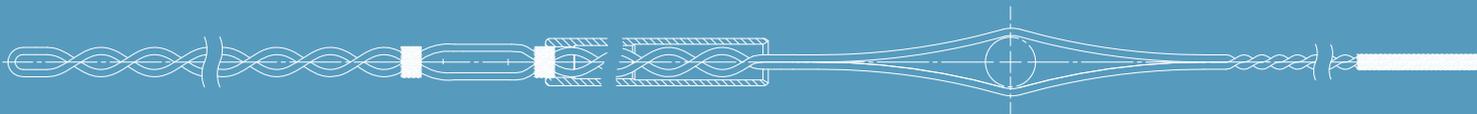

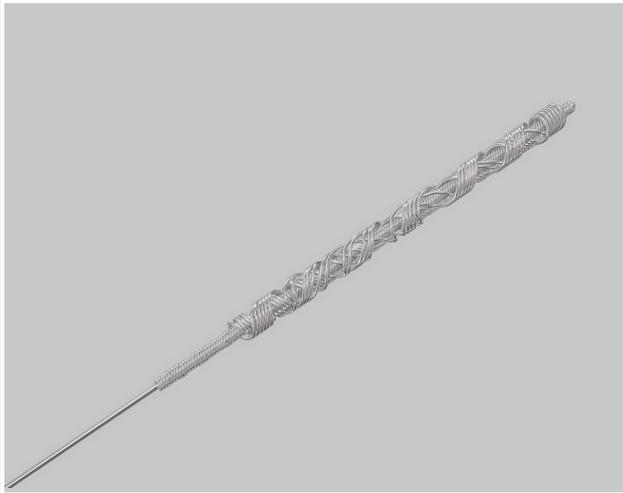


## Liberator® Beacon® Tip Locking Stylet

### Mit Sicherheit sperren

Der Liberator Sperrmandrin mit Beacon-Spitze bietet eine verbesserte Visualisierung des Sperrmechanismus, so dass der Arzt genau weiß, wie weit er fortgeschritten ist. Mit einem Sperrmechanismus, der sich in der Nähe des distalen Teils der Elektrode befindet, kann das Gerät so weit distal gesperrt werden, wie es durch die Elektrode verläuft. Erleichtert das Erzeugen des Schieneneffekts in der gesperrten Position der Elektrode.

### Merkmale

- Universal-Größe
- Sperrmechanismus 7,6 cm von der distalen Spitze entfernt
- Sperrstift verhindert vorzeitige Sperrung
- Drahtarmer Griff mit Gewinde für bessere Kontrolle/Griffbarkeit für den Arzt

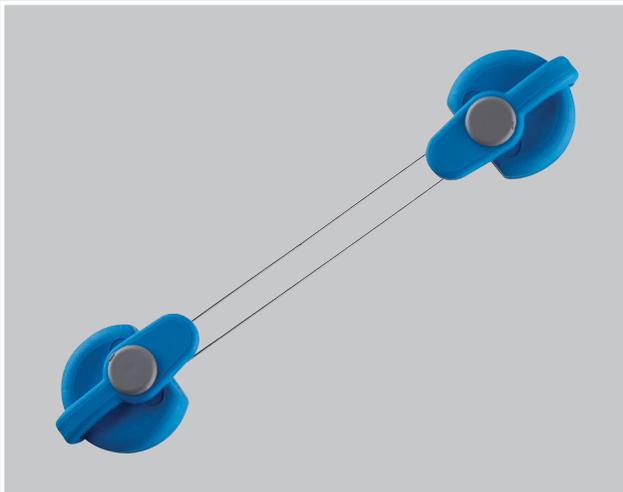


## One-Tie® Compression Coil

### Erhöhte Elektrodenkontrolle<sup>1</sup>

Die One-Tie Kompressionsspirale komprimiert die Elektrodenkomponenten am proximalen Ende der Zielelektrode. Durch die Komprimierung der Komponenten an der Sperrschleuse kann der Arzt die Elektrode besser kontrollieren und vermeiden, dass sich die Isolierung verknotet oder Kabel oder Drähte herausragen.

### Merkmale

- Einfach anzuwenden
- Geeignet für alle Elektrodenarten
- Entwickelt, um die Bewegung der Isolierung zu reduzieren

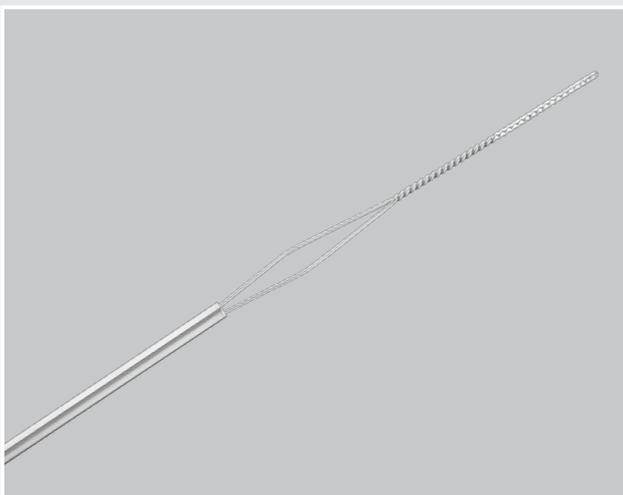

## Bulldog™ Lead Extender

### Verwalten Sie die Extraktion von lumenlosen Elektroden

Die Bulldog Elektrodenverlängerung hilft bei der Entfernung von gebrochenen oder lumenlosen kardialen Elektroden oder solchen, die Kabeldrähte enthalten, wie z. B. implantierbare Kardioverter-Defibrillatorkathoden (ICD). Bulldog verlängert die Elektrode, so dass sie durch eine Schleuse gezogen werden kann.

### Merkmale

- Sicherer und einfach zu bedienender Sperrmechanismus
- Kompatibilität mit allen Extraktionsschleusen
- Griff mit Gewinde

1. Christoph T. Starck, Alexander Stepuk, Tomas Holubec, Jan Steffel, Jan Wendelin Stark, Volkmar Falk, Compression coil provides increased lead control in extraction procedures, *EP Europace*, Volume 17, Issue 3, March 2015, Pages 499-503, <https://doi.org/10.1093/europace/euu272>

## Schiennen-Effekt

Der Liberator und der One-Tie bieten zusammen zwei Zugpunkte entlang der Elektrode. Der erste Schritt besteht darin, die Position der distalen Sperrung mit dem Liberator und dem One-Tie und der proximalen Kompression zu visualisieren, um die Schiene zwischen den beiden Punkten zu etablieren. Eine etablierte Schiene und die Verwendung des One-Tie in Verbindung mit dem Liberator bieten eine verbesserte zentrale Unterstützung der Extraktionschleusen bei schwierigen Elektrodenextraktionsverfahren.<sup>1</sup>



Bestellnummer	Referenznummer	Gesamtlänge cm	Aktive Länge cm	Sperrbereich Durchmesser Inch	Menge
<b>Liberator® Beacon® Tip Locking Stylet</b>					
G26550	LR-OFA01	140	70	0,016-0,032	–
<b>One-Tie® Compression Coil</b>					
G31929	LR-OTE-N	–	–	–	5
<b>Bulldog™ Lead Extender</b>					
G46542	LR-LED01	70	–	–	–

1. Christoph T. Starck, Alexander Stepuk, Tomas Holubec, Jan Steffel, Jan Wendelin Stark, Volkmar Falk, Compression coil provides increased lead control in extraction procedures, *EP Europace*, Volume 17, Issue 3, March 2015, [Pages 499-503](#), <https://doi.org/10.1093/europace/euu272>

### Customer Service

EU Website: [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu)  
 EDI: [cookmedical.eu/edi](mailto:cookmedical.eu/edi)  
 Distributors: +353 61239240, [ssc.distributors@cookmedical.com](mailto:ssc.distributors@cookmedical.com)  
 Austria: +43 179567121, [oe.orders@cookmedical.com](mailto:oe.orders@cookmedical.com)  
 Belgium: +32 27001702, [be.orders@cookmedical.com](mailto:be.orders@cookmedical.com)  
 Denmark: +45 38487607, [da.orders@cookmedical.com](mailto:da.orders@cookmedical.com)  
 Finland: +358 972519996, [fi.orders@cookmedical.com](mailto:fi.orders@cookmedical.com)  
 France: +33 171230269, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Germany: +49 6950072804, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 Iceland: +354 8007516, [IS.orders@cookmedical.com](mailto:IS.orders@cookmedical.com)  
 Ireland: +353 61239252, [ie.orders@cookmedical.com](mailto:ie.orders@cookmedical.com)  
 Italy: +39 0269682853, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Netherlands: +31 202013367, [nl.orders@cookmedical.com](mailto:nl.orders@cookmedical.com)  
 Poland: +48 223060159, [pl.orders@cookmedical.com](mailto:pl.orders@cookmedical.com)  
 Spain: +34 912702691, [es.orders@cookmedical.com](mailto:es.orders@cookmedical.com)  
 Sweden: +46 858769468, [se.orders@cookmedical.com](mailto:se.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - French: +41 448009609, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - Italian: +41 448009609, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - German: +41 448009609, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 United Kingdom: +44 2073654183, [uk.orders@cookmedical.com](mailto:uk.orders@cookmedical.com)

USA Website: [cookmedical.com](http://cookmedical.com)  
 EDI: [cookmedical.com/edi.do](mailto:cookmedical.com/edi.do)  
**Americas:**  
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335  
 E-mail: [customersupport@cookmedical.com](mailto:customersupport@cookmedical.com)  
**Australia:**  
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283  
 E-mail: [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)



LM-A4