

# Behandlung von postpartalen Blutungen




Bakri®

POSTPARTUM BALLOON WITH RAPID INSTILLATION COMPONENTS

# Eine einfache Lösung für postpartale Blutungen (PPH, Postpartum Hemorrhage)

Verfahrensschritte für die konservative Behandlung von PPH, die auf Uterotonika nicht ansprechen<sup>1,2,3</sup>

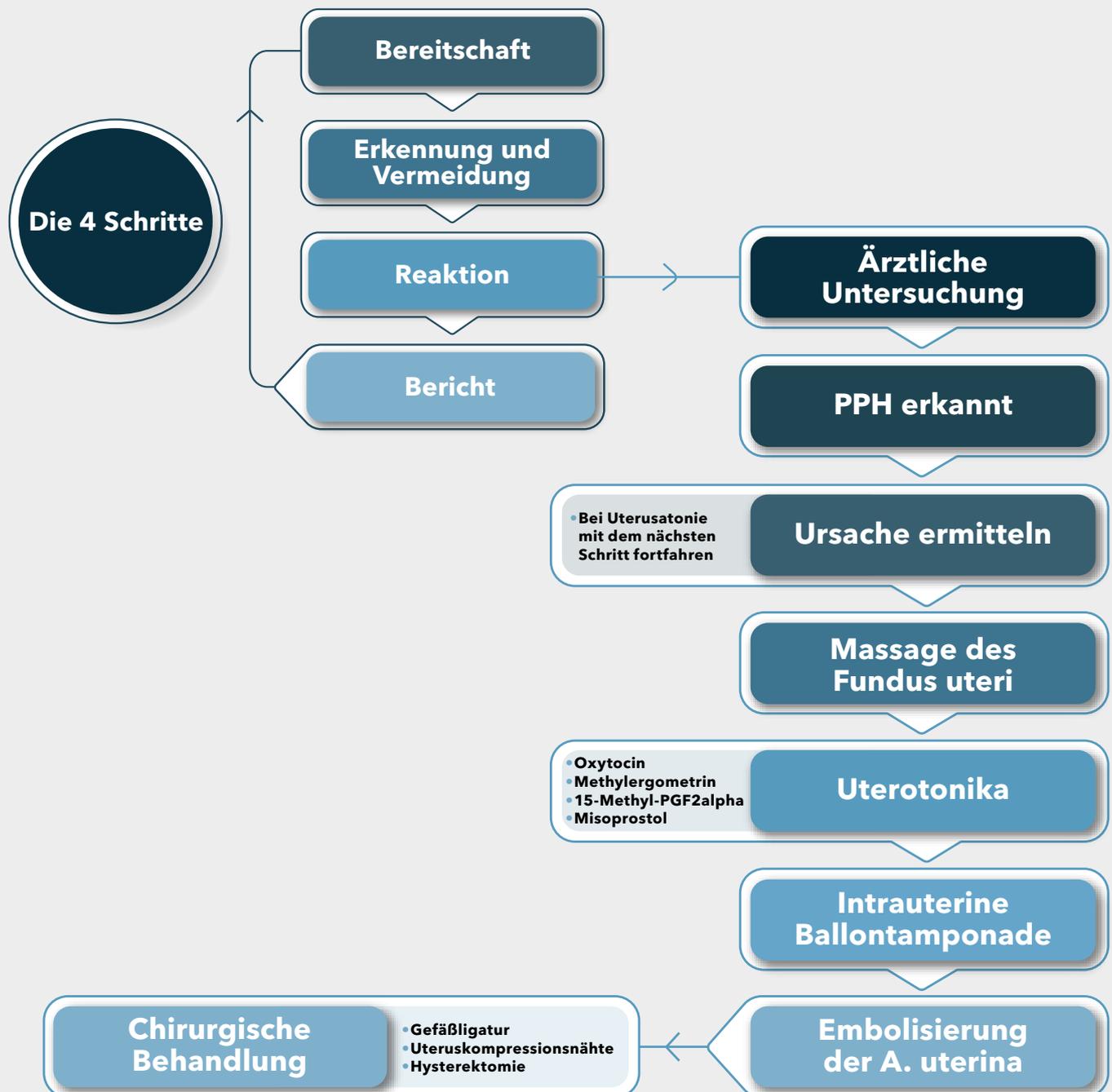

1. California Maternal Quality Care Collaborative. Obstetric hemorrhage emergency management plan: table chart format (Notfallbehandlungsplan für Blutungen in der Geburtshilfe: Tabellenformat). Version 2.0. Veröffentlicht 2014. Abgerufen am 31. August 2016.  
2. Committee on Practice Bulletins-Obstetrics. Practice bulletin no. 183: postpartum hemorrhage. *Obstet Gynecol.* 2017;130(4):e168-e186.  
3. <https://physicians.utah.edu/echo/pdfs/pregnancy-care-didactics/2016-09-09-postpartum-hemorrhage.pdf> (abgerufen am 29. Oktober 2020)



Der Bakri Postpartum-Ballon mit Komponenten für die schnelle Füllung dient zur vorübergehenden Stillung bzw. Reduzierung von postpartalen Blutungen bei bestehender Indikation für eine konservative Behandlung von Uterusblutungen.

Der Bakri Postpartum-Ballon mit Komponenten für die schnelle Füllung wird mit steriler Flüssigkeit inflatiert und übt Druck auf die Uteruswände aus, sodass eine Stillung von postpartalen Blutungen möglich wird.

Der Ballon und der Katheter bestehen zu 100 % aus Silikon.

- Kann nach einer Vaginal- oder Schnittentbindung verwendet werden
- Mit Komponenten für die schnelle Füllung für eine leichtere Inflation des Ballons
- B-Lynch-Kompressionsnähte können angelegt werden, soweit klinisch gerechtfertigt






## Bakri®

POSTPARTUM BALLOON WITH RAPID INSTILLATION COMPONENTS

Dieses Produkt dient zur vorübergehenden Kontrolle bzw. Reduzierung postpartaler Uterusblutungen, wenn eine konservative Behandlung gerechtfertigt ist. Das Set enthält eine Spritze, einen 180-cm-Verlängerungsschlauch mit Beuteldorn und ein Doppelrückschlagventil. Vollständige Angaben zur Verwendung des Produkts sowie zu den Indikationen und Kontraindikationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

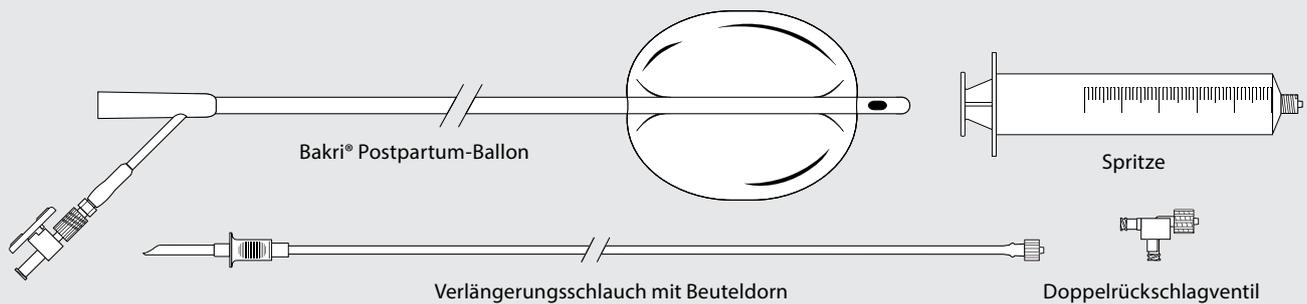

Bestellnummer	Referenznummer	Katheter Fr	Länge cm	Ballonvolumen mL
G24237	J-SOSR-100500	24	54	500

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst.



Weitere Ressourcen erhalten Sie, indem Sie diesen QR-Code scannen.

### Customer Service

EU Website: [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu)  
 EDI: [cookmedical.eu/edi](http://cookmedical.eu/edi)  
 Distributors: +353 61239240, [ssc.distributors@cookmedical.com](mailto:ssc.distributors@cookmedical.com)  
 Austria: +43 179567121, [oe.orders@cookmedical.com](mailto:oe.orders@cookmedical.com)  
 Belgium: +32 27001702, [be.orders@cookmedical.com](mailto:be.orders@cookmedical.com)  
 Denmark: +45 38487607, [da.orders@cookmedical.com](mailto:da.orders@cookmedical.com)  
 Finland: +358 972519996, [fi.orders@cookmedical.com](mailto:fi.orders@cookmedical.com)  
 France: +33 171230269, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Germany: +49 6950072804, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 Hungary: +36 17779199, [hu.orders@cookmedical.com](mailto:hu.orders@cookmedical.com)  
 Iceland: +354 800 7615, [is.orders@cookmedical.com](mailto:is.orders@cookmedical.com)  
 Ireland: +353 61239252, [ie.orders@cookmedical.com](mailto:ie.orders@cookmedical.com)  
 Italy: +39 0269682853, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Netherlands: +31 202013367, [nl.orders@cookmedical.com](mailto:nl.orders@cookmedical.com)  
 Norway: +47 23162968, [no.orders@cookmedical.com](mailto:no.orders@cookmedical.com)  
 Spain: +34 912702691, [es.orders@cookmedical.com](mailto:es.orders@cookmedical.com)  
 Sweden: +46 858769468, [se.orders@cookmedical.com](mailto:se.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - French: +41 448009609, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - Italian: +41 448009609, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - German: +41 448009609, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 United Kingdom: +44 2073654183, [uk.orders@cookmedical.com](mailto:uk.orders@cookmedical.com)

USA Website: [cookmedical.com](http://cookmedical.com)

EDI: [cookmedical.com/edi.do](http://cookmedical.com/edi.do)

#### Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335  
 E-mail: [customersupport@cookmedical.com](mailto:customersupport@cookmedical.com)

#### Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283  
 E-mail: [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4