

Cómo tratar la hemorragia postparto.




Bakri®

POSTPARTUM BALLOON WITH RAPID INSTILLATION COMPONENTS

Una solución sencilla para la hemorragia postparto (HPP)

Consideraciones sobre el procedimiento secuencial para el tratamiento conservador de la HPP resistente a uterotónicos^{1,2,3}

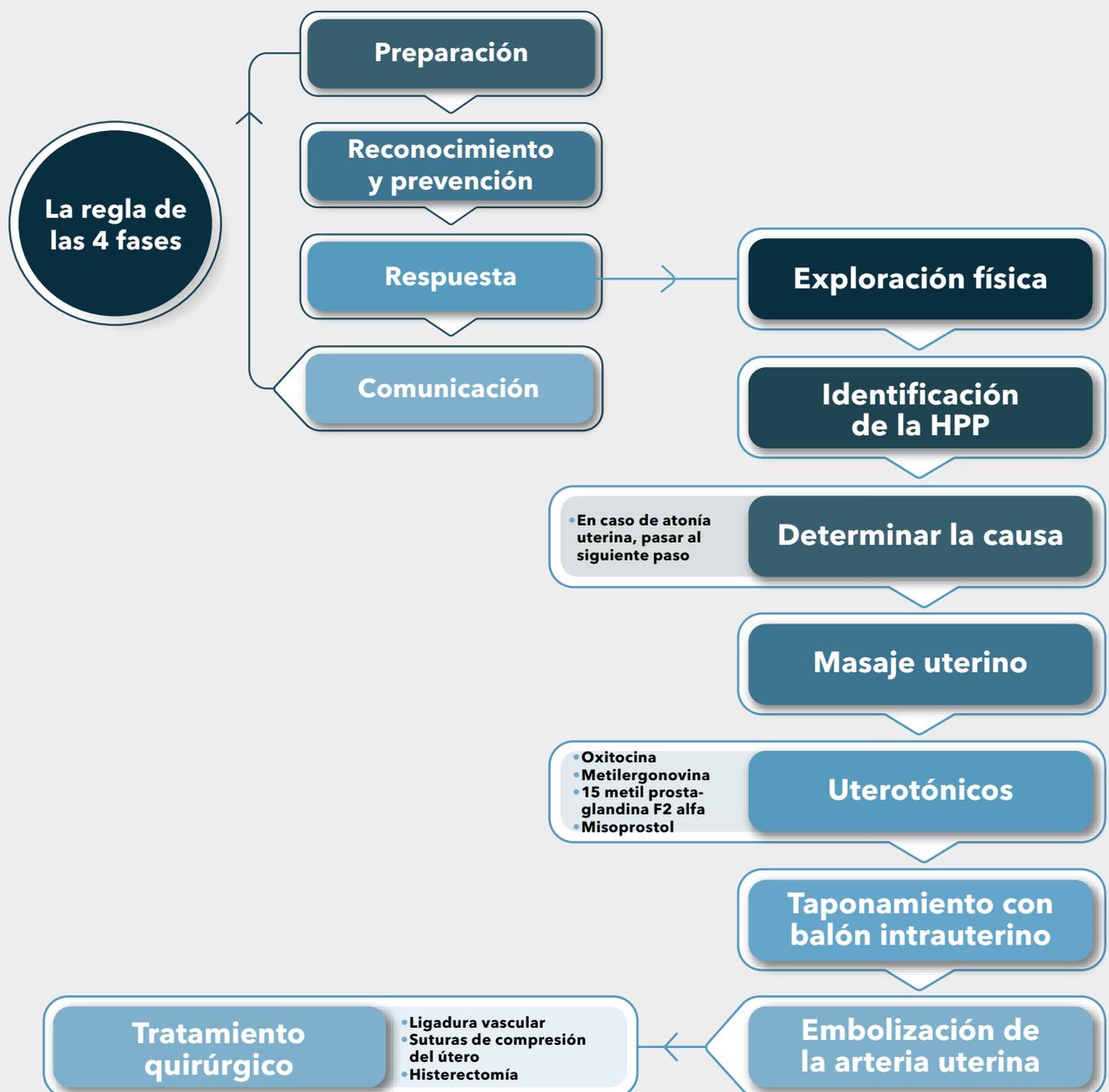

1. California Maternal Quality Care Collaborative. Obstetric hemorrhage emergency management plan: table chart format (Plan de tratamiento de urgencia para hemorragias obstétricas: formato de tabla). Versión 2.0. Publicado en 2014. Último acceso: 31 de agosto de 2016.
2. Committee on Practice Bulletins-Obstetrics. Practice bulletin no. 183: postpartum hemorrhage. *Obstet Gynecol.* 2017;130(4):e168-e186 (Comité encargado de la publicación de boletines especializados en obstetricia. Boletín especializado n.º 183: la hemorragia postparto. *Obstet. Ginecol.*).
3. <https://physicians.utah.edu/echo/pdfs/pregnancy-care-didactics/2016-09.09-postpartum-hemorrhage.pdf> (Último acceso: 29 de octubre de 2020)

El balón de postparto de Bakri con componentes para llenado rápido se utiliza para detener o reducir temporalmente hemorragias uterinas postparto cuando sea adecuado emplear un tratamiento conservador de estas.



Cuando se hincha con líquido estéril, el balón de postparto de Bakri con componentes para llenado rápido aplica presión a las paredes uterinas y puede permitir el tratamiento de la hemorragia postparto.

El balón y el catéter están hechos 100 % de silicona.

- Se puede utilizar después de un parto vaginal o por cesárea
- Incluye componentes para llenado rápido que facilitan el hinchado del balón
- Puede utilizarse con suturas de compresión de B-Lynch si es clínicamente seguro






Bakri®

POSTPARTUM BALLOON WITH RAPID INSTILLATION COMPONENTS

Este dispositivo está indicado para detener o reducir temporalmente hemorragias uterinas postparto cuando sea adecuado emplear un tratamiento conservador. El equipo incluye una jeringa, un tubo de extensión de 180 cm de largo con púa para bolsa y una válvula de no retorno. Para obtener información completa sobre el uso, las indicaciones y las contraindicaciones del producto, consulte las instrucciones de uso.

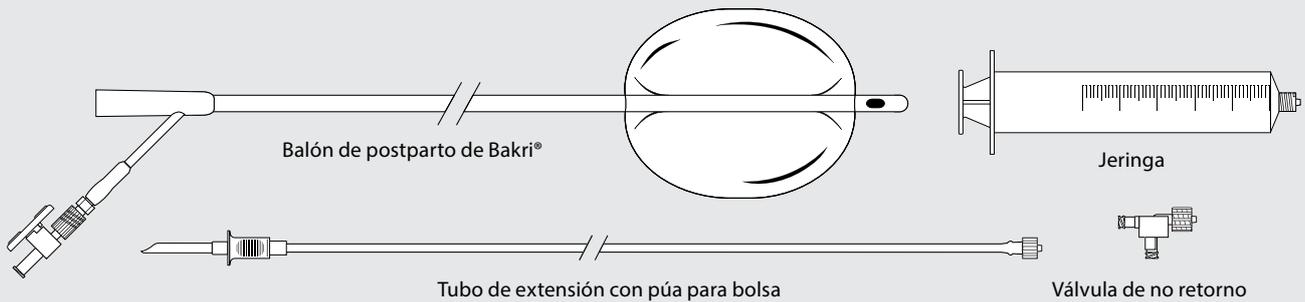

Referencia	Referencia de producto	Tamaño del catéter Fr	Longitud cm	Volumen del balón mL
G24237	J-SOSR-100500	24	54	500

Algunos productos o referencias de producto pueden no estar disponibles en todos los mercados. Consulte los detalles con su representante local o centro de atención al cliente de Cook.



Escanee este código QR para ver otros recursos.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi
Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4