

Post-partum bleeding beheersen.




Bakri®

POSTPARTUM BALLOON WITH RAPID INSTILLATION COMPONENTS

Een eenvoudige oplossing voor post-partum bloeding

Procedurele stappen bij de conservatieve behandeling van uterotonica-resistente post-partum bloeding^{1,2,3}

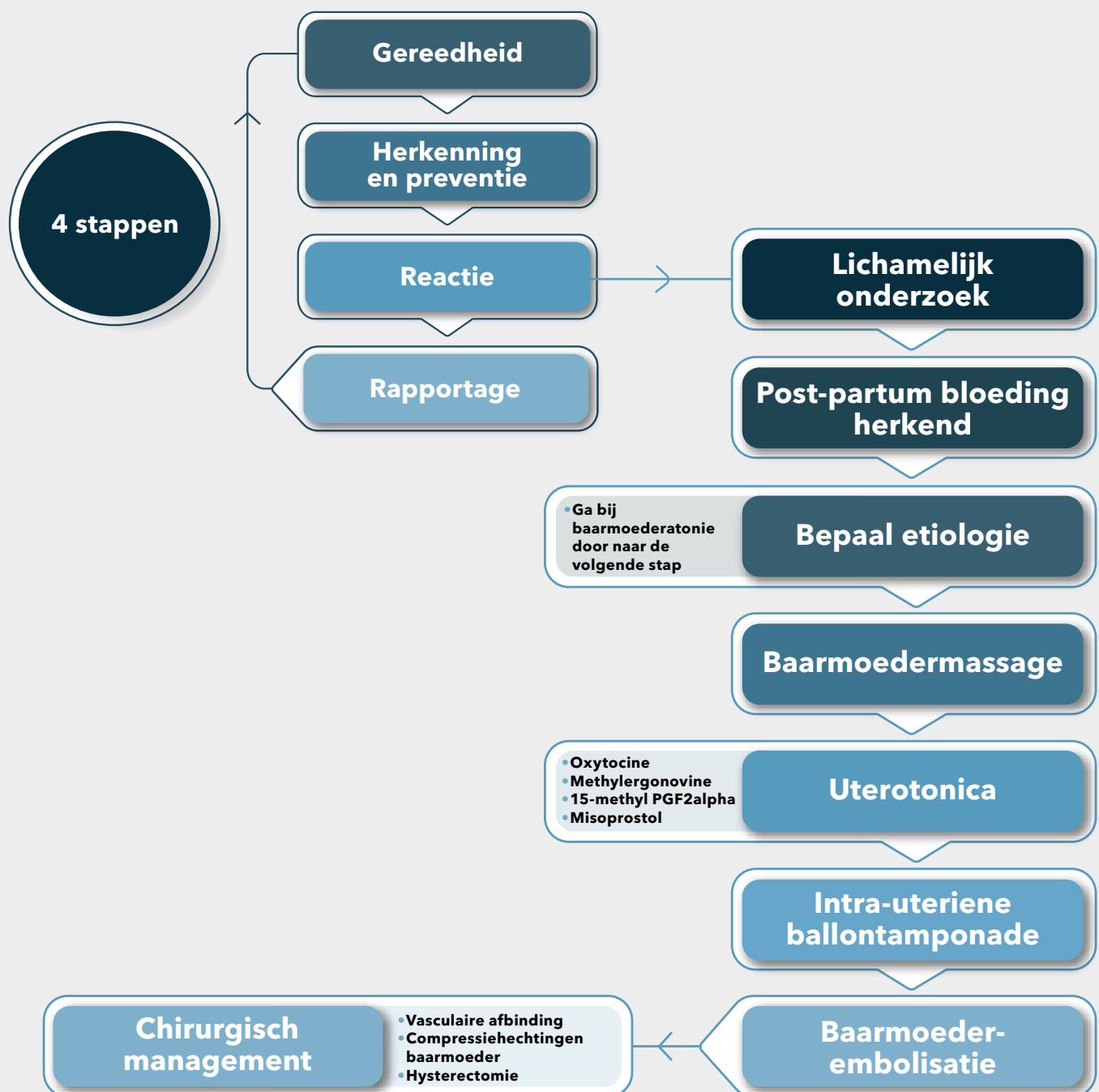

1. California Maternal Quality Care Collaborative. Obstetric hemorrhage emergency management plan: table chart format (plan spoedeisende behandeling van obstetrische bloedingen: tabelformaat). Versie 2.0. Gepubliceerd 2014. Geraadpleegd op 31 augustus 2016.

2. Committee on Practice Bulletins-Obstetrics. Practice bulletin no. 183: postpartum hemorrhage. *Obstet Gynecol.* 2017;130(4):e168-e186.

3. <https://physicians.utah.edu/echo/pdfs/pregnancy-care-didactics/2016-09.09-postpartum-hemorrhage.pdf> (accessed 29th October 2020)

De Bakri-post-partumballon met rapid instillation component wordt gebruikt om fluxus post partum tijdelijk te beheersen of te verminderen wanneer een conservatieve behandeling van uterusbloedingen verantwoord is.



Als de Bakri-post-partumballon met rapid instillation component gevuld wordt met een steriele vloeistof, oefent de ballon druk uit op de baarmoederwand, waardoor de post-partum bloeding mogelijk wordt beheerst.

De ballon en katheter zijn vervaardigd van 100% silicone.

- Kan worden gebruikt na een vaginale bevalling of een bevalling middels keizersnede
- Inclusief rapid instillation component om het vullen van de ballon te vergemakkelijken
- Kan worden gebruikt met B-Lynch-compressiehechtingen indien klinisch verantwoord






Bakri®

POSTPARTUM BALLOON WITH RAPID INSTILLATION COMPONENTS

Dit hulpmiddel is bedoeld om post-partum bloedingen uit de baarmoeder tijdelijk te beheersen of te verminderen wanneer conservatieve behandeling verantwoord is. De set bestaat uit een injectiespuit van, een verlengslang van 180 cm met spike voor de zak en een dubbele keerklep. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor volledige informatie over het productgebruik, indicaties en contra-indicaties.

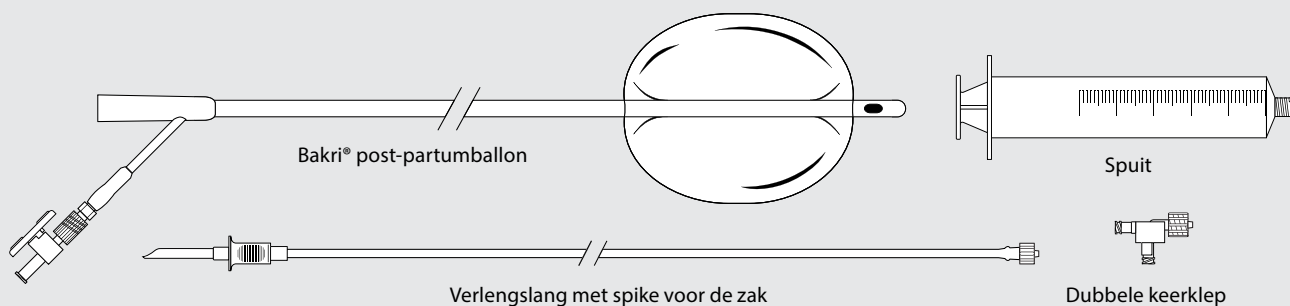

Bestelnummer	Referentieonderdeelnummer	Katheter Fr	Lengte cm	Balloninhoud mL
G24237	J-SOSR-100500	24	54	500

Het kan zijn dat sommige producten of artikelnummers niet in alle landen verkrijgbaar zijn. Neem voor details contact op met de plaatselijke vertegenwoordiger of klantenservice van Cook.



Scan deze QR-code om andere hulpmiddelen weer te geven.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4