

Una opción no farmacéutica
para la dilatación preinducción.






Cervical Ripening Balloon

WITH STYLET




El balón para maduración del cuello uterino Cook es un catéter de doble balón de silicona con un estilete maleable. Es una opción no farmacéutica para la dilatación del canal cervicouterino antes de la inducción del parto a término cuando las condiciones del cuello uterino no son favorables para la inducción.

Técnica de dilatación cervical

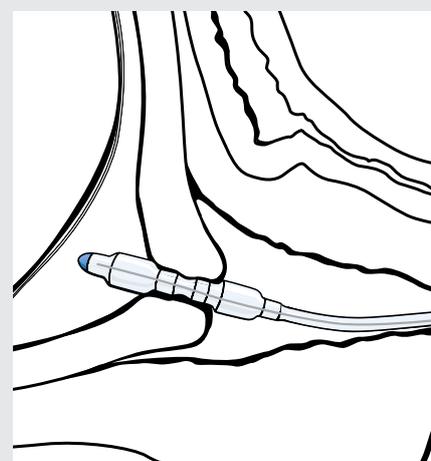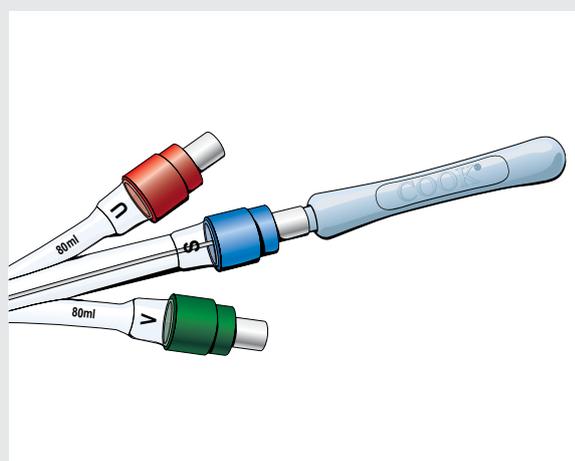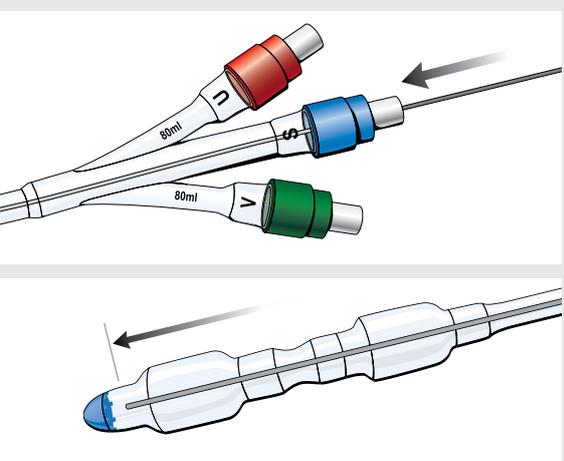

1 Asiente el mango del estilete firmemente en el interior del orificio azul marcado con la letra "S".

2 Utilice el balón de maduración del cuello uterino. **Nota:** una vez atravesado el canal cervicouterino, tire del estilete por encima del nivel de la apertura uterina antes de introducir más el catéter.

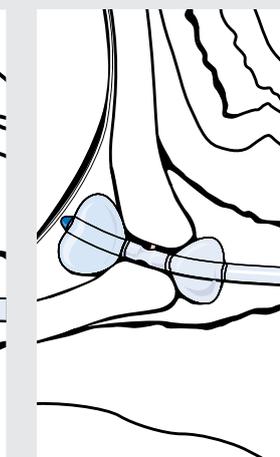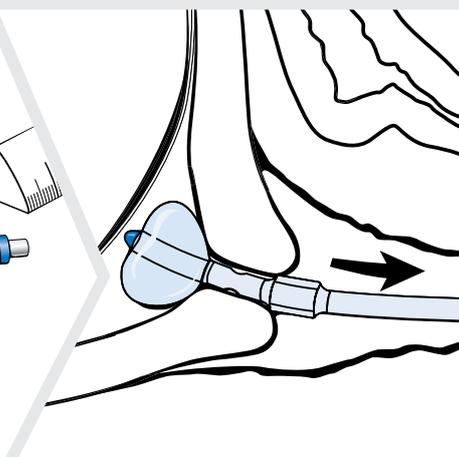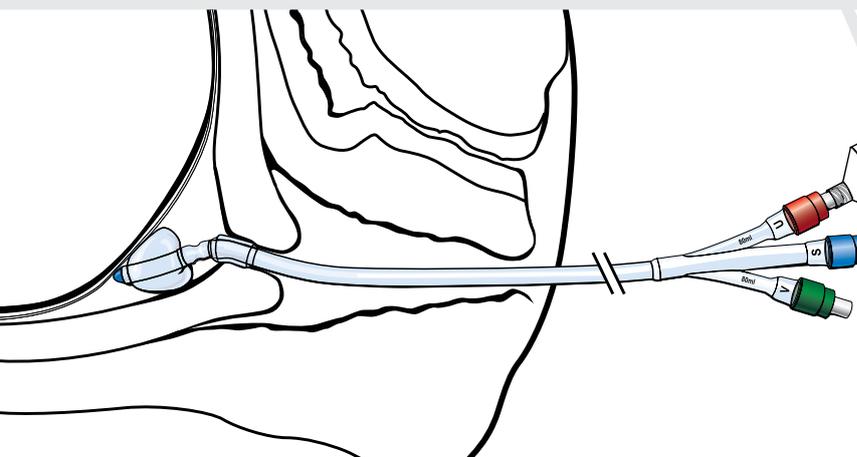



4 Hinche el balón uterino con 40 mL de solución salina. Después de hinchar el balón uterino, tire del dispositivo hacia atrás hasta que el balón toque el orificio cervical interno.

5 El balón vaginal externo y debe hincharse.

Consulte las instrucciones de uso para obtener información detallada sobre el uso del producto, además de una lista completa de



El Cervical Ripening Balloon with Stylet

- Es una opción no farmacéutica para la dilatación.
- Se asocia con tasas reducidas de taquisistolia,¹ actividad uterina excesiva²; acidemia fetal,³ y de ingresos en la unidad de cuidados intensivos neonatal² cuando se compara con la prostaglandina E₂.
- Se asocia con mayores tasas de parto vaginal en un periodo de 24 horas^{1,3} y más partos vaginales no asistidos.³
- Se ha demostrado que mejora los índices de Bishop en mujeres nulíparas⁵ y mujeres multíparas⁴ cuando se compara con los catéteres de balón de Foley.
- Su acción mecánica se detiene al retirar el dispositivo.
- No requiere tracción.
- Crea una presión continua en los orificios cervicales interno y externo durante todo el proceso de dilatación.
- Incorpora un estilete que está contenido completamente dentro del catéter.

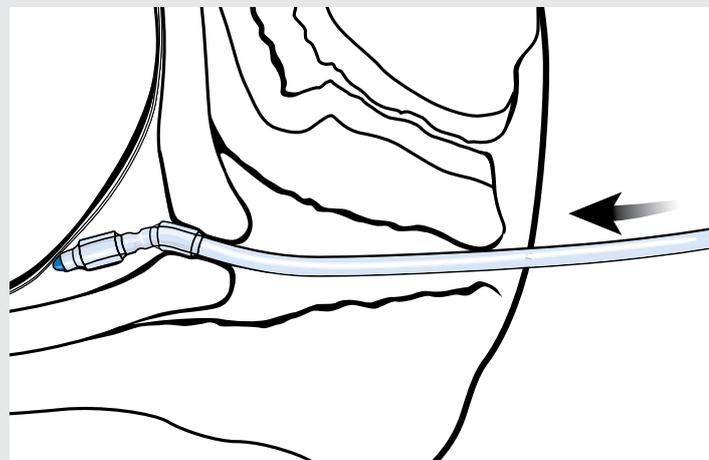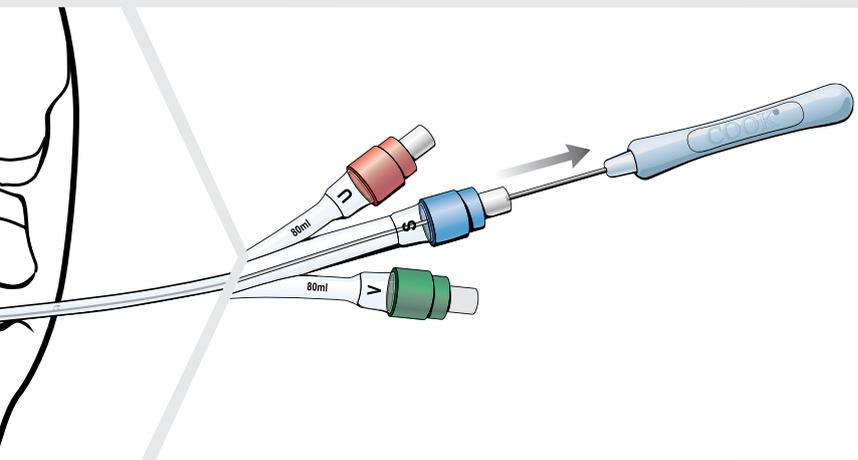

...el cuello uterino con estilete para atravesar el
...do el cuello uterino y cuando el balón uterino esté
...erina interna (orificio cervical interno), retire el
...éter.


3 Haga avanzar el balón para maduración
del cuello uterino a través del cuello uterino
hasta que ambos balones se hayan introducido
en el canal cervicouterino.

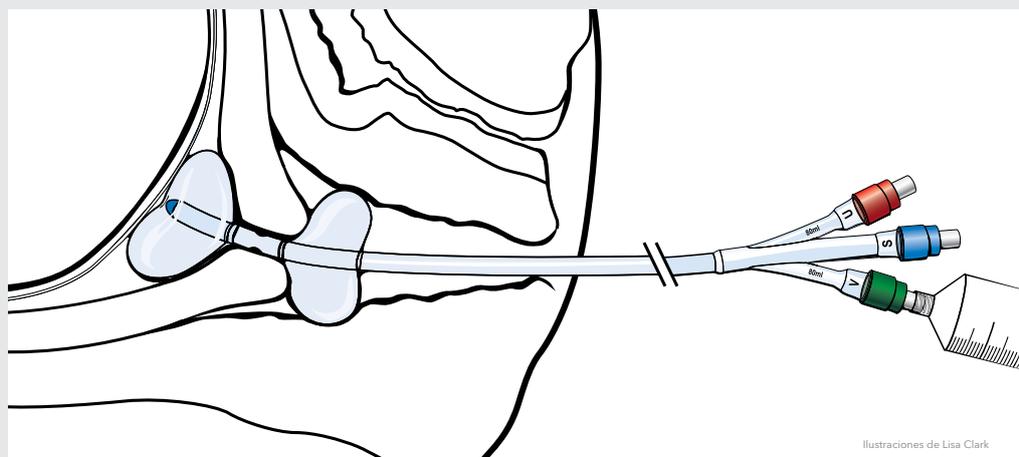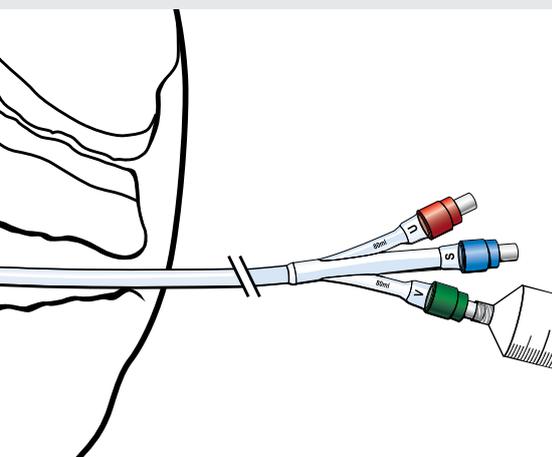

...ahora es visible fuera del orificio cervical
...arse con 20 mL de solución salina.

6 Cuando los balones se encuentren a ambos lados del cuello uterino y el
dispositivo se haya fijado en su sitio, añada más líquido a cada balón por turnos,
hasta que cada uno contenga un máximo de 80 mL de líquido. Elija el momento
para colocar el globo de forma que no esté colocado más de 12 horas antes de
inducir el parto activo.


...e precauciones, advertencias y contraindicaciones.

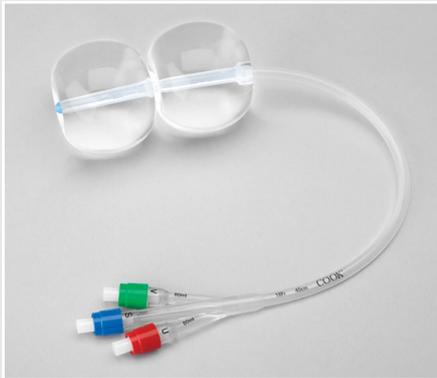

Cervical Ripening Balloon

WITH STYLET

El balón para maduración del cuello uterino Cook es un catéter de doble balón de silicona con un estilete maleable. Su uso previsto es la dilatación mecánica del canal cervicouterino antes de la inducción del parto a término cuando el cuello uterino no está en condiciones favorables para la inducción.

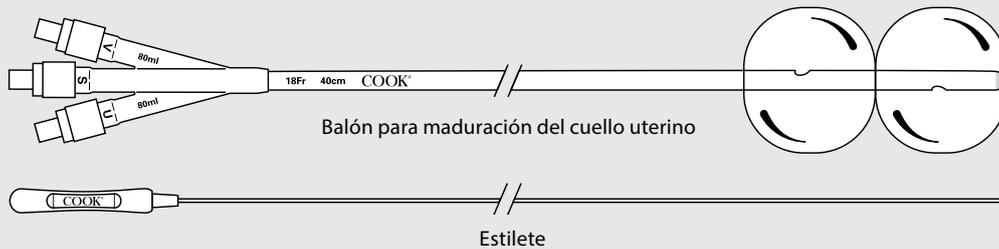

Número de pedido	Número de referencia de producto	Fr	Longitud (cm)	Volumen del balón (mL)
G19891	J-CRBS-184000	18	40	80

Es posible que algunos productos o números de referencias de productos no estén disponibles en todos los mercados. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local de Cook o con el Departamento de Entrega y Atención al Cliente.

Consulte las instrucciones de uso para obtener información completa sobre el producto y la prescripción en detalle, incluidas las indicaciones, contraindicaciones, avisos, precauciones y posibles acontecimientos adversos. Consulte la información sobre los riesgos del producto en las instrucciones de uso en cookmedical.eu.

Referencias

- Cromi A, Ghezzi F, Uccella S, et al. A randomized trial of preinduction cervical ripening: dinoprostone vaginal insert versus double-balloon catheter. *Am J Obstet Gynecol.* 2012;207(2):125.e1-e7. doi:10.1016/j.ajog.2012.05.020.
- Du YM, Zhu LY, Cui LN, et al. Double-balloon catheter versus prostaglandin E2 for cervical ripening and labour induction: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. *BJOG.* 2017;124(6):891-899.
- Brown J, Beckman M. Induction of labour using balloon catheter and prostaglandin gel. *Aust N Z J Obstet Gynaecol.* 2017;57(1):68-73.
- Solt I, Frank Wolf M, Ben-Haroush S, et al. Foley catheter versus cervical double balloon for labor induction: a prospective randomized study. *J Matern Fetal Neonatal Med.* 2021;34(7):1034-1041.
- Hoppe KK, Schiff MA, Peterson SE, et al. 30 mL single- versus 80 mL double-balloon catheter for pre-induction cervical ripening: a randomized controlled trial. *J Matern Fetal Neonatal Med.* 2016;29(12):1919-1925. doi:10.3109/14767058.2015.1067297.



Escanee este código de QR para ver otros recursos.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi
Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4