

Un'opzione non farmacologica
per la dilatazione pre-induzione.




Cervical Ripening Balloon

WITH STYLET


Il dispositivo a palloncini per maturazione cervicale Cook è costituito da un catetere a doppio palloncino in silicone e da un mandrino modellabile. È un'opzione non farmacologica per la dilatazione del canale cervicale prima di indurre il travaglio nel parto a termine, qualora la cervice si presenti impreparata per l'induzione.

Tecnica per dilatazione cervicale

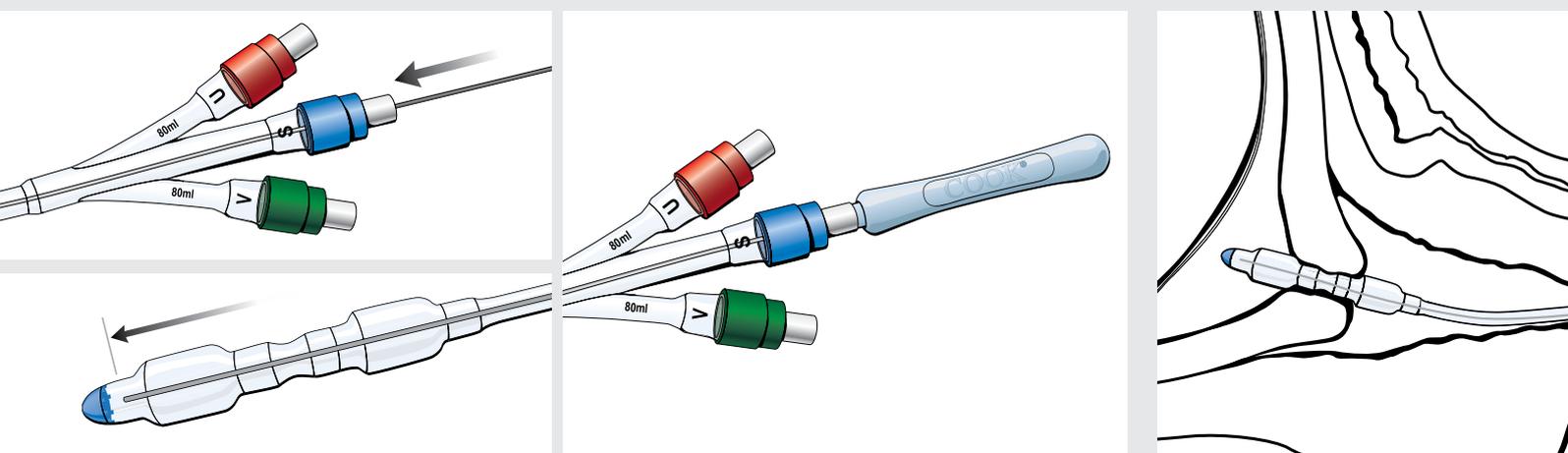

1 Fissare saldamente l'impugnatura del mandrino nel raccordo blu contrassegnato dalla lettera "S".

2 Usare il mandrino con il dispositivo per attraversare la cervice. **Nota:** una volta che il palloncino è in posizione nel utero al di sopra dell'ostio uterino interno, ritrarre ulteriormente il catetere.

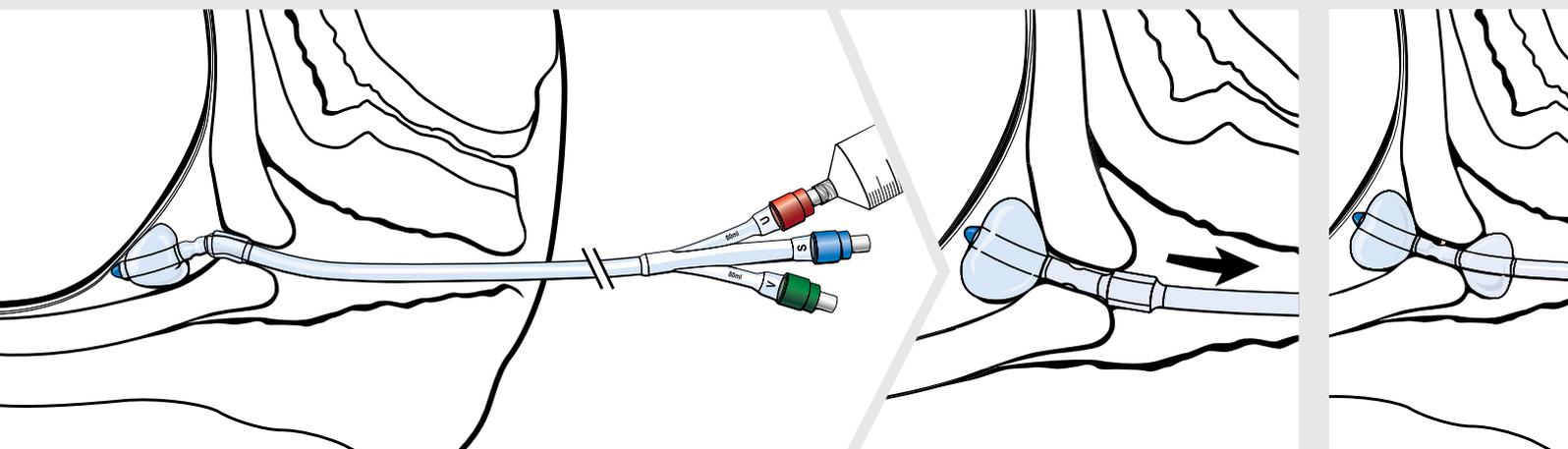



4 Gonfiare il palloncino uterino con 40 mL di soluzione fisiologica. Una volta gonfiato il palloncino uterino, ritrarre il dispositivo fino a portare il palloncino a contatto con l'ostio cervicale interno.

5 Il palloncino vaginale è in contatto con il cervicale esterno; gonfiare il palloncino cervicale esterno.

Per informazioni esaurienti sull'uso del prodotto e per un elenco completo di precauzioni, avvertenze e controindicazioni, consultare il foglio illustrativo.



Dispositivo a palloncini per maturazione cervicale con mandrino

- È un'opzione per la dilatazione non farmacologica.
- È associato a una minore incidenza di tachisistolìa¹, attività uterina eccessiva², acidemia fetale³ e necessità di ricoveri in unità di terapia intensiva neonatale² rispetto all'induzione con prostaglandina E₂.
- È associato a una maggiore percentuale di parti vaginali entro le 24 ore^{1,3} e a un numero maggiore di parti vaginali non assistiti.³
- Ha dimostrato di migliorare il punteggio di Bishop nelle pazienti nullipare⁵ e nelle pazienti pluripare⁴ rispetto ai cateteri Foley a palloncino.
- Cessa la propria azione meccanica non appena viene rimosso.
- Non richiede trazione.
- Crea una pressione stabile sull'ostio interno ed esterno per l'intero processo di dilatazione.
- Ha un mandrino totalmente contenuto all'interno del catetere.

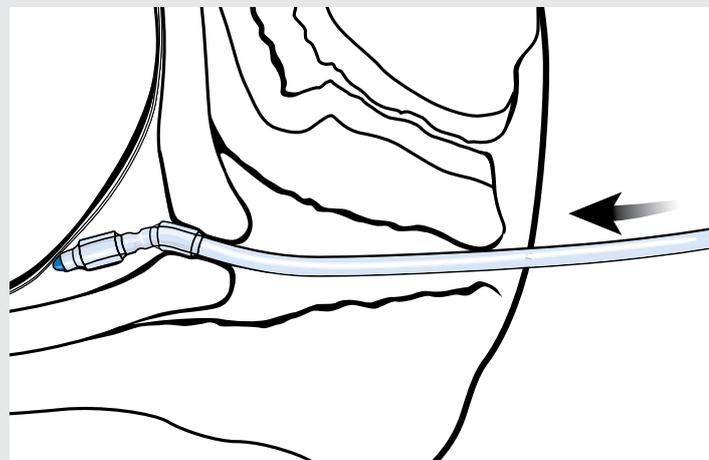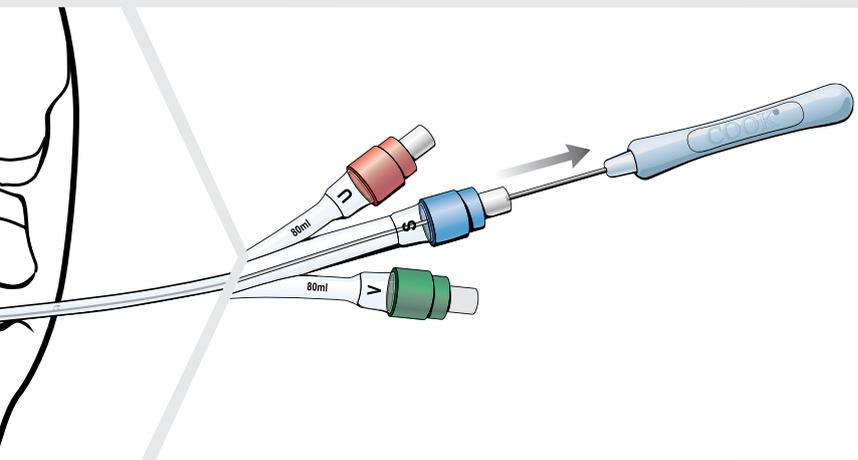

Dispositivo a palloncini per maturazione cervicale per
che ha attraversato la cervice e portato il palloncino
interno, estrarre il mandrino prima di fare avanzare

3 Far avanzare il dispositivo a palloncini per
maturazione cervicale attraverso la cervice, fino
all'ingresso di entrambi i palloncini nel canale cervicale.

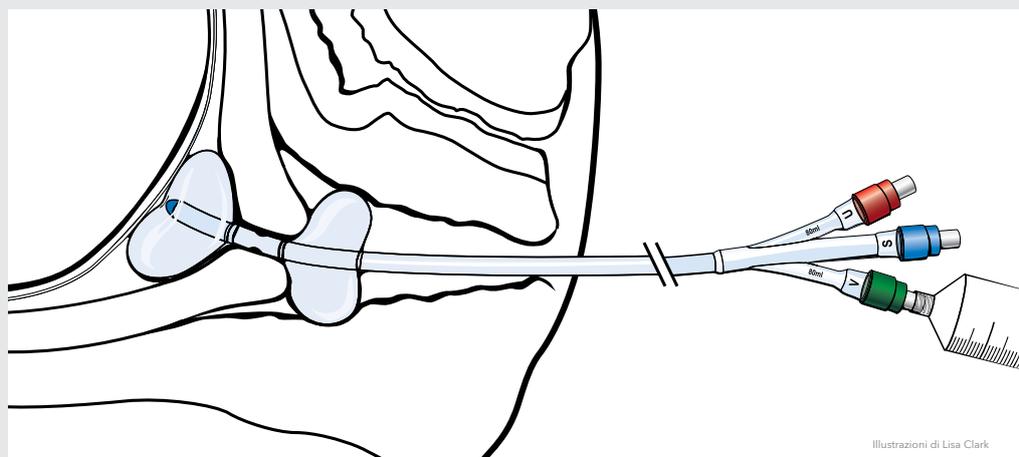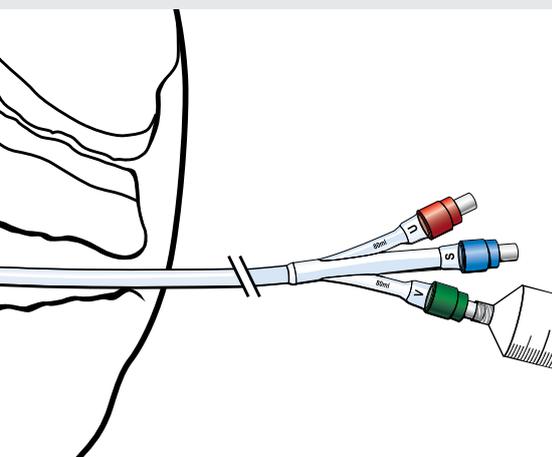


Illustrazioni di Lisa Clark

finale è ora visibile all'esterno dell'ostio
infiarlo con 20 mL di soluzione fisiologica.

6 Una volta che i palloncini sono posizionati su entrambi i lati della cervice
e il dispositivo è stato fissato in posizione, immettere più liquido in ogni
palloncino, a turno, fino a quando ciascuno di essi conterrà un massimo di 80 mL
di liquido. Calcolare i tempi di inserimento del dispositivo a palloncini in modo
da non lasciarlo in sede per più di 12 ore prima di indurre il travaglio attivo.

are le Istruzioni per l'uso.

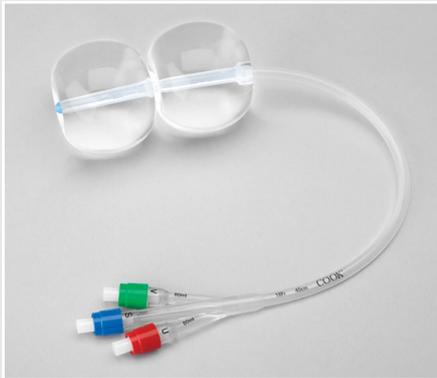

Cervical Ripening Balloon

WITH STYLET

Il dispositivo a palloncini per maturazione cervicale Cook è costituito da un catetere a doppio palloncino in silicone e da un mandrino modellabile. È indicato per la dilatazione meccanica del canale cervicale prima di indurre il travaglio nel parto a termine, qualora la cervice si presenti impreparata per l'induzione.



Dispositivo a palloncini per maturazione cervicale

Mandrino

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Fr	Lunghezza cm	Volume del palloncino mL
G19891	J-CRBS-184000	18	40	80

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Delivery per maggiori informazioni.

Per informazioni esaurienti sul prodotto e sulla prescrizione, comprese indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e possibili eventi avversi, consultare le Istruzioni per l'uso. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle Istruzioni per l'uso all'indirizzo cookmedical.eu.



Eseguire la scansione di questo codice QR per visualizzare altre risorse.

Bibliografia

1. Cromi A, Ghezzi F, Uccella S, et al. A randomized trial of preinduction cervical ripening: dinoprostone vaginal insert versus double-balloon catheter. *Am J Obstet Gynecol.* 2012;207(2):125.e1-e7. doi:10.1016/j.ajog.2012.05.020.
2. Du YM, Zhu LY, Cui LN, et al. Double-balloon catheter versus prostaglandin E2 for cervical ripening and labour induction: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. *BJOG.* 2017;124(6):891-899.
3. Brown J, Beckman M. Induction of labour using balloon catheter and prostaglandin gel. *Aust N Z J Obstet Gynaecol.* 2017;57(1):68-73.
4. Solt I, Frank Wolf M, Ben-Haroush S, et al. Foley catheter versus cervical double balloon for labor induction: a prospective randomized study. *J Matern Fetal Neonatal Med.* 2021;34(7):1034-1041.
5. Hoppe KK, Schiff MA, Peterson SE, et al. 30 mL single-versus 80 mL double-balloon catheter for pre-induction cervical ripening: a randomized controlled trial. *J Matern Fetal Neonatal Med.* 2016;29(12):1919-1925. doi:10.3109/14767058.2015.1067297.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4