
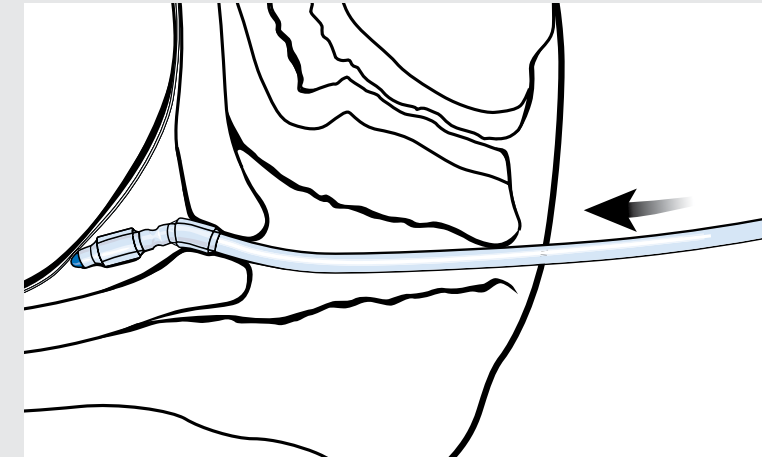
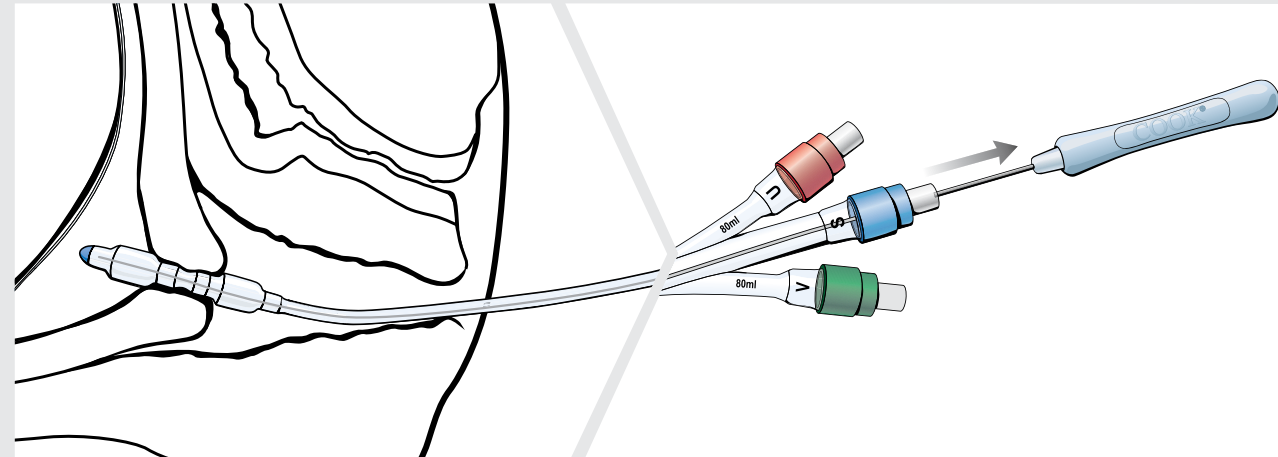
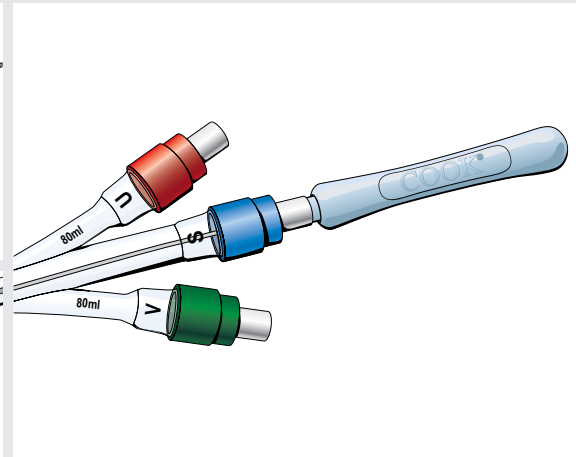


Cervical Ripening Balloon

WITH STYLET





Technik für die Zervixdilatation

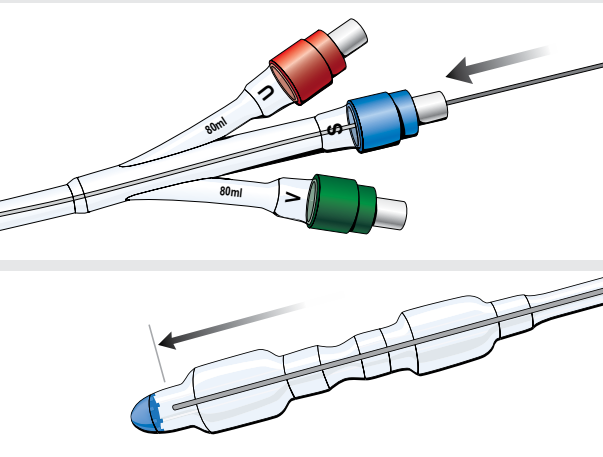

1 Den Mandringriff fest in den blauen Anschluss mit der Bezeichnung „S“ einsetzen.

2 Zur Durchquerung der Zervix den Mandrin zusammen mit dem Ballon zur Zervixreifung verwenden.
Hinweis: Sobald die Zervix durchquert wurde und der Uterusballon über dem Niveau der inneren Uterusöffnung (innerer Muttermund) liegt, den Mandrin vor dem weiteren Vorschieben des Katheters entfernen.

3 Den Ballon zur Zervixreifung durch die Zervix vorschieben, bis sich beide Ballons im Zervixkanal befinden.

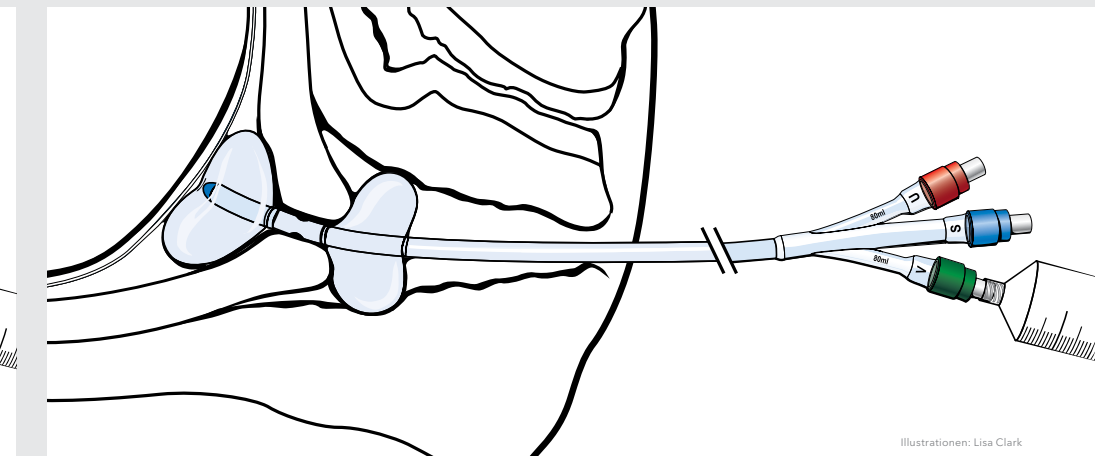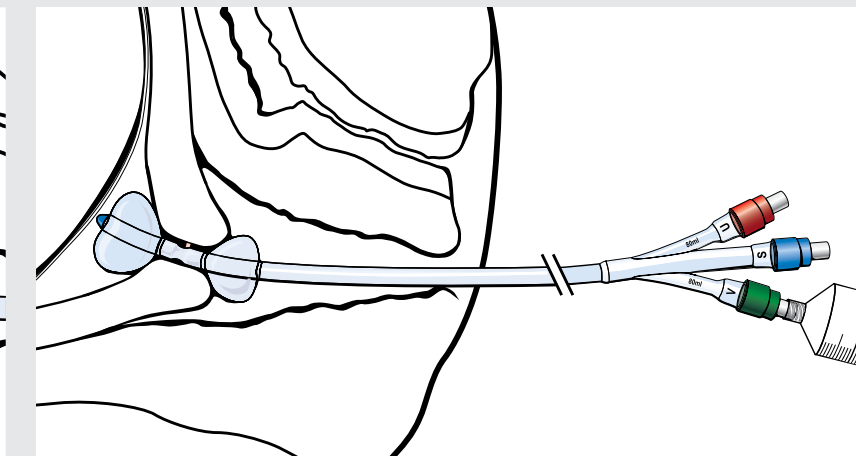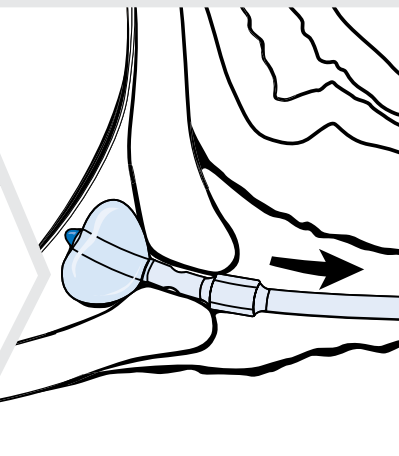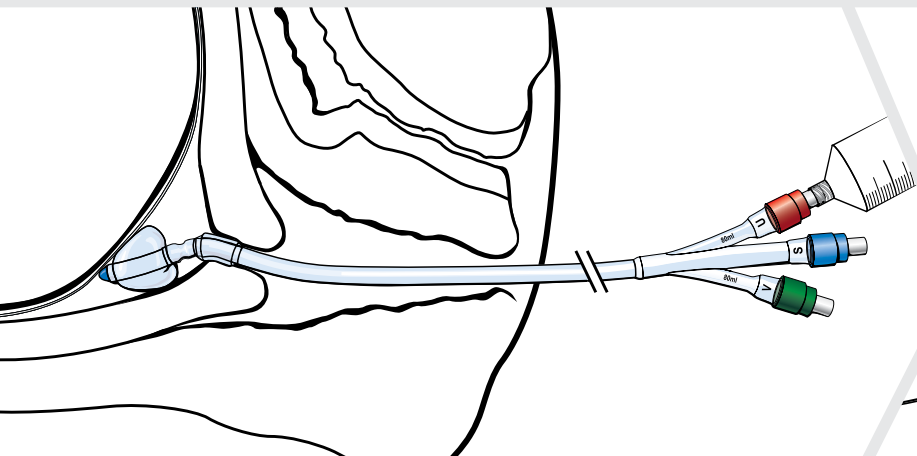

4 Den Uterusballon mit 40 mL Kochsalzlösung füllen. Sobald der Uterusballon gefüllt wurde, das Instrument zurückziehen, bis der Ballon am inneren Muttermund anliegt.

5 Der Vaginalballon ist jetzt außerhalb des äußeren Muttermunds sichtbar und sollte mit 20 mL Kochsalzlösung gefüllt werden.

6 Sobald sich die Ballons auf beiden Seiten der Zervix befinden und das Instrument fixiert wurde, nacheinander mehr Flüssigkeit in jeden Ballon geben, bis jeder Ballon maximal 80 mL Flüssigkeit enthält. Die Platzierung der Ballons sollte im zeitlichen Abstand von maximal 12 Stunden vor der aktiven Geburtseinleitung erfolgen.

Die vollständigen Produkt- und Verschreibungsinformationen einschließlich Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und möglichen unerwünschten Ereignissen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung. Lesen Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.