




Cervical Ripening Balloon

WITH STYLET


Técnica de dilatación cervical

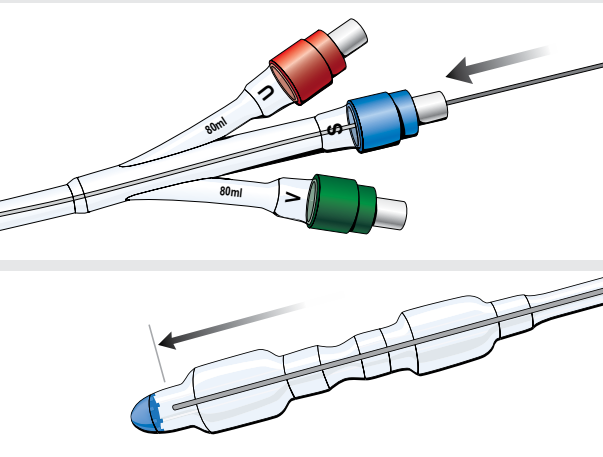


1 Asiente el mango del estilete firmemente en el interior del orificio azul marcado con la letra "S".

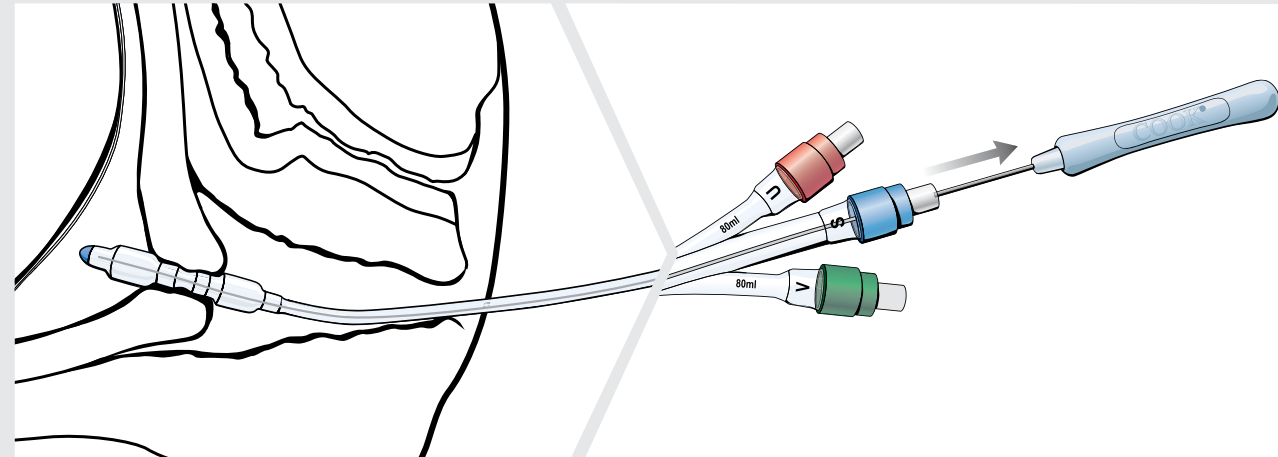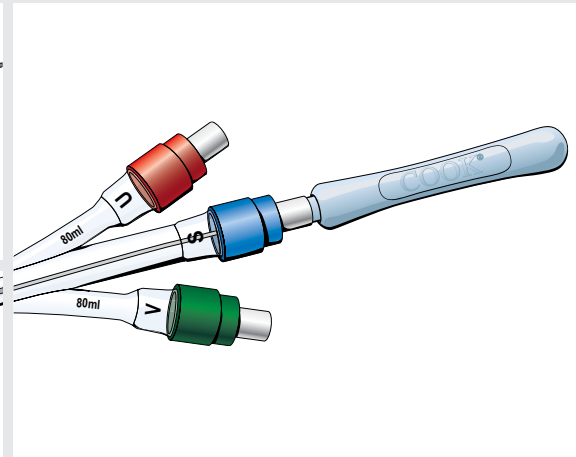



2 Utilice el balón de maduración del cuello uterino con estilete para atravesar el cuello uterino. **Nota:** una vez atravesado el cuello uterino y cuando el balón uterino esté por encima del nivel de la abertura uterina interna (orificio cervical interno), retire el estilete antes de introducir más el catéter.

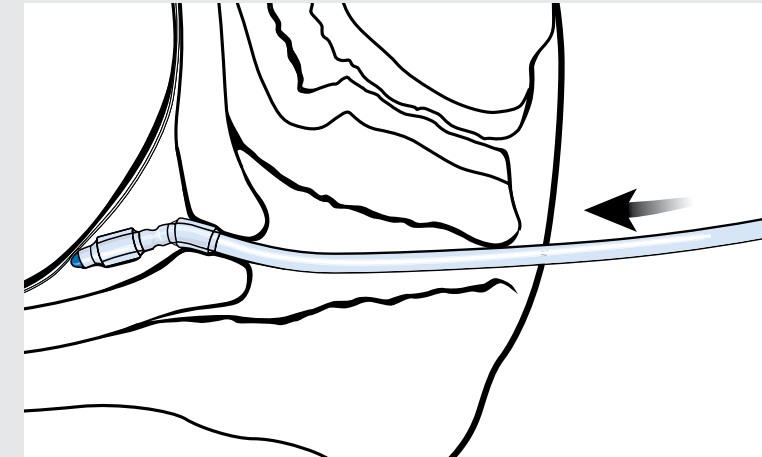


3 Haga avanzar el balón para maduración del cuello uterino a través del cuello uterino hasta que ambos balones se hayan introducido en el canal cervicouterino.

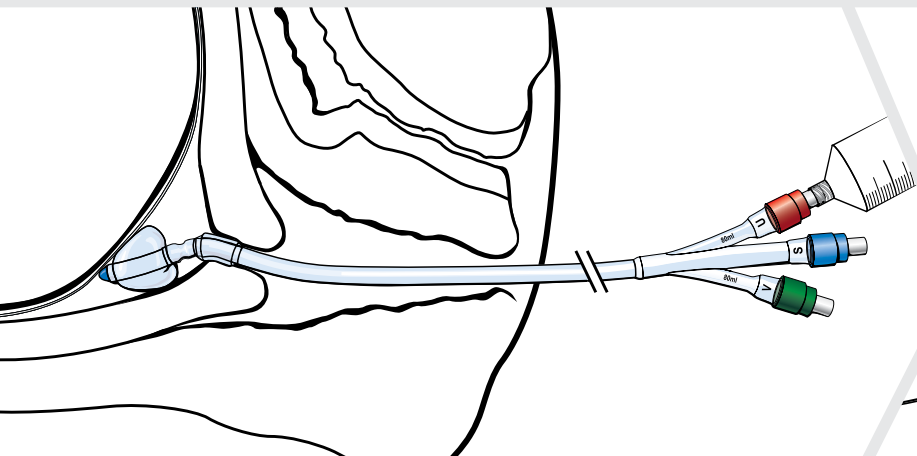

4 Hinche el balón uterino con 40 mL de solución salina. Después de hinchar el balón uterino, tire del dispositivo hacia atrás hasta que el balón toque el orificio cervical interno.

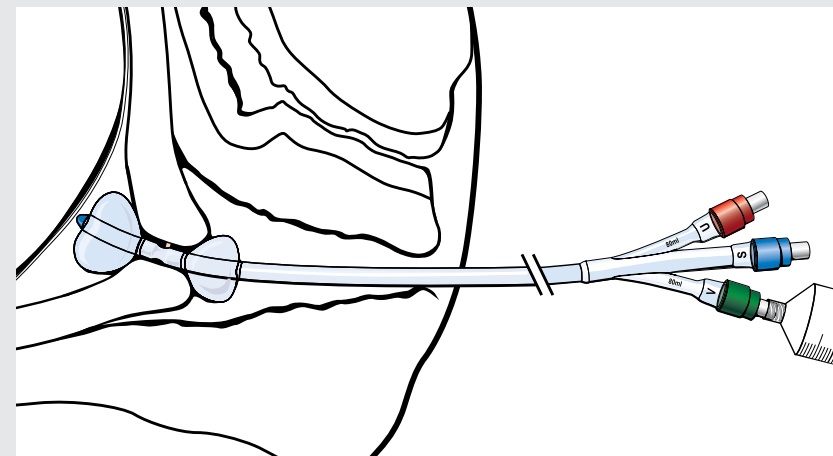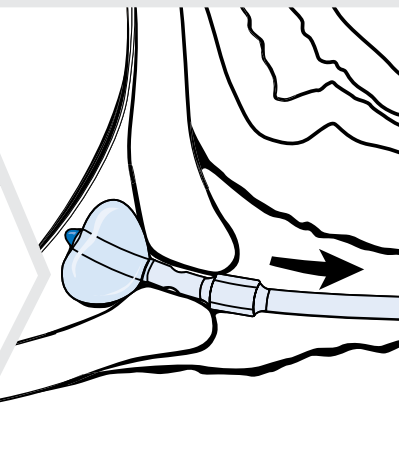

5 El balón vaginal ahora es visible fuera del orificio cervical externo y debe hincharse con 20 mL de solución salina.

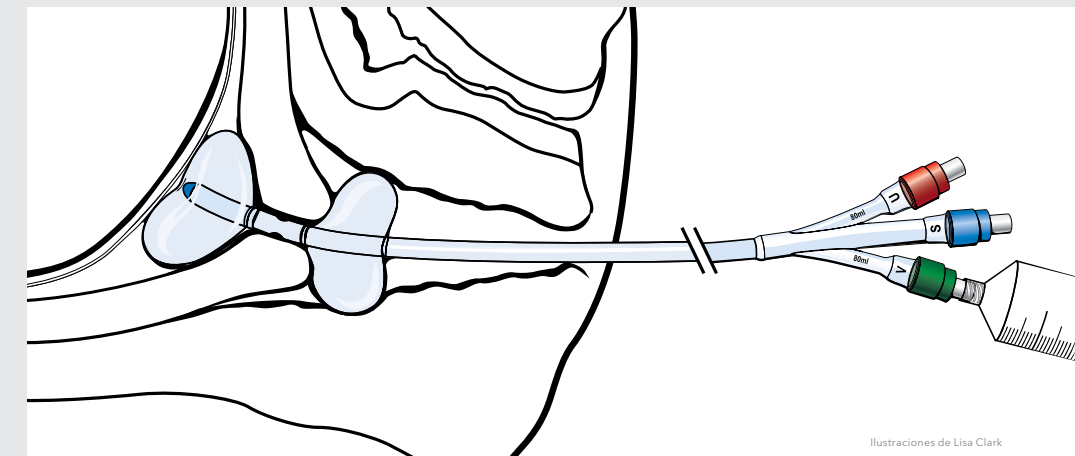

6 Cuando los balones se encuentran a ambos lados del cuello uterino y el dispositivo se haya fijado en su sitio, añada más líquido a cada balón por turnos, hasta que cada uno contenga un máximo de 80 mL de líquido. Elija el momento para colocar el globo de forma que no esté colocado más de 12 horas antes de inducir el parto activo.

Consulte las instrucciones de uso para obtener información completa sobre el producto y la prescripción en detalle, incluidas las indicaciones, contraindicaciones, avisos, precauciones y posibles acontecimientos adversos. Consulte la información sobre los riesgos del producto en las instrucciones de uso en cookmedical.eu.