


Überwinden Sie die Herausforderungen
der urethralen Dilatation bei Männern.

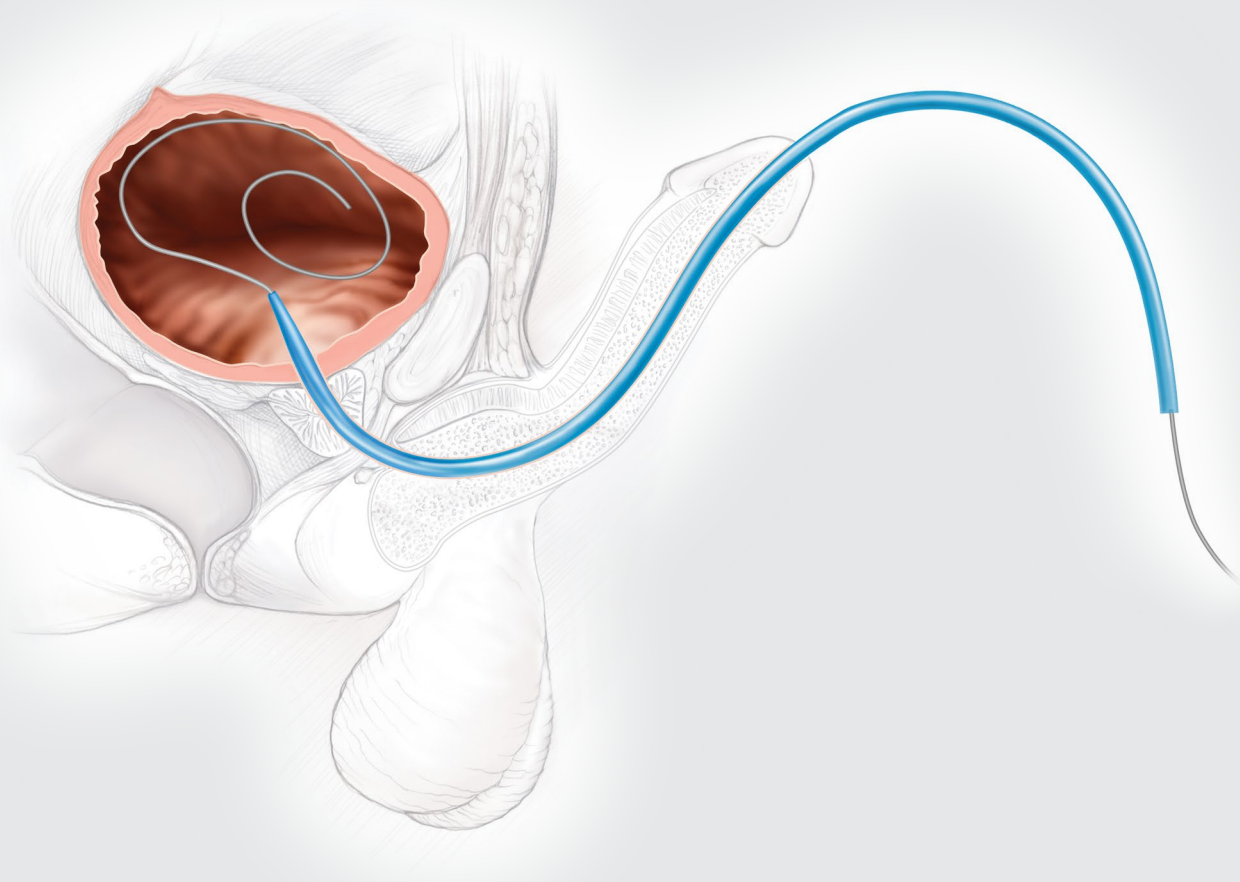


S~Curve®
URETHRAL DILATOR SET

S~Curve®


URETHRAL DILATOR SET

Die anatomisch geformten S~Curve Urethra-Dilatatoren unterstützen die natürliche Krümmung der männlichen Urethra.

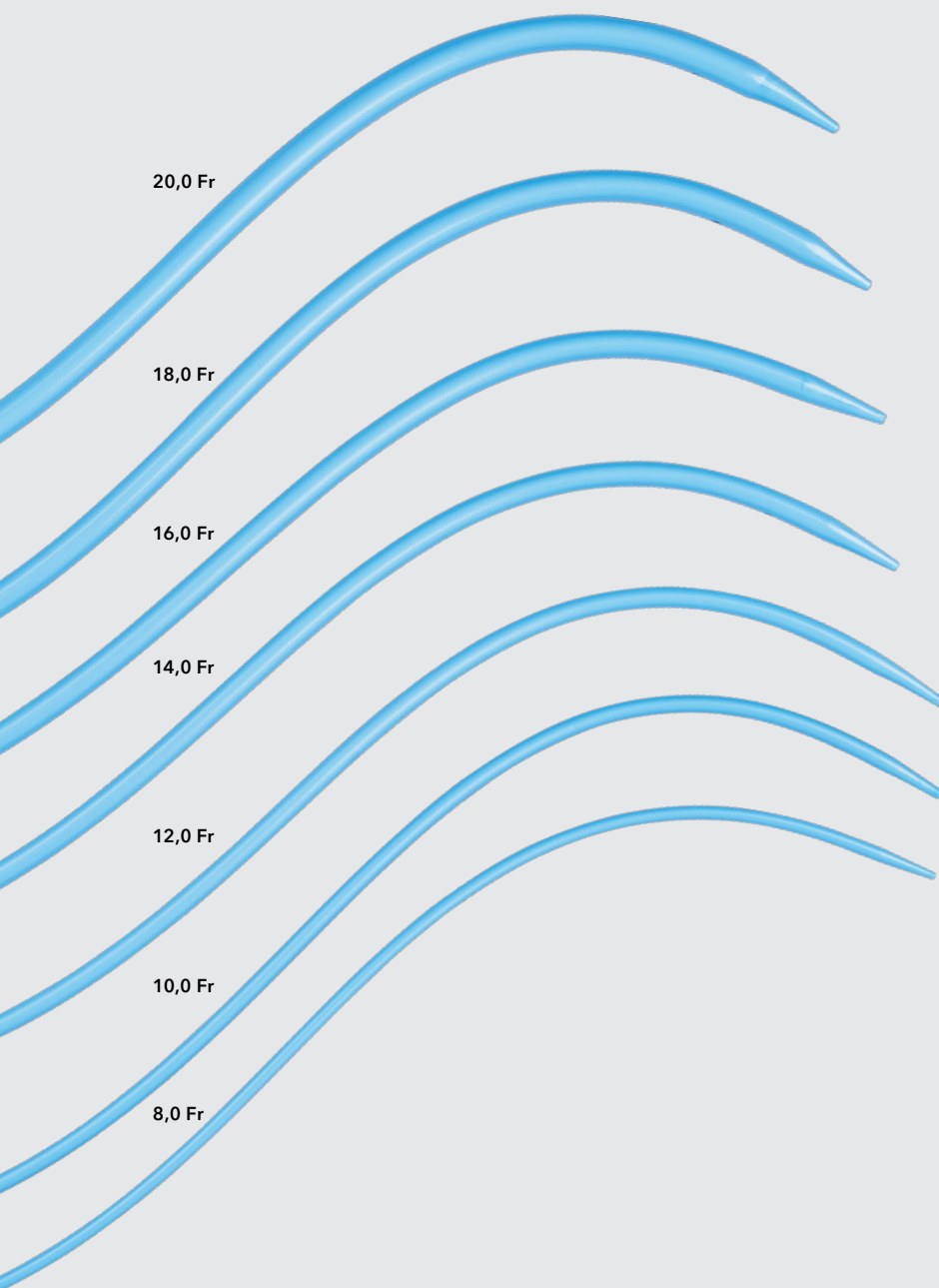


Merkmale und Vorteile

- Die AQ® hydrophile Beschichtung schafft eine reibungsarme Oberfläche zum Einführen des Dilators.
- Das Lumen ermöglicht es Ihnen, den Dilator über einen zuvor positionierten Führungsdraht vorzuschieben.
- Durch die mit einem Port versehene Spitze kann Urin ablaufen, um die richtige Platzierung zu bestätigen.
- Das Tablett ist auf Komfort ausgelegt.
- Der Wasserbehälter ermöglicht, dass die AQ hydrophile Beschichtung hydratisiert und aktiviert wird, während sich der Dilator noch auf dem Tablett befindet.
- Anhand der eingepprägten Größenmarkierungen können Sie Größen erkennen und auswählen.

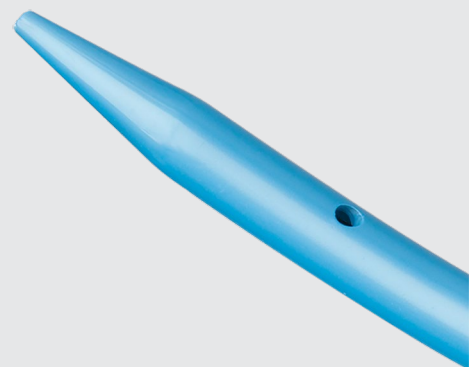


SCHRITT 1

Positionieren Sie unter direkter Sicht- oder Durchleuchtungskontrolle einen Führungsdraht mit einem Durchmesser von 0,038 Inch durch die Harnröhre und in die Blase.

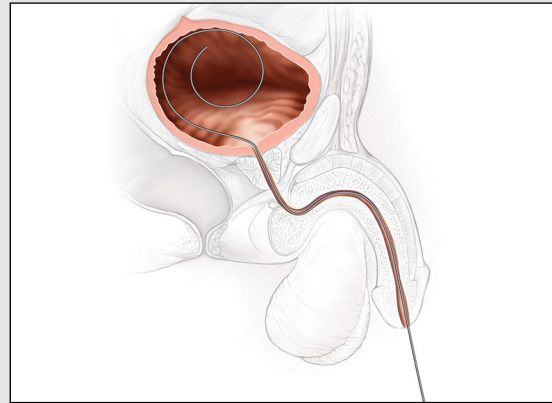


SCHRITT 2

Halten Sie den Penis in einer nach oben gerichteten Position. Richten Sie den Dilatator so aus, dass die französische Größenmarkierung am proximalen Ende nach oben zeigt, und führen Sie den Dilatator über den zuvor platzierten Führungsdraht ein.

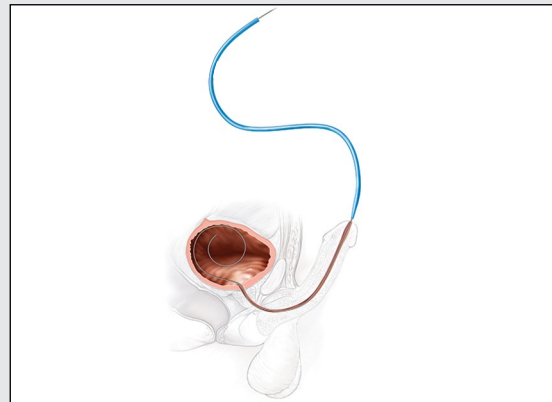


SCHRITT 2 (ALTERNATIVE METHODE)


Halten Sie den Penis in einer nach unten gerichteten Position. Richten Sie den Dilatator so aus, dass die französische Größenmarkierung am proximalen Ende nach unten zeigt, und führen Sie den Dilatator über den zuvor platzierten Führungsdraht ein. Führen Sie den Dilatator bis auf die Höhe der bulbären Harnröhre ein. Drehen Sie den Dilatator auf Höhe der bulbären Harnröhre um 180 Grad, sodass der Dilatator jetzt mit der französischen Größenmarkierung nach oben ausgerichtet ist.

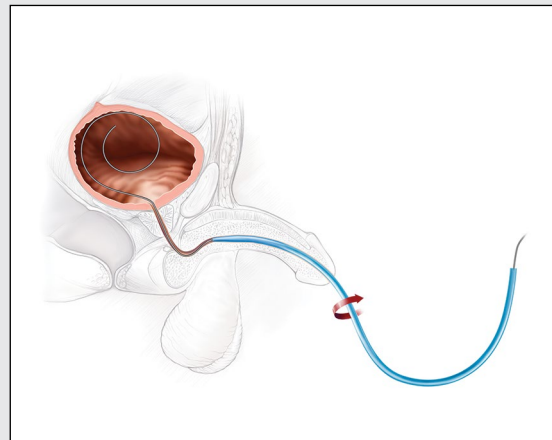

SCHRITT 3

Führen Sie den Dilatator weiter bis in die Blase ein. Urindrainage bestätigt die richtige Platzierung.

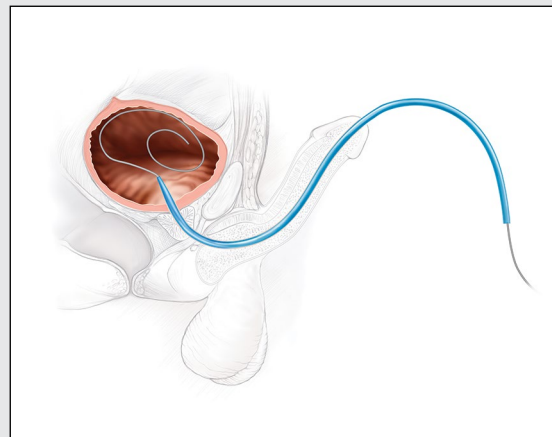


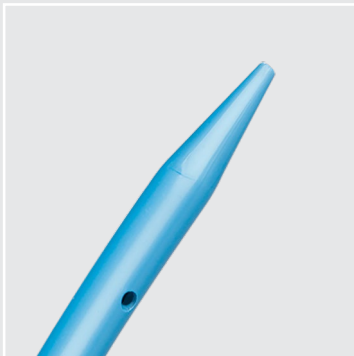

S~Curve®

URETHRAL DILATOR SET

Das S~Curve Urethra-Dilatatorens-Set ist für die Dilatation der männlichen Harnröhre bestimmt.

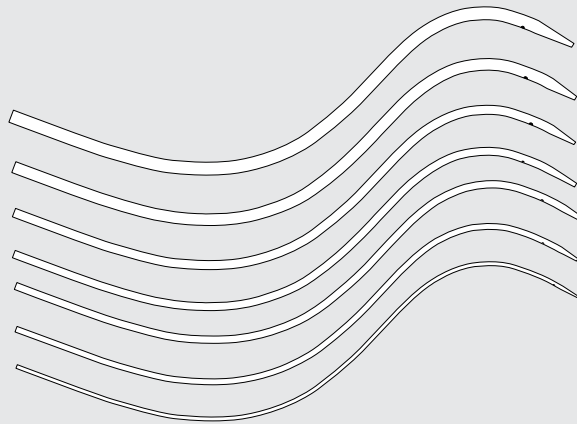

Bestellnummer	Referenznummer	Fr	Länge (cm)
Set			
G32789	073701-CD	8,0-20,0	37
Nur Dilator			
G46249	073722-CD	22,0	37
G46250	073724-CD	24,0	37
G46251	073726-CD	26,0	37

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst und Vertrieb. Lesen Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001633, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com

CC, URO-A4

