


Supere los desafíos de la dilatación uretral masculina.

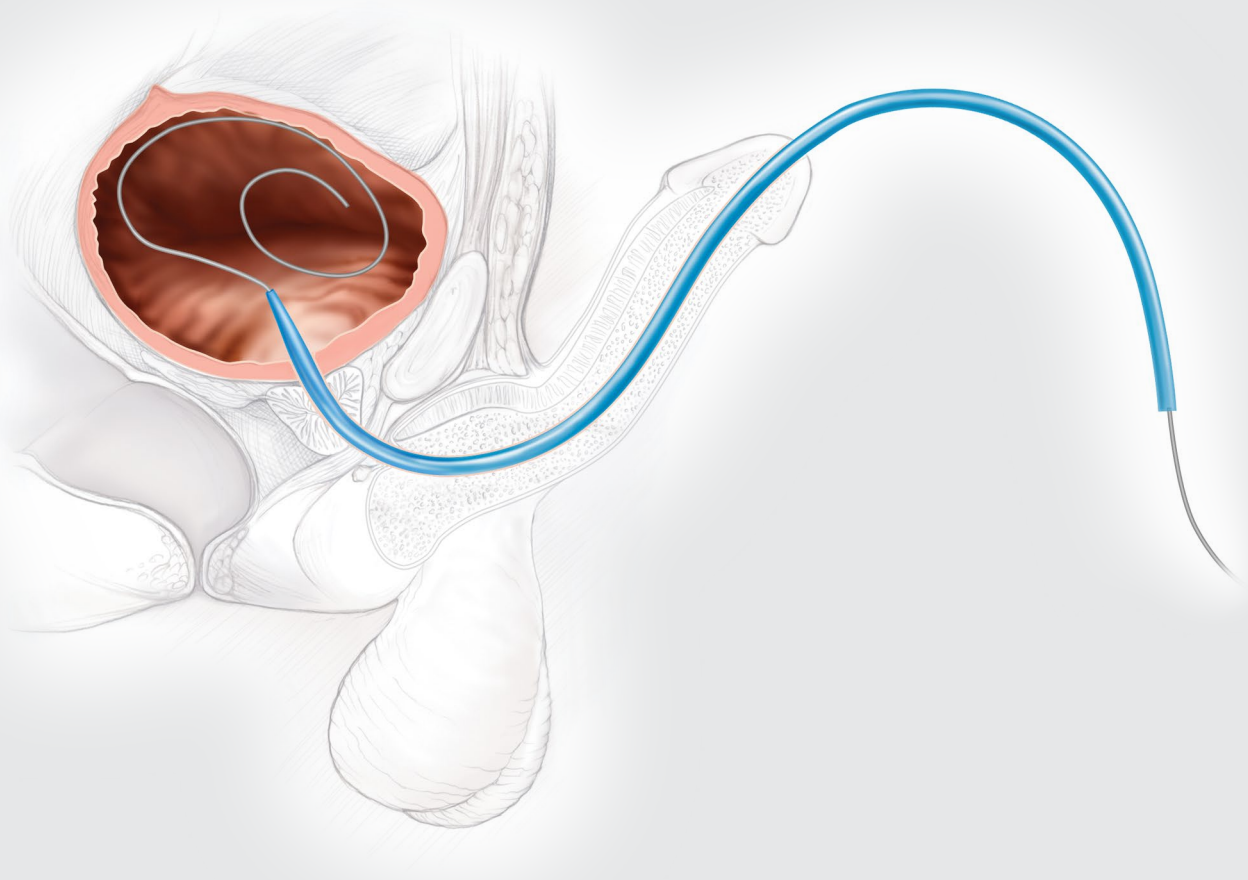


S~Curve[®]
URETHRAL DILATOR SET

S~Curve®


URETHRAL DILATOR SET

Diseño anatómico. Los dilatares uretrales S~Curve están pensados especialmente para adaptarse a la curvatura natural de la uretra masculina.

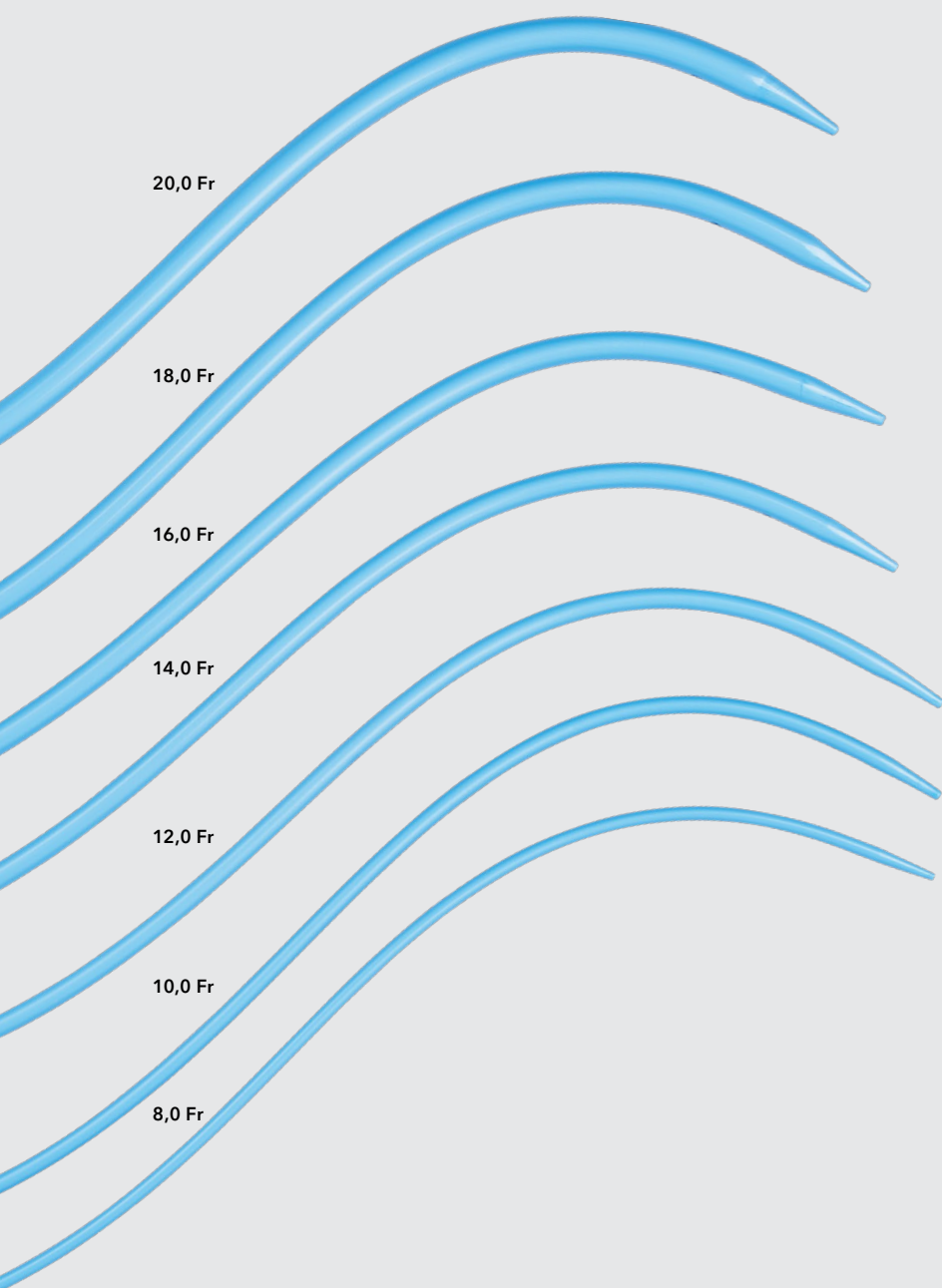


Características y ventajas

- El revestimiento hidrófilo AQ® crea una superficie de baja fricción para el avance del dilatador.
- La luz le permite hacer avanzar el dilatador sobre una guía de alambre colocada previamente.
- La punta con puerto permite que la orina drene para confirmar la colocación adecuada.
- La bandeja está diseñada para su comodidad.
- El depósito permite la hidratación y activación del revestimiento hidrófilo AQ mientras el dilatador todavía está en la bandeja.
- Las marcas de tamaño en relieve le permiten identificar y seleccionar tamaños.

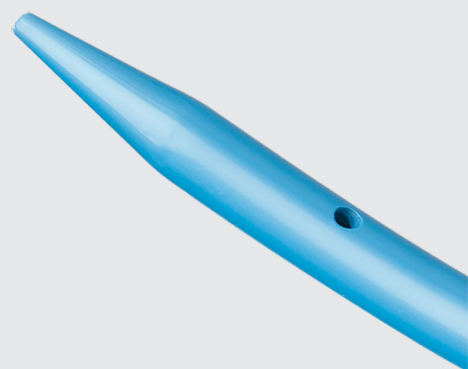


PASO 1

Bajo visión directa o control fluoroscópico, haga pasar una guía de alambre de 0,038 pulgadas de diámetro a través de la uretra y dentro de la vejiga.

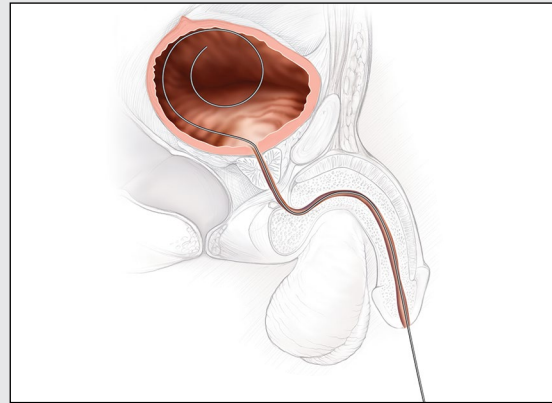


PASO 2

Mantenga el pene hacia arriba. Oriente el dilatador de modo que la marca de escala de Charrière del extremo proximal mire hacia arriba e introduzca el dilatador sobre la guía de alambre colocada anteriormente.

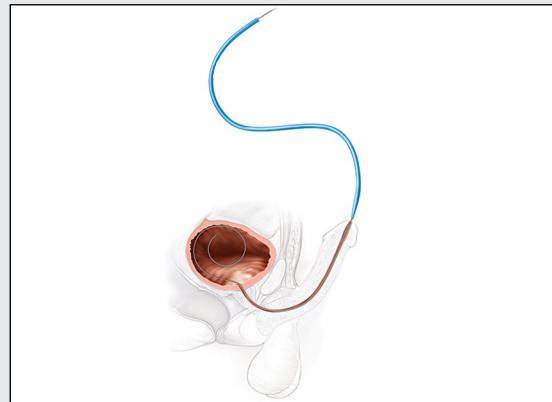


PASO 2 (MÉTODO ALTERNATIVO)


Mantenga el pene hacia abajo. Oriente el dilatador de modo que la marca de escala de Charrière del extremo proximal mire hacia abajo e introduzca el dilatador sobre la guía de alambre colocada anteriormente. Haga avanzar el dilatador hasta el nivel de la uretra bulbar. Con el dilatador colocado al nivel de la uretra bulbar, rótelo 180 grados para que quede orientado con la marca de escala de Charrière hacia arriba.

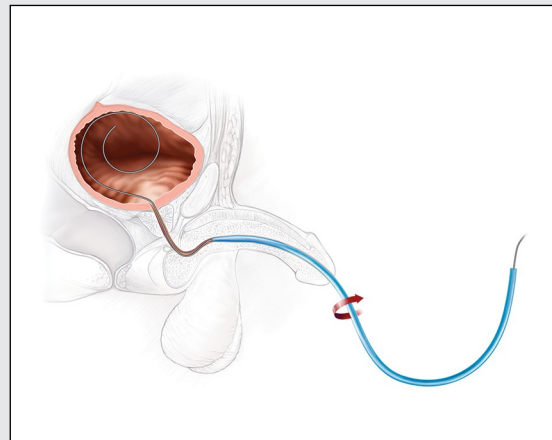

PASO 3

Continúe haciendo avanzar el dilatador hacia la vejiga. El drenaje de orina confirmará la colocación adecuada.

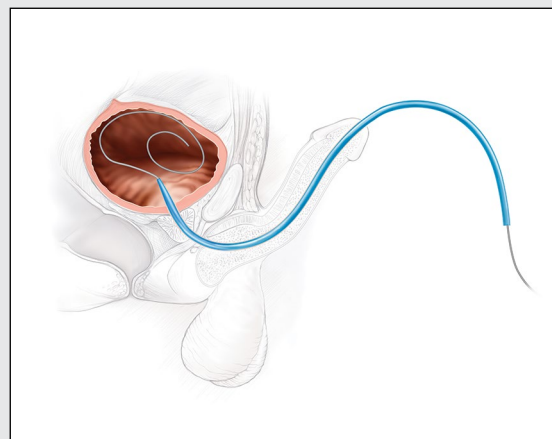


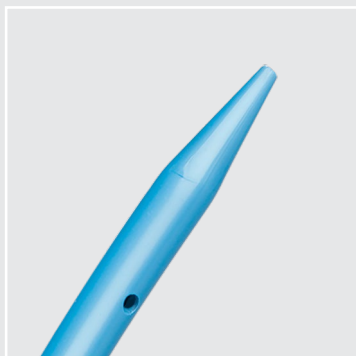

S~Curve®

URETHRAL DILATOR SET

El juego de dilatadores uretrales S~Curve está diseñado para la dilatación de la uretra masculina.

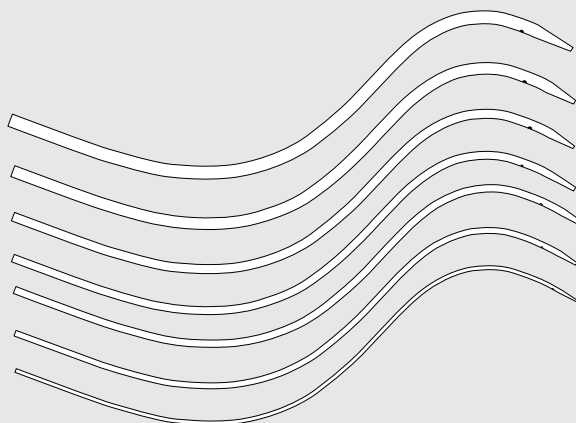

Número de pedido	Número de referencia de producto	Fr	Longitud (cm)
Equipo			
G32789	073701-CD	8,0-20,0	37
Solo dilatador			
G46249	073722-CD	22,0	37
G46250	073724-CD	24,0	37
G46251	073726-CD	26,0	37

Es posible que algunos productos o números de referencia de productos no estén disponibles en todos los mercados. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local de Cook o con el departamento de atención al cliente y distribución. Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001633, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



CC, URO-A4