


Superare le sfide della dilatazione dell'uretra maschile.

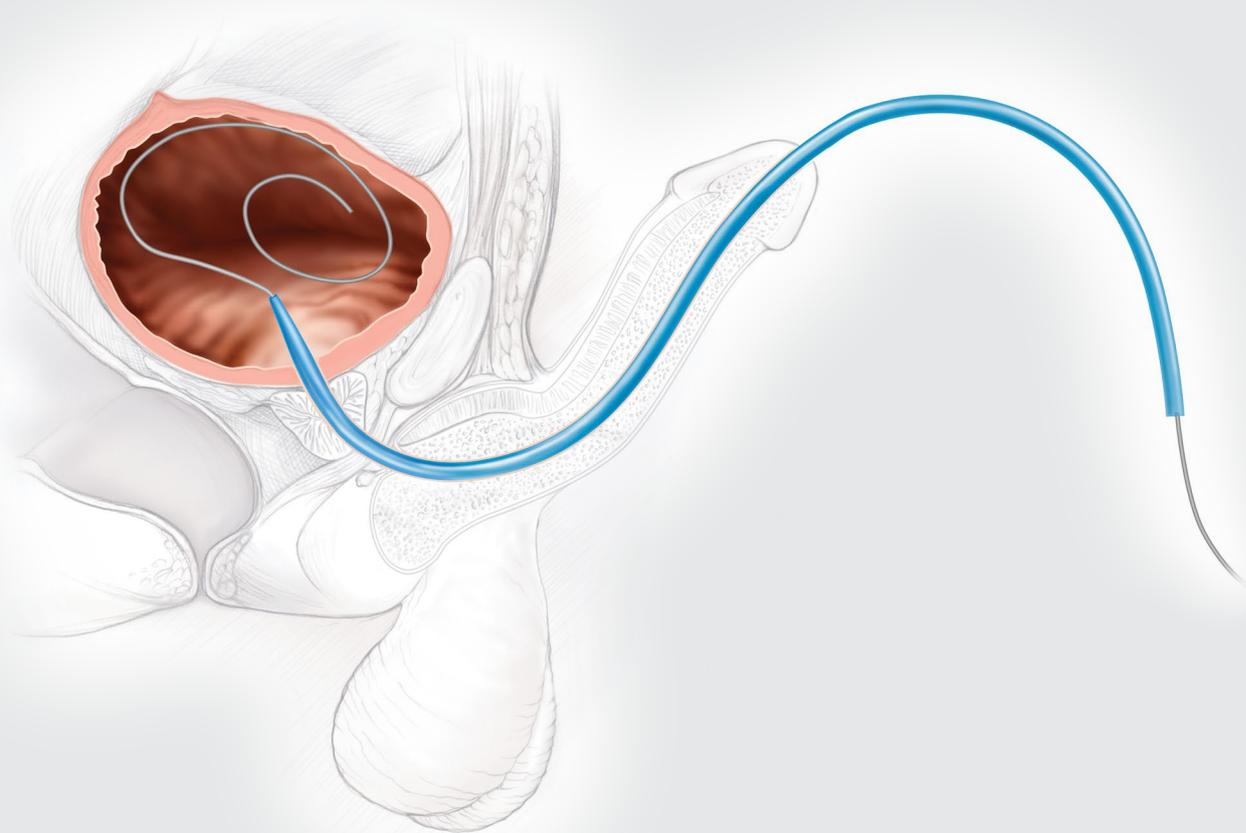


S~Curve[®]
URETHRAL DILATOR SET

S~Curve®


URETHRAL DILATOR SET

I dilatatori uretrali S~Curve dal design anatomico sono appositamente sagomati per supportare la naturale curvatura dell'uretra maschile.

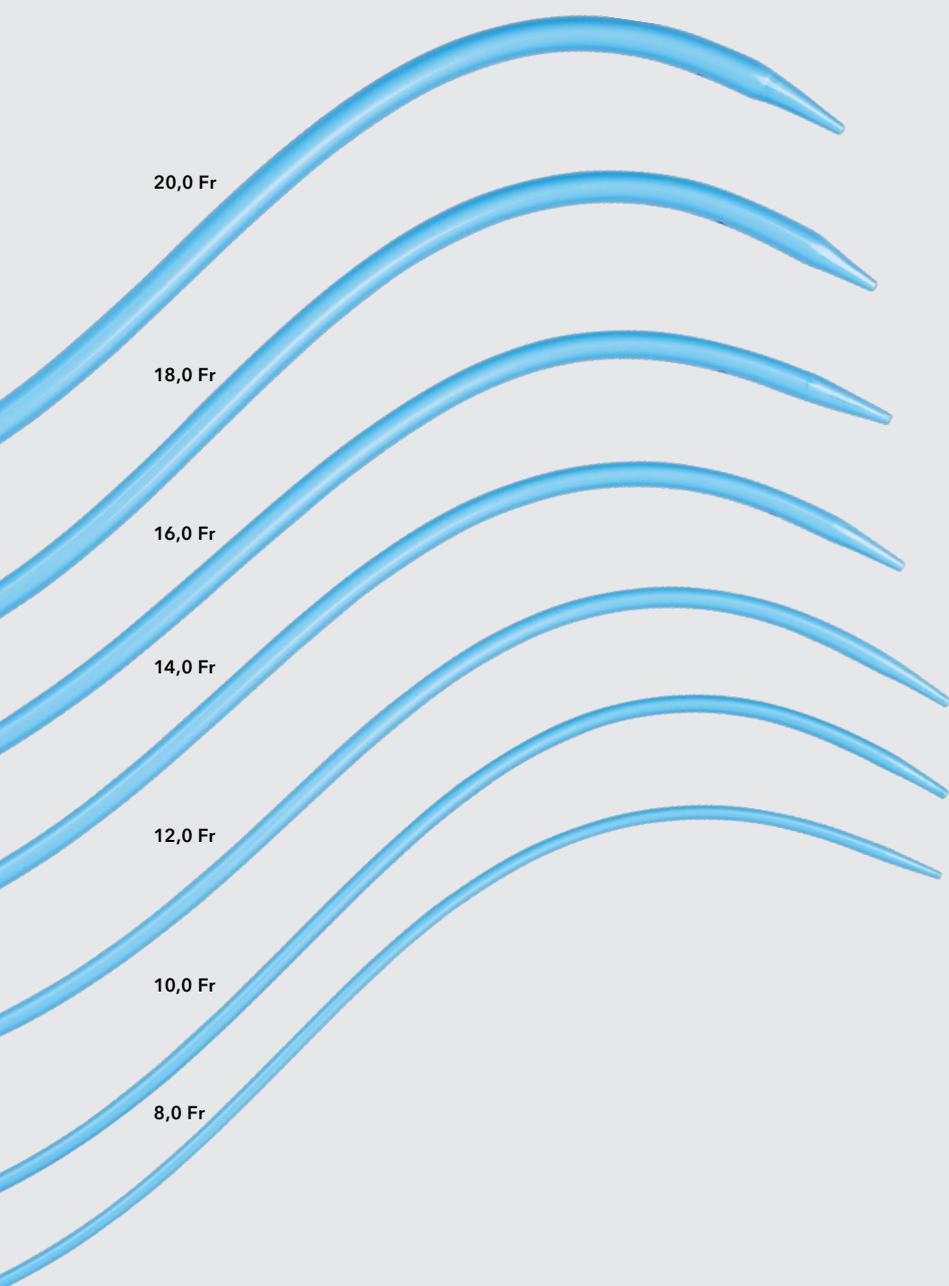


Funzioni e vantaggi

- Il rivestimento idrofilo AQ® crea una superficie a basso attrito per l'avanzamento del dilatatore.
- Il lume consente di far avanzare il dilatatore su una guida precedentemente posizionata.
- La punta con attacco consente il drenaggio dell'urina per confermare il corretto posizionamento.
- Il vassoio ha un design pratico.
- Il serbatoio consente al rivestimento idrofilo AQ di idratarsi e attivarsi mentre il dilatatore è ancora sul vassoio.
- I contrassegni delle dimensioni in rilievo consentono di identificare e selezionare le dimensioni.

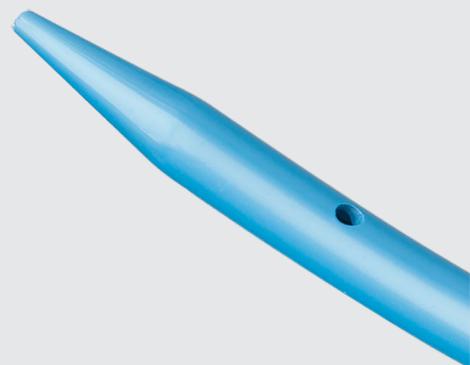


PASSAGGIO 1

Sotto visione diretta o controllo fluoroscopico, posizionare una guida del diametro pari a 0,09 cm attraverso l'uretra e nella vescica.

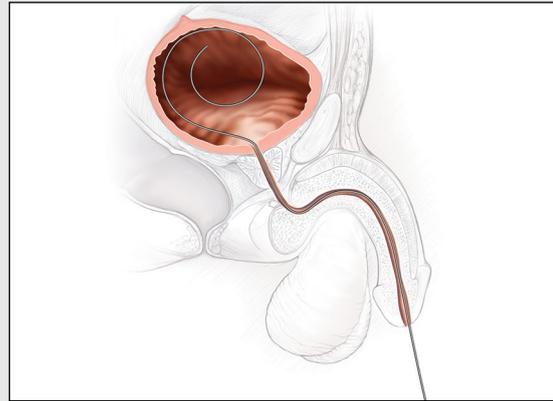


PASSAGGIO 2

Tenere il pene in posizione verso l'alto. Orientare il dilatatore in modo che il timbro delle dimensioni in French sull'estremità prossimale sia rivolto verso l'alto e introdurre il dilatatore sopra la guida precedentemente posizionata.

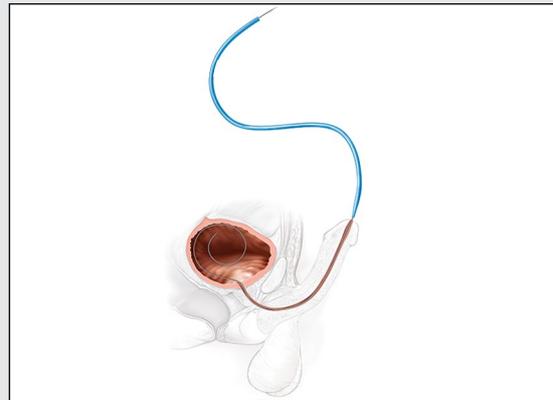


PASSAGGIO 2 (METODO ALTERNATIVO)

Tenere il pene in posizione verso il basso. Orientare il dilatatore in modo che il timbro delle dimensioni in French sull'estremità prossimale sia rivolto verso il basso e introdurre il dilatatore sopra la guida precedentemente posizionata. Far avanzare il dilatatore fino al livello dell'uretra bulbare. Con il dilatatore posizionato a livello dell'uretra bulbare, ruotare il dilatatore di 180 gradi in modo che sia ora orientato con il timbro delle dimensioni in French rivolto verso l'alto.

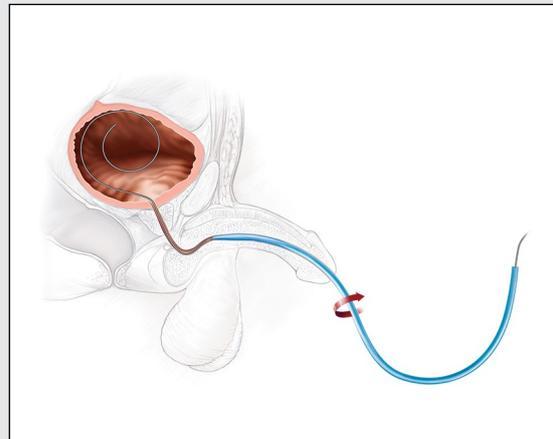

PASSAGGIO 3

Continuare a far avanzare il dilatatore nella vescica. Il drenaggio delle urine confermerà il corretto posizionamento.

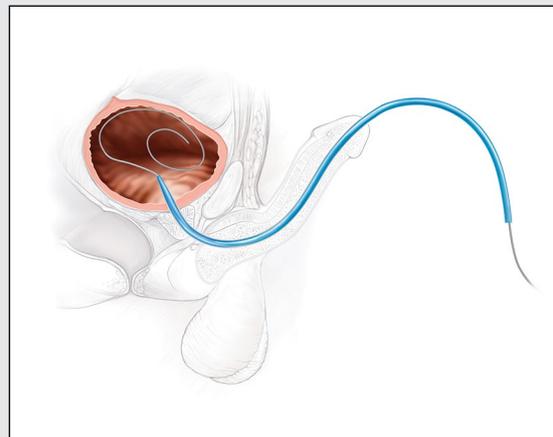




S~Curve®

URETHRAL DILATOR SET

Il set di dilatatori uretrali S~Curve è progettato per la dilatazione dell'uretra maschile.

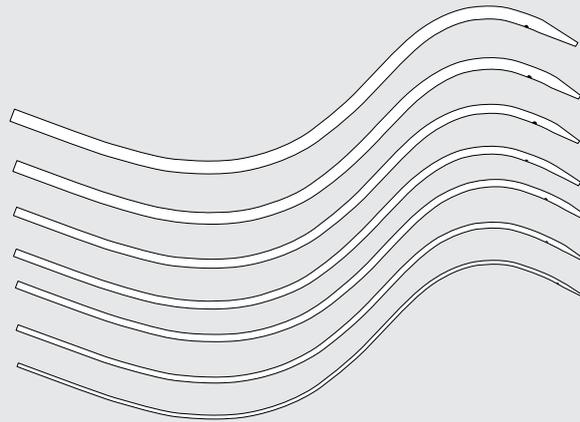

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Fr	Lunghezza cm
Set			
G32789	073701-CD	8,0-20,0	37
Solo dilatatore			
G46249	073722-CD	22,0	37
G46250	073724-CD	24,0	37
G46251	073726-CD	26,0	37

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Distribution per maggiori informazioni. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle Istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001633, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com

CC, URO-A4

