


Pokonywanie trudności związanych z poszerzaniem cewki moczowej u mężczyzn.

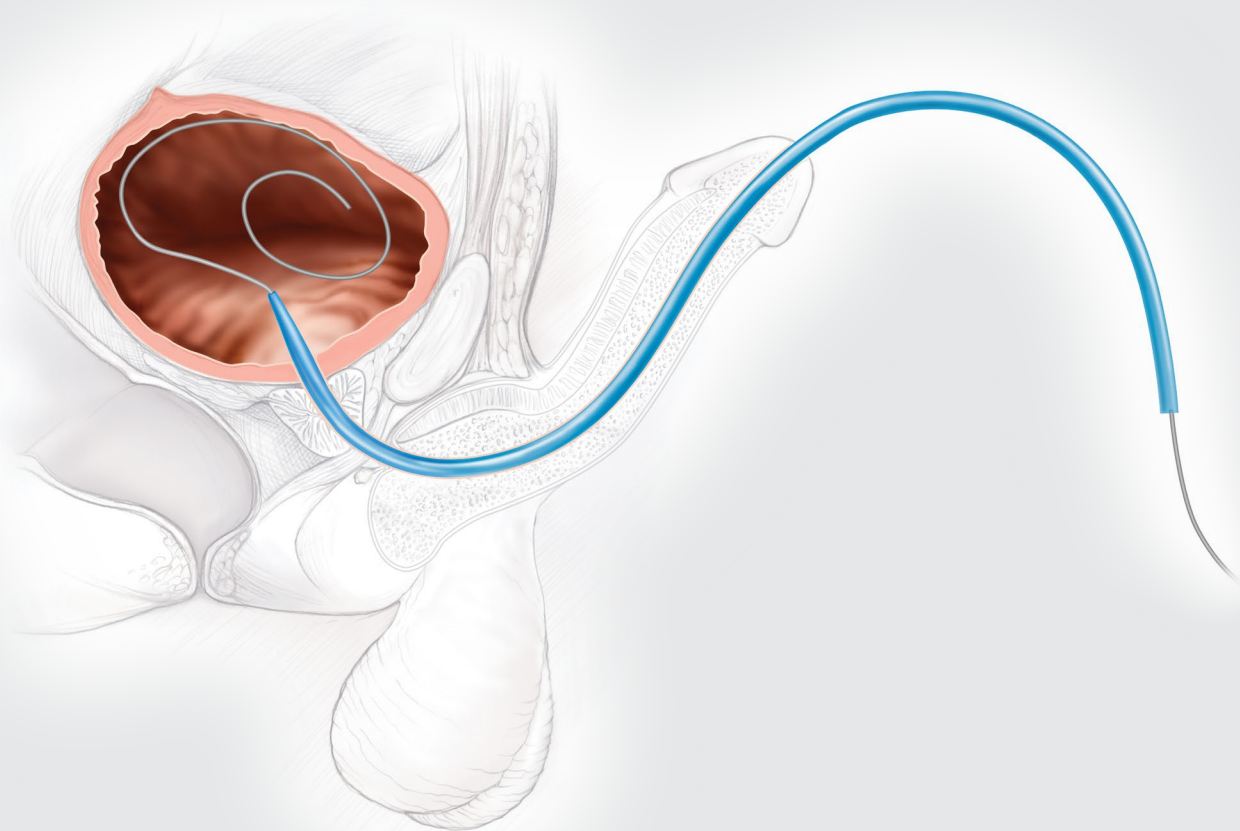


S~Curve®
URETHRAL DILATOR SET

S~Curve®


URETHRAL DILATOR SET

Rozszerzacze cewki moczowej S~Curve zostały specjalnie ukształtowane tak, aby dopasować je do naturalnej krzywizny cewki moczowej u mężczyzn.

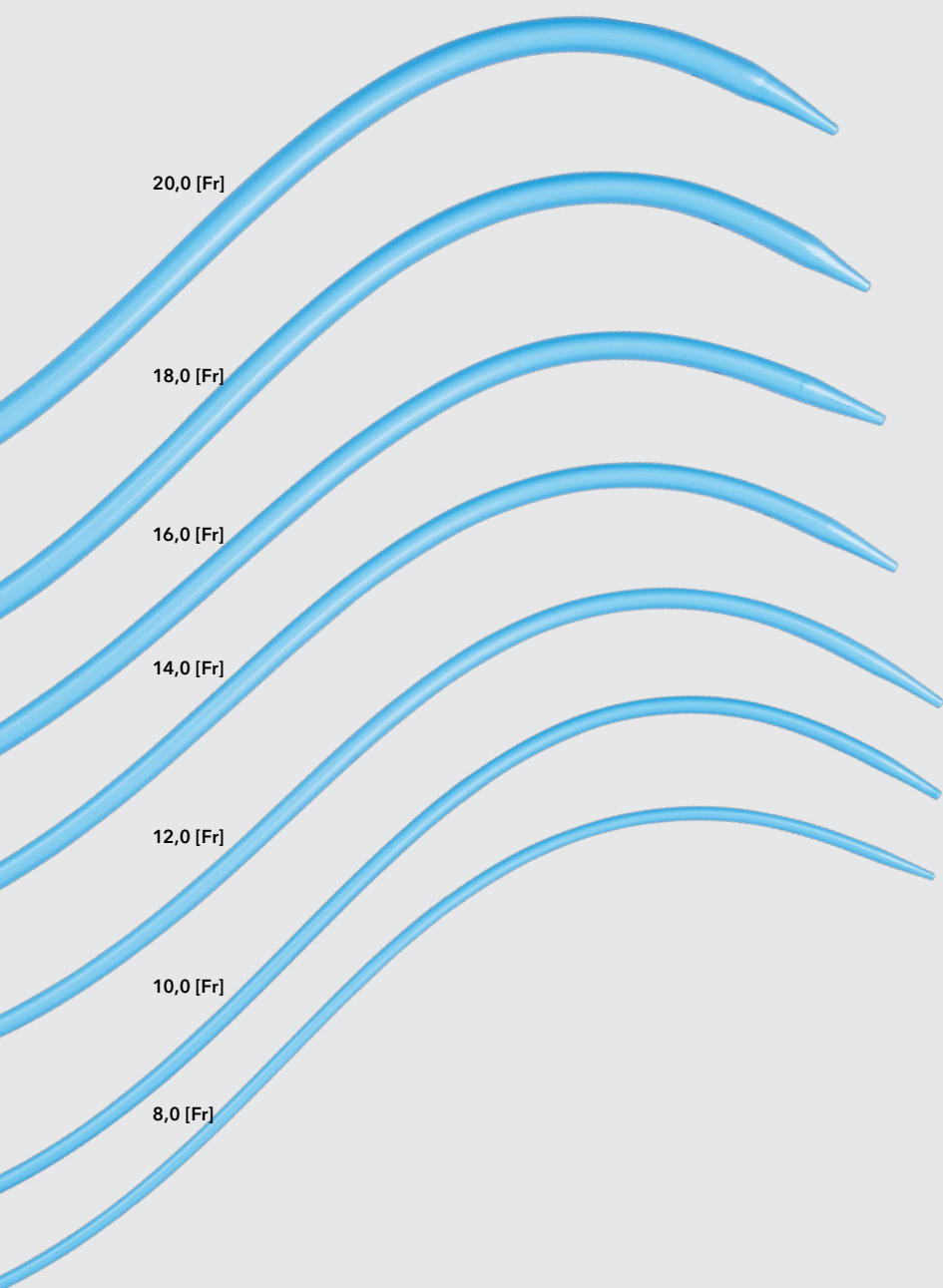


Cechy i zalety produktu

- Powłoka hydrofilna AQ® tworzy powierzchnię o niskim współczynniku tarcia, umożliwiającą przemieszczanie rozszerzacza.
- Kanał umożliwia wprowadzanie rozszerzacza po uprzednio umieszczonym przewodniku.
- Port w końcówce umożliwia drenaż moczu w celu potwierdzenia właściwego umieszczenia.
- Taca została zaprojektowana z myślą o wygodzie.
- Zbiornik umożliwia nawodnienie i aktywację powłoki hydrofilnej AQ, gdy rozszerzacz znajduje się jeszcze na tacy.
- Wytłoczone oznaczenia pozwalają określić i dobrać rozmiary.

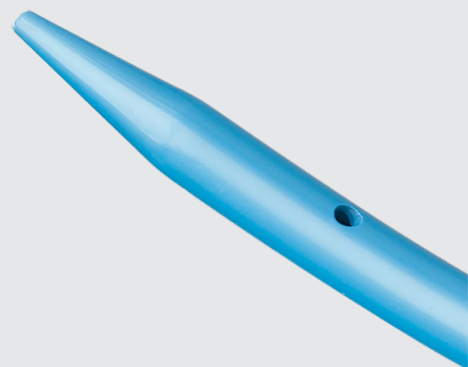


KROK 1

Pod bezpośrednią kontrolą wzrokową lub kontrolą fluoroskopową wprowadzić prowadnik o średnicy 0,038 inch (0,97 mm) przez cewkę moczową i do pęcherza moczowego.

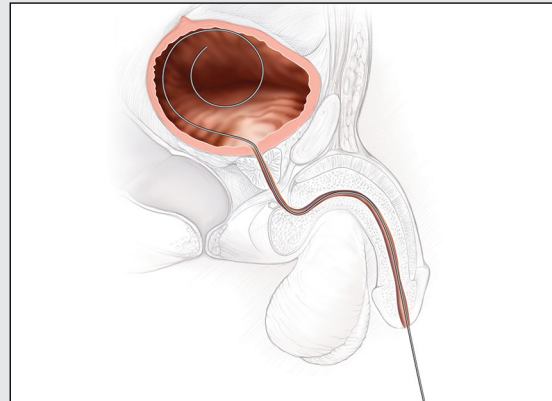


KROK 2

Przytrzymać pręcie w pozycji do góry. Ustawić rozszerzacz tak, aby oznaczenie rozmiaru według numeracji francuskiej na proksymalnym końcu było skierowane do góry, i wprowadzić rozszerzacz po uprzednio umieszczonym prowadniku.

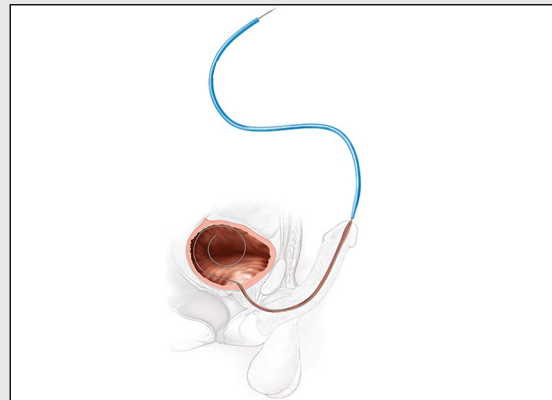


KROK 2 (METODA ALTERNATYWNA)


Przytrzymać pręcie w pozycji w dół. Ustawić rozszerzacz tak, aby oznaczenie rozmiaru według numeracji francuskiej na proksymalnym końcu było skierowane w dół, i wprowadzić rozszerzacz po uprzednio umieszczonym prowadniku. Wsunąć rozszerzacz do poziomu części opuszkowej cewki moczowej. Po ustawieniu rozszerzacza na poziomie części opuszkowej cewki moczowej obrócić rozszerzacz o 180 stopni w taki sposób, aby oznaczenie rozmiaru według numeracji francuskiej było skierowane do góry.

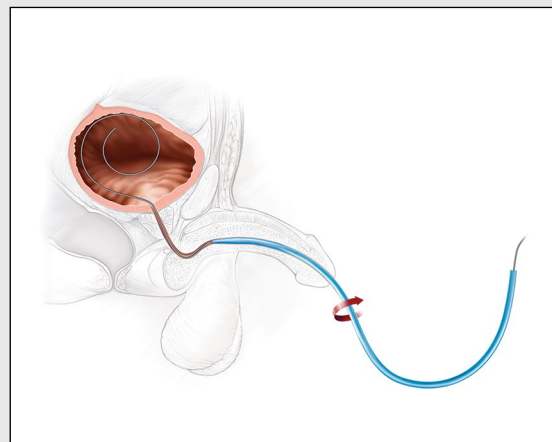

KROK 3

Kontynuować wprowadzanie rozszerzacza do pęcherza moczowego. Drenaż moczu potwierdzi prawidłowe umieszczenie.

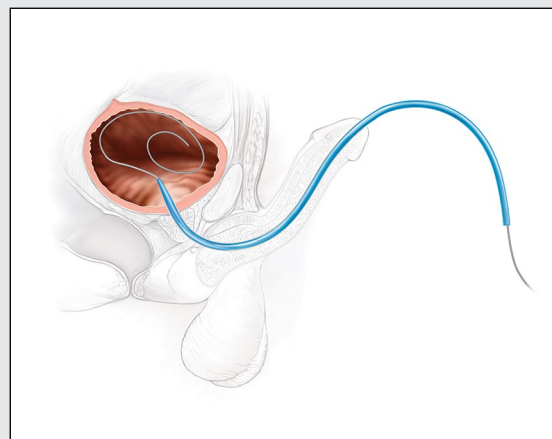


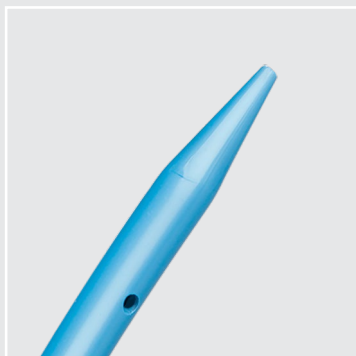

S~Curve®

URETHRAL DILATOR SET

Zestaw rozszerzaczy cewki moczowej S~Curve służy do poszerzania cewki moczowej u mężczyzn.

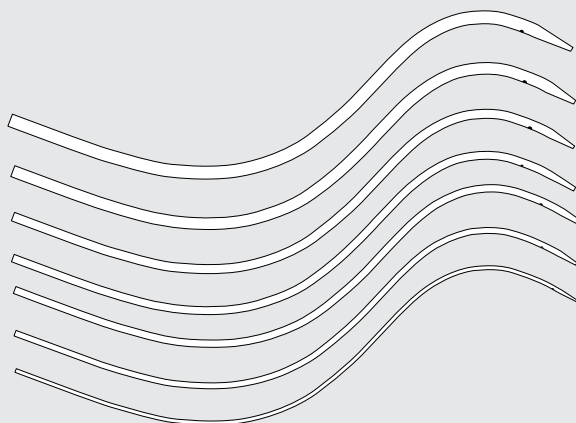

Numer katalogowy	Numer referencyjny części	[Fr]	Długość [cm]
Zestaw			
G32789	073701-CD	8,0-20,0	37
Tylko rozszerzacz			
G46249	073722-CD	22,0	37
G46250	073724-CD	24,0	37
G46251	073726-CD	26,0	37

Niektóre produkty lub numery części mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Cook lub w dziale obsługi klienta i dystrybucji. Informacje na temat ryzyka związanego z produktem można znaleźć w instrukcji użycia dostępnej na stronie cookmedical.eu

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001633, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



CC, URO-A4