


Meistern Sie die Herausforderungen der Urethradilatation bei Männern.

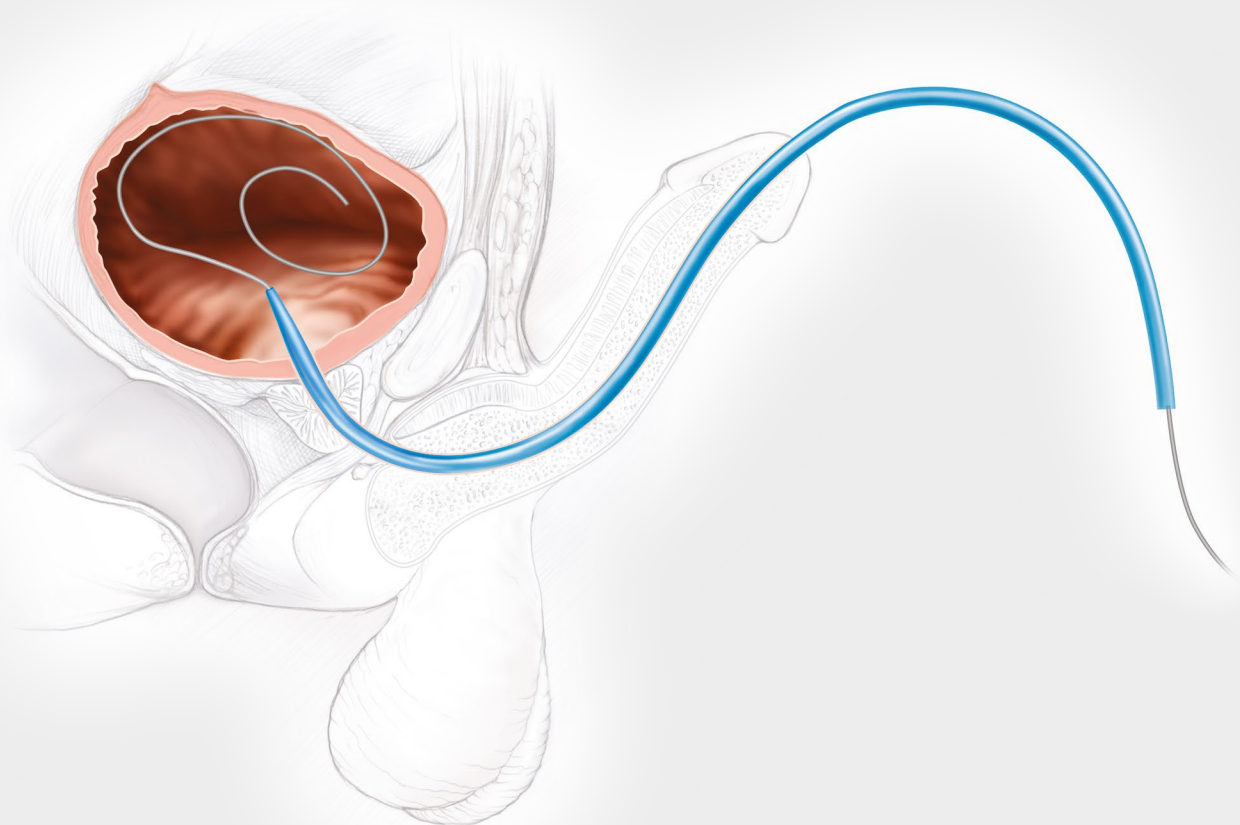


S~Curve®
URETHRAL DILATOR SET

S~Curve®


URETHRAL DILATOR SET

Die S~Curve hilft bei der Einführung in die männliche Urethra und stützt deren natürliche Krümmung. Die Dilatatoren zeichnen sich durch ihre S~Curve und die konische Spitze aus.

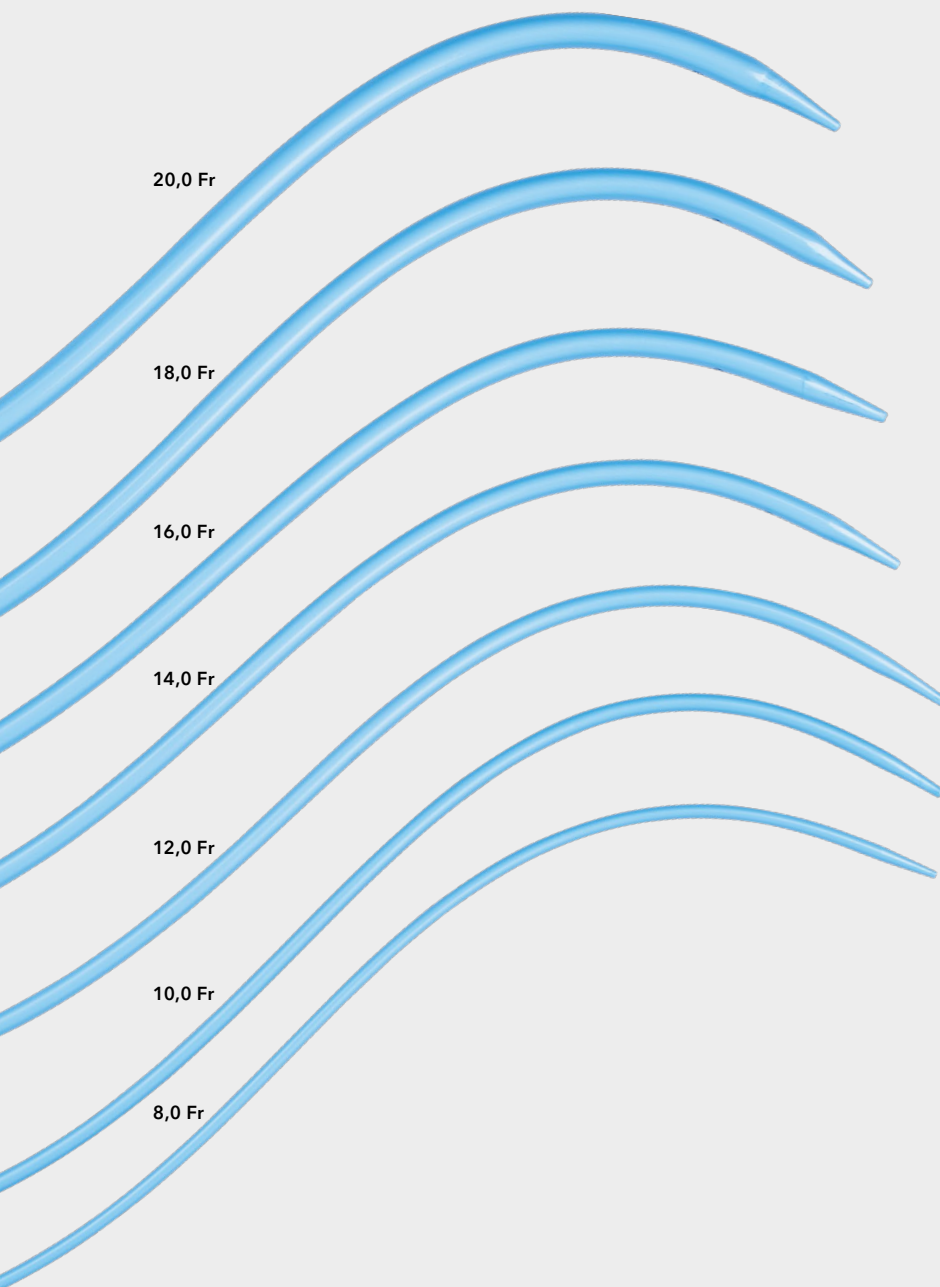


Merkmale und Vorteile

- Die hydrophile AQ® Beschichtung der Oberfläche des Dilators verstärkt die Gleitfähigkeit des Produkts zur einfacheren Einführung in die Zugangsstelle.
- Das Lumen erlaubt den Vorschub des Dilators über einen zuvor positionierten Führungsdraht.
- Die Spitze ist mit einer Öffnung versehen und ermöglicht damit eine Urindrainage zur Bestätigung der korrekten Platzierung.
- Das Tablett erhöht die Anwenderfreundlichkeit.
- Das Wasserbecken ermöglicht die Hydratisierung und Aktivierung der hydrophilen AQ Beschichtung, während sich der Dilator noch auf dem Tablett befindet.
- Die Prägungen mit den Größenmarkierungen vereinfachen die Bestimmung und Auswahl der passenden Größe.

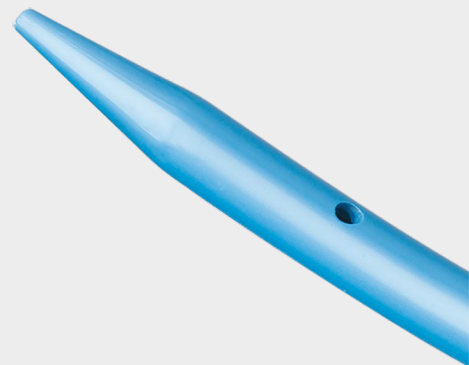

Hinweis: Vor Gebrauch den AQ Dilator in steriles Wasser oder isotonische Kochsalzlösung eintauchen, damit die hydrophile Oberfläche Wasser aufnehmen und gleitfähig werden kann. Dadurch wird die Platzierung unter Standardbedingungen erleichtert.

Schritt 1

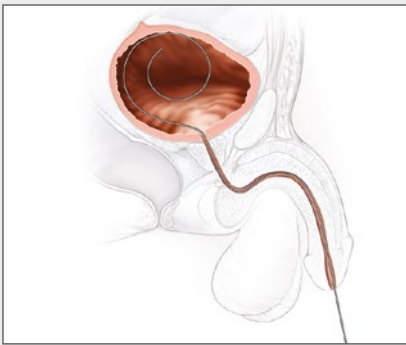

Positionieren des Führungsdrahts

Unter Direktsicht oder Durchleuchtung einen **Führungsdraht** durch die Urethra in die Blase legen.


Schritt 2 - Herkömmliche oder alternative Technik



Den kleinsten Dilator geeigneter Größe einführen. (Hierzu eine der beiden nachstehend beschriebenen Methoden verwenden.)

Herkömmliche Technik:


- Den Penis **nach oben gerichtet** halten.
- Den Dilator so halten, dass die **French-Größe am Ende ohne konische Spitze** nach **oben** zeigt, und den Dilator über den zuvor platzierten Führungsdraht einführen.

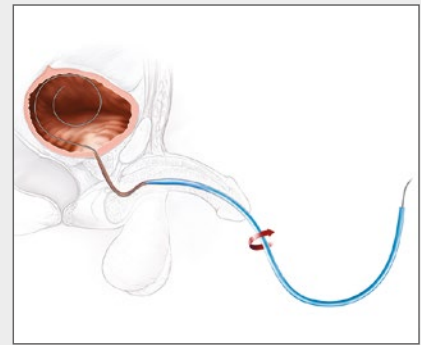

Alternative Technik:

- Den Penis **nach unten gerichtet** halten.
- Den Dilator so halten, dass die **French-Größe am Ende ohne konische Spitze** nach **unten** zeigt, und den Dilator über den zuvor platzierten Führungsdraht einführen.
- Den Dilator bis auf Höhe der **bulbären Urethra** vorschieben.
- Den dort positionierten Dilator um **180 Grad** drehen, sodass die Prägung mit der French-Größe nun nach **oben** zeigt.

Schritt 3

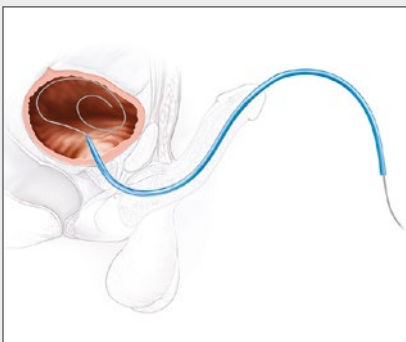

Dilator vorschieben

Den Dilator weiter in die Blase vorschieben. **Die richtige Lage wird durch Urindrainage bestätigt.**


Schritt 4

Bis zur gewünschten Größe fortsetzen

Den Führungsdraht an Ort und Stelle belassen, den vorhandenen Dilator entfernen und durch den nächsten Dilator geeigneter Größe ersetzen.

Die Schritte 2 und 3 wie erforderlich wiederholen und dabei der Reihe nach vom kleinsten bis zum größten Dilator geeigneter Größe vorgehen, bis die gewünschte Urethradilatation erzielt wird.

Die vollständigen Verschreibungsinformationen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen, Kontraindikationen und möglichen unerwünschten Ereignisse entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung des Produkts.

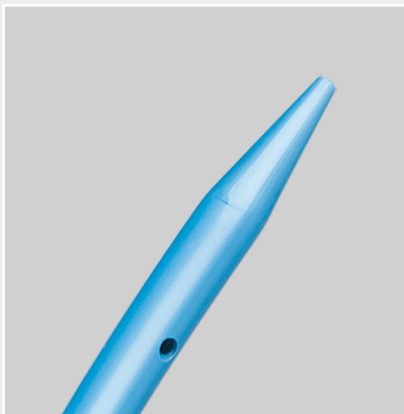

S~Curve®

URETHRAL DILATOR SET

Das S~Curve Urethra-Dilatator-Set dient der Dilatation der männlichen Urethra bei erwachsenen Patienten durch retrograde Einführung des Produkts.



Bestellnummer	Referenznummer	Fr	Länge cm
S~Curve® Urethra-Dilatator-Set			
G32789	073701-CD	8,0-20,0	37
S~Curve® Urethra-Dilatatoren			
G46249	073722-CD	22,0	37
G46250	073724-CD	24,0	37
G46251	073726-CD	26,0	37

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst.
Lesen Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter www.cookmedical.eu.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 21612723770, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 Email: customersupport@cookmedical.com

Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 Email: cau.custserv@cookmedical.com



CC, URO-A4