


Supere las dificultades de la dilatación uretral masculina.

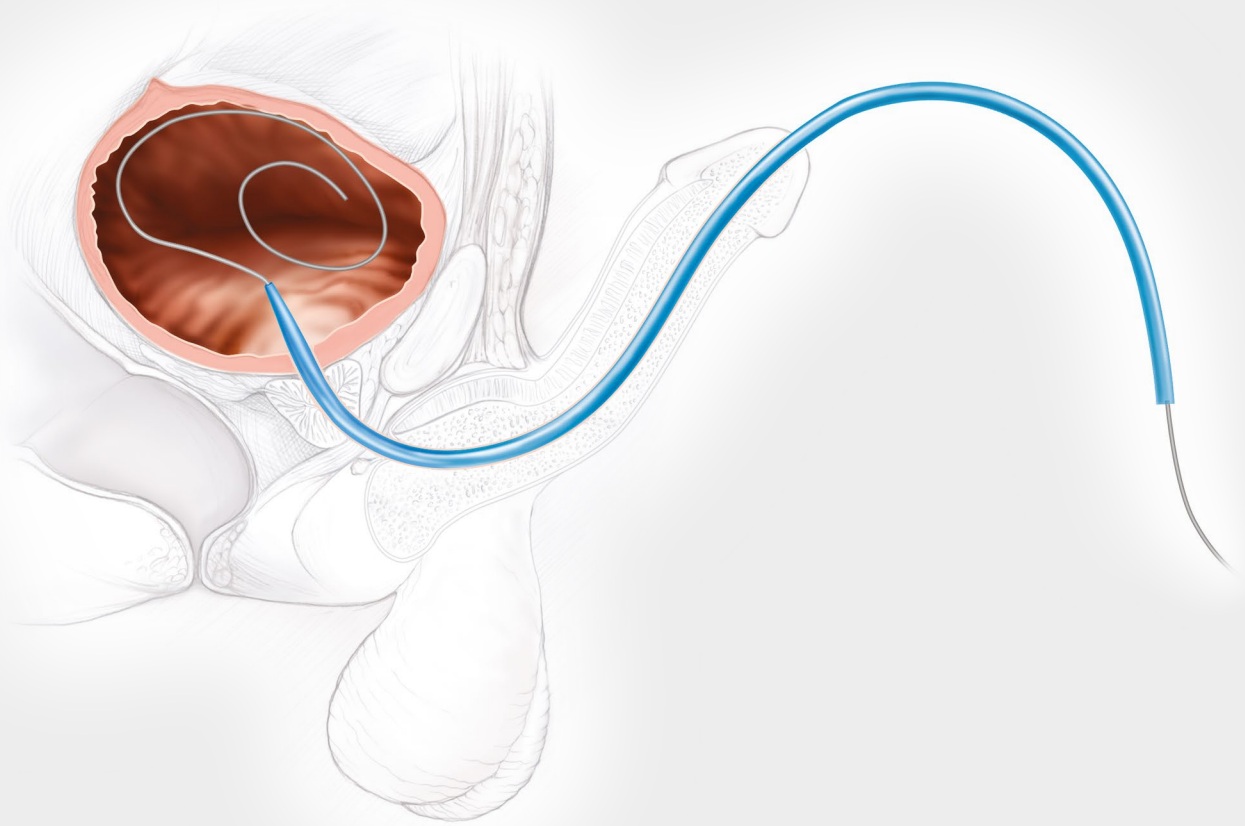


S~Curve®
URETHRAL DILATOR SET

S~Curve®


URETHRAL DILATOR SET

La forma de S~Curve se adapta a la curvatura natural de la uretra masculina y permite atravesarla fácilmente. Los dilatadores tienen forma de S (S~Curve) y una punta cónica.

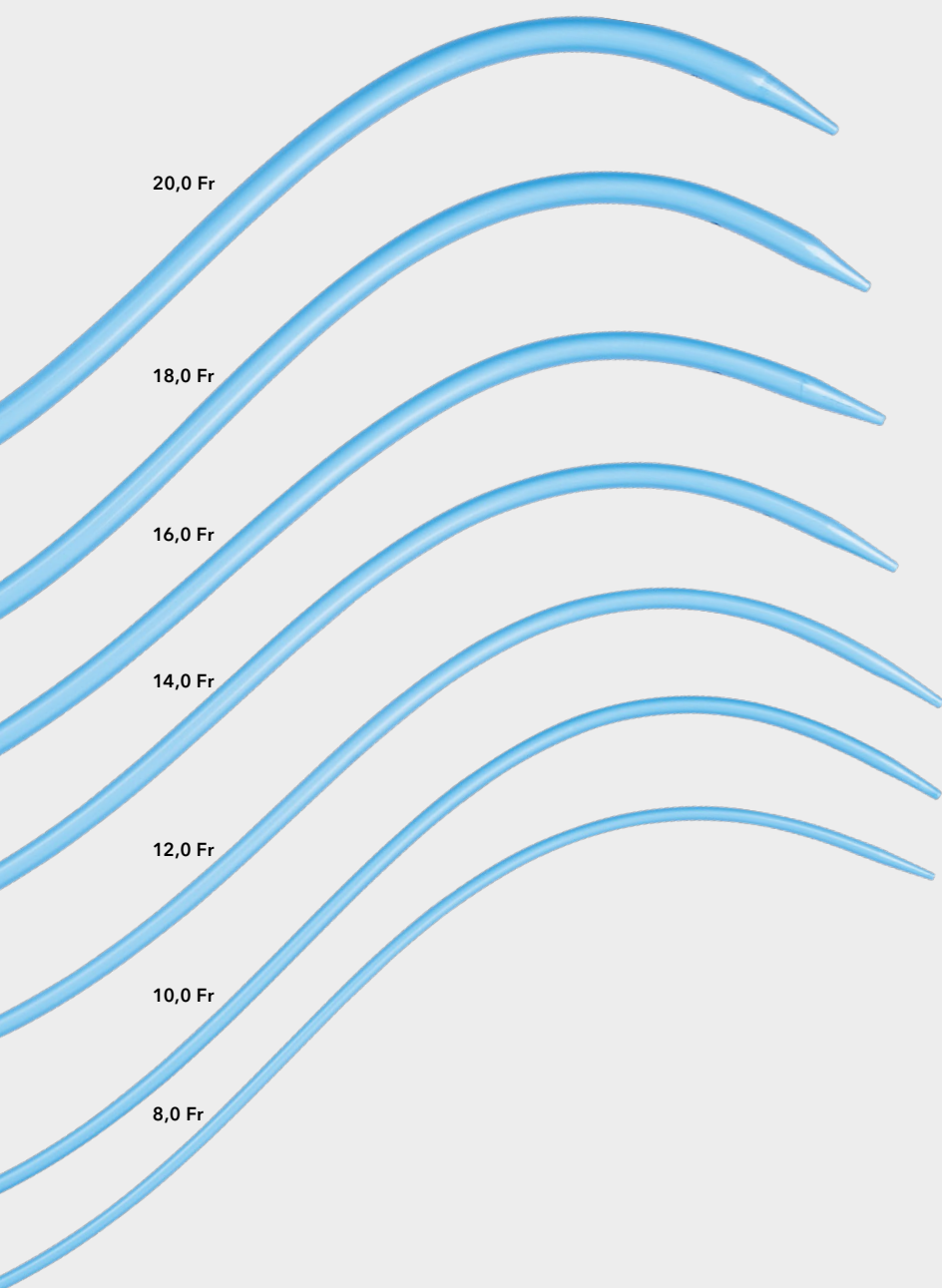

Características y ventajas

- El revestimiento hidrófilo AQ® se aplica a la superficie del dilatador para aumentar la lubricación del dispositivo y facilitar la entrada en el lugar de acceso.
- La luz le permite hacer avanzar el dilatador sobre una guía colocada previamente.
- La punta con puerto permite drenar la orina para asegurar una colocación adecuada.
- La bandeja está diseñada para que resulte cómoda.
- El depósito permite hidratar el revestimiento hidrófilo AQ y que se active mientras el dilatador sigue en la bandeja.
- Las marcas de tamaño en relieve le permiten identificar y seleccionar tamaños.

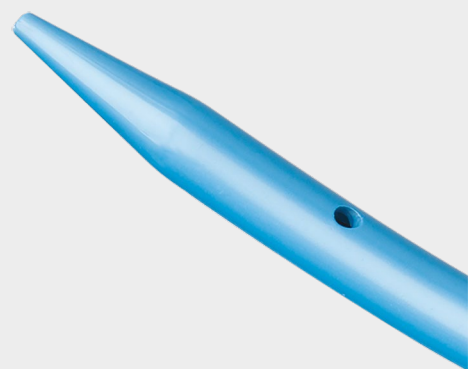

Nota: Antes de utilizar el dilatador AQ, sumérjalo en agua o solución salina isotónica estériles para permitir que la superficie hidrófila absorba líquido y quede lubricada. Esto facilitará la colocación en condiciones normales.


Paso 1



Coloque la guía

Bajo visión directa o control fluoroscópico, coloque una **guía** a través de la uretra hasta que llegue al interior de la vejiga.


Paso 2 (método tradicional o método alternativo)

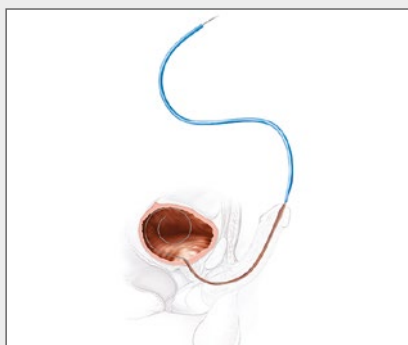

Introduzca el dilatador del tamaño adecuado más pequeño (utilice uno de los dos métodos que aparecen a continuación)

Método tradicional:


- Sostenga el pene en **posición ascendente; es decir, hacia arriba**.
- Orienté el dilatador de manera que el **tamaño en Fr del extremo sin punta cónica** quede orientado **hacia arriba** e introduzca el dilatador sobre la guía colocada previamente.

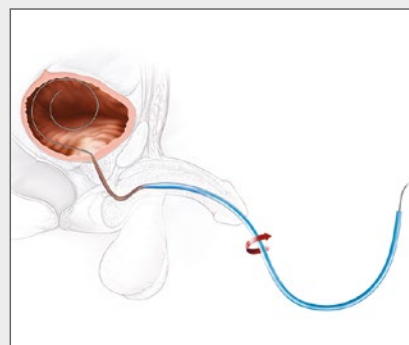

Método alternativo:

- Sostenga el pene en **posición descendente; es decir, hacia abajo**.
- Orienté el dilatador de manera que el **tamaño en Fr del extremo sin punta cónica** quede orientado **hacia abajo** e introduzca el dilatador sobre la guía colocada previamente.
- Haga avanzar el dilatador hasta el nivel de la **uretra bulbar**.
- Con el dilatador colocado al nivel de la uretra bulbar, gírelo **180 grados** de manera que quede orientado con el rótulo del tamaño en Fr **hacia arriba**.

Paso 3

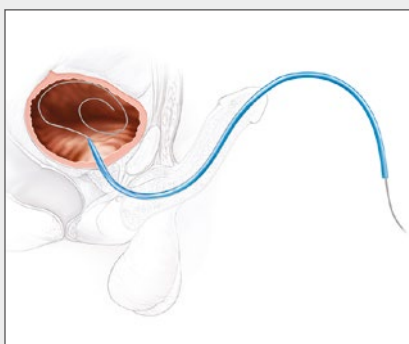

Haga avanzar el dilatador

Siga haciendo avanzar el dilatador hacia el interior de la vejiga. **El drenaje de orina confirmará que la colocación es la adecuada.**


Paso 4

Avance al tamaño deseado

Mientras mantiene la posición de la guía, extraiga el dilatador colocado actualmente y cámbielo por el dilatador del siguiente tamaño adecuado.

Repita los pasos 2 y 3 las veces que sea necesario, avanzando del dilatador del tamaño adecuado más pequeño al más grande hasta que se consiga la dilatación uretral deseada.

Consulte las instrucciones de uso del producto para conocer toda la información sobre prescripción, así como los avisos, precauciones, contraindicaciones y posibles acontecimientos adversos.

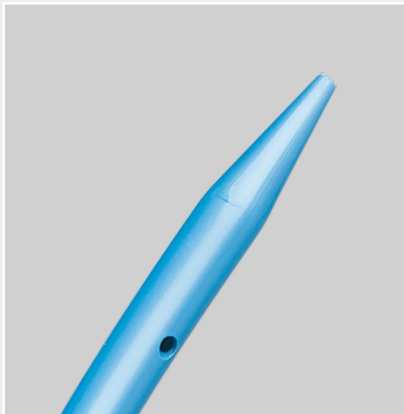

S~Curve®

URETHRAL DILATOR SET

El equipo de dilatares uretrales S~Curve se utiliza para dilatar la uretra masculina de pacientes adultos mediante la inserción retrógrada de los dispositivos.



Referencia	Referencia de producto	Fr	Longitud cm
Equipo de dilatares uretrales S~Curve®			
G32789	073701-CD	8,0-20,0	37
Dilatadores uretrales S~Curve®			
G46249	073722-CD	22,0	37
G46250	073724-CD	24,0	37
G46251	073726-CD	26,0	37

Algunos productos o números de referencia pueden no estar disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local o con el departamento Customer Support & Distribution de Cook para obtener más información. Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 21612723770, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
Email: customersupport@cookmedical.com

Australia:
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
Email: cau.custserv@cookmedical.com



CC, URO-A4