


Superare le difficoltà della dilatazione uretrale maschile.

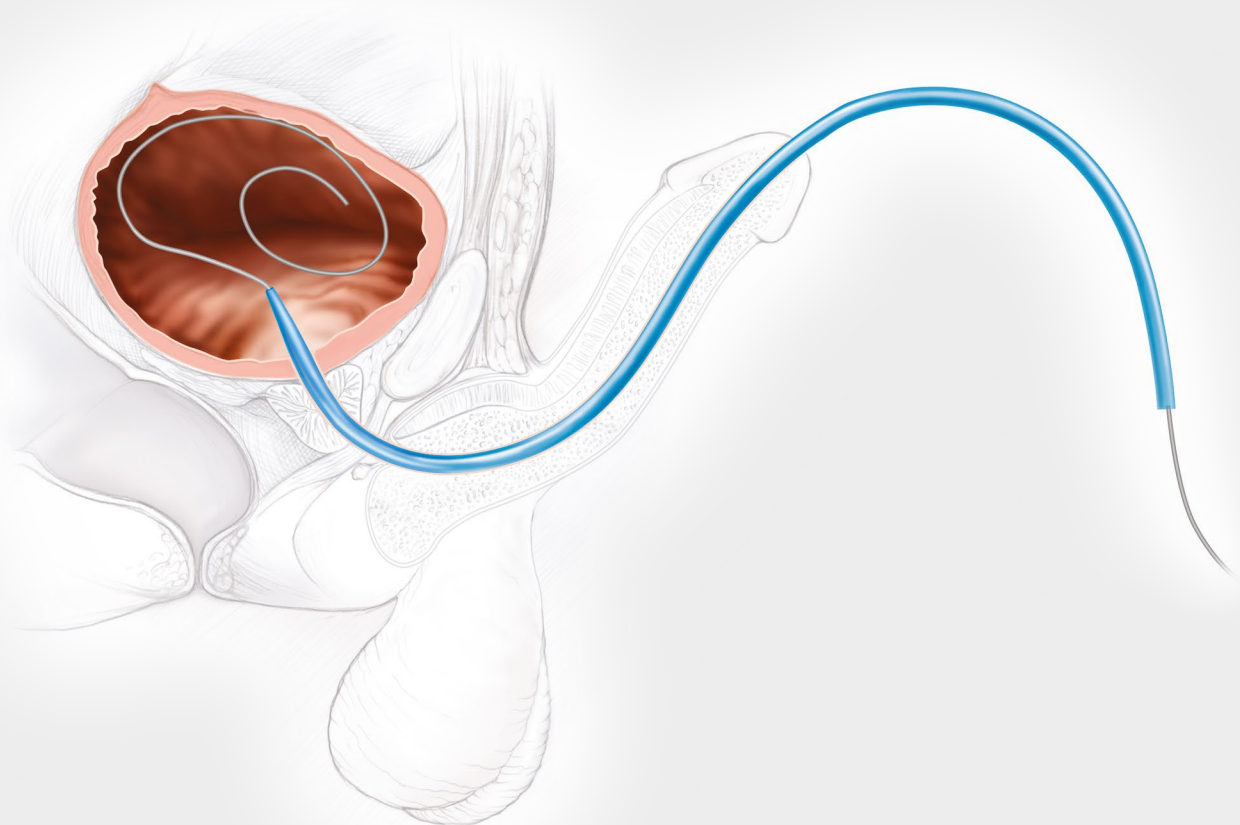


S~Curve®
URETHRAL DILATOR SET

S~Curve®


URETHRAL DILATOR SET

La forma a S~Curve agevola l'attraversamento e il supporto della naturale curvatura dell'uretra maschile: i dilatatori sono curvati a S e sono dotati di una punta rastremata.

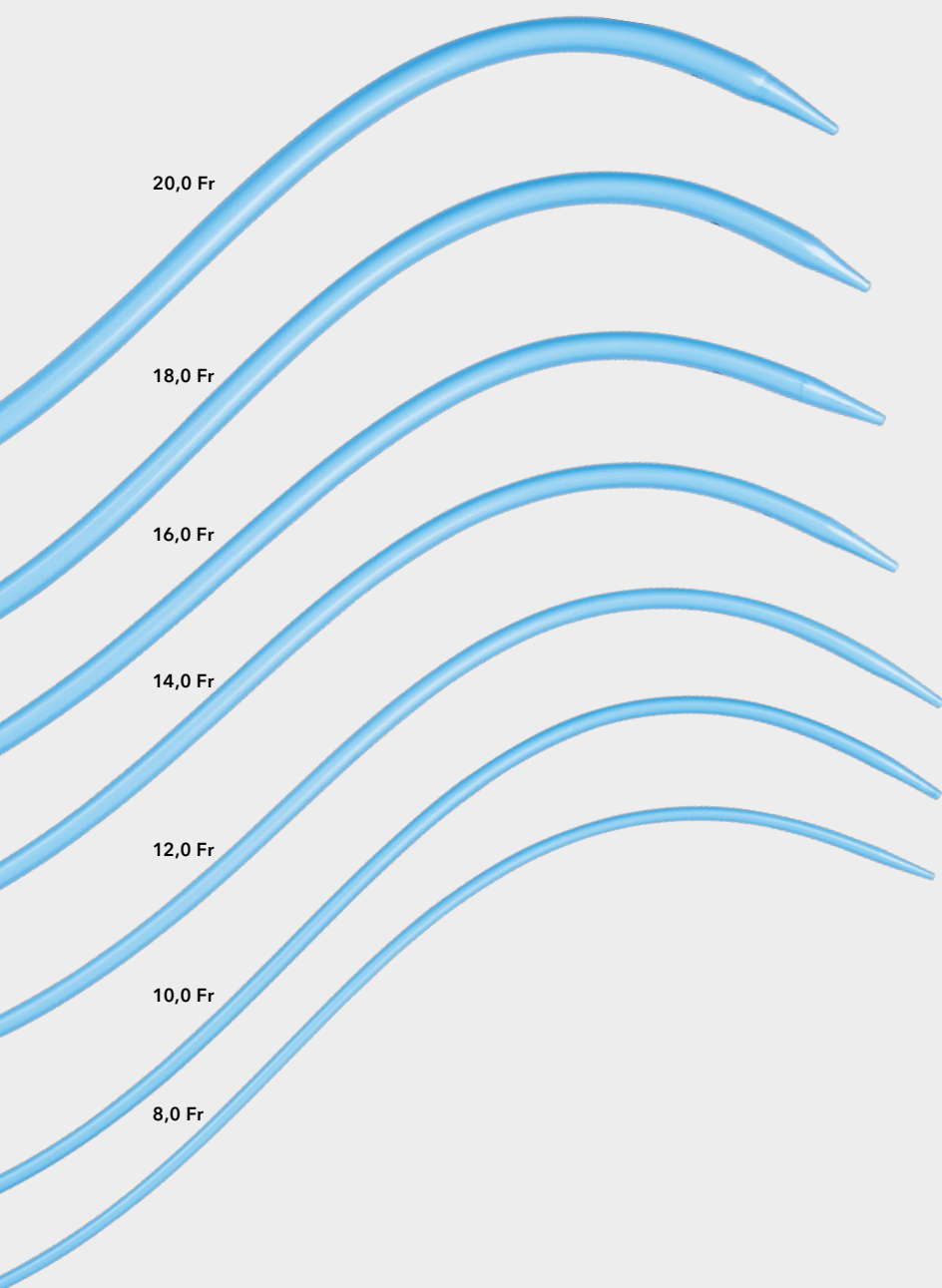

Caratteristiche e vantaggi

- Il rivestimento idrofilo AQ® è applicato sulla superficie del dilatatore per incrementare la scivolosità del dispositivo e agevolare di conseguenza l'inserimento nel sito di accesso.
- Il lume permette di far avanzare il dilatatore su una guida posizionata in precedenza.
- La punta forata consente il drenaggio di urina per confermare il corretto posizionamento.
- Il vassoio è progettato per garantire praticità.
- Il serbatoio consente l'idratazione e l'attivazione del rivestimento idrofilo AQ mentre il dilatatore si trova ancora nel vassoio.
- I contrassegni per la dimensione in rilievo permettono di identificare e selezionare le misure.

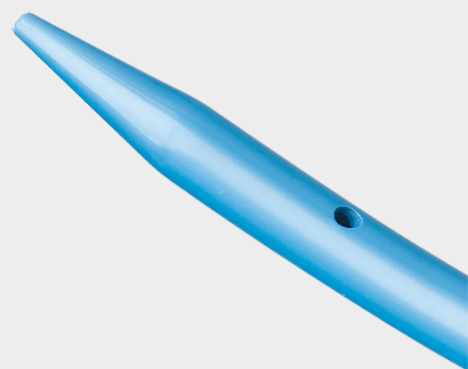

Nota: prima dell'uso, immergere il dilatatore dotato di rivestimento AQ in acqua o in soluzione fisiologica isotonica sterili per consentire alla superficie idrofila di assorbire il liquido e diventare scivolosa. La scivolosità agevola il posizionamento in condizioni standard.


Passaggio 1



Posizionare la guida

Sotto osservazione diretta o fluoroscopica, posizionare una **guida** attraverso l'uretra e all'interno della vescica.


Passaggio 2: metodo tradizionale o metodo alternativo

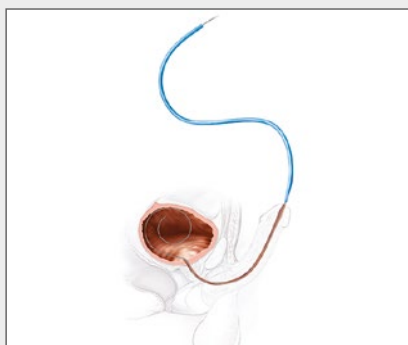

Introdurre il dilatatore della misura più piccola opportuna (utilizzare uno dei due metodi descritti di seguito)

Metodo tradizionale:


- Mantenere il pene in **posizione alzata**.
- Orientare il dilatatore in modo che la **misura in French sull'estremità senza punta rastremata** sia rivolta **verso l'alto** e introdurre il dilatatore sopra la guida precedentemente posizionata.

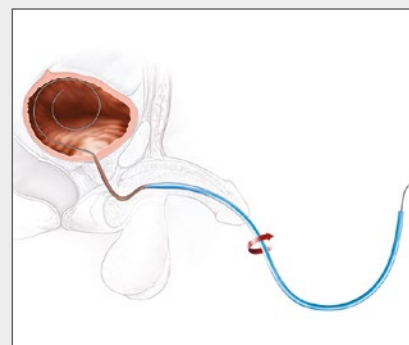

Metodo alternativo:

- Mantenere il pene in **posizione abbassata**.
- Orientare il dilatatore in modo che la **misura in French sull'estremità senza punta rastremata** sia rivolta **verso il basso** e introdurre il dilatatore sopra la guida precedentemente posizionata.
- Fare avanzare il dilatatore fino al livello dell'**uretra bulbare**.
- Quando il dilatatore è posizionato a livello dell'**uretra bulbare**, ruotarlo di **180 gradi** orientandolo in modo che la misura in French impressa sia rivolta **verso l'alto**.

Passaggio 3

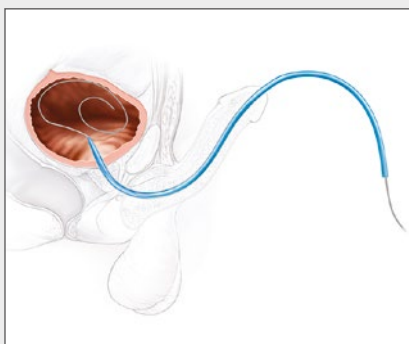

Fare avanzare il dilatatore

Continuare a fare avanzare il dilatatore nella vescica. **Il drenaggio dell'urina confermerà il corretto posizionamento.**


Passaggio 4

Passaggio graduale alla misura desiderata

Mantenendo la posizione della guida, rimuovere il dilatatore posizionato e sostituirlo con il dilatatore della successiva misura appropriata.

Ripetere i passaggi 2 e 3 secondo necessità, procedendo dal dilatatore della misura più piccola a quello della misura più grande appropriata, fino a ottenere la dilatazione uretrale desiderata.

Per informazioni complete sulla prescrizione, per le avvertenze, le precauzioni, le controindicazioni e i possibili eventi avversi, consultare le Istruzioni per l'uso (IFU).

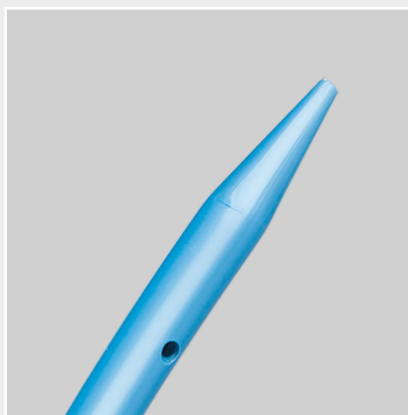

S~Curve®

URETHRAL DILATOR SET

Il set di dilatatori uretrali S~Curve viene usato per dilatare l'uretra maschile in pazienti adulti mediante inserimento retrogrado dei dispositivi.



Codice di ordinazione	Codice prodotto	Fr	Lunghezza cm
Set di dilatatori uretrali S~Curve®			
G32789	073701-CD	8,0-20,0	37
Dilatatori uretrali S~Curve®			
G46249	073722-CD	22,0	37
G46250	073724-CD	24,0	37
G46251	073726-CD	26,0	37

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Distribution.

Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 21612723770, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
Email: customersupport@cookmedical.com

Australia:
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
Email: cau.custserv@cookmedical.com



CC, URO-A4