


# Stawia czoło wyzwaniom związanym z rozszerzaniem cewki moczowej u mężczyzn.

---

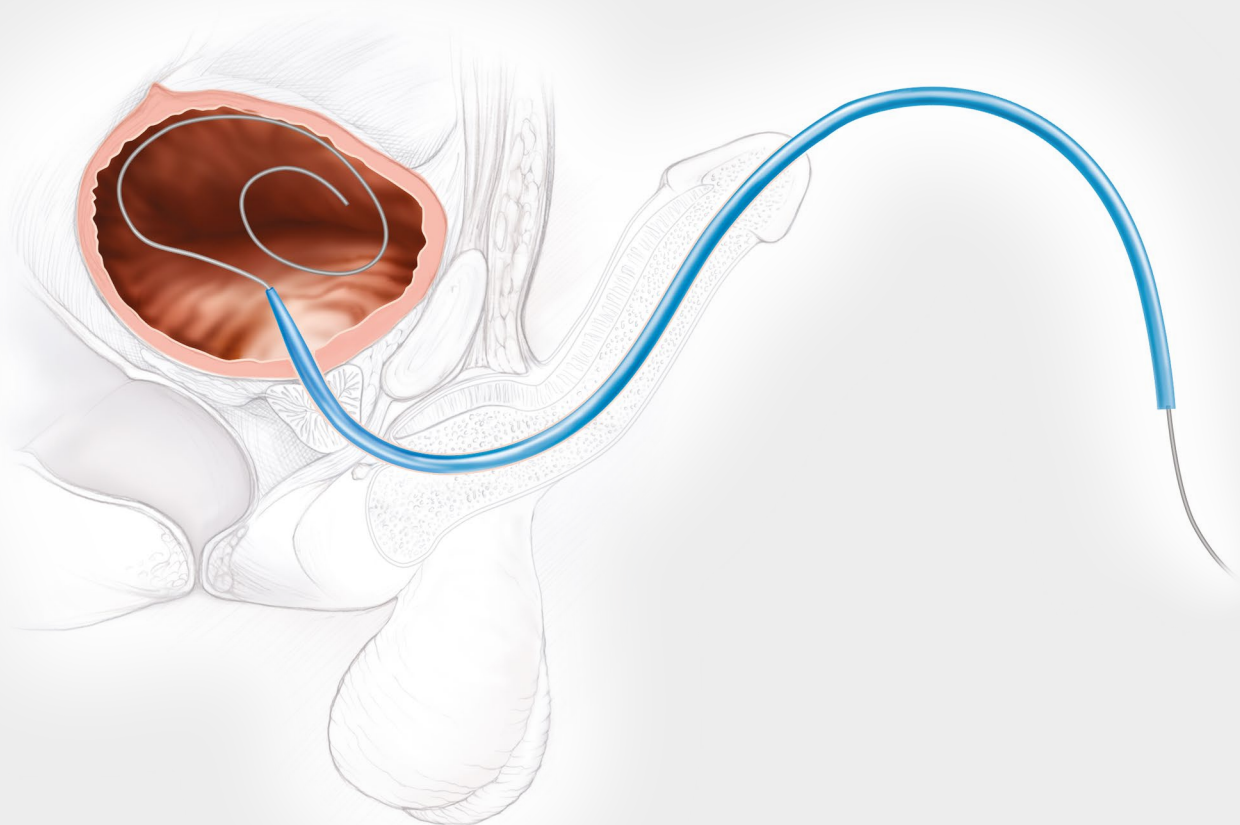


**S~Curve®**  
URETHRAL DILATOR SET

# S~Curve®


## URETHRAL DILATOR SET

Kształt rozszerzacza S~Curve ułatwia wprowadzenie i dopasowanie do naturalnej krzywizny męskiej cewki moczowej. Rozszerzaczom nadano kształt typu S~Curve i mają stożkową końcówkę.

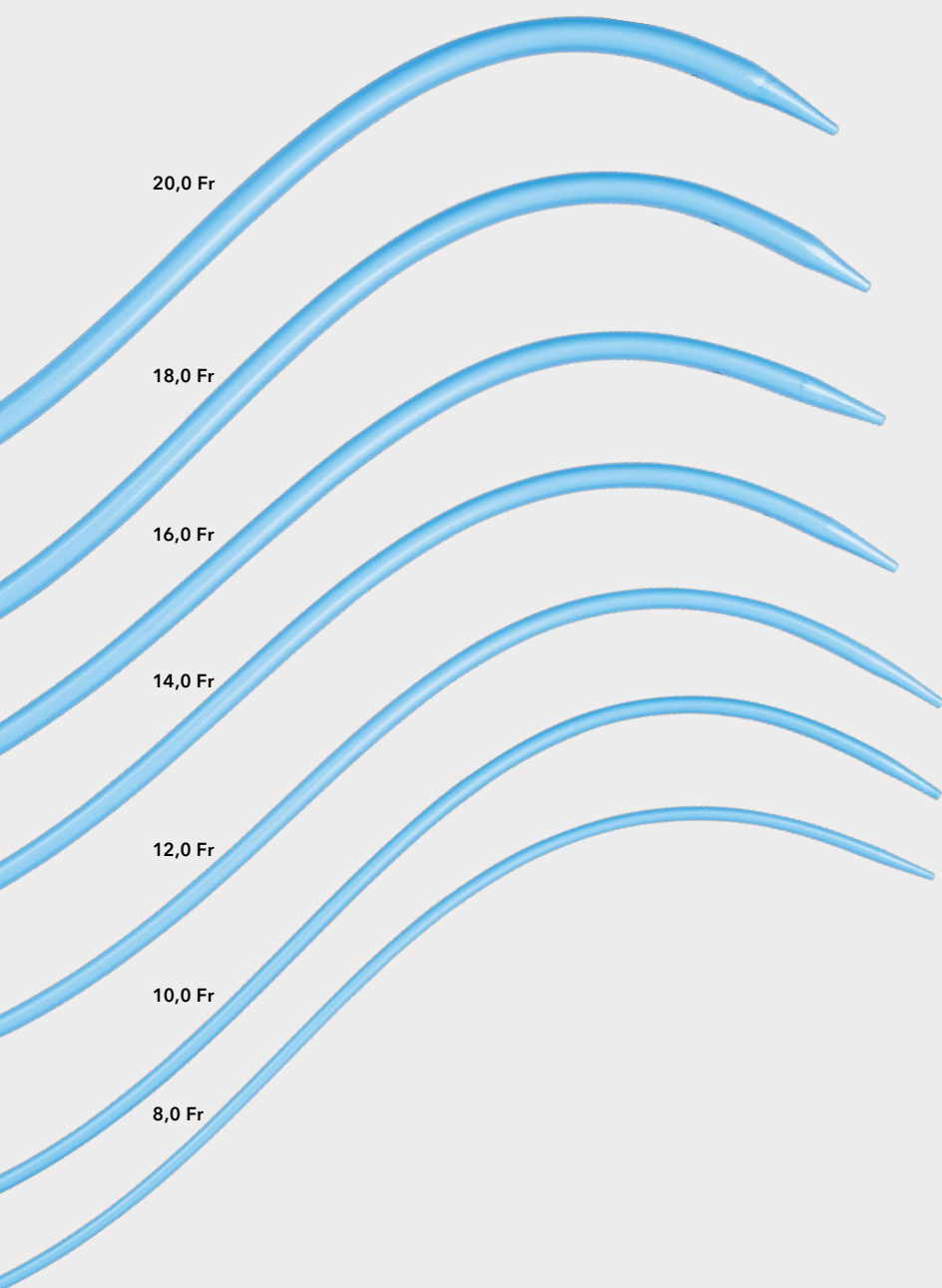

### Cechy i zalety produktu

- Aby zwiększyć właściwości poślizgowe wyrobu, ułatwiające wprowadzenie do miejsca dostępu, powierzchnię rozszerzacza pokryto powłoką hydrofilną AQ®.
- Kanał pozwala na wprowadzanie rozszerzacza po przewodniku umieszczonym wcześniej.
- Stożkowa końcówka umożliwia odprowadzenie moczu w celu potwierdzenia prawidłowego umieszczenia.
- Taca została zaprojektowana pod kątem wygody użytkowania.
- Dzięki zbiornikowi powłoka hydrofilna AQ może zostać nawodniona i aktywowana, gdy rozszerzacz nadal znajduje się na tacy.
- Tłoczone oznaczenia rozmiaru ułatwiają identyfikację i dobór rozmiarów.

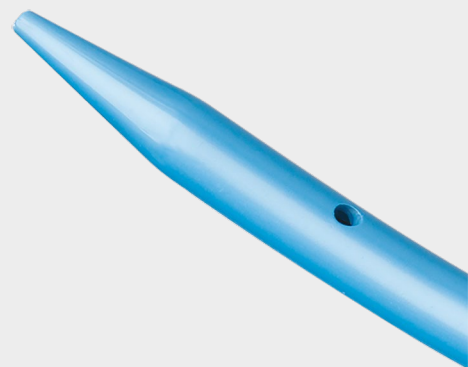

**Uwaga:** przed użyciem zanurzyć rozszerzacz z powłoką AQ w wodzie jałowej lub izotonicznym roztworze soli fizjologicznej, aby hydrofilna powierzchnia wchłonęła wodę i stała się śliska. Ułatwi to wprowadzanie w standardowych warunkach.


## Krok 1



### Założenie przewodnika

Posługując się bezpośrednim podglądem lub kontrolą fluoroskopową, umieścić **przewodnik** poprzez wprowadzenie go przez cewkę moczową do pęcherza.


## Krok 2 – metoda tradycyjna lub alternatywna

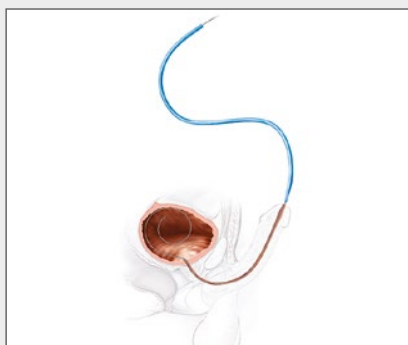

**Wprowadzić jak najmniejszy rozszerzacz w odpowiednim rozmiarze** (posługując się jedną z dwóch poniższych metod)

### Metoda tradycyjna:


- Przytrzymać penis **skierowany do góry**.
- Zorientować rozszerzacz tak, aby oznaczenie **rozmiaru Fr na niestożkowatym końcu** było skierowane **do góry**, po czym wprowadzić rozszerzacz po uprzednio umieszczonym przewodniku.

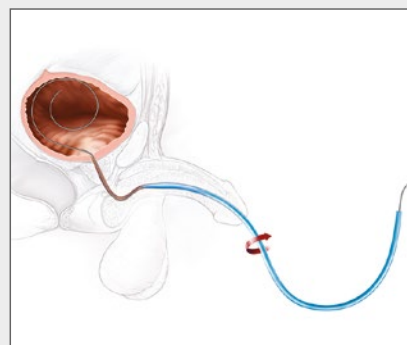

### Metoda alternatywna:

- Przytrzymać penis **skierowany do dołu**.
- Zorientować rozszerzacz tak, aby oznaczenie **rozmiaru Fr na niestożkowatym końcu** było skierowane **do dołu**, po czym wprowadzić rozszerzacz po uprzednio umieszczonym przewodniku.
- Wprowadzić rozszerzacz do poziomu **opuszki cewki moczowej**.
- Po umieszczeniu rozszerzacza na poziomie opuszki cewki moczowej obrócić rozszerzacz o **180 stopni**, aby oznaczenie rozmiaru Fr na rozszerzaczu było teraz skierowane **do góry**.

## Krok 3

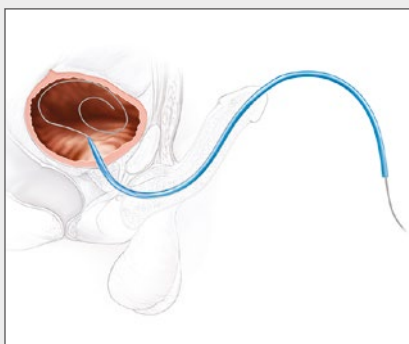

### Wprowadzanie rozszerzacza

Kontynuować wprowadzanie rozszerzacza do pęcherza moczowego. **Prawidłowe umieszczenie zostanie potwierdzone przez wypływ moczu.**


## Krok 4

### Uzyskiwanieżądanegorozmiaru

Utrzymując położenie przewodnika, usunąć aktualnie umieszczony rozszerzacz i zastąpić go następnym z kolei rozszerzaczem w odpowiednim rozmiarze.

Powtarzać kroki 2-3 według potrzeby, przechodząc od najmniejszego do największego rozszerzacza w odpowiednim rozmiarze, aż do uzyskaniażądanegorozszerzenia cewki moczowej.

Pełne wskazania do stosowania, ostrzeżenia, środki ostrożności, przeciwwskazania oraz potencjalne zdarzenia niepożądane zostały opisane w instrukcji użycia produktu.

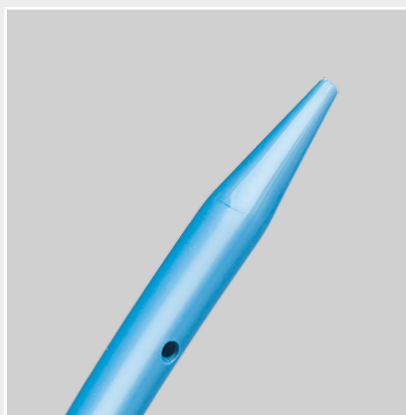

## S~Curve®

URETHRAL DILATOR SET

Zestaw rozszerzaczy cewki moczowej S~Curve służy do rozszerzania cewki moczowej u dorosłych mężczyzn poprzez umieszczenie wyrobu techniką wsteczną.



| Numer katalogowy                                   | Numer referencyjny części | Fr       | Długość cm |
|----------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------|
| <b>Zestaw rozszerzaczy cewki moczowej S~Curve®</b> |                           |          |            |
| G32789                                             | 073701-CD                 | 8,0-20,0 | 37         |
| <b>Rozszerzacze cewki moczowej S~Curve®</b>        |                           |          |            |
| G46249                                             | 073722-CD                 | 22,0     | 37         |
| G46250                                             | 073724-CD                 | 24,0     | 37         |
| G46251                                             | 073726-CD                 | 26,0     | 37         |

Niektóre produkty lub numery części mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Cook lub w dziale obsługi klienta i dystrybucji.

Informacje na temat ryzyka związanego z produktem można znaleźć w instrukcji użycia dostępnej na stronie [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu).

### Customer Service

EU website: [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu)  
 EDI: [cookmedical.eu/edi](http://cookmedical.eu/edi)  
 Distributors: +353 61239240, [emea.distributors@cookmedical.com](mailto:emea.distributors@cookmedical.com)  
 Austria: +43 179567121, [oe.orders@cookmedical.com](mailto:oe.orders@cookmedical.com)  
 Belgium: +32 27001702, [be.orders@cookmedical.com](mailto:be.orders@cookmedical.com)  
 Denmark: +45 38487607, [da.orders@cookmedical.com](mailto:da.orders@cookmedical.com)  
 Finland: +358 972519996, [fi.orders@cookmedical.com](mailto:fi.orders@cookmedical.com)  
 France: +33 171230269, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Germany: +49 21612723770, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 Hungary: +36 17779199, [hu.orders@cookmedical.com](mailto:hu.orders@cookmedical.com)  
 Iceland: +354 8007615, [is.orders@cookmedical.com](mailto:is.orders@cookmedical.com)  
 Ireland: +353 61239252, [ie.orders@cookmedical.com](mailto:ie.orders@cookmedical.com)  
 Italy: +39 0269682853, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Netherlands: +31 202013367, [nl.orders@cookmedical.com](mailto:nl.orders@cookmedical.com)  
 Poland: +48 223060159, [pl.orders@cookmedical.com](mailto:pl.orders@cookmedical.com)  
 Spain: +34 912702691, [es.orders@cookmedical.com](mailto:es.orders@cookmedical.com)  
 Sweden: +46 858769468, [se.orders@cookmedical.com](mailto:se.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - French: +41 448009609, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - Italian: +41 448009609, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - German: +41 448009609, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 United Kingdom: +44 2073654183, [uk.orders@cookmedical.com](mailto:uk.orders@cookmedical.com)

USA website: [cookmedical.com](http://cookmedical.com)  
 EDI: [cookmedical.com/edi.do](http://cookmedical.com/edi.do)

Americas:  
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335  
 Email: [customersupport@cookmedical.com](mailto:customersupport@cookmedical.com)

Australia:  
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283  
 Email: [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)



CC, URO-A4