


Ultrapasse os desafios da dilatação uretral masculina

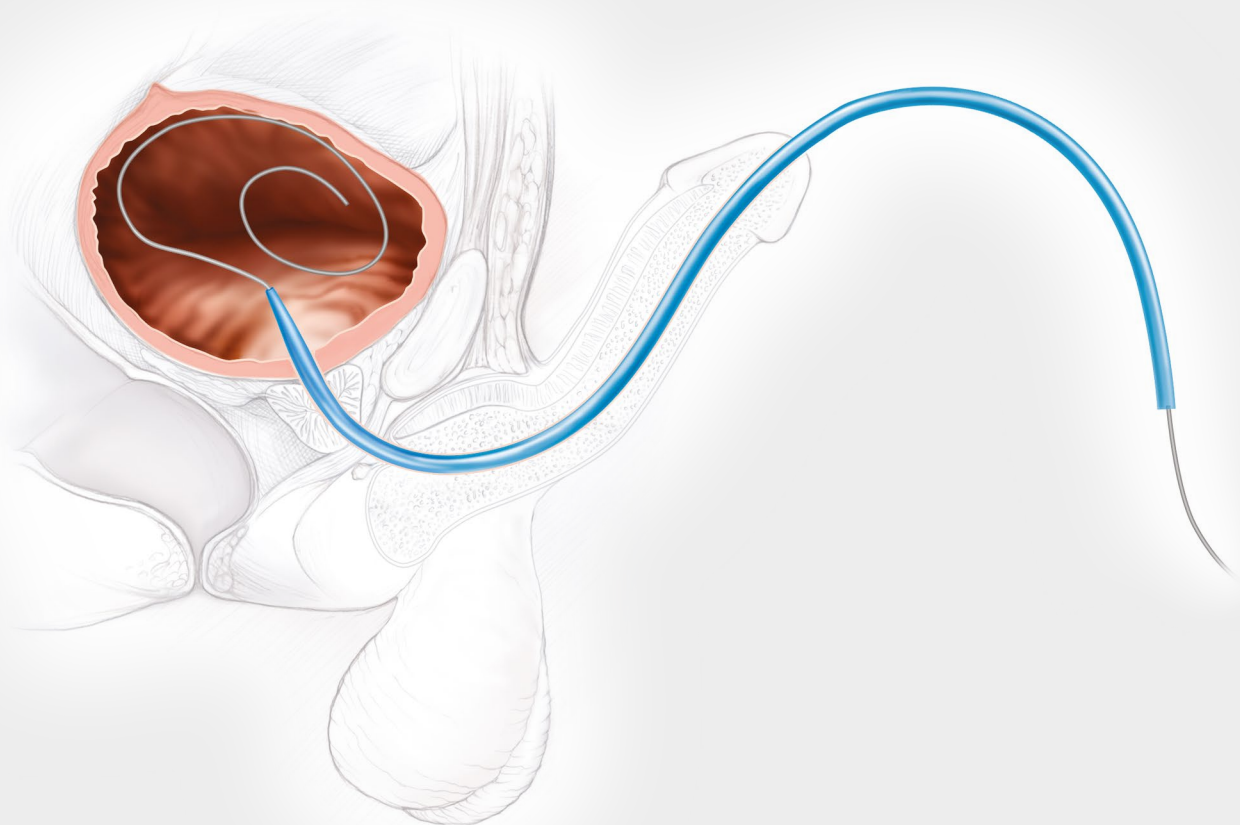


S~Curve®
URETHRAL DILATOR SET

S~Curve®


URETHRAL DILATOR SET

A forma S~Curve ajuda a atravessar e a apoiar a curvatura natural da uretra masculina. Os dilatadores têm a forma de uma curva em S (S~Curve) e uma ponta cônica.

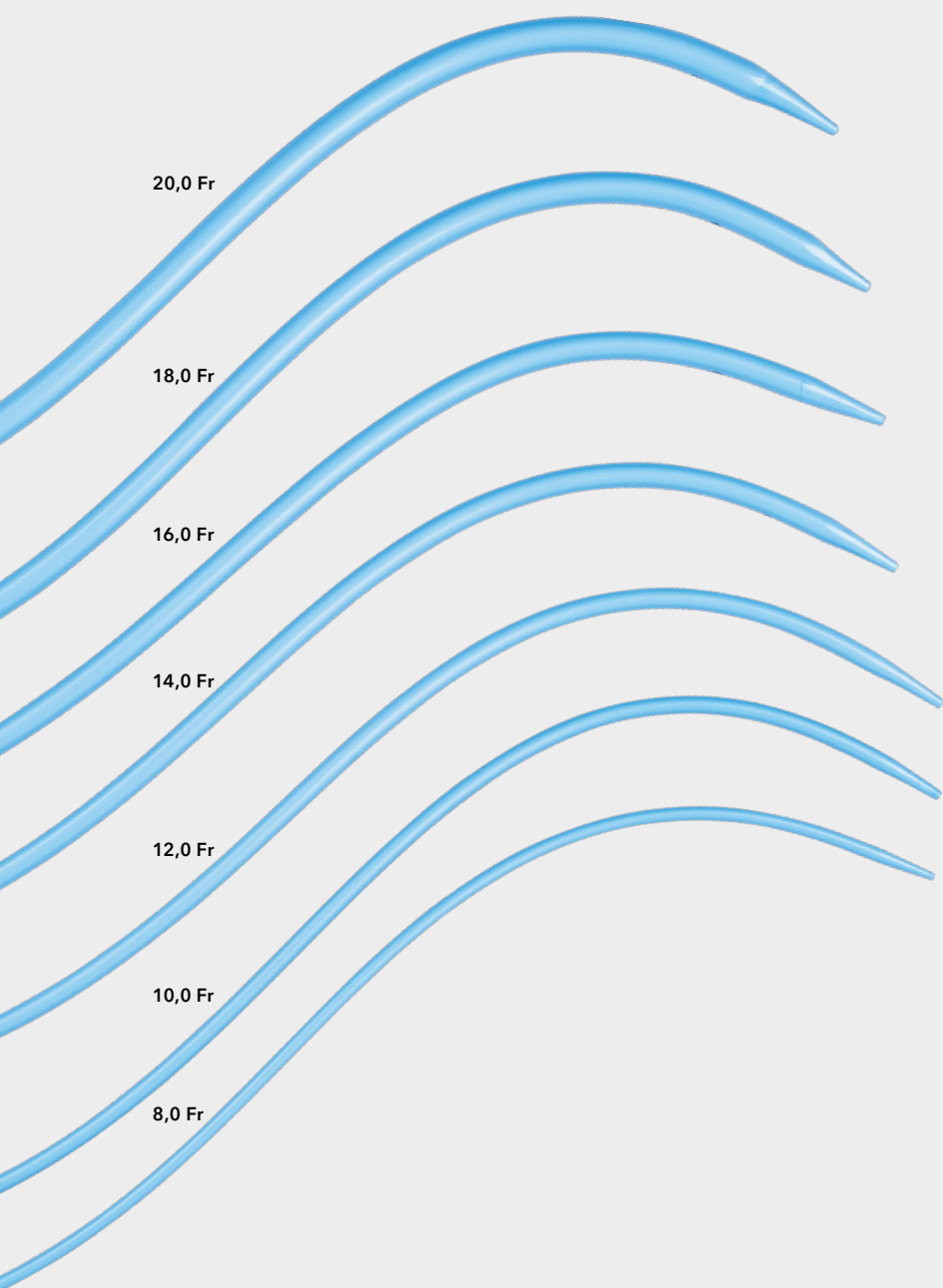

Características e benefícios

- O revestimento hidrófilo AQ® é aplicado na superfície do dilatador para melhorar a lubricidade do dispositivo e facilitar a entrada no local de acesso.
- O lúmen permite-lhe avançar o dilatador sobre um fio-guia previamente posicionado.
- A ponta com orifício permite a drenagem da urina para confirmar a colocação correta.
- A bandeja foi concebida para ser prática.
- O reservatório permite a hidratação e ativação do revestimento hidrófilo AQ enquanto o dilatador ainda está na bandeja.
- As marcas de tamanho em relevo permitem-lhe identificar e seleccionar os tamanhos.

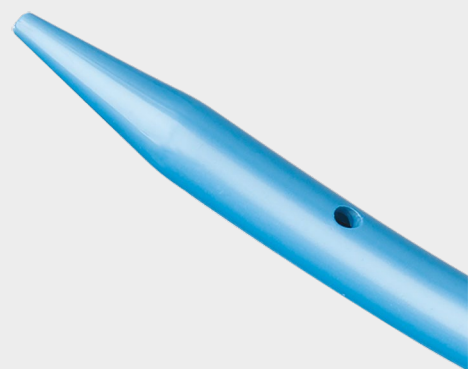

Nota: Antes de utilizar, mergulhe o dilatador AQ em água esterilizada ou soro fisiológico isotônico para permitir que a superfície hidrófila absorva o líquido e se torne lubrificada. Isto facilitará a colocação em condições normais.


Passo 1



Posicione o fio-guia

Sob visualização direta ou controle fluoroscópico, posicione um **fio-guia** através da uretra até ao interior da bexiga.


Passo 2 – Método tradicional ou método alternativo

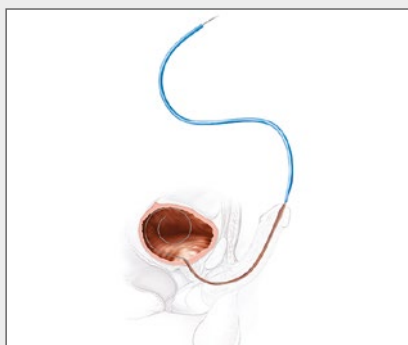

Introduza o dilatador do tamanho mais pequeno possível
(utilize um dos dois métodos abaixo)

Método tradicional:


- Segure o pénis, **mantendo-o para cima**.
- Oriento o dilatador de forma a que o **tamanho French indicado na extremidade sem ponta cónica** fique virado **para cima** e introduza o dilatador sobre o fio-guia anteriormente colocado.

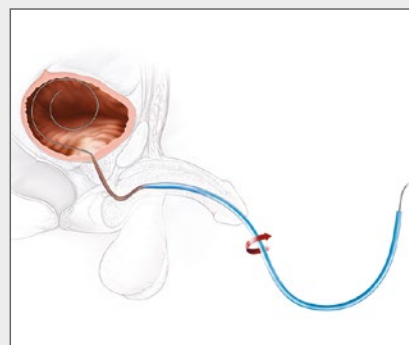

Método alternativo:

- Segure o pénis, **mantendo-o para baixo**.
- Oriento o dilatador de forma a que o **tamanho French indicado na extremidade sem ponta cónica** fique virado **para baixo** e introduza o dilatador sobre o fio-guia anteriormente colocado.
- Faça avançar o dilatador até ao nível da **uretra bulbar**.
- Com o dilatador posicionado ao nível da uretra bulbar, rode o dilatador **180°** de modo a que o dilatador fique agora orientado com o indicador do tamanho French virado **para cima**.

Passo 3

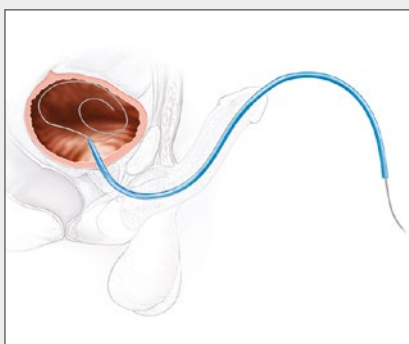

Avance o dilatador

Continue a avançar o dilatador para dentro da bexiga. **A drenagem da urina confirmará a colocação correta.**


Passo 4

Progrida até ao tamanho pretendido

Enquanto mantém a posição do fio-guia, remova o dilatador atualmente colocado e substitua-o pelo dilatador de tamanho adequado seguinte.

Repita os passos 2-3 conforme necessário, progredindo do dilatador do tamanho mais pequeno possível para o maior até conseguir a dilatação uretral desejada.

Consulte as Instruções de Utilização (IdU) do produto para obter informações completas sobre a prescrição, avisos, precauções, contraindicações e potenciais acontecimentos adversos.

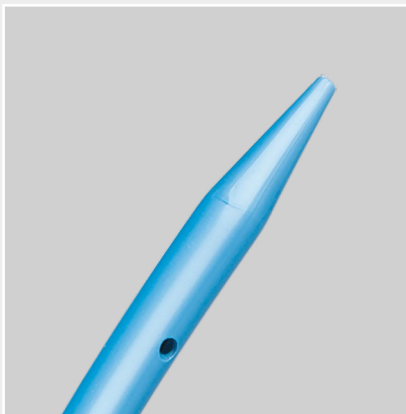

S~Curve®

URETHRAL DILATOR SET

O conjunto do Dilatador Uretral S~Curve é utilizado para a dilatação da uretra masculina em doentes adultos através da inserção retrógrada dos dispositivos.



Número de encomenda	Número de referência	Fr	Comprimento cm
Conjunto do Dilatador Uretral S~Curve®			
G32789	073701-CD	8,0-20,0	37
Dilatadores Uretrais S~Curve®			
G46249	073722-CD	22,0	37
G46250	073724-CD	24,0	37
G46251	073726-CD	26,0	37

Determinados produtos ou referências podem não estar disponíveis em todos os mercados. Para mais informações, contacte o seu representante local da Cook ou o Apoio ao Cliente e Distribuição. Consulte a informação sobre os riscos do produto nas Instruções de Utilização em cookmedical.eu.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 21612723770, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
Email: customersupport@cookmedical.com

Australia:
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
Email: cau.custserv@cookmedical.com



CC, URO-A4