

Zur Erfassung und Extraktion kleiner Steinfragmente



NCompass[®]
NITINOL STONE EXTRACTOR

NCompass®


NITINOL STONE EXTRACTOR

Der NCompass® Nitinol-Steinextraktor mit seiner Multidraht-Geometrie ist darauf ausgelegt, Steine in verschiedensten Größen zu erfassen.


Voll entfaltet bietet die einzigartige Multidraht-Geometrie ein herkömmliches Vierdraht-Körbchen. Wenn es teilweise geschlossen wird, formt sich das Körbchen zu einer Konfiguration mit 16 nebeneinanderliegenden Drähten um. Der NCompass Extraktor mit seinen zwei Konfigurationen ermöglicht die routinemäßige Erfassung und Extraktion intakter Steine. Die Konstruktion des NCompass ermöglicht die Erfassung mehrerer kleiner Fragmente nach der intrakorporalen Lithotripsie.

Merkmale


Komplexe Multidraht-Geometrie	Duale Körbchenkonfiguration: voll entfaltet ein herkömmliches Körbchen mit 4 Drähten; teilweise geschlossen ein Körbchen mit 16 Drähten. Dank der einzigartigen Multidraht-Geometrie kann das Körbchen Steine vollständig umschließen, was eine sichere Erfassung und Extraktion ermöglicht und gleichzeitig zur Verhinderung von Steinmigration beiträgt.
Design ohne Spitze	Die Ausführung des Körbchens ohne Spitze knüpft an die des NCircle® Körbchens an.
Nitinol-Legierung	Der Memory-Effekt sorgt dafür, dass beim Entfalten des Körbchens die Ausgangsform wiederhergestellt wird. Dank Knickresistenz ist das Körbchen besonders robust. Die Flexibilität des Körbchens ermöglicht die Erfassung und Freigabe der Steine.
Flexible Schleuse	Während der Steinmanipulation erlaubt die flexible Schleuse die kontinuierliche Auslenkung des Ureteroscops.
Schleuse mit 1,7 Fr	Neben der 2,2-Fr-Version auch in einer kleineren Ausführung mit 1,7 Fr erhältlich. Die Größe und die Flexibilität der Schleuse sorgen für besseren Irrigationsfluss durch den Arbeitskanal des Endoscops.

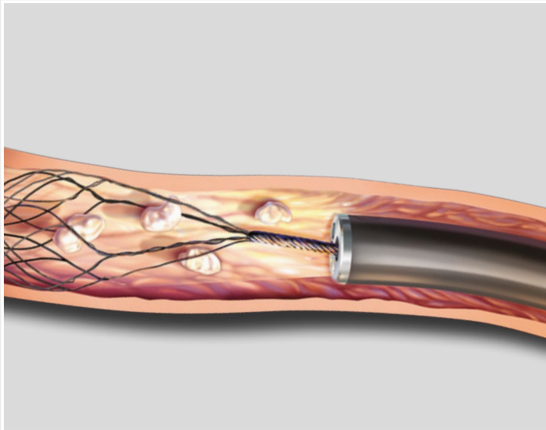

1. Bei voller Entfaltung lassen sich mit dem NCompass Steinextraktor Steine einfangen.

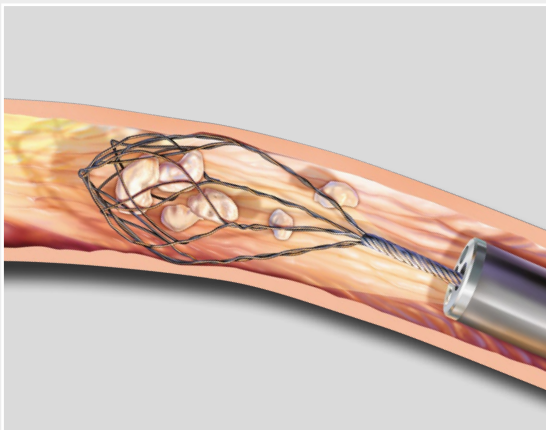

2. Die Multidraht-Sektion am distalen Ende des Körbchens erfasst die Steine beim Zurückziehen des Körbchens durch den Ureter. Diese Erfassung kann Steinmigration verhindern.

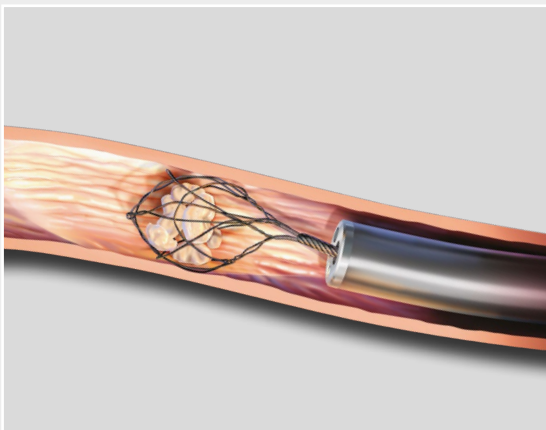

3. Der NCompass Steinextraktor wird langsam geschlossen, sodass die Multidraht-Geometrie die Steine zur sicheren Erfassung und Extraktion vollständig umschließt.



NCompass®

NITINOL STONE EXTRACTOR

Zur Steinmanipulation und -entfernung im Harntrakt über den Arbeitskanal eines Endoskops mithilfe eines Körbchens aus Nitinoldraht im Rahmen zystoskopischer oder ureterskopischer Verfahren.

Bestellnummer	Referenznummer	Fr	Länge cm	Durchmesser des Körbchens cm	Konfiguration des Körbchens	Konfiguration der Spitze
G46027	NCT4-017115	1,7	115	0,9	4 Drähte, 16 Drähte	ohne Spitze
G32701	NCT4-024115	2,4	115	0,9	4 Drähte, 16 Drähte	ohne Spitze
G32863	NCT4-024115-MB	2,4	115	1,5	4 Drähte, 16 Drähte	ohne Spitze

Manche Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst. Beachten Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 21612723770, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 Email: customersupport@cookmedical.com

Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 Email: cau.custserv@cookmedical.com

