



Zenith Flex[®]

AAA ENDOVASCULAR GRAFT

SCHEDA PER LA PIANIFICAZIONE E LA DETERMINAZIONE DELLE DIMENSIONI IDONEE DEL DISPOSITIVO


Misure anatomiche

Sito di introduzione del corpo principale

- Iliaca destra Misura iliaca esterna (IE) _____ mm
 Iliaca sinistra Misura iliaca esterna (IE) _____ mm

Posizione del lettino

- _____ Arteria renale più bassa _____ Biforcazione aortica
 15 mm sotto l'arteria renale più bassa, controllare che ci sia un aumento del 10% del diametro. _____ Origine dell'iliaca interna CL
 _____ Origine dell'iliaca interna IL

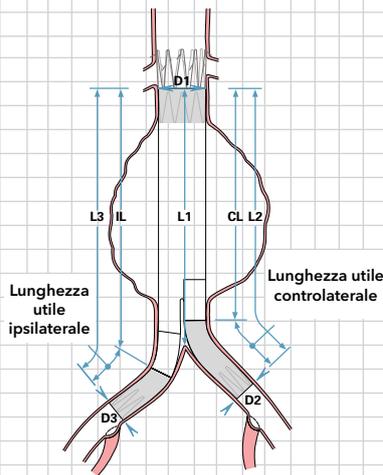

Diametri: D1 D2 D3
 Lunghezze: L1 L2 L3

Quando si usa la TC per la lunghezza, valutare approssimativamente la deviazione laterale/ tortuosità e sommarla alla differenza nella posizione del lettino.

Se la selezione del diametro o della lunghezza della protesi è condizionata da altri fattori, regolarli opportunamente.

Corpo principale

Diametri del corpo principale

D1 mm	Diametro della protesi mm
18-19	22
20-21	24
22	26
23-24	28
25-26	30
27-28	32
29-32	36

Diametro della protesi 22-32

L1 mm	Lunghezza CL ¹ mm	Lunghezza IL ² mm
88-103	82	112
104-118	96	126
119-133	111	141
134-148	125	155
149-163	140	170

Diametro della protesi 36

L1 mm	Lunghezza CL ¹ mm	Lunghezza IL ² mm
101-120	95	125
121-139	113	143
140-158	131	161
159-177	149	179

¹Lunghezza del corpo principale sul lato controlaterale
²Lunghezza del corpo principale sul lato ipsilaterale

Codice di ordinazione del corpo principale = TFFB -

- - ZT
 Diametro della protesi Lunghezza CL / Lunghezza della protesi

Data: _____ ID paziente: _____
 Ospedale: _____
 Nome del medico: _____
 Telefono del medico: _____
 E-mail del medico: _____
 Firma del medico: _____

Branca iliaca controlaterale per endoprotesi addominale Spiral-Z[™]

meno = _____
 L2 Lunghezza CL Lunghezza utile controlaterale

Branca controlaterale (ZSLE) della protesi

D2 mm	Diametro della protesi mm
8	9
9	11
10-12	13
13-15	16
16-18	20
19-20	24

Branca controlaterale (ZSLE) della protesi

Lunghezza utile controlaterale mm	Lunghezza della protesi mm	Sovrapposizione consigliata mm
27-43	39 ³	22-30
44-60	56	22-30
61-77	74	22-30
78-94	90	22-30
95-111	107 ⁴	22-30
112-122	122 ⁴	22-30

³Garantire una lunghezza adeguata per la fissazione distale.

⁴Le protesi lunghe 107 e 122 mm sono disponibili solo nei diametri di 9-13 mm.

Codice di ordinazione della branca controlaterale = ZSLE -

- - ZT
 Diametro della protesi Lunghezza della protesi

Branca iliaca ipsilaterale per endoprotesi addominale Spiral-Z

meno = _____
 L3 Lunghezza IL Lunghezza utile ipsilaterale

Branca ipsilaterale (ZSLE) della protesi

D3 mm	Diametro della protesi mm
8	9
9	11
10-12	13
13-15	16
16-18	20
19-20	24

Branca ipsilaterale (ZSLE) della protesi

Lunghezza utile ipsilaterale mm	Lunghezza della protesi mm	Sovrapposizione consigliata mm
20-35 Diametro della protesi 20-24	39	22-30
20-35 Diametro della protesi 9-16	56	22-55
36-42	56	22-30
43-59	74	22-55
60-76	90	22-55
77-93	107 ⁴	22-55
94-122	122 ⁴	22-55

⁴Le protesi lunghe 107 e 122 mm sono disponibili solo nei diametri di 9-13 mm.

Codice di ordinazione della branca ipsilaterale = ZSLE -

- - ZT
 Diametro della protesi Lunghezza della protesi

