

ARBEITSBLATT ZUR PLANUNG UND GRÖSSENBESTIMMUNG VON PROTHESEN


Datum: _____ Patienten-Nr.: _____
 Klinik: _____
 Name des Arztes: _____
 Telefonnummer des Arztes: _____
 E-Mail-Adresse des Arztes: _____
 Unterschrift des Arztes: _____
 Auftragsnummer: _____

Anatomische Abmessungen

Einführungsstelle

- Rechte A. iliaca A. iliaca externa (EI) Abmessung _____ mm
 Linke A. iliaca A. iliaca externa (EI) Abmessung _____ mm

Einführungssystem: Prothesen von 24-30 mm = 6,0 mm (Außen-Ø)
 Prothesen von 32-38 mm = 7,1 mm (Außen-Ø)
 Prothesen von 40-46 mm = 7,7 mm (Außen-Ø)

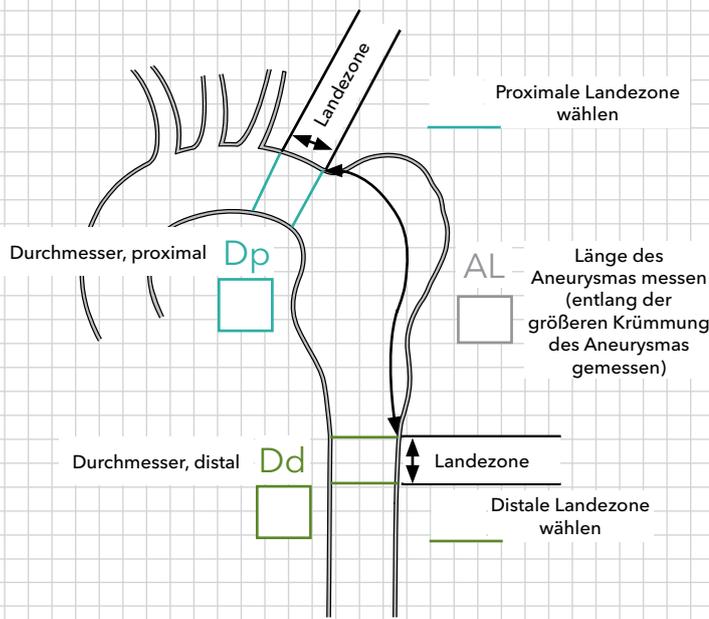

Aortendurchmesser, im CT-Scan, gemessen von Außenwand zu Außenwand

Komponenten

Proximale und distale Komponenten werden empfohlen, da sie eine aktive proximale und distale Fixierung bieten.

Eine proximale Komponente allein sollte nur bei einem Ulcus und/oder Aneurysma sacciforme verwendet werden.

Überlappung der Komponenten

Empfohlen wird eine Mindestüberlappung von 3 Stents. Darauf achten, dass die distale Prothese nicht über den oberen Abdichtungsstent der proximalen Prothese hinausreicht.

Konisch zulaufende Gefäßanatomie

Falls der Dp-Wert (proximaler Halsdurchmesser) 4 mm größer als der Dd-Wert (distaler Halsdurchmesser) ist, kann eine konisch zulaufende proximale Prothese verwendet werden.

Proximale Prothesen

Proximaler Aortendurchmesser (Dp) =

Den Prothesendurchmesser anhand der unten stehenden Tabelle auswählen. Ein adäquates Übermaß der Prothese in Relation zum Gefäßdurchmesser ist in der Tabelle berücksichtigt.

$$\boxed{\text{AL}} \text{ plus } \boxed{\text{Landezone}} = \boxed{\text{Proximale Arbeitslänge}}$$

Die Prothesenlänge auswählen, die der Arbeitslänge am nächsten kommt.
Proximale Prothese (ZTA-P) **Proximale konisch zulaufende Prothese (ZTA-PT)**

Durchmesser mm	Länge mm	Durchmesser mm	Länge mm
24, 26	105	30	108
28, 30, 32	109, 155, 201	32	178, 201
34, 36	113, 161, 209	34, 36	161, 209
38, 40	117, 167, 217	38, 40	167, 217
42	121, 173, 225	42	173, 225
44, 46	125, 179, 233	44, 46	179, 233

Proximale Prothese

Bestellnummer = ZTA-P - -

Prothesendurchmesser Prothesenlänge

Proximale konisch zulaufende Prothese

Bestellnummer = ZTA-PT - - -

Prothesendurchmesser Prothesendurchmesser Prothesenlänge

Distale Prothesen

Distaler Aortendurchmesser (Dd) =

Den Prothesendurchmesser anhand der unten stehenden Tabelle auswählen. Ein adäquates Übermaß der Prothese in Relation zum Gefäßdurchmesser ist in der Tabelle berücksichtigt.

$$\boxed{\text{AL}} \text{ plus } \boxed{\text{Landezone}} = \boxed{\text{Distale Arbeitslänge}}$$

Die Prothesenlänge auswählen, die der Arbeitslänge am nächsten kommt.

Distale Prothese (ZTA-D)

Durchmesser mm	Länge mm
28, 30, 32	160
34, 36	142, 190
38	147, 197
40	197
42	204
44, 46	211

Distale Prothese Bestellnummer = ZTA-D - -

Prothesendurchmesser Prothesenlänge


Tabelle zur Bestimmung des Prothesenübermaßes in Relation zum Gefäßdurchmesser (10-25%)

Außendurchmesser der Aorta (Dp und Dd) mm	Prothesendurchmesser mm
20-21	24
22-23	26
24-25	28
26-27	30
28-29	32
30	34
31-32	36
33-34	38
35-36	40
37-38	42
39	44
40-42	46

Bei Auswahl eines Prothesendurchmessers die Tabelle zur Bestimmung des Prothesenübermaßes beachten.

Die Auswahl des Durchmessers kann durch weitere Erwägungen beeinflusst werden.

NOTIZEN ZUM FALL

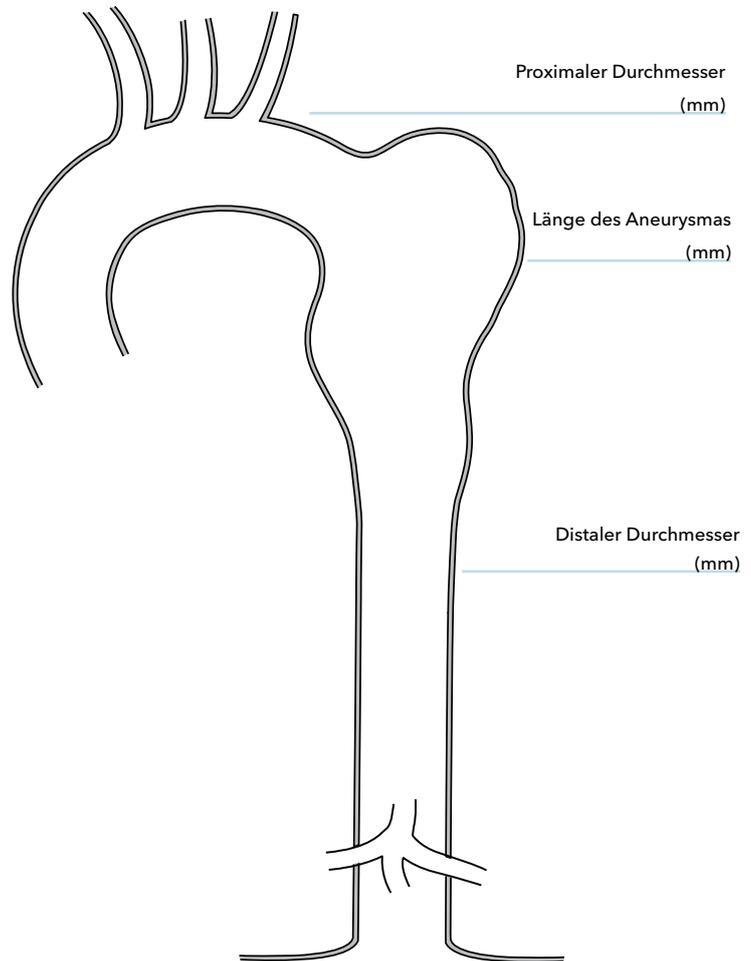

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001633, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
E-mail: orders@cookmedical.com
Australia:
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
E-mail: cau.custserv@cookmedical.com-A4

