

Zenith Alpha™

THORACIC ENDOVASCULAR GRAFT

HOJA PARA LA PLANIFICACIÓN Y LA SELECCIÓN DE TAMAÑOS DE DISPOSITIVOS


Fecha: _____ ID del paciente: _____
 Hospital: _____
 Nombre del médico: _____
 Teléfono del médico: _____
 Correo electrónico del médico: _____
 Firma del médico: _____
 Referencia de la compra: _____

Medidas anatómicas

Punto de inserción

- Ilíaca derecha Medida de la ilíaca externa (IE) _____ mm
 Ilíaca izquierda Medida de la ilíaca externa (IE) _____ mm

Sistema de introducción: Endoprótesis vasculares de 24-30 mm = 6,0 mm (DE)
 Endoprótesis vasculares de 32-38 mm = 7,1 mm (DE)
 Endoprótesis vasculares de 40-46 mm = 7,7 mm (DE)

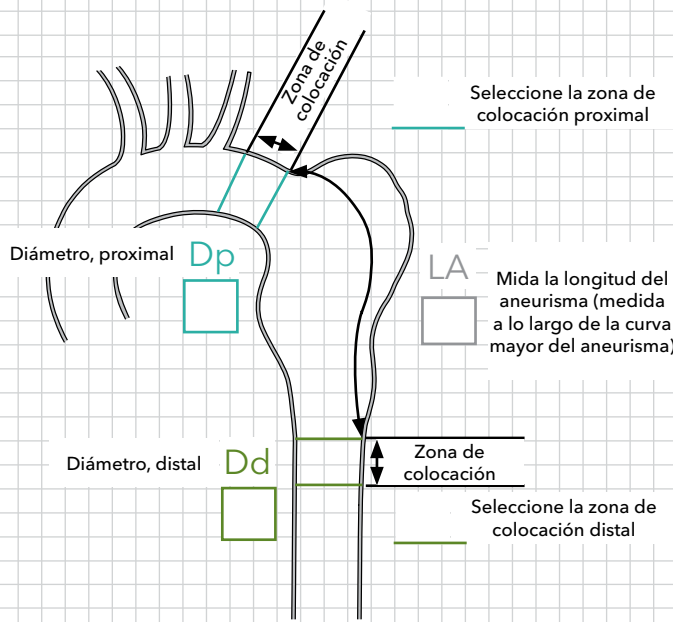

Diámetros del vaso aórtico; los diámetros obtenidos de las TAC son de pared exterior a pared exterior

Componentes

Se recomiendan los componentes proximal y distal debido a que ofrecen fijación activa en sentido proximal y distal.

Solo debe usarse un componente proximal independientemente para úlceras o aneurismas saculares.

Solapamiento entre dispositivos

Se recomienda un solapamiento mínimo de 3 stents. Asegúrese de que la endoprótesis vascular distal no se extienda más allá del stent superior de sellado de la endoprótesis vascular proximal.

Estructura anatómica cónica

Si el Dp (diámetro del cuello proximal) es 4 mm > Dd (diámetro del cuello distal), puede utilizarse una endoprótesis vascular cónica proximal.

Endoprótesis vasculares proximales

Diámetro proximal (Dp) del vaso aórtico =

Seleccione el diámetro de la endoprótesis vascular en la tabla de sobredimensionamiento respecto al vaso que se muestra a continuación.

más Zona de colocación = Longitud de trabajo proximal
 LA

Seleccione la longitud de la endoprótesis vascular que se aproxime más a la longitud de trabajo.

Endoprótesis vascular proximal (ZTA-P)

Diámetro mm	Longitud mm
24, 26	105
28, 30, 32	109, 155, 201
34, 36	113, 161, 209
38, 40	117, 167, 217
42	121, 173, 225
44, 46	125, 179, 233

Endoprótesis vascular cónica proximal (ZTA-PT)

Diámetro mm	Longitud mm
30	108
32	178, 201
34, 36	161, 209
38, 40	167, 217
42	173, 225
44, 46	179, 233

Referencia de la endoprótesis vascular proximal =

ZTA-P -

-
 Diámetro de la endoprótesis vascular - Longitud de la endoprótesis vascular

Referencia de la endoprótesis vascular cónica proximal =

ZTA-PT -

- -
 Diámetro de la endoprótesis vascular - Diámetro de la endoprótesis vascular - Longitud de la endoprótesis vascular

Endoprótesis vasculares distales

Diámetro distal (Dd) del vaso aórtico =

Seleccione el diámetro de la endoprótesis vascular en la tabla de sobredimensionamiento respecto al vaso que se muestra a continuación.

más Zona de colocación = Longitud de trabajo distal
 LA

Seleccione la longitud de la endoprótesis vascular que se aproxime más a la longitud de trabajo.

Endoprótesis vascular distal (ZTA-D)

Diámetro mm	Longitud mm
28, 30, 32	160
34, 36	142, 190
38	147, 197
40	197
42	204
44, 46	211

Referencia de la endoprótesis vascular distal = ZTA - D -

-
 Diámetro de la endoprótesis vascular - Longitud de la endoprótesis vascular

Tabla de sobredimensionamiento respecto al vaso (10 %-25 %)


Diámetro exterior del vaso aórtico (Dp y Dd) mm	Diámetro de la endoprótesis vascular mm
20 - 21	24
22 - 23	26
24 - 25	28
26 - 27	30
28 - 29	32
30	34
31 - 32	36
33 - 34	38
35 - 36	40
37 - 38	42
39	44
40 - 42	46

Al seleccionar el diámetro de la endoprótesis vascular, consulte la tabla de sobredimensionamiento.

Es posible que otras consideraciones afecten a la selección del diámetro.



NOTAS DEL CASO

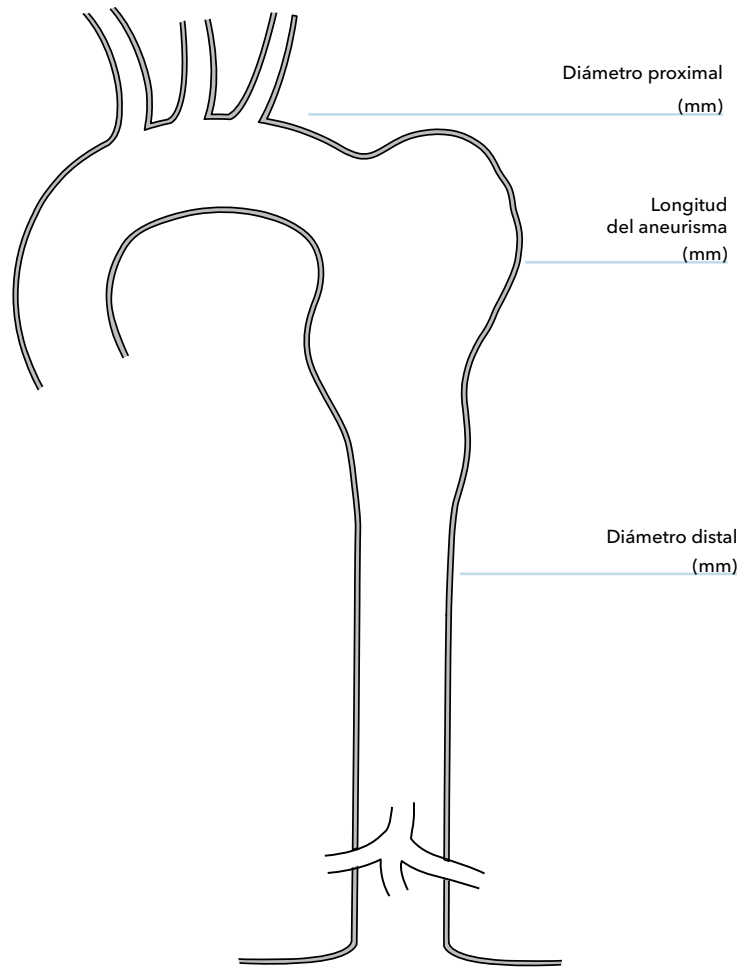

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001633, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: orders@cookmedical.com
Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com-A4



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-A4

