

# Zenith Alpha™

THORACIC ENDOVASCULAR GRAFT

## SCHEDA PER LA PIANIFICAZIONE E LA DETERMINAZIONE DELLE DIMENSIONI IDONEE DEL DISPOSITIVO

Data: \_\_\_\_\_ ID paziente: \_\_\_\_\_

Ospedale: \_\_\_\_\_

Nome del medico: \_\_\_\_\_

Telefono del medico: \_\_\_\_\_

E-mail del medico: \_\_\_\_\_

Firma del medico: \_\_\_\_\_


Numero dell'ordine d'acquisto: \_\_\_\_\_

### Misure anatomiche

Sito di introduzione

- Iliaca destra Misura iliaca esterna (IE) \_\_\_\_\_ mm
- Iliaca sinistra Misura iliaca esterna (IE) \_\_\_\_\_ mm

Sistema di introduzione    Protesi da 24-30 mm: 6,0 mm (Ø est.)  
 Protesi da 32-38 mm: 7,1 mm (Ø est.)  
 Protesi da 40-46 mm: 7,7 mm (Ø est.)

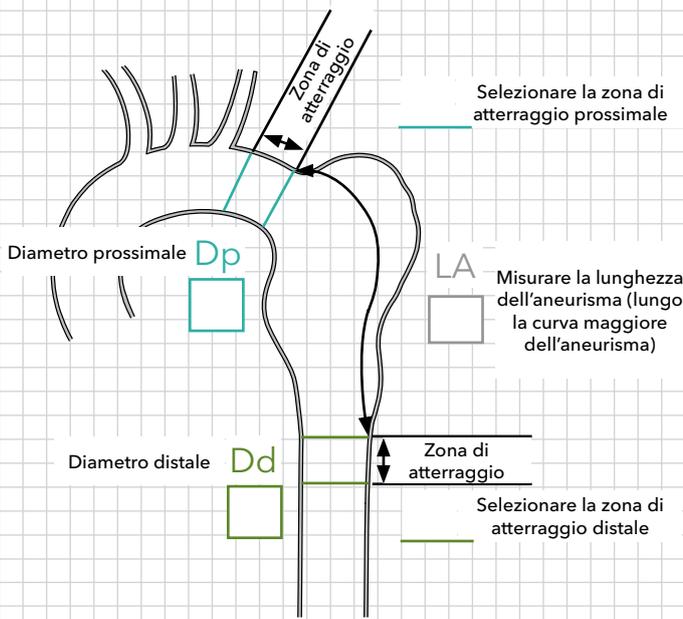

Diametri del vaso aortico; le misurazioni dei diametri ottenute mediante TC sono da parete esterna a parete esterna

### Componenti

I componenti prossimali e distali sono consigliati in quanto forniscono il fissaggio attivo prossimale e distale.

Un componente prossimale deve essere usato in modo autonomo solo per aneurismi da ulcera e/o saccolari.

### Sovrapposizione dei dispositivi

Si consiglia una sovrapposizione minima pari a 3 stent. Accertarsi che la protesi distale non si estenda oltre lo stent di sealing superiore della protesi prossimale.

### Anatomia rastremata

Se il Dp (diametro del colletto prossimale) supera di 4 mm il Dd (diametro del colletto distale), può essere usata una protesi prossimale rastremata.

### Protesi prossimali

Diametro del vaso aortico prossimale (Dp) =

Selezionare il diametro della protesi nella Tabella di sovradimensionamento rispetto al vaso, qui sotto.

$$\boxed{\text{LA}} \text{ più } \boxed{\text{Zona di atterraggio}} = \boxed{\text{Lunghezza utile prossimale}}$$

Selezionare la protesi della lunghezza più vicina alla lunghezza utile.

#### Protesi prossimale (ZTA-P)

Diametro mm	Lunghezza mm
24, 26	105
28, 30, 32	109, 155, 201
34, 36	113, 161, 209
38, 40	117, 167, 217
42	121, 173, 225
44, 46	125, 179, 233

#### Protesi prossimale rastremata (ZTA-PT)

Diametro mm	Lunghezza mm
30	108
32	178, 201
34, 36	161, 209
38, 40	167, 217
42	173, 225
44, 46	179, 233

Codice di ordinazione della protesi prossimale = ZTA-P -  -

Diametro della protesi      Lunghezza della protesi

Codice di ordinazione protesi prossimale rastremata = ZTA-PT -  -  -

Diametro della protesi      Diametro della protesi      Lunghezza della protesi

### Protesi distali

Diametro del vaso aortico distale (Dd) =

Selezionare il diametro della protesi nella Tabella di sovradimensionamento rispetto al vaso, qui sotto.

$$\boxed{\text{LA}} \text{ più } \boxed{\text{Zona di atterraggio}} = \boxed{\text{Lunghezza utile distale}}$$

Selezionare la protesi della lunghezza più vicina alla lunghezza utile.

#### Protesi distale (ZTA-D)

Diametro mm	Lunghezza mm
28, 30, 32	160
34, 36	142, 190
38	147, 197
40	197
42	204
44, 46	211

Codice di ordinazione della protesi distale = ZTA-D -  -

Diametro della protesi      Lunghezza della protesi

### Tabella di sovradimensionamento rispetto al vaso (10%-25%)

Diametro esterno vaso aortico (Dp e Dd) mm	Diametro della protesi mm
20 - 21	24
22 - 23	26
24 - 25	28
26 - 27	30
28 - 29	32
30	34
31 - 32	36
33 - 34	38
35 - 36	40
37 - 38	42
39	44
40 - 42	46


Per la selezione del diametro della protesi fare riferimento alla Tabella di sovradimensionamento.

La scelta del diametro può essere influenzata da ulteriori considerazioni.



ID paziente: \_\_\_\_\_

## APPUNTI SUL CASO

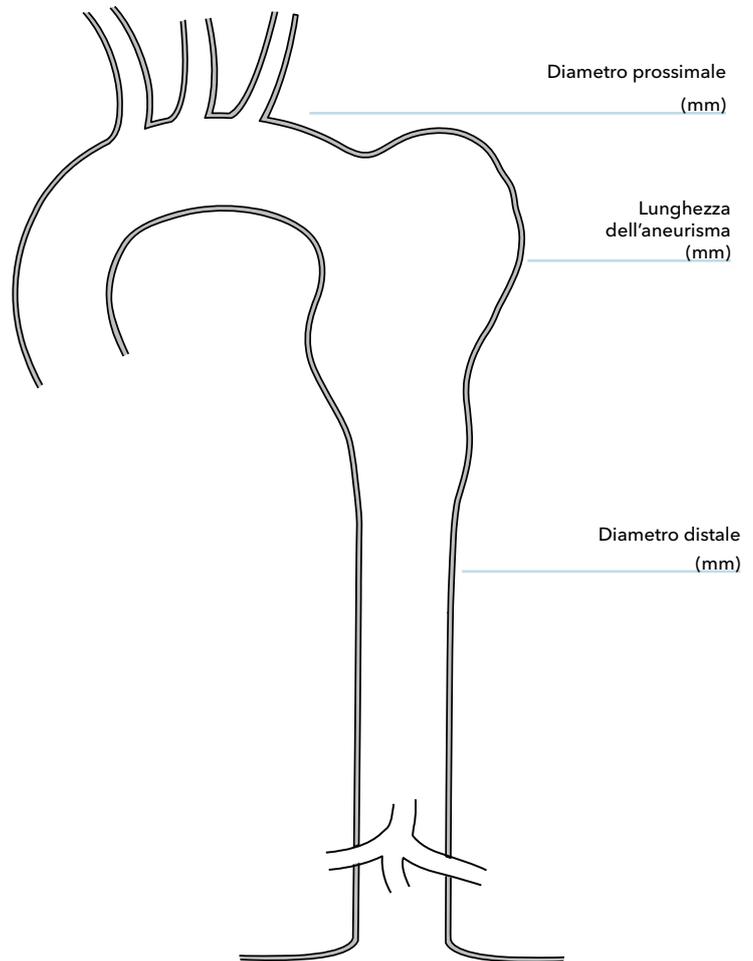

### Customer Service

EU Website: [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu)  
EDI: [cookmedical.eu/edi](http://cookmedical.eu/edi)  
Distributors: +353 61239240, [ssc.distributors@cookmedical.com](mailto:ssc.distributors@cookmedical.com)  
Austria: +43 179567121, [oe.orders@cookmedical.com](mailto:oe.orders@cookmedical.com)  
Belgium: +32 27001633, [be.orders@cookmedical.com](mailto:be.orders@cookmedical.com)  
Denmark: +45 38487607, [da.orders@cookmedical.com](mailto:da.orders@cookmedical.com)  
Finland: +358 972519996, [fi.orders@cookmedical.com](mailto:fi.orders@cookmedical.com)  
France: +33 171230269, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
Germany: +49 6950072804, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
Hungary: +36 17779199, [hu.orders@cookmedical.com](mailto:hu.orders@cookmedical.com)  
Ireland: +353 61239252, [ie.orders@cookmedical.com](mailto:ie.orders@cookmedical.com)  
Italy: +39 0269682853, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
Netherlands: +31 202013367, [nl.orders@cookmedical.com](mailto:nl.orders@cookmedical.com)  
Norway: +47 23162968, [no.orders@cookmedical.com](mailto:no.orders@cookmedical.com)  
Spain: +34 912702691, [es.orders@cookmedical.com](mailto:es.orders@cookmedical.com)  
Sweden: +46 858769468, [se.orders@cookmedical.com](mailto:se.orders@cookmedical.com)  
Switzerland - French: +41 448009609, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
Switzerland - Italian: +41 448009609, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
Switzerland - German: +41 448009609, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
United Kingdom: +44 2073654183, [uk.orders@cookmedical.com](mailto:uk.orders@cookmedical.com)

USA Website: [cookmedical.com](http://cookmedical.com)

EDI: [cookmedical.com/edi.do](http://cookmedical.com/edi.do)

#### Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: [orders@cookmedical.com](mailto:orders@cookmedical.com)

#### Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: [cau.custserv@cookmedical.com-A4](mailto:cau.custserv@cookmedical.com-A4)



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-A4