

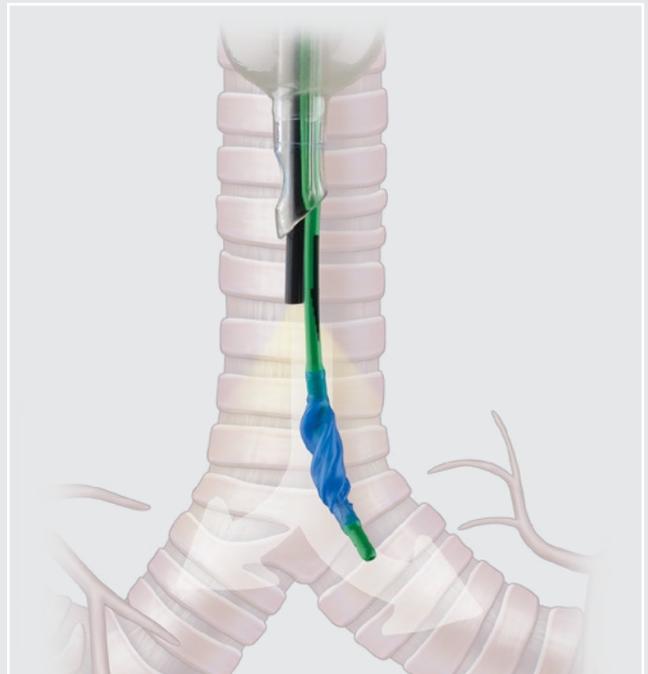


Präzise Positionierung für die Einlungenventilation

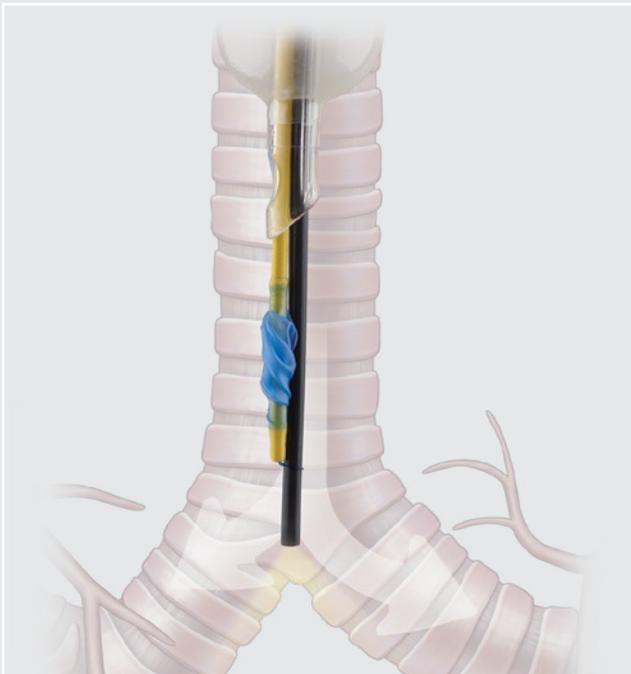

ENDOBONCHIAL
BLOCKER SETS

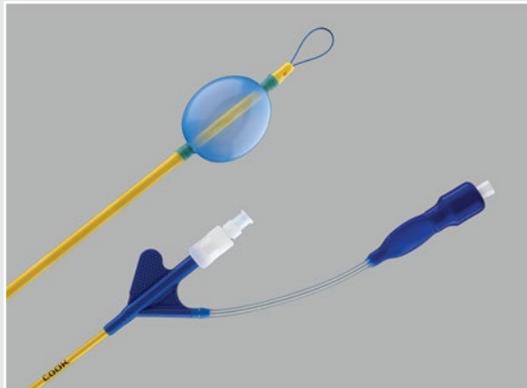

Arndt

ENDOBRONCHIAL BLOCKER


Das Arndt Endobronchialblocker-Set dient der Intubation eines einzelnen Bronchus, um die linke oder die rechte Lunge bei Eingriffen, die eine Einlungenventilation erfordern, zu isolieren. Der 5 Fr Arndt Endobronchialblocker ist für pädiatrische Populationen (Kinder von mindestens einem Jahr) indiziert. Alle anderen Größen sind nur für den Gebrauch bei Erwachsenen bestimmt.

- Die einstellbare Führungsschleife ist mit einem Bronchoskop der passenden Größe verbunden, um eine präzise Positionierung zu ermöglichen.
- Ein Niederdruckballon mit großem Volumen stellt den Oberflächenkontakt mit der Innenwand des Bronchus her und minimiert die Gefahr eines Traumas für den Bronchus.
- Die Abstandsmarkierungen geben an, wie weit der Blocker eingeführt wurde.
- Der im Set enthaltene Saugadapter bietet eine weitere Methode der Lungendeflation.

Bestellnummer	Referenznummer	Katheter Fr	Katheterlänge cm	Empfohlener Durchmesser des ETT* mm	Durchschnittliches Balloninflationsvolumen mL	Ballonkonfiguration
Arndt Endobronchialblocker-Sets						
G44109	C-AEBS-5.0-50-SPH-AS	5	50	≥ 4,5	0,5–2,0	Pädiatrie (rund)
G44114	C-AEBS-7.0-65-SPH-AS	7	65	≥ 6,0	2,0–6,0	Erwachsene (rund)
G44120	C-AEBS-9.0-78-SPH-AS	9	78	≥ 7,5	4,0–8,0	Erwachsene (rund)

* Endotrachealtubus

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst. Lesen Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.

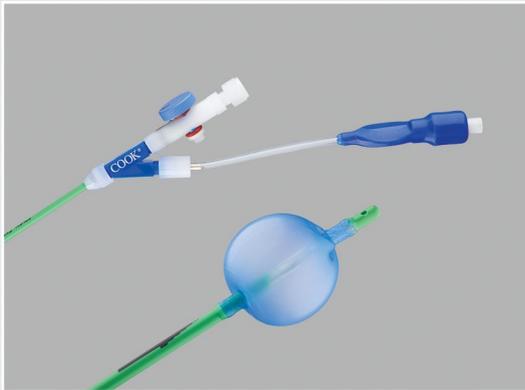

Cohen

ENDOBRONCHIAL BLOCKER

Das Cohen Endobronchialblocker-Set dient der Intubation eines einzelnen Bronchus, um die linke oder die rechte Lunge bei Eingriffen, die eine Einlungenventilation erfordern, zu isolieren. Das Produkt darf nur von Ärzten benutzt werden, die in der Einlungenventilation geschult und erfahren sind. Die Platzierung des Endobronchialblockers sollte nach Standardmethoden erfolgen.

- Die einzigartige steuerbare Spitze bietet einen großen Bewegungsumfang, um unter bronchoskopischer Kontrolle den Blocker präzise ausrichten zu können.
- Ein Niederdruckballon mit großem Volumen stellt den Oberflächenkontakt mit der Innenwand des Bronchus her und minimiert die Gefahr eines Traumas für den Bronchus.
- Abstandsmarkierungen bilden eine visuelle Hilfe, indem sie anzeigen, wie weit der Blocker eingeführt wurde.
- Der im Set enthaltene Saugadapter bietet eine weitere Methode der Lungendeflation.

Bestellnummer	Referenznummer	Katheter Fr	Katheterlänge cm	Empfohlener Durchmesser des ETT* mm	Durchschnittliches Balloninflationsvolumen mL	Ballonkonfiguration
Cohen Endobronchialblocker-Set						
G44122	C-AEBTS-9.0-65-SPH-AS	9	65	≥ 7,0	6,0–9,0	Erwachsene (rund)

* Endotrachealtubus

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst. Lesen Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com

Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



CC, URO-A4