

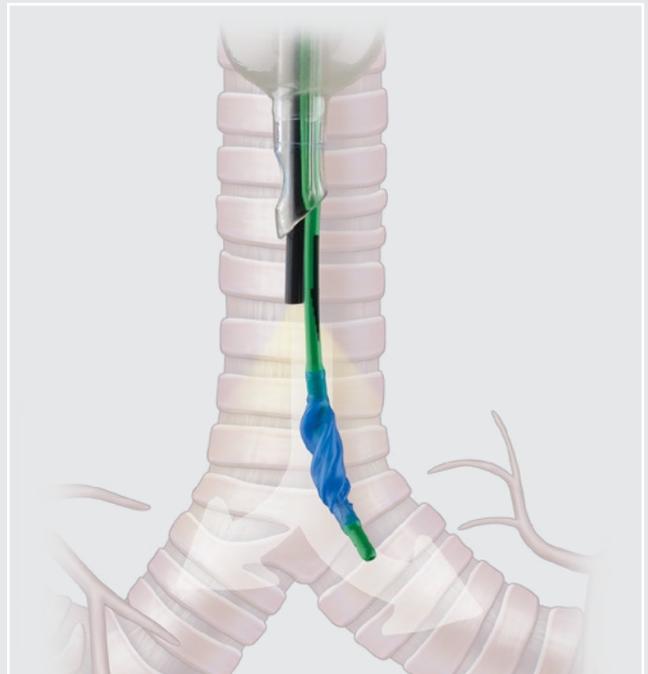


Colocación precisa para la ventilación unipulmonar

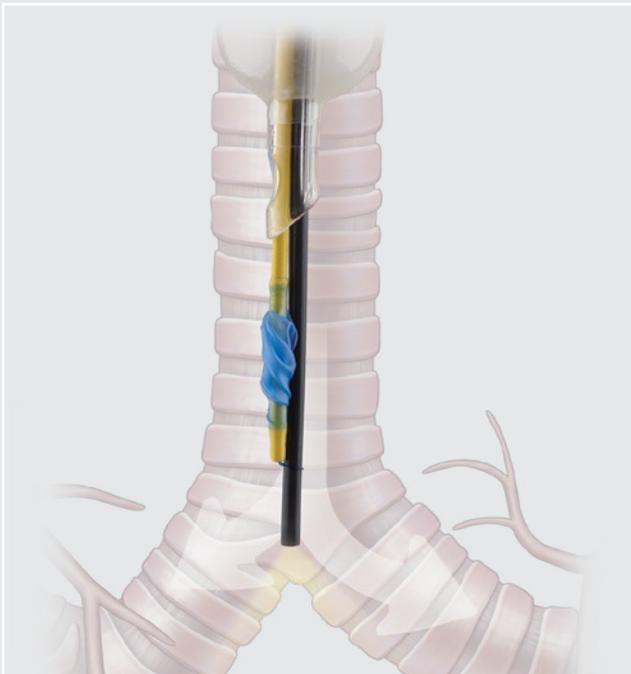

ENDOBONCHIAL
BLOCKER SETS

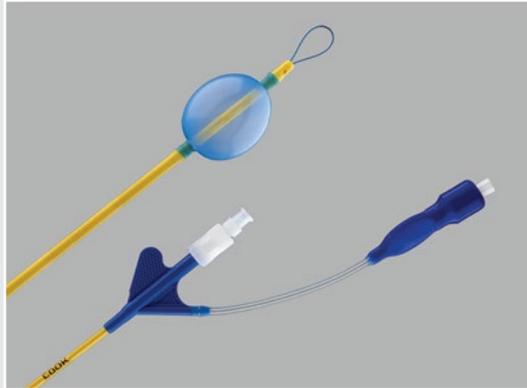

Arndt

ENDOBONCHIAL BLOCKER


El equipo bloqueador endobronquial Arndt está diseñado para intubar diferencialmente uno de los bronquios de un paciente para aislar el pulmón izquierdo o derecho en procedimientos que precisen ventilación unipulmonar. El bloqueador endobronquial Arndt de 5 Fr está indicado para poblaciones pediátricas, en niños mayores de un año. Todos los demás tamaños son para uso en adultos solamente.

- La guía con lazo ajustable se acopla a un broncoscopio del tamaño apropiado para permitir una colocación precisa.
- El balón de gran volumen y baja presión genera un contacto superficial con la pared bronquial interna, a la vez que reduce al mínimo el posible traumatismo bronquial.
- Las marcas de distancia indican hasta dónde ha llegado el bloqueador.
- El adaptador para aspiración incluido en el equipo ofrece un sistema adicional para el desinflamiento pulmonar.

Referencia	Referencia de producto	Tamaño del catéter Fr	Longitud del catéter cm	Diámetro recomendado del tubo endotraqueal* mm	Volumen medio de hinchado del balón mL	Configuración del balón
Equipos bloqueadores endobronquiales Arndt						
G44109	C-AEBS-5.0-50-SPH-AS	5	50	≥ 4,5	0,5 - 2,0	Esférico pediátrico
G44114	C-AEBS-7.0-65-SPH-AS	7	65	≥ 6,0	2,0 - 6,0	Esférico para adultos
G44120	C-AEBS-9.0-78-SPH-AS	9	78	≥ 7,5	4,0 - 8,0	Esférico para adultos

*Tubo endotraqueal

Algunos productos o referencias de producto pueden no estar disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local o con atención al cliente de Cook para obtener más información. Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.

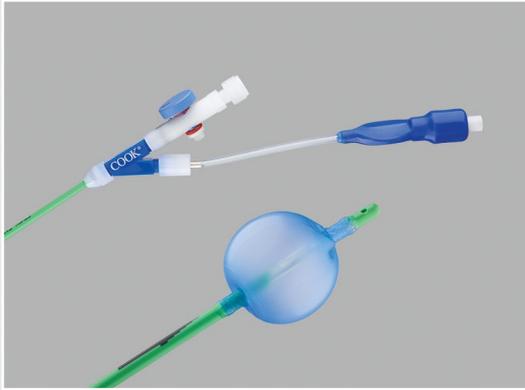

Cohen

ENDOBONCHIAL BLOCKER

El equipo bloqueador endobronquial Cohen está diseñado para intubar diferencialmente uno de los bronquios de un paciente para aislar el pulmón izquierdo o derecho en procedimientos que precisen ventilación unipulmonar. El producto está concebido para que lo utilicen médicos con formación y experiencia en técnicas de ventilación unipulmonar. Deben emplearse las técnicas habituales de colocación de bloqueadores endobronquiales.

- La exclusiva punta deflectora hace posible una gran variedad de movimientos a fin de dirigir con precisión el bloqueador, con la orientación de la broncoscopia.
- El balón de gran volumen y baja presión genera un contacto superficial con la pared bronquial interna, a la vez que reduce al mínimo el posible traumatismo bronquial.
- Las marcas de distancia proporcionan una orientación visual indicando hasta dónde ha llegado el bloqueador.
- El adaptador para aspiración incluido en el equipo ofrece un sistema adicional para el desinflamiento pulmonar.

Referencia	Referencia de producto	Tamaño del catéter Fr	Longitud del catéter cm	Diámetro recomendado del tubo endotraqueal* mm	Volumen medio de hinchado del balón mL	Configuración del balón
Equipo bloqueador endobronquial Cohen						
G44122	C-AEBTS-9.0-65-SPH-AS	9	65	≥ 7,0	6,0 - 9,0	Esférico para adultos

*Tubo endotraqueal

Algunos productos o referencias de producto pueden no estar disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local o con atención al cliente de Cook para obtener más información. Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



CC, URO-A4