

INTUBACJA | WYMIANA | PILNA WENTYLACJA | EKSTUBACJA

Jaki masz plan, gdy liczą się sekundy?




PRODUCTS FOR THE
DIFFICULT AIRWAY



cookairway.eu

Udroźnij drogi oddechowe i utrzymaj ich wentylację.

Nasze produkty do udrażniania dróg oddechowych w przypadku wystąpienia trudności intubacyjnych zostały opracowane tak, aby ułatwić skuteczną intubację, wymianę, uzyskanie dostępu do dróg oddechowych w sytuacjach nagłych oraz ekstubację.

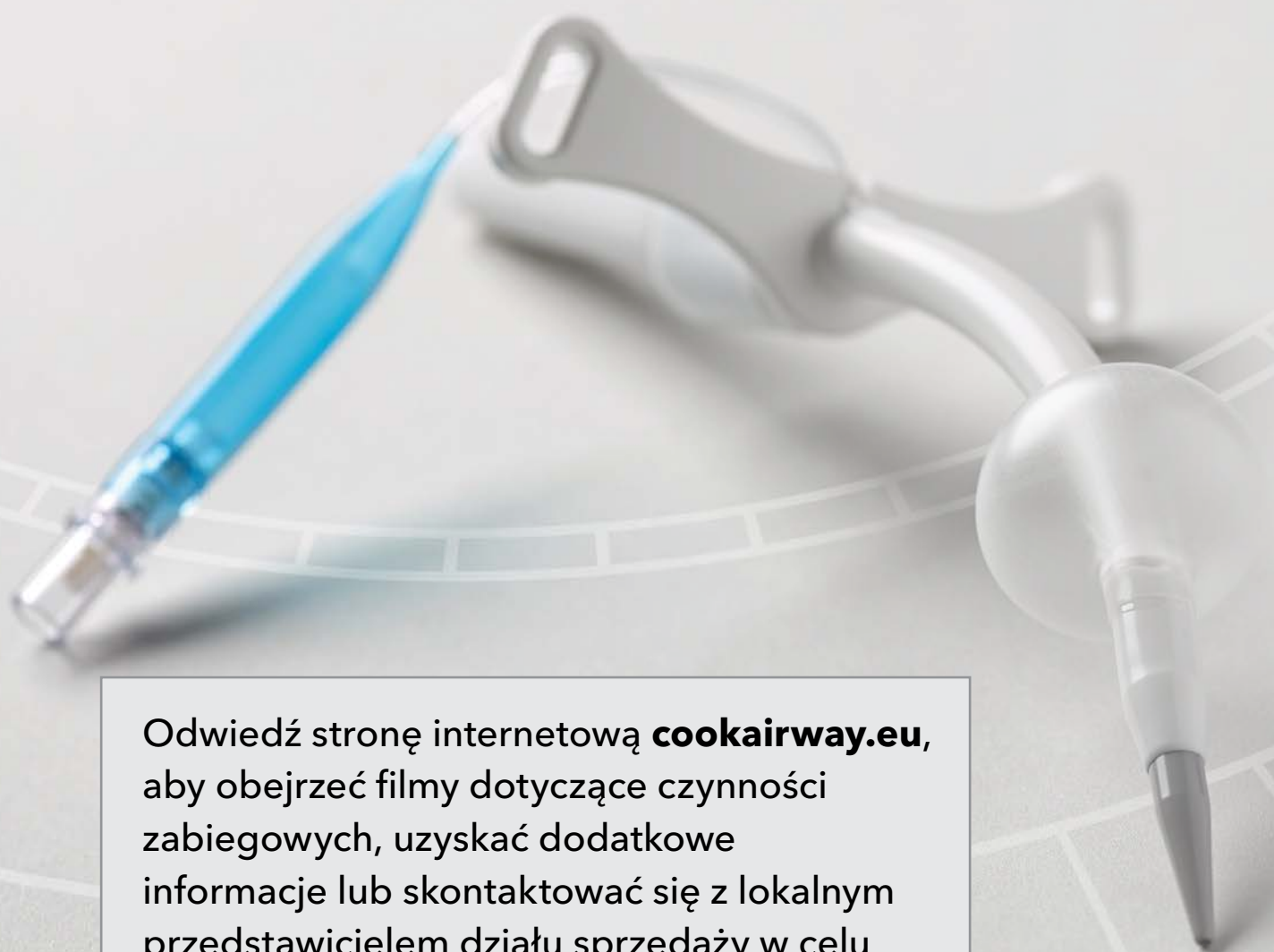

Odwiedź stronę internetową **cookairway.eu**, aby obejrzeć filmy dotyczące czynności zabiegowych, uzyskać dodatkowe informacje lub skontaktować się z lokalnym przedstawicielem działu sprzedaży w celu ustalenia terminu prezentacji produktów.

Spis treści

Intubacja

Introduktor do intubacji Frova	7
Zestaw do intubacji wstecznej Cook®	9
Cewnik do intubacji Aintree	11

Wymiana


Cewnik do wymiany AEC Cook® – ekstrasztwywny z miękką końcówką.....	15
Cewnik do wymiany AEC Cook®	16
Zestaw cewnika do wymiany AEC Arndt	17

Pilna wentylacja

Uniwersalny zestaw cewnika z mankietem do pilnej krikotyrotomii Melkera – metoda Seldingera/chirurgiczna.....	21
Zestaw cewnika z mankietem do pilnej krikotyrotomii Melkera – metoda chirurgiczna ..	22
Zestaw cewnika z mankietem do pilnej krikotyrotomii Melkera – metoda Seldingera.....	23
Zestaw cewnika do pilnej krikotyrotomii Melkera – metoda Seldingera	24
Zestaw cewnika do pilnej krikotyrotomii Melkera do specjalnych zastosowań – metoda Seldingera	25
Zestaw modulatora przepływu tlenu Enk.....	26
Cewnik do pilnej wentylacji przetchnawiczej	27

Ekstubacja

Zestaw do stopniowej ekstubacji Cook.....	30
Materiały stosowane w przypadku trudności intubacyjnych.....	32

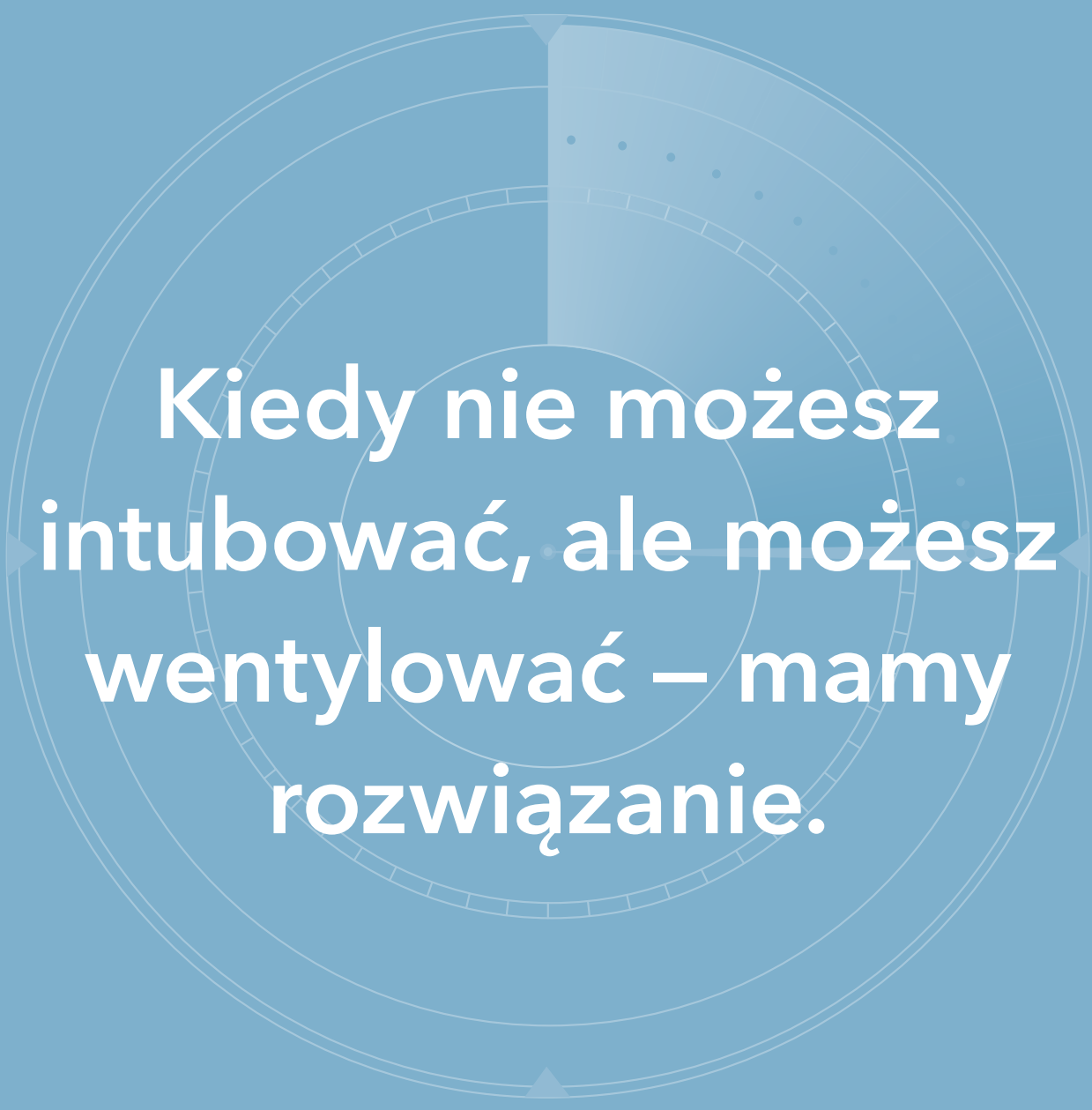

**Kiedy nie możesz
intubować, ale możesz
wentylować – mamy
rozwiązanie.**

Intubacja

Nasze introduktory do intubacji umożliwiają dostarczanie tlenu podczas pierwszej intubacji i mogą pomóc przy wprowadzaniu bez kontroli wzrokowej, wprowadzaniu wstecznym oraz za pomocą bronchoskopu.





Introduktor do intubacji Frova

Przeznaczony do ułatwiania intubacji dotchawiczej u pacjentów z niewystarczającym uwidocznieniem głośni.



Dane produktu

- Tępa, zakrzywiona końcówka ułatwia prawidłowe umiejscowienie introduktora za strunami głosowymi, wewnątrz tchawicy.
- Opcjonalny mandryn usztywniający¹ usztywnia proksymalną i środkową część cewnika, podczas gdy część dystalna pozostaje elastyczna.
- Kanał i porty boczne umożliwiają podawanie tlenu, gdy wyrób jest używany ze złączkami Rapi-Fit® i źródłem tlenu.
- Centymetrowe oznaczenia na cewniku zapewniają dokładne dopasowanie z rurkami dotchawiczymi.
- Zdejmowane złączki Rapi-Fit umożliwiają w razie potrzeby podawanie tlenu.

Elementy

- Introduktor do intubacji Frova
- Mandryn usztywniający¹
- Złączka Rapi-Fit (złącze 15 mm)
- Złączka Rapi-Fit (złącze Luer Lock)

Numer katalogowy	Numer referencyjny części	Rozmiar introduktora Fr	Długość introduktora cm	Do wprowadzania rurek dotchawiczych ² o śr. wewn. mm	Zawiera złączkę (typ)	Liczba sztuk
Z mandrynem usztywniającym¹						
G12591	C-CAE-8.0-35-FII	8	35	3 lub większa	15 mm i złącze Luer Lock	1
G23646	C-CAE-14.0-70-FII	14	70	6 lub większa	15 mm i złącze Luer Lock	1
Bez mandrynu usztywniającego¹						
G23645	C-CAE-14.0-70-FI	14	70	6 lub większa	15 mm i złącze Luer Lock	1
Tylko introduktor						
G48303	C-CAE-14.0-70-FIC	14	70	6 lub większa	Brak	10
G53517	C-CAE-14.0-70-FIC-SPOPS ³	14	70	6 lub większa	Brak	1

1. Zwany również „kaniulą”.

2. Rurka dotchawicza nie wchodzi w skład zestawu.

3. Zapakowany w kształt litery U, aby ułatwić przenoszenie i transport.

Niektóre produkty lub numery części mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Cook Medical lub w dziale obsługi klienta i dostaw.

Informacje na temat ryzyka związanego z produktem można znaleźć w instrukcji obsługi dostępnej na stronie cookmedical.eu.

Złączka Rapi-Fit®




Nasze zdejmowane złączki Rapi-Fit mogą być używane ze złączem 15 mm oraz złączem Luer Lock. Złączki umożliwiają przyłączanie cewników do wentylacji do urządzeń wentylacyjnych, aby w razie potrzeby dostarczać tlen podczas zabiegów intubacji lub wymiany.

Zgodnie z opisem do każdego produktu do intubacji i wymiany dołączane są złączki Rapi-Fit 15 mm i Luer Lock.


Złączkę Rapi-Fit 15 mm można też zamówić oddzielnie (tylko do cewników 14 Fr).

Na rysunku przedstawiono złączkę Rapi-Fit 15 mm.

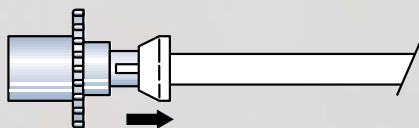

Zakładanie

Umieścić złączkę na cewniku. Popchnąć biały kołnierz do przodu i zablokować złączkę w odpowiednim położeniu.

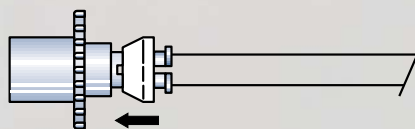

Zdejmowanie

Pociągnąć biały kołnierz w celu zwolnienia, a następnie zdjąć złączkę z cewnika.

Numer katalogowy	Numer referencyjny części	Liczba sztuk
G33019	C-RFA-14.0-15-CAE	1

Niektóre produkty lub numery części mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Cook Medical lub w dziale obsługi klienta i dostaw.

Informacje na temat ryzyka związanego z produktem można znaleźć w instrukcji obsługi dostępnej na stronie cookmedical.eu.

Zestaw do intubacji wstecznej Cook®

Przeznaczony do wspomagania wprowadzania rurki dotchawiczej przy zabiegach mających na celu uzyskanie dostępu w przypadku trudności intubacyjnych lub w sytuacjach nagłych, podczas których nie jest możliwe uwidocznienie strun głosowych ze względu na wydzieliny, krew i/lub wady anatomiczne.



Dane produktu

- Wstępny dostęp za pomocą metody Seldingera poprzez błonę pierścienno-tarczową pozwala na wsteczne (dogłowe) umieszczenie przewodnika wyprowadzanego przez jamę ustną lub nosową.
- Stożkowa końcówka cieniodajnego cewnika umożliwia łatwiejszą nawigację w ciele pacjenta.
- Wprowadzanie od przodu pustego cewnika prowadzącego z dystalnymi portami bocznymi i złączkami Rapi-Fit pozwala na dostarczanie pacjentowi tlenu i ułatwia umieszczenie rurki dotchawiczej.

Elementy

- Cewnik do intubacji wstecznej Cook
- Igła dostępowa cewnika
- Jednocześnie igła wprowadzająca do dostępu przezskórnego
- Strzykawka o poj. 6 mL
- Prowadnik z dwiema giętkimi końcówkami (prostą i zakrzywioną) oraz znacznikami pozycjonującymi
- Jednorazowe ząbkowane klipsy hemostatyczne
- Złączka Rapi-Fit (złącze 15 mm)
- Złączka Rapi-Fit (złącze Luer Lock)

Numer katalogowy	Numer referencyjny części	Rozmiar cewnika Fr	Długość cewnika cm	Średnica przewodnika inch/mm	Długość przewodnika cm	Do wprowadzania rurki dotchawiczej* o śr. wewn. mm	Zawiera złączkę (typ)	Liczba sztuk
G09727	C-RETRO-6.0-50-38J-110	6	50	0,038/0,97	110	2,5 lub większa	Brak	1
G07647	C-RETRO-11.0-70-38J-110	11	70	0,038/0,97	110	4 lub większa	Brak	1
G10554	C-RETRO-14.0-70-38J-110-CAE	14	70	0,038/0,97	110	5 lub większa	15 mm i złącze Luer Lock	1

*Rurka dotchawicza nie wchodzi w skład zestawu.


Niektóre produkty lub numery części mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Cook Medical lub w dziale obsługi klienta i dostaw.

Informacje na temat ryzyka związanego z produktem można znaleźć w instrukcji obsługi dostępnej na stronie cookmedical.eu.



Cewnik do intubacji Aintree

Przeznaczony do wspomagania intubacji fiberoskopowej i do prostej, atraumatycznej wymiany rurki dotchawiczej.

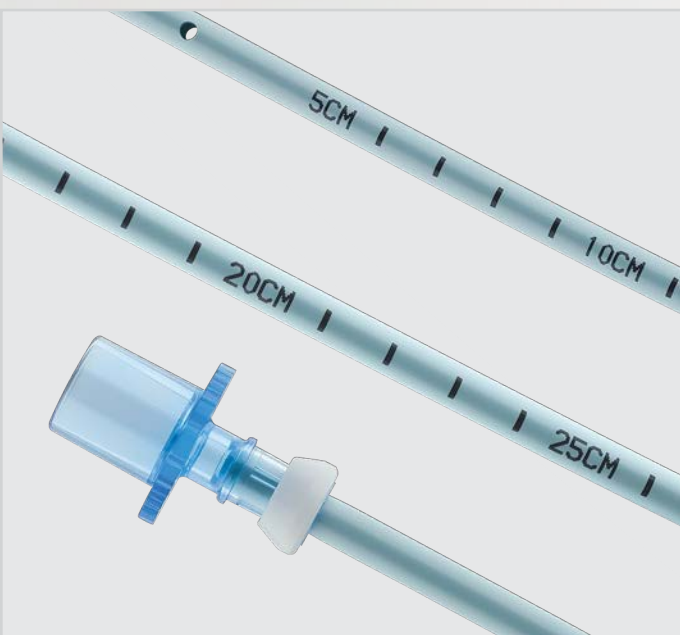

Dane produktu

- Średnicę wewnętrzną cewnika, światło i dystalne porty boczne zaprojektowano tak, aby poprawiały przepływ powietrza.
- Duża średnica wewnętrzna umożliwia używanie fiberoskopu o średnicy zewnętrznej wynoszącej maksymalnie 4,2 mm.
- Centymetrowe oznaczenia zapewniają dokładne dopasowanie z rurkami dotchawiczymi.
- Zdejmowane złączki Rapi-Fit umożliwiają w razie potrzeby podawanie tlenu.

Elementy


- Cewnik do intubacji Aintree
- Port bronchoskopowy
- Złączka Rapi-Fit (złącze 15 mm)
- Złączka Rapi-Fit (złącze Luer Lock)

Numer katalogowy	Numer referencyjny części	Rozmiar cewnika Fr	Długość cewnika cm	Śr. wewn. cewnika mm	Do wprowadzania rurki dotchawiczej* o śr. wewn. mm	Zawiera złączkę (typ)	Liczba sztuk
G10789	C-CAE-19.0-56-AIC	19	56	4,7	7 lub większa	15 mm i złącze Luer Lock	1

*Rurka dotchawicza nie wchodzi w skład zestawu.

Niektóre produkty lub numery części mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Cook Medical lub w dziale obsługi klienta i dostaw.

Informacje na temat ryzyka związanego z produktem można znaleźć w instrukcji obsługi dostępnej na stronie cookmedical.eu.

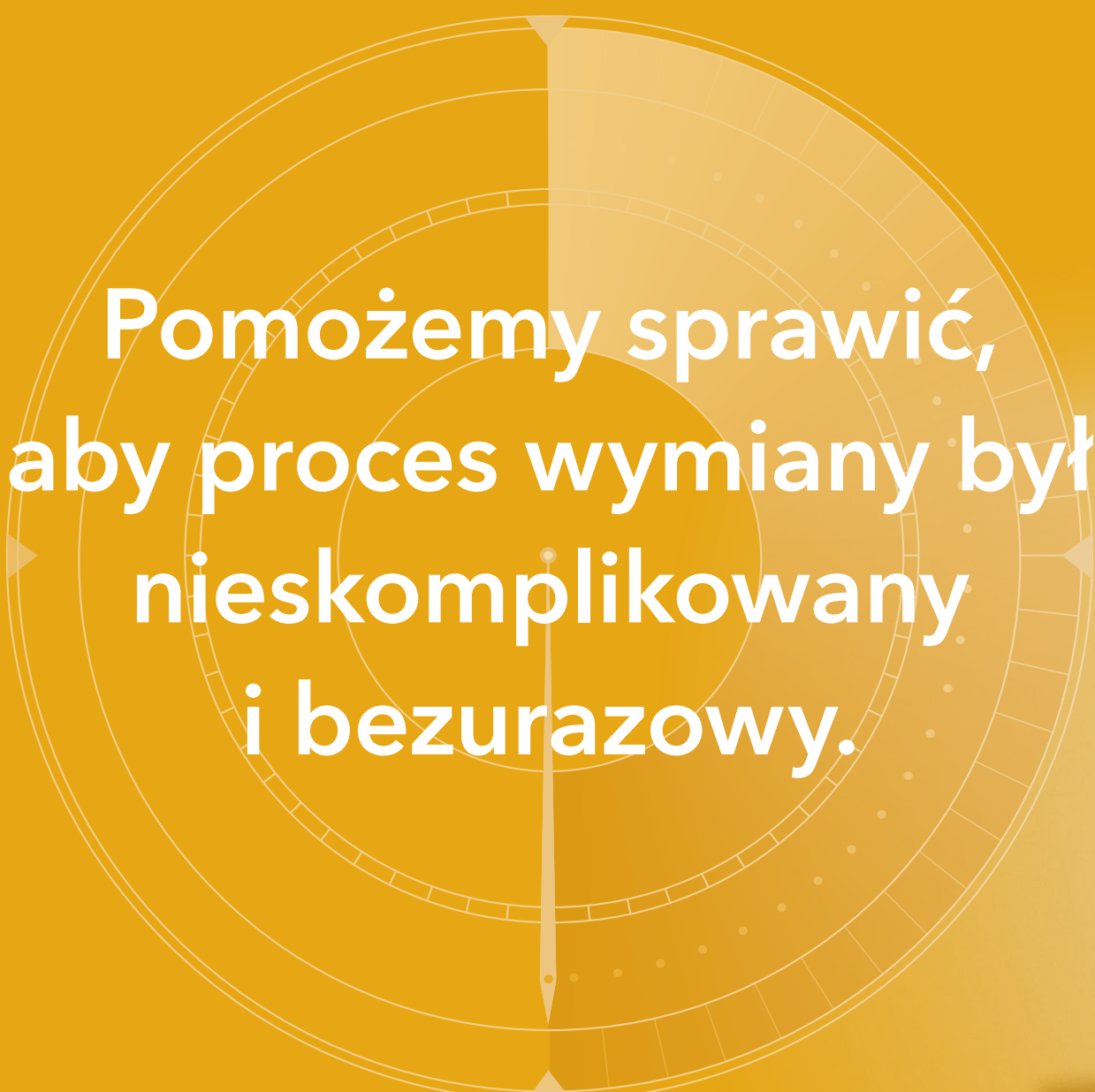


**Pomożemy sprawić,
aby proces wymiany był
nieskomplikowany
i bezurazowy.**

Wymiana


Nasze radiocieniujące cewniki do wymiany są dostępne w wielu rozmiarach i są puste, aby umożliwić podawanie tlenu podczas wymiany. Poprzez utrzymywanie stałego dostępu do dróg oddechowych nasze produkty mogą zmniejszać ryzyko wystąpienia u pacjenta niepożądanych skutków spowodowanych niedoborem tlenu.



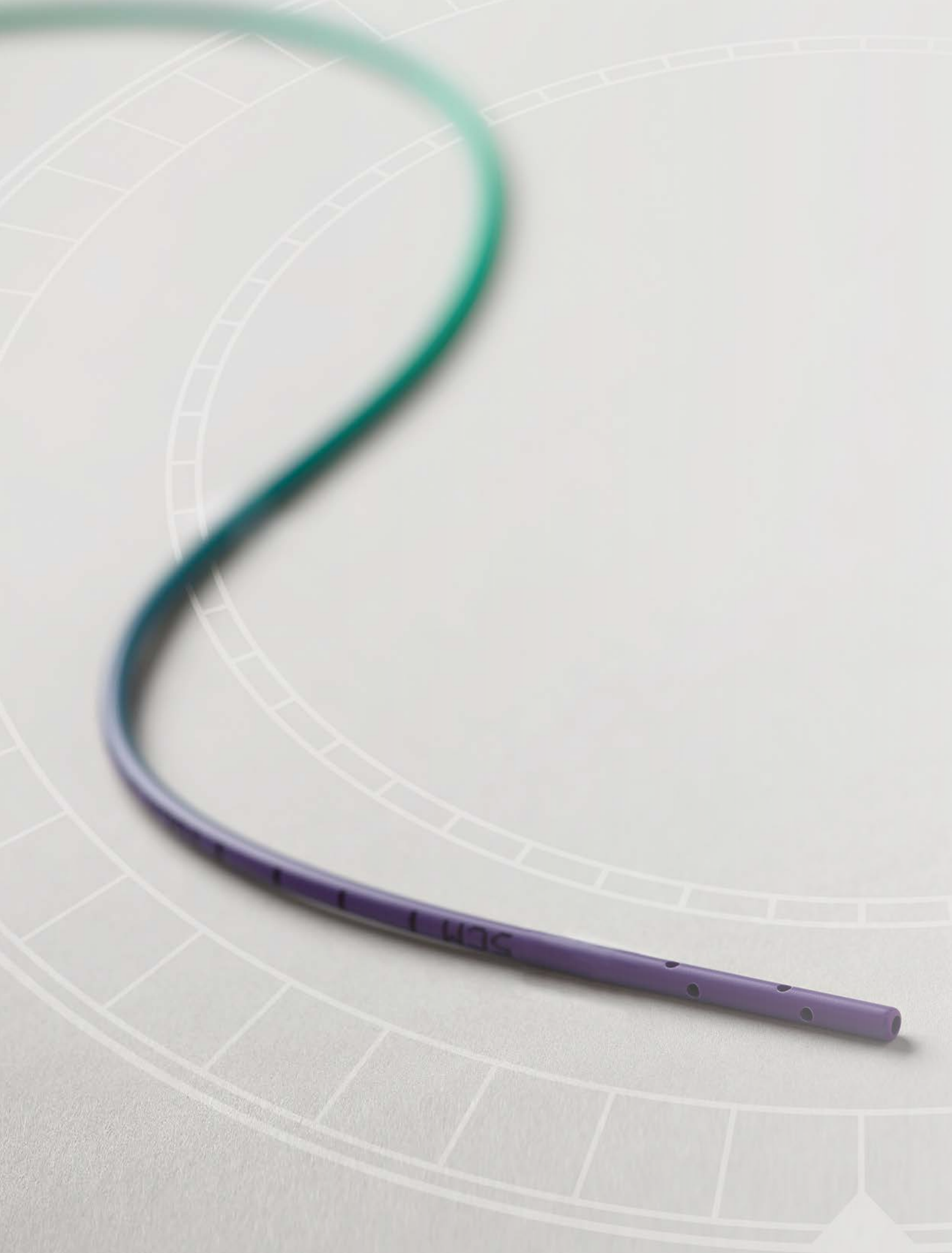

Cewnik do wymiany AEC Cook® – ekstrasztywny z miękką końcówką

Przeznaczony do prostej, bezurazowej wymiany rurki dotchawiczej.

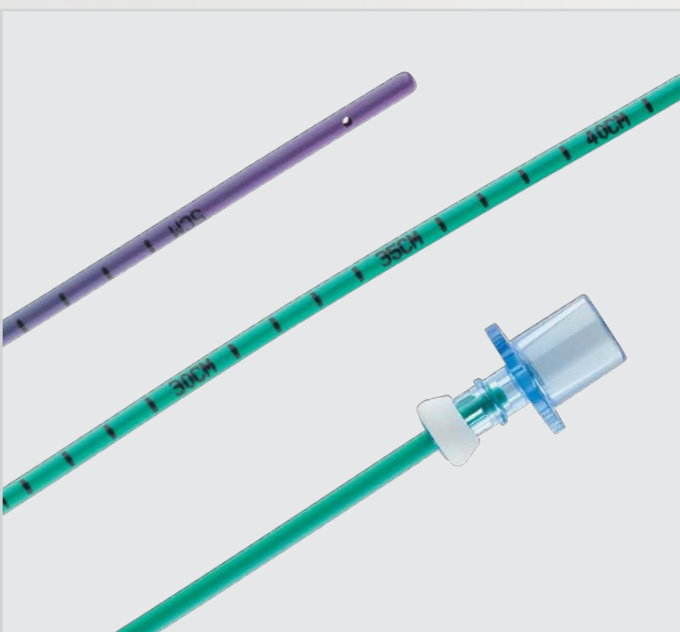

Dane produktu

- Tępa, miękka, giętka końcówka cewnika nie uszkadza struktur wewnętrznych.
- Część dystalna cewnika jest giętka.
- Ekstrasztywny cewnik ułatwia wymianę rurek o dwukanałowym trzonie.
- Kanał i dystalne porty boczne zaprojektowano z myślą o dostarczaniu tlenu.
- Centymetrowe oznaczenia zapewniają dokładne dopasowanie z rurkami dotchawiczymi.
- Zdejmowane złączki Rapi-Fit umożliwiają w razie potrzeby podawanie tlenu podczas wymiany.

Elementy

- Cewnik do wymiany AEC Cook – ekstrasztywny z miękką końcówką
- Złączka Rapi-Fit (złącze 15 mm)
- Złączka Rapi-Fit (złącze Luer Lock)

Numer katalogowy	Numer referencyjny części	Rozmiar cewnika Fr	Długość cewnika cm	Śr. wewn. cewnika mm	Do wymiany rurki dotchawiczej* o śr. wewn. mm	Zawiera złączkę (typ)	Liczba sztuk
G36401	C-CAE-11.0-100-DLT-EF-ST	11	100	2,3	4 lub większa	15 mm i złącze Luer Lock	1
G36402	C-CAE-14.0-100-DLT-EF-ST	14	100	3	5 lub większa	15 mm i złącze Luer Lock	1

*Rurka dotchawicza nie wchodzi w skład zestawu.

Niektóre produkty lub numery części mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Cook Medical lub w dziale obsługi klienta i dostaw.

Informacje na temat ryzyka związanego z produktem można znaleźć w instrukcji obsługi dostępnej na stronie cookmedical.eu.

Cewnik do wymiany Cook®

Przeznaczony do prostej, bezurazowej wymiany rurki dotchawiczej.



Dane produktu

- Tępa końcówka cieniodajnego cewnika nie uszkadza struktur wewnętrznych.
- Kanał i dystalne porty boczne zaprojektowano z myślą o dostarczaniu tlenu.
- Centymetrowe oznaczenia zapewniają dokładne dopasowanie z rurkami dotchawiczymi.
- Zdejmowane złączki Rapi-Fit umożliwiają w razie potrzeby podawanie tlenu podczas wymiany.

Elementy

- Cewnik do wymiany AEC Cook
- Złączka Rapi-Fit (złącze 15 mm)
- Złączka Rapi-Fit (złącze Luer Lock)

Numer katalogowy	Numer referencyjny części	Rozmiar cewnika Fr	Długość cewnika cm	Śr. wewn. cewnika mm	Do wymiany rurki dotchawiczej* o śr. wewn. mm	Zawiera złączkę (typ)	Liczba sztuk
G07833	C-CAE-8.0-45	8	45	1,6	3 lub większa	15 mm i złącze Luer Lock	1
G06732	C-CAE-11.0-83	11	83	2,3	4 lub większa	15 mm i złącze Luer Lock	1
G07873	C-CAE-14.0-83	14	83	3	5 lub większa	15 mm i złącze Luer Lock	1
G05880	C-CAE-19.0-83	19	83	3,4	7 lub większa	15 mm i złącze Luer Lock	1

*Rurka dotchawicza nie wchodzi w skład zestawu.

Niektóre produkty lub numery części mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Cook Medical lub w dziale obsługi klienta i dostaw.

Informacje na temat ryzyka związanego z produktem można znaleźć w instrukcji obsługi dostępnej na stronie cookmedical.eu.

Zestaw cewnika do wymiany AEC Arndt

Przeznaczony do wymiany maski krtaniowej i rurek dotchawiczych za pomocą bronchofiberoskopu, portu bronchoskopowego, prowadnika oraz cewnika do wymiany.



Dane produktu

- Zestaw nadaje się do stosowania w sytuacjach nagłych, pilnych oraz w zabiegach planowych w obrębie dróg oddechowych.
- Użycie bronchoskopu poprawia uwidocznienie, umożliwiając łatwiejsze poruszanie się w ciele pacjenta.
- Prowadnik można wprowadzić poprzez port roboczy bronchoskopu, co pozwala na manewrowanie pod kątem ostrym.
- Dystalne porty boczne ułatwiają przepływ powietrza.
- Zdejmowane złączki Rapi-Fit umożliwiają w razie potrzeby korzystanie ze źródła tlenu podczas wymiany.

Elementy


- Cewnik do wymiany AEC Arndt
- Ekstrasztynny prowadnik Amplatz
- Port bronchoskopowy
- Złączka Rapi-Fit (złącze 15 mm)
- Złączka Rapi-Fit (złącze Luer Lock)

Numer katalogowy	Numer referencyjny części	Rozmiar cewnika Fr	Długość cewnika cm	Średnica prowadnika inch/mm	Prowadnik Długość cm	Do wymiany rurki dotchawiczej* o śr. wewn. mm	Zawiera złączkę (typ)	Liczba sztuk
G11920	C-CAE-14.0-70-LMA	14	70	0,038/0,97	160	5 lub większa	15 mm i złącze Luer Lock	1

*Rurka dotchawicza nie wchodzi w skład zestawu.

Niektóre produkty lub numery części mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Cook Medical lub w dziale obsługi klienta i dostaw.

Informacje na temat ryzyka związanego z produktem można znaleźć w instrukcji obsługi dostępnej na stronie cookmedical.eu.

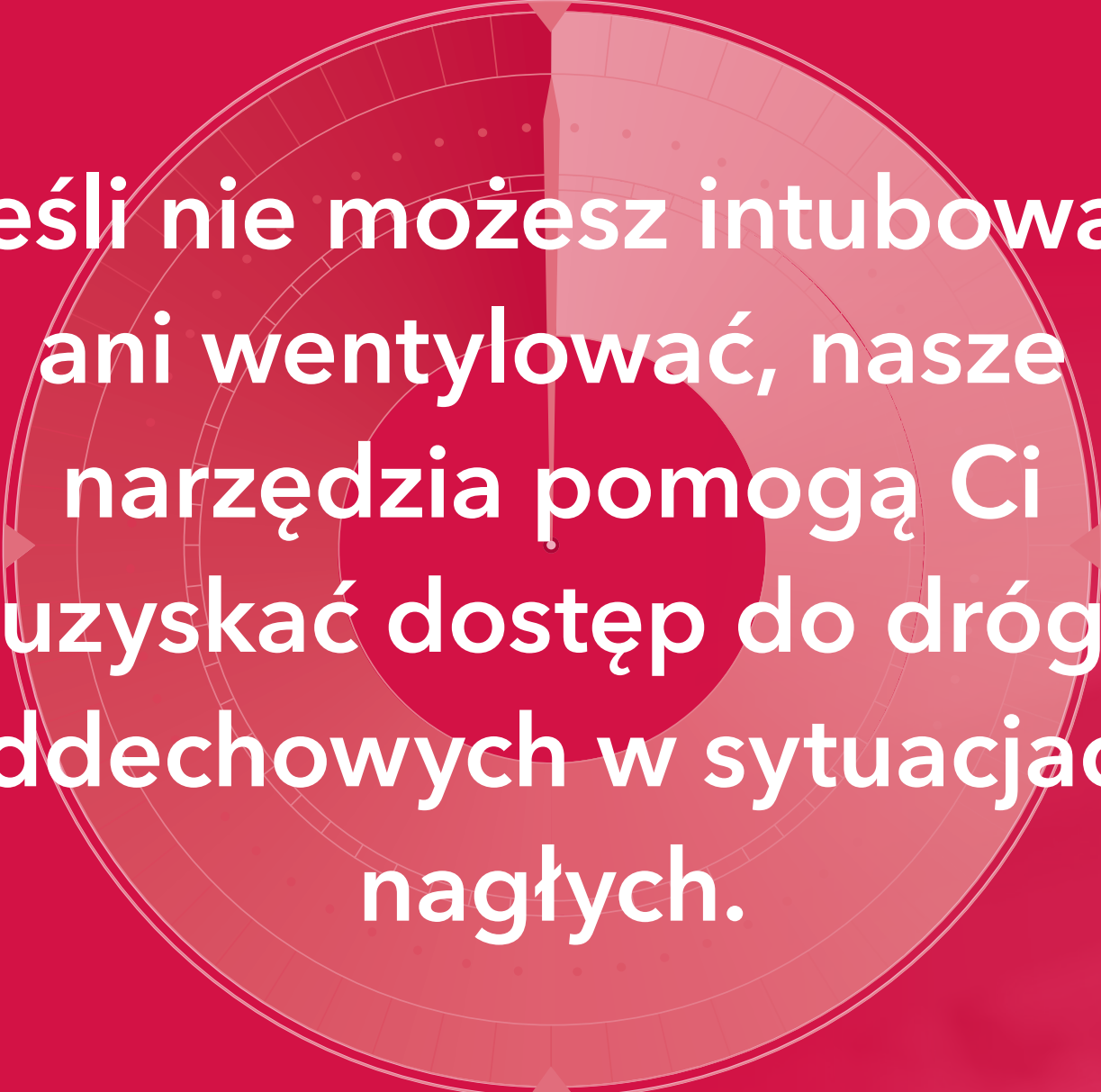

**Jeśli nie możesz intubować
ani wentylować, nasze
narzędzia pomogą Ci
uzyskać dostęp do dróg
oddechowych w sytuacjach
nagłych.**

Pilna wentylacja

Oferujemy różne zestawy do wykonywania pilnej krikotyrotomii metodą Seldingera lub metodą chirurgiczną. Niektóre z naszych zestawów zawierają cewnik do wentylacji z mankietem. Oferujemy również produkty do cewników do pilnej wentylacji przez tchawicę.





Uniwersalny zestaw cewnika z mankietem do pilnej krikotyrotomii Melkera

Metoda Seldingera/chirurgiczna

Przeznaczony do uzyskiwania dostępu do dróg oddechowych w sytuacjach nagłych, w których nie można zastosować intubacji dotchawiczej. Dostęp do dróg oddechowych osiągany jest albo przez dojście przezskórne (metodą Seldingera) albo metodą chirurgiczną, poprzez błonę pierścienno-tarczową.



Dane produktu

- Uniwersalny zestaw zawiera w jednym opakowaniu wszystkie niezbędne elementy potrzebne do wykonania krikotyrotomii metodą Seldingera lub metodą chirurgiczną.
- Cewnik do wentylacji wyposażony jest w mankiet chroniący i kontrolujący drogi oddechowe po założeniu cewnika.

Elementy

- Cewnik z mankietem do pilnej krikotyrotomii Melkera
- Igła wprowadzająca
- Igła wprowadzająca cewnika PTFE
- Strzykawka o poj. 12 mL
- Miniaturowy skalpel nr 15
- Bezpieczny skalpel nr 20
- Ekstrasztynny przewodnik Amplatz
- Tępy, zakrzywiony rozszerzacz (do metody chirurgicznej)
- Zakrzywiony rozszerzacz (do metody Seldingera)
- Rozszerzacz Trousseau
- Hak tchawiczy
- Taśma tracheostomijna
- Pojemnik do trzymania igieł
- Gąbki z gazy (10)
- Serweta chirurgiczna 18 x 24 inch (45,7 x 60,9 cm)

Numer katalogowy	Numer referencyjny części	Długość cewnika cm	Śr. wewn. cewnika mm	Śr. zewn. cewnika mm	Średnica przewodnika inch/mm	Długość przewodnika cm	Rozmiar igły G	Długość igły cm	Liczba sztuk
G32442	C-TCCSB-500-UNI-CA	9	5	7,2	0,038/0,97	40	18	7	1

Niektóre produkty lub numery części mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Cook Medical lub w dziale obsługi klienta i dostaw.

Informacje na temat ryzyka związanego z produktem można znaleźć w instrukcji obsługi dostępnej na stronie cookmedical.eu.

Zestaw cewnika z mankietem do pilnej krikotyrotomii Melkera

Metoda chirurgiczna

Przeznaczony do uzyskiwania dostępu do dróg oddechowych w sytuacjach nagłych, w których nie można zastosować intubacji dotchawiczej. Dostęp do dróg oddechowych osiągany jest metodą chirurgiczną poprzez błonę pierścienno-tarczową.



Dane produktu

- Ten kompletny zestaw zawiera w jednym opakowaniu wszystkie niezbędne elementy potrzebne do wykonania krikotyrotomii metodą chirurgiczną.
- Zestaw jest dostarczany w kompaktowym opakowaniu ułatwiającym przechowywanie.
- Cewnik do wentylacji wyposażony jest w mankiet chroniący i kontrolujący drogi oddechowe po założeniu cewnika.

Elementy

- Cewnik z mankietem do pilnej krikotyrotomii Melkera
- Bezpieczny skalpel nr 11
- Tępy, zakrzywiony rozszerzacz
- Rozszerzacz Trousseau
- Hak tchawiczy
- Strzykawka o poj. 6 mL
- Taśma tracheostomijna

Numer katalogowy	Numer referencyjny części	Długość cewnika cm	Śr. wewn. cewnika mm	Śr. zewn. cewnika mm	Liczba sztuk
G30488	C-TCCSB-500-SUR	9	5	7,2	1


Niektóre produkty lub numery części mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Cook Medical lub w dziale obsługi klienta i dostaw.

Informacje na temat ryzyka związanego z produktem można znaleźć w instrukcji obsługi dostępnej na stronie cookmedical.eu.

Zestaw cewnika z mankietem do pilnej krikotyrotomii Melkera

Metoda Seldingera

Przeznaczony do uzyskiwania dostępu do dróg oddechowych w sytuacjach nagłych, w których nie można zastosować intubacji dotchawiczej. Dostęp do dróg oddechowych osiągany jest przez dojsie przezskórne (metodą Seldingera) poprzez błonę pierścienno-tarczową. Uzyskane w ten sposób poszerzenie drogi oddechowej i dojsie do tchawicy umożliwia przeprowadzenie cewnika do pilnej wentylacji.

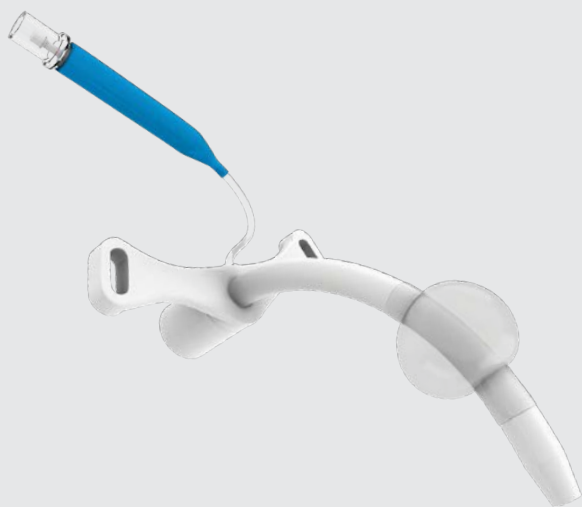

Dane produktu

- Ten kompletny zestaw zawiera w jednym opakowaniu wszystkie elementy potrzebne do wykonania krikotyrotomii metodą Seldingera.
- Cewnik do wentylacji wyposażony jest w mankiet chroniący i kontrolujący drogi oddechowe po założeniu cewnika.

Elementy

- Cewnik z mankietem do pilnej krikotyrotomii Melkera
- Igła wprowadzająca
- Igła wprowadzająca cewnika PTFE
- Strzykawka o poj. 6 mL
- Miniaturowy skalpel nr 15
- Ekstrasztynny przewodnik Amplatz
- Zakrzywiony rozszerzacz
- Taśma tracheostomijna
- Pojemnik do trzymania igieł

Numer katalogowy	Numer referencyjny części	Długość cewnika cm	Śr. wewn. cewnika mm	Śr. zewn. cewnika mm	Średnica przewodnika inch/mm	Długość przewodnika cm	Rozmiar igły G	Długość igły cm	Liczba sztuk
G29432	C-TCCSB-500	9	5	7,2	0,038/0,97	40	18	7	1


Niektóre produkty lub numery części mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Cook Medical lub w dziale obsługi klienta i dostaw.

Informacje na temat ryzyka związanego z produktem można znaleźć w instrukcji obsługi dostępnej na stronie cookmedical.eu.

Zestaw cewnika do pilnej krikotyrotomii Melkera

Metoda Seldingera

Przeznaczony do uzyskiwania dostępu do dróg oddechowych w sytuacjach nagłych, w których nie można zastosować intubacji dotchawiczej. Dostęp do dróg oddechowych osiągany jest przez dojście przezskórne (metodą Seldingera) poprzez błonę pierścienno-tarczową. Uzyskane w ten sposób poszerzenie drogi oddechowej i dojście do tchawicy umożliwia przeprowadzenie cewnika do pilnej wentylacji.

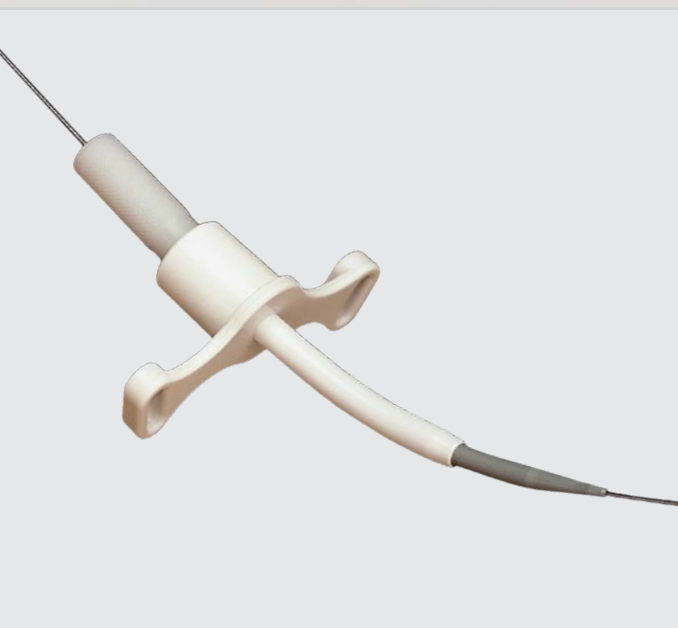

Dane produktu

- Ten kompletny zestaw zawiera w jednym opakowaniu wszystkie elementy potrzebne do wykonania krikotyrotomii metodą Seldingera.
- Cewnik do wentylacji bez mankietu występuje w trzech rozmiarach.

Elementy

- Cewnik do pilnej krikotyrotomii Melkera
- Igła wprowadzająca
- Igła wprowadzająca cewnika PTFE
- Strzykawka o poj. 6 mL
- Miniaturowy skalpel nr 15
- Ekstrasztynny przewodnik Amplatz
- Zakrzywiony rozszerzacz
- Taśma tracheostomijna

Numer katalogowy	Numer referencyjny części	Długość cewnika cm	Śr. wewn. cewnika mm	Śr. zewn. cewnika mm	Średnica przewodnika inch/mm	Długość przewodnika cm	Rozmiar igły G	Długość igły cm	Liczba sztuk
G06245	C-TCCS-350	3,8	3,5	5,1	0,038/0,97	30	18	4	1
G06246	C-TCCS-400	4,2	4	5,9	0,038/0,97	30	18	4	1
G04652	C-TCCS-600	7,5	6	8,8	0,038/0,97	40	18	7	1

Niektóre produkty lub numery części mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Cook Medical lub w dziale obsługi klienta i dostaw.

Informacje na temat ryzyka związanego z produktem można znaleźć w instrukcji obsługi dostępnej na stronie cookmedical.eu.

Zestaw cewnika do pilnej krikotyrotomii Melkera do specjalnych zastosowań

Metoda Seldingera

Przeznaczony do uzyskiwania dostępu do dróg oddechowych w sytuacjach nagłych, w których nie można zastosować intubacji dotchawiczej. Dostęp do dróg oddechowych osiągany jest przez dojsie przezskórne (metodą Seldingera) poprzez błonę pierścienno-tarczową. Uzyskane w ten sposób poszerzenie drogi oddechowej i dojsie do tchawicy umożliwia przeprowadzenie cewnika do pilnej wentylacji.



Dane produktu

- Ten kompletny zestaw zawiera w jednym opakowaniu wszystkie elementy potrzebne do wykonania krikotyrotomii metodą Seldingera.
- Każdy zestaw jest dostarczany w woreczku ułatwiającym transport.
- Rozszerzacze są umieszczane w cewnikach do wentylacji, aby umożliwić szybki dostęp.
- Każdy zestaw zawiera dwie igły wprowadzające (o długości 5 i 7 cm) na potrzeby różnych warunków anatomicznych pacjentów.
- Zestaw z cewnikiem wyposażony jest w mankiet chroniący i kontrolujący drogi oddechowe po założeniu cewnika.
- Zestaw z cewnikiem bez mankieta zawiera dwa rozmiary cewnika do wentylacji.

Elementy

- Cewnik do pilnej krikotyrotomii Melkera
- Dwie igły wprowadzające o rozmiarze 18 G, dł. 5 i 7 cm
- Strzykawka o poj. 6 mL
- Miniaturowy skalpel nr 15
- Ekstrasztynny przewodnik Amplatz
- Zakrzywiony rozszerzacz
- Taśma tracheostomijna


Numer katalogowy	Numer referencyjny części	Długość cewnika cm	Śr. wewn. cewnika mm	Śr. zewn. cewnika mm	Średnica przewodnika inch/mm	Długość przewodnika cm	Rozmiar igły G	Długość igły cm	Liczba sztuk
Z cewnikiem z mankietem									
G26924	C-TCCSB-500-SPOPS	9	5	7,2	0,038/0,97	40	18	5, 7	1
Z cewnikiem bez mankieta									
G10699	C-TCCS-600-SPOPS	4,2, 7,5	4, 6	6, 8,8	0,038/0,97	40	18	5, 7	1

Niektóre produkty lub numery części mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Cook Medical lub w dziale obsługi klienta i dostaw.

Informacje na temat ryzyka związanego z produktem można znaleźć w instrukcji obsługi dostępnej na stronie cookmedical.eu.

Zestaw modulatora przepływu tlenu Enk

Modulator przepływu tlenu Enk umożliwia przepływ tlenu kontrolowany ręcznie. Jest przeznaczony do pilnej wentylacji przezrtchawiczej z użyciem cewnika, gdy nie można przeprowadzić konwencjonalnej wentylacji z użyciem maski lub rurki dotchawiczej.

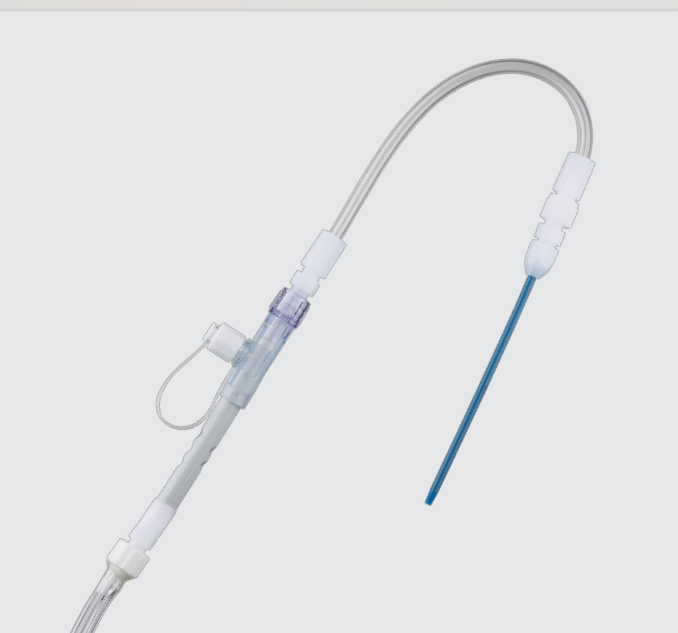

Dane produktu

- Zestaw jest kompaktowym rozwiązaniem dla lekarzy, które umożliwia szybkie zapewnienie wentylacji, wspomagając przy tym przepływ tlenu kontrolowany ręcznie.
- Wzmocniona drutem konstrukcja cewnika zapobiega zapętleniu.
- Modulator przepływu tlenu Enk podłącza się do wzmocnionego cewnika do pilnej wentylacji przezrtchawiczej FEP i źródła tlenu, aby ułatwić podawanie tlenu.

Elementy

- Modulator przepływu tlenu Enk
- Wzmocniony cewnik FEP z igłą wprowadzającą
- Winiylowa rurka łącząca
- Strzykawka o poj. 5 mL


Numer katalogowy	Numer referencyjny części	Rozmiar cewnika Fr	Długość cewnika cm	Śr. wewn. cewnika mm	Rozmiar igły do cewnika G	Długość rurki łączącej cm	Liczba sztuk
G12398	C-EFMS-100	6	7,5	2	15	210	1

Niektóre produkty lub numery części mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Cook Medical lub w dziale obsługi klienta i dostaw.

Informacje na temat ryzyka związanego z produktem można znaleźć w instrukcji obsługi dostępnej na stronie cookmedical.eu.

Cewnik do pilnej wentylacji przezrtchawiczej

Przeznaczony do uzyskiwania dostępu do dróg oddechowych w sytuacjach nagłych, w których nie można zastosować konwencjonalnej intubacji dotchawiczej.

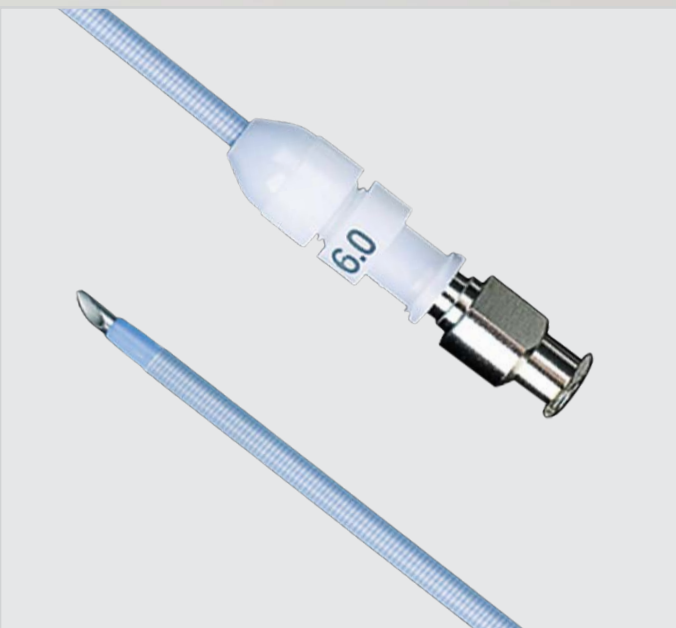

Dane produktu

- Wzmocniona drutem konstrukcja cewnika zapobiega zapętleńiu.


Elementy

- Wzmocniony cewnik FEP z igłą wprowadzającą

Numer katalogowy	Numer referencyjny części	Rozmiar cewnika Fr	Długość cewnika cm	Śr. wewn. cewnika mm	Rozmiar igły do cewnika G	Liczba sztuk
G10338	C-DTJV-6.0-5.0-BTT	6	5	2	15	1
G09413	C-DTJV-6.0-7.5-BTT	6	7,5	2	15	1

Niektóre produkty lub numery części mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Cook Medical lub w dziale obsługi klienta i dostaw.

Informacje na temat ryzyka związanego z produktem można znaleźć w instrukcji obsługi dostępnej na stronie cookmedical.eu.

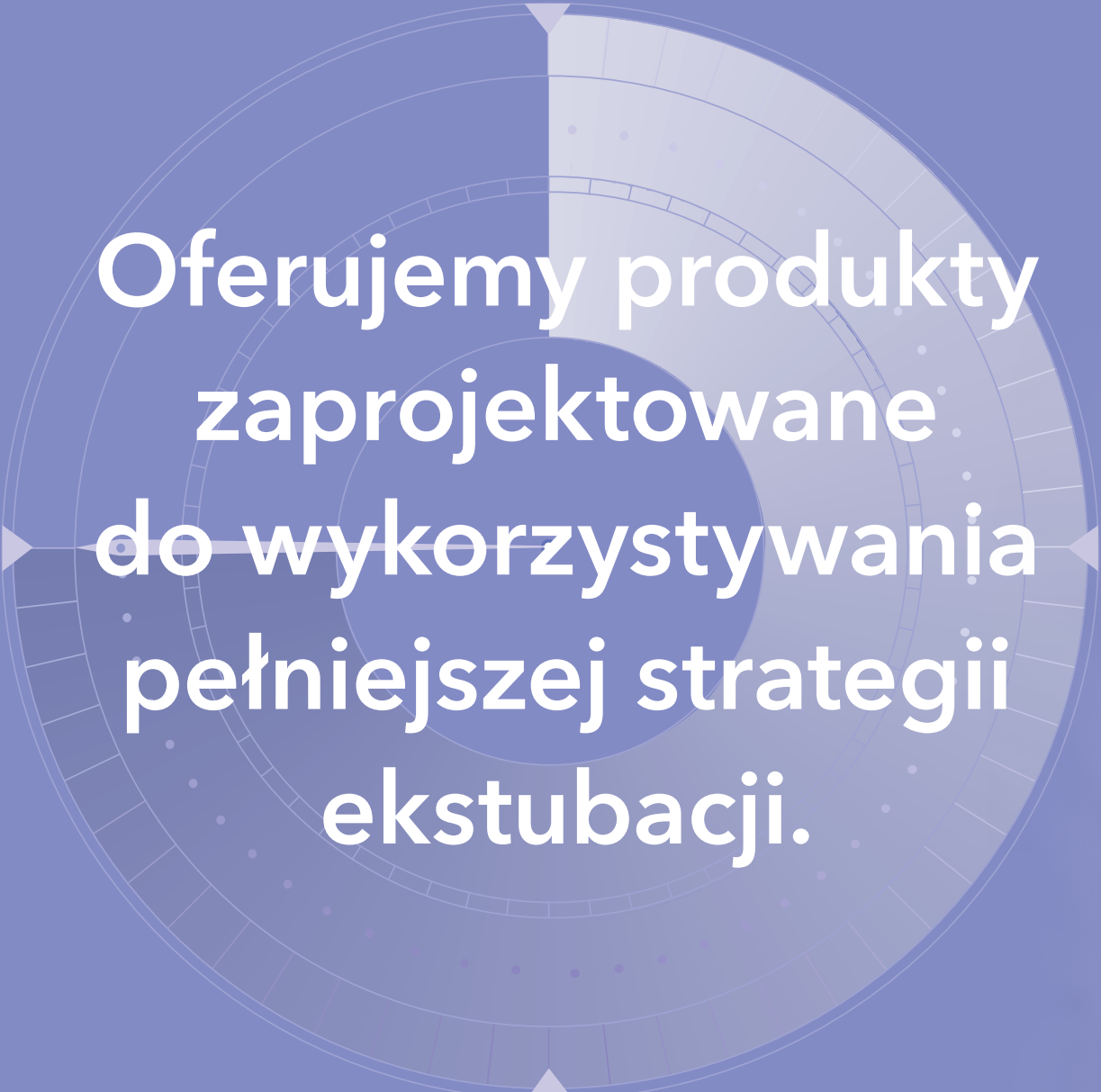

Oferujemy produkty
zaprojektowane
do wykorzystywania
pełniejszej strategii
ekstubacji.

Ekstubacja

Nasz zestaw zawiera prowadnik do ekstubacji i cewnik do ponownej intubacji do wykorzystania podczas stopniowej ekstubacji. Miękki, odporny na zapętlanie nitinolowy rdzeń prowadnika zapewnia ścieżkę dla cewnika do ponownej intubacji, a cewnik umożliwia podawanie tlenu, aby ułatwić ponowną intubację w razie potrzeby.



Zestaw do stopniowej ekstubacji Cook

Przeznaczony do stopniowej ekstubacji i następującej po niej ponownej intubacji.



Dane produktu

- Miękka, tępa końcówka cewnika do ponownej intubacji nie uszkadza struktur wewnętrznych.
- Powłoka polimerowa i miękka końcówka prowadnika do stopniowej ekstubacji minimalizują podrażnienia i zwiększają komfort pacjenta.
- Oznaczenia centymetrowe na nitinolowym prowadniku do stopniowej ekstubacji i cewniku do ponownej stopniowej intubacji ułatwiają dokładne dopasowanie z rurką dotchawiczą podczas procedur ekstubacji i ponownej intubacji.
- Dystalne porty boczne cewnika do ponownej intubacji zapewniają wystarczający przepływ powietrza i zapobiegają wysunięciu się cewnika w czasie stosowania ze źródłem tlenu.
- Zdejmowane złączki Rapi-Fit umożliwiają w razie potrzeby podawanie tlenu.

Elementy

- Prowadnik do stopniowej ekstubacji
- Cewnik do ponownej stopniowej intubacji
- Taśma mocująca
- Opatrunek zabezpieczający
- Oprawka prowadnika
- Złączka Rapi-Fit (złącze 15 mm)
- Złączka Rapi-Fit (złącze Luer Lock)

Numer katalogowy	Numer referencyjny części	Rozmiar cewnika Fr	Długość cewnika mm	Śr. wewn. cewnika mm	Średnica prowadnika inch/mm	Długość prowadnika cm	Do wprowadzania rurki dotchawiczej*		Zawiera złączkę (typ)	Liczba sztuk
							o śr. wewn. mm			
G24073	C-CAE-14.0-83-EXTU	14	83	3	0,035/0,88	145	≥5		15 mm i złącze Luer Lock	5

*Rurka dotchawicza nie wchodzi w skład zestawu.

Niektóre produkty lub numery części mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Cook Medical lub w dziale obsługi klienta i dostaw.

Informacje na temat ryzyka związanego z produktem można znaleźć w instrukcji obsługi dostępnej na stronie cookmedical.eu.


Cewnik do ponownej stopniowej intubacji



Dystalne porty boczne zapewniają dostateczny przepływ powietrza i zapobiegają wysunięciu się cewnika w czasie stosowania ze źródłem tlenu.

Miękka i tępa końcówka nie uszkadza struktur wewnętrznych.

Prowadnik do stopniowej ekstubacji

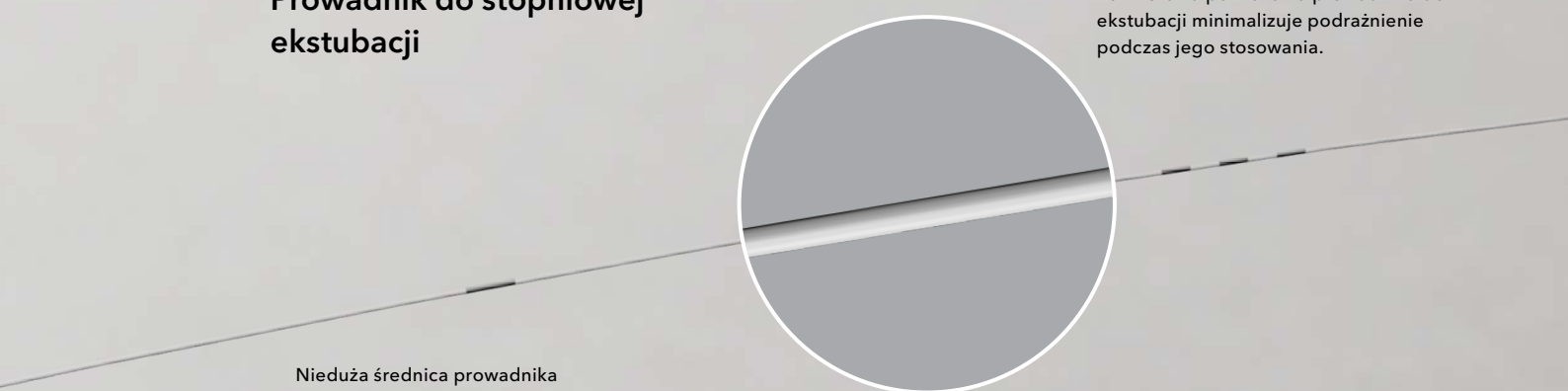

Polimerowa powłoka na przewodniku do ekstubacji minimalizuje podrażnienie podczas jego stosowania.

Nieduża średnica przewodnika wynosząca 0,035 inch gwarantuje komfort pacjenta.

Materiały dotyczące trudności intubacyjnych

Cała zawartość dotycząca materiałów ma charakter wyłącznie informacyjny. Cook Medical nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub kompletność jakichkolwiek informacji zawartych na tych stronach.

Edukacja i szkolenia

The Airway Site
theairwaysite.com

Airway On Demand
airwayondemand.com

Stowarzyszenia

European Society of Anaesthesiology
esahq.org

Society for Airway Management
samhq.com

Difficult Airway Society
das.uk.com

American Society of Anesthesiologists
asahq.org

Australian and New Zealand College of Anaesthetists
anzca.edu.au

Australian Society of Anaesthetists
asa.org.au

Canadian Anesthesiologists' Society
cas.ca

Customer Support

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



CC, URO-A4