

Dalla citologia all'istologia: il progresso delle procedure diagnostiche EBUS.



EchoTip ProCore®

ENDOBONCHIAL HD ULTRASOUND BIOPSY NEEDLE


Cook è stata tra i primi a riconoscere l'impatto clinico delle procedure di ecografia endobronchiale (EBUS). Per questa ragione, abbiamo dedicato le nostre competenze di leader del mercato degli aghi ecografici alla creazione di una gamma completa di aghi per ecografia endobronchiale, gli EchoTip ProCore®, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Adesso, potenzialmente siamo in grado di ottenere campioni citologici e istologici dalle procedure di ecografia endobronchiale, anche nella complessa regione ilare polmonare. Il nostro obiettivo è semplice: fornire informazioni istologiche che contribuiranno a somministrare le migliori cure al paziente.




Olympus



Pentax

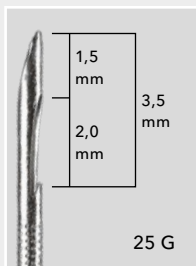

25 G

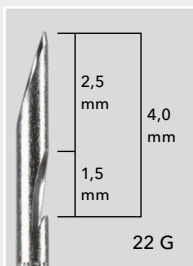

22 G

EchoTip ProCore®

ENDBRONCHIAL HD ULTRASOUND BIOPSY NEEDLE

Per l'uso con Olympus: usato con un ecobroncoscopio per le procedure di biopsia con ago sottile (FNB) di lesioni o tessuto sottomucosi ed extramurali interni o adiacenti all'albero tracheobronchiale o al tratto gastrointestinale.

Per l'uso con Pentax: usato con un ecobroncoscopio per le procedure di biopsia con ago sottile (FNB) di lesioni o tessuto sottomucosi ed extramurali interni o adiacenti all'albero tracheobronchiale.

Il dispositivo è fornito sterile ed è esclusivamente monouso.

- L'ago è dotato di una cavità progettata per la raccolta del tessuto nella delicata area dei polmoni.
- È dotato di un pattern a rientranze ad alta definizione per garantire la visibilità dell'ago.
- L'impugnatura ergonomica garantisce stabilità e controllo dell'ago.
- La lunghezza della guaina è regolabile.
- Sugli endoscopi con connettori metallici Luer, il regolatore della guaina rimovibile consente il collegamento diretto all'endoscopio.
- Sugli endoscopi con connettori metallici non Luer, la robusta struttura dell'adattatore per endoscopio fornisce:
 - un collegamento sicuro e la stabilità delle procedure
 - capacità di aspirazione e iniezione grazie alla valvola ermetica

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Calibro dell'ago	Guaina Fr	Estensione regolabile dell'ago cm	Punta del mandrino	Diametro minimo del canale operativo mm
G34281	ECHO-HD-22-EBUS-O-C*	22	4,1	0-5	punta sferica incassata	2
G34279	ECHO-HD-22-EBUS-P-C**	22	4,1	0-5	punta sferica incassata	2
G34282	ECHO-HD-25-EBUS-O-C*	25	4,1	0-5	a becco di flauto	2
G34280	ECHO-HD-25-EBUS-P-C**	25	4,1	0-5	a becco di flauto	2

*L'ago si fissa a un adattatore per ecoendoscopio endobronchiale Olympus con connettore metallico non Luer.

**L'ago si fissa al connettore metallico Luer di un ecoendoscopio endobronchiale Pentax.

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Distribution. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 21612723770, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 Email: customersupport@cookmedical.com

Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 Email: cau.custserv@cookmedical.com



CC, URO-A4