

Reforce as suas capacidades de diagnóstico.




EchoTip Ultra[®]

ENDOBONCHIAL HD ULTRASOUND NEEDLE

A agulha de ultrassons de alta definição endobrônquica EchoTip Ultra da Cook foi concebida para reforçar as suas capacidades de diagnóstico e estadiamento. A elevada ecogenicidade da EchoTip Ultra ajuda a visualizar a agulha, garantindo que a ponta da mesma está no alvo, para facilitar a colheita de amostras. O punho ergonómico e o adaptador para endoscópio também podem otimizar o desempenho, a estabilidade e a segurança durante o procedimento.



Olympus

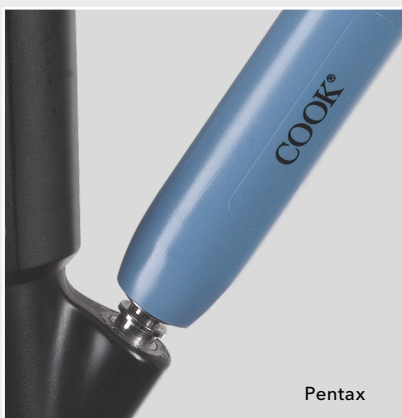

Pentax

EchoTip Ultra®

ENDBRONCHIAL HD ULTRASOUND NEEDLE

Para utilização com Olympus: este dispositivo destina-se à colheita de amostras de lesões submucosas e extramurais, ou de tecidos localizados na árvore traqueobrônquica ou no trato gastrointestinal, ou adjacentes aos mesmos, através do canal acessório de um broncoscópio de ultrassons para aspiração por agulha fina (FNA, do inglês "fine needle aspiration").

Para utilização com Pentax: este dispositivo destina-se à colheita de amostras de lesões submucosas e extramurais, ou de tecidos localizados na árvore traqueobrônquica, ou adjacentes à mesma, através do canal acessório de um broncoscópio de ultrassons para aspiração por agulha fina (FNA).

Este dispositivo é fornecido estéril e é descartável. Este dispositivo de uso único não foi concebido para ser reutilizado.

- A agulha apresenta um padrão de depressões de alta definição, para melhorar a visibilidade da agulha.
- O punho com um formato natural proporciona controlo e estabilidade da agulha.
- Em endoscópios com conectores Luer metálicos, o regulador da bainha removível permite a ligação direta ao endoscópio.
- Em endoscópios com conectores metálicos não Luer, o design robusto do adaptador de endoscópio permite:
 - Ligação segura e estabilidade durante o procedimento
 - Capacidade de sucção e injeção, graças à válvula hermética
- Inclui um regulador da bainha integrado, para compatibilidade com toda a gama de broncoscópios de ultrassons.

Número de encomenda	Número de referência	Calibre da agulha	Bainha Fr	Extensão da agulha ajustável cm	Ponta do estilete	Diâmetro mínimo do canal acessório mm
G52011	ECHO-HD-22-EBUS-O*	22	4,1	0-5	com bisel	2
G53408	ECHO-HD-22-EBUS-P**	22	4,1	0-5	com bisel	2
G24062	ECHO-HD-25-EBUS-O*	25	4,1	0-5	com bisel	2
G24061	ECHO-HD-25-EBUS-P**	25	4,1	0-5	com bisel	2

*A agulha encaixa no adaptador de endoscópio do Endoscópio para ecoendoscopia brônquica com conector metálico não Luer Olympus.

**A agulha encaixa no conector Luer metálico do Endoscópio para ecoendoscopia brônquica Pentax.

Siga cuidadosamente todas as instruções passo a passo, incluindo os riscos, as informações técnicas, o nome do dispositivo e a utilização prevista incluídos nas Instruções de Utilização disponíveis em cookmedical.eu. De salientar que alguns produtos ou referências podem não estar disponíveis em todos os mercados; consulte o seu representante da Cook para obter mais detalhes.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 21612723770, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 Email: customersupport@cookmedical.com

Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 Email: cau.custserv@cookmedical.com



CC, URO-A4