


Diagnoza bez powtarzania biopsji



BiGopsy[®]
BACKLOADING BIOPSY FORCEPS



cookmedical.eu

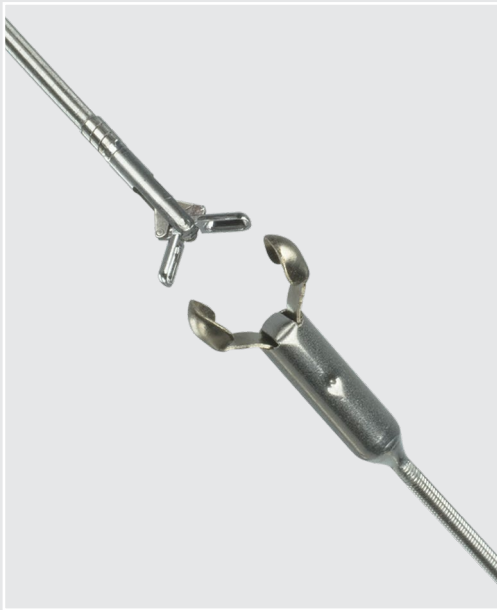


BIGopsy®

BACKLOADING BIOPSY FORCEPS

Kleszczyki biopsyjne BIGopsy do wstecznego wprowadzania do endoskopu zostały specjalnie zaprojektowane do pobierania większych próbek tkanek do oceny histopatologicznej guzów miedniczek nerkowych i moczowodów. Urządzenie można również zastosować do pobierania próbek lub wydobywania ciał obcych z dróg moczowych. Miseczka kleszczyków BIGopsy o wielkości 4 mm³ umożliwia pobieranie większej próbki, niż jest to możliwe w przypadku jakichkolwiek innych dostępnych na rynku giętkich ureteroskopowych kleszczyków biopsyjnych miseczkowych (w rozmiarze 3 Fr lub mniejszym). Większy rozmiar miseczki kleszczyków BIGopsy zwiększa prawdopodobieństwo pobrania reprezentatywnej próbki tkanki do badań histopatologicznych bez kosztownego powtarzania zabiegów.

Ze względu na powiększony rozmiar miseczki kleszczyków BIGopsy zaprojektowano je tak, aby były wstecznie wprowadzane przez kanał roboczy ureteroskopu przed ich zastosowaniem u pacjenta. Po wstecznym wprowadzeniu kleszczyków należy przymocować do nich zdejmowalny, wymienny uchwyt. Dopiero wówczas urządzenie będzie gotowe do użycia.

Uwaga: Urządzenie należy stosować, korzystając z koszulki dostępu moczowodowego.

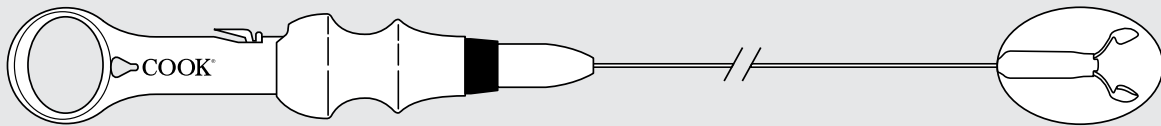

Numer katalogowy	Numer referencyjny części	Fr	Długość cm
G48240	BLB-024115	2,4	115

Niektóre produkty lub numery części mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. Szczegóły można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Cook lub w dziale obsługi klienta i dostaw.

Informacje na temat ryzyka związanego z produktem można znaleźć w instrukcji obsługi dostępnej na stronie cookmedical.eu.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



© CC, URO-A4