



# Biztonságos áthaladás.

Erőteljes páros a húgyvezetékhez való védett hozzáféréshez

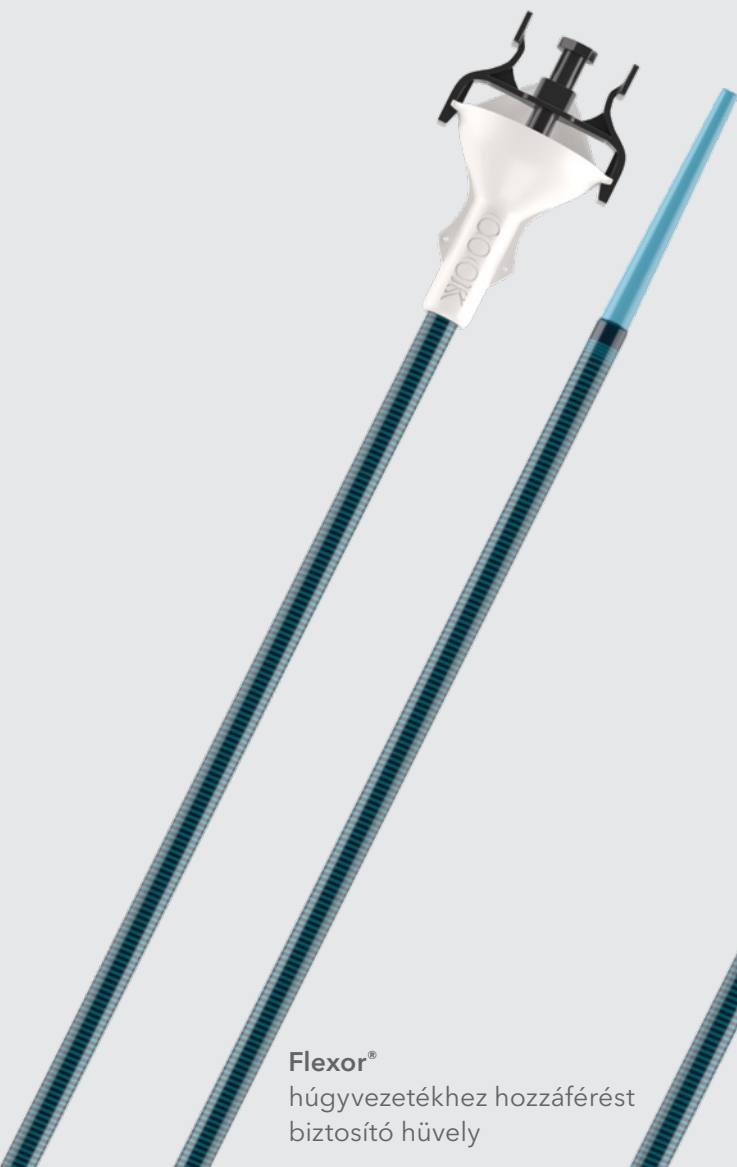

**Flexor®**  
húgyvezetékhez hozzáférést  
biztosító hüvely

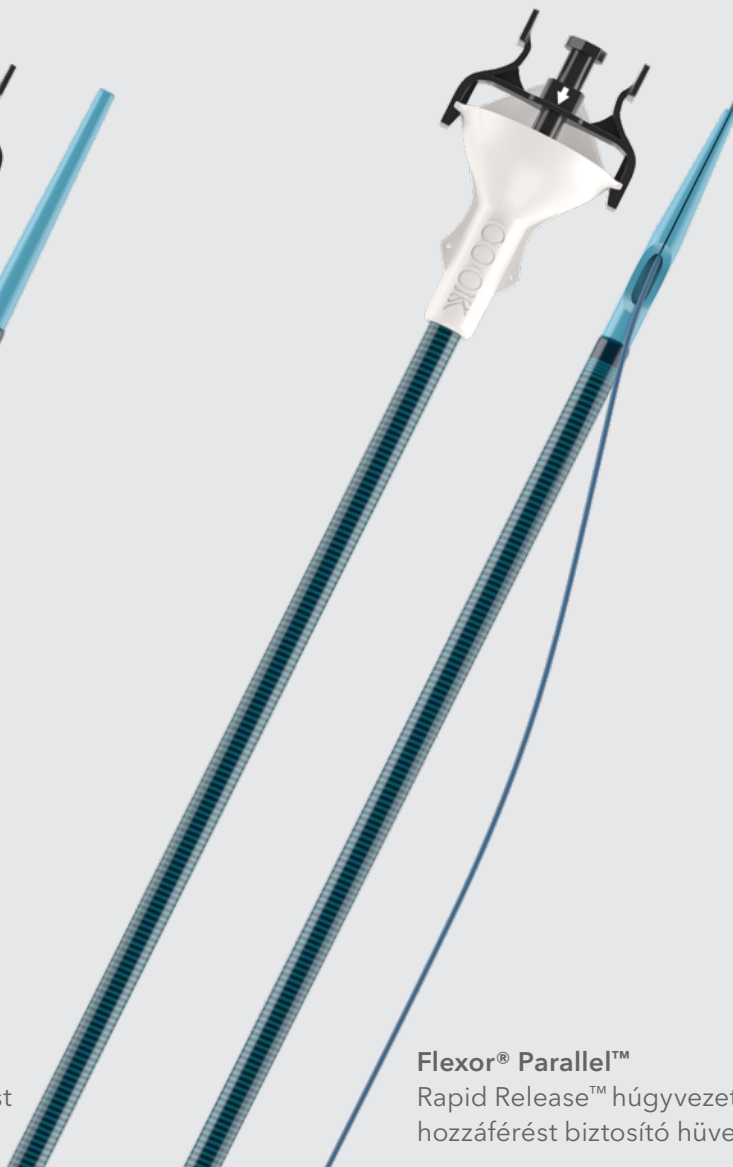

**Flexor® Parallel™**  
Rapid Release™ húgyvezetékhez  
hozzáférést biztosító hüvely

**Az elsők között gyártottunk olyan, húgyvezetékhez hozzáférést biztosító hüvelyt, amely erősített spirálmagot tartalmaz a megtöretés és az összenyomódás elleni védelem érdekében, valamint hidrofилbevonatot a bevezetés megkönnyítésére.**

### Az eredeti

A Flexor húgyvezetékhez hozzáférést biztosító hüvely csatorna létrehozására szolgál endoszkópos urológiai eljárások során, hogy megkönnyítse az endoszkópok és egyéb műszerek bejuttatását a húgyutakba. A hüvely munkacsatornája védi a húgyvezeték az eszközök ismételt be- és kivezetése során, és megvédi az érzékeny műszereket és a kisebb méretű rugalmas endoszkópokat a sérüléstől. Számos versenytársával összehasonlítva a Flexor hüvely kevésbé volt hajlamos az elgörbülésre a húgyvezetékbe való felvezetés során.<sup>1</sup>

### A legújabb

A Flexor Parallel Rapid Release húgyvezetékhez hozzáférést biztosító hüvely bevezetésével megdupláztuk a húgyvezetékhez való védett hozzáférési lehetőségeket. A Flexor Parallel hüvely felvezetése kétféle módon végezhető el - a hagyományos Flexor elhelyezési módszerrel és a gyorskioldó módszerrel. Az utóbbi módszer időt takarít meg, és takarékosabban bánik a termékekkel, ugyanis szükségtelenné teszi a második vezetődrót használatát.

1. Pedro RN, Hendlin K, Durfee WK, et al. Physical characteristics of next-generation ureteral access sheaths: buckling and kinking. *Urology*. 2007;70(3):440-442.

### Flexor



#### Dilatátor kónusza

A hüvelynek a dilatátor kónuszánál elhelyezkedő zárszerkezete a dilatátort a hüvelyhez rögzíti, hogy ezeket együtt lehessen előretolni.

#### Tölcsér

Az ergonomikus kialakítású tölcsér a felvezetés során fogantyúként működik. A tölcsér tágas csatornája megkönnyíti a műszerek felvezetését.

#### Hidrofилbevonat

A hüvely és a dilatátorcsúcs külső felülete AQ® hidrofилbevonattal van ellátva, amely alacsony súrlódású felületet teremtve megkönnyíti a felvezetési eljárást.

#### Mag

A mag szabadalmaztatott spirálszerkezetből áll, amely rugalmasságot és a megtöretés és az összenyomódás elleni ellenállást biztosít.

#### Belső lumen

A belső lumen PTFE-vel van bevonva az eszközök akadálytalan bevezetéséhez és eltávolításához. A vékony falú kialakítás a lehető legnagyobb belső lument biztosítja a lehető legkisebb külső átmérő mellett.

#### Dilatátor

A 6 Fr-es méretről kiindulva egyenletesen vékonyodó végű dilatátor fokozatos, egy lépéses tágítást biztosít.

### Flexor Parallel



#### Hasíték

A disztális végen található hasíték lehetővé teszi a gyorskioldó módszer használatát a hüvely behelyezésére.

# Flexor®

URETERAL ACCESS SHEATH

Rendelési szám	Referencia-cikkszám	Belső átmérő, Fr	Hossz, cm	Rendelési szám	Referencia-cikkszám	Belső átmérő, Fr	Hossz, cm
G19177	FUS-095020	9,5	20	G19168	FUS-120035	12,0	35
G19176	FUS-095028	9,5	28	G46168	FUS-120045	12,0	45
G19174	FUS-095035	9,5	35	G19169	FUS-120055	12,0	55
G46167	FUS-095045	9,5	45	G30391	FUS-140020	14,0	20
G19175	FUS-095055	9,5	55	G30393	FUS-140028	14,0	28
G34877	FUS-107020	10,7	20	G30389	FUS-140035	14,0	35
G34878	FUS-107028	10,7	28	G46169	FUS-140045	14,0	45
G34879	FUS-107035	10,7	35	G30390	FUS-140055	14,0	55
G34880	FUS-107045	10,7	45	<b>Gyermek</b>			
G34881	FUS-107055	10,7	55	G32853	FUS-095013	9,5	13
G19173	FUS-120020	12,0	20	G34876	FUS-107013	10,7	13
G19172	FUS-120028	12,0	28	G32852	FUS-120013	12,0	13

Előfordulhat, hogy egyes termékek, illetve egyes cikkszámú termékek nem minden piacon kaphatók. A részletekkel kapcsolatban forduljon a Cook helyi képviselőjéhez vagy az ügyfélszolgálati és szállítási osztályhoz.

# Flexor® Parallel™

RAPID RELEASE™ URETERAL ACCESS SHEATH

Rendelési szám	Referencia-cikkszám	Belső átmérő, Fr	Hossz, cm	Rendelési szám	Referencia-cikkszám	Belső átmérő, Fr	Hossz, cm
G56428	FUS-095020-P	9,5	20	G56433	FUS-120020-P	12,0	20
G56429	FUS-095028-P	9,5	28	G56434	FUS-120028-P	12,0	28
G56430	FUS-095035-P	9,5	35	G56435	FUS-120035-P	12,0	35
G56431	FUS-095045-P	9,5	45	G56436	FUS-120045-P	12,0	45
G56432	FUS-095055-P	9,5	55	G56438	FUS-120055-P	12,0	55
G34871	FUS-107020-P	10,7	20	G56439	FUS-140020-P	14,0	20
G34872	FUS-107028-P	10,7	28	G56440	FUS-140028-P	14,0	28
G34873	FUS-107035-P	10,7	35	G56441	FUS-140035-P	14,0	35
G34874	FUS-107045-P	10,7	45	G56442	FUS-140045-P	14,0	45
G34875	FUS-107055-P	10,7	55	G56443	FUS-140055-P	14,0	55

Előfordulhat, hogy egyes termékek, illetve egyes cikkszámú termékek nem minden piacon kaphatók. A részletekkel kapcsolatban forduljon a Cook helyi képviselőjéhez vagy az ügyfélszolgálati és szállítási osztályhoz.

## Customer Service

EU Website: [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu)  
EDI: [cookmedical.eu/edi](http://cookmedical.eu/edi)  
Distributors: +353 61239240, [ssc.distributors@cookmedical.com](mailto:ssc.distributors@cookmedical.com)  
Austria: +43 179567121, [oe.orders@cookmedical.com](mailto:oe.orders@cookmedical.com)  
Belgium: +32 27001702, [be.orders@cookmedical.com](mailto:be.orders@cookmedical.com)  
Denmark: +45 38487607, [da.orders@cookmedical.com](mailto:da.orders@cookmedical.com)  
Finland: +358 972519996, [fi.orders@cookmedical.com](mailto:fi.orders@cookmedical.com)  
France: +33 171230269, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
Germany: +49 6950072804, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
Hungary: +36 17779199, [hu.orders@cookmedical.com](mailto:hu.orders@cookmedical.com)  
Ireland: +353 61239252, [ie.orders@cookmedical.com](mailto:ie.orders@cookmedical.com)  
Italy: +39 0269682853, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
Netherlands: +31 202013367, [nl.orders@cookmedical.com](mailto:nl.orders@cookmedical.com)  
Poland: +48 223060159, [pl.orders@cookmedical.com](mailto:pl.orders@cookmedical.com)  
Spain: +34 912702691, [es.orders@cookmedical.com](mailto:es.orders@cookmedical.com)  
Sweden: +46 858769468, [se.orders@cookmedical.com](mailto:se.orders@cookmedical.com)  
Switzerland - French: +41 448009609, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
Switzerland - Italian: +41 448009609, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
Switzerland - German: +41 448009609, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
United Kingdom: +44 2073654183, [uk.orders@cookmedical.com](mailto:uk.orders@cookmedical.com)

USA Website: [cookmedical.com](http://cookmedical.com)  
EDI: [cookmedical.com/edi.do](http://cookmedical.com/edi.do)  
**Americas:**  
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335  
E-mail: [customersupport@cookmedical.com](mailto:customersupport@cookmedical.com)  
**Australia:**  
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283  
E-mail: [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)



CC, URO-A4