



Garantire un passaggio sicuro

Un duo dinamico per un accesso ureterale protetto

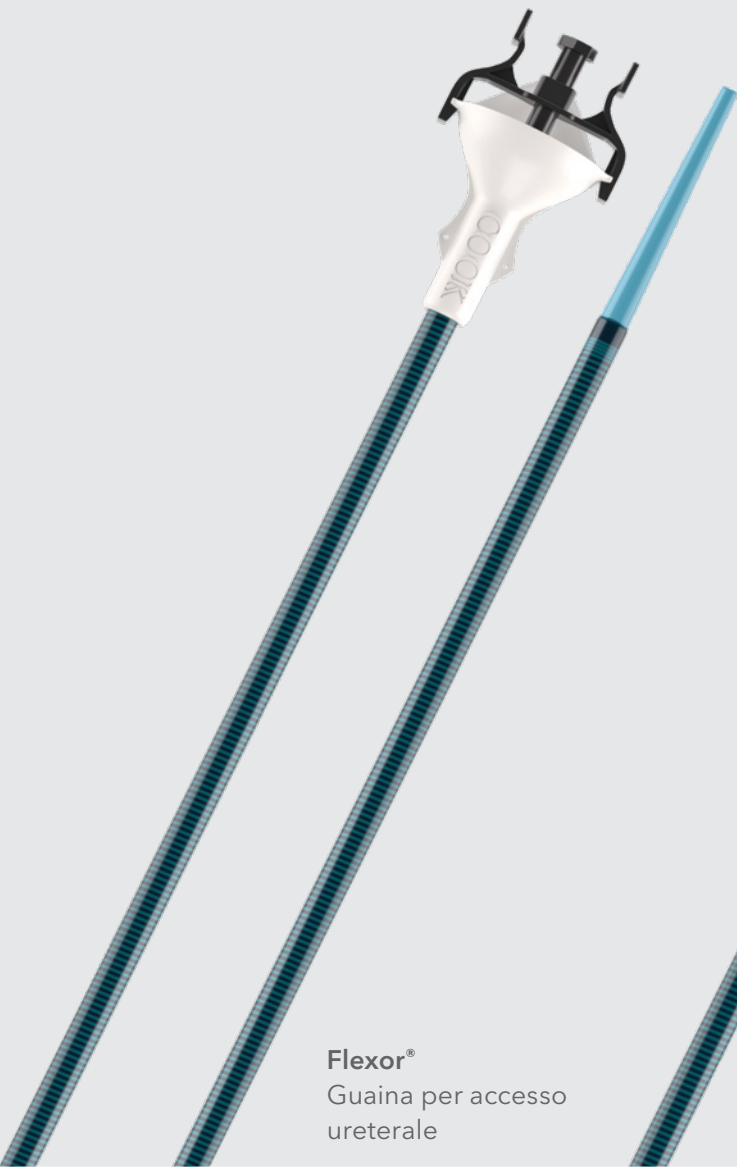

Flexor®
Guaina per accesso ureterale

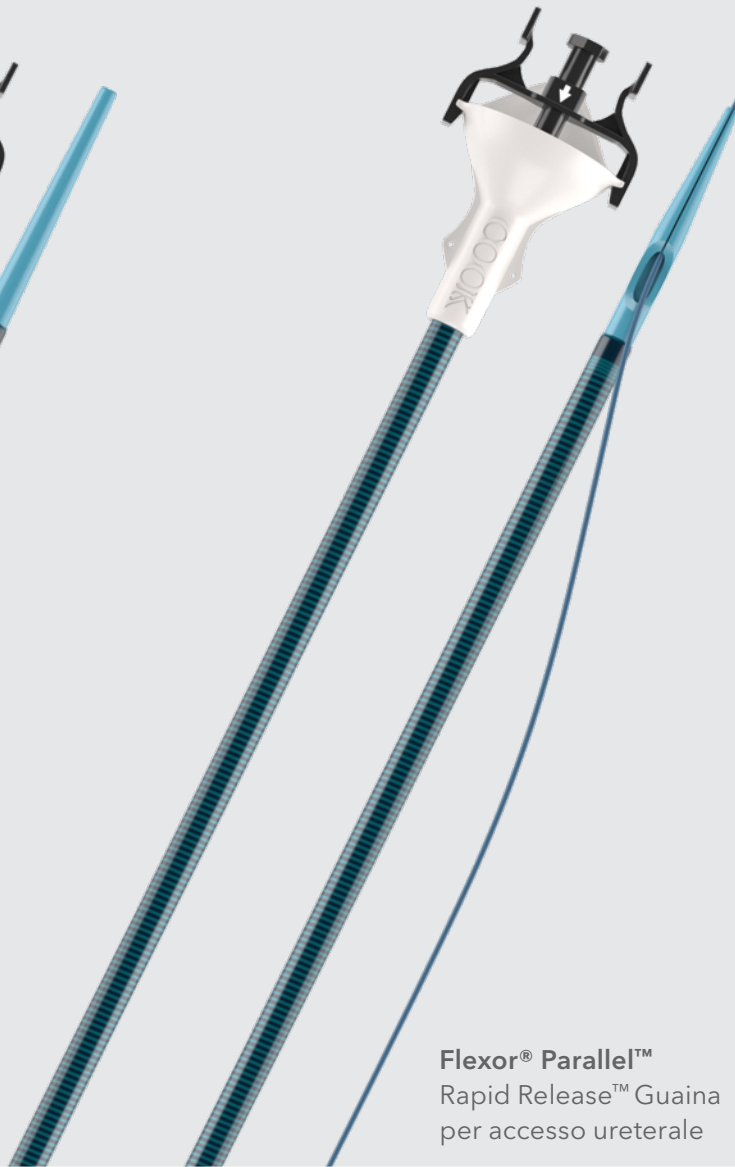

Flexor® Parallel™
Rapid Release™ Guaina per accesso ureterale

Siamo stati tra i primi a creare una guaina per accesso ureterale con anima a spirale rinforzata, resistente agli attorcigliamenti e alla compressione, e dotata di rivestimento idrofilo per garantire un agevole posizionamento.

L'originale


La guaina per accesso ureterale Flexor viene usata per creare un condotto nel corso di procedure di urologia endoscopica e facilitare l'accesso alle vie urinarie mediante endoscopi e altri strumenti. Il canale operativo della guaina protegge l'uretere durante i ripetuti scambi di strumenti e protegge gli strumenti delicati e gli endoscopi flessibili di dimensioni più ridotte da eventuali danneggiamenti. Rispetto a diverse guaine della concorrenza, è stato dimostrato che la guaina Flexor si piega con minore facilità durante l'avanzamento nell'uretere.¹

Il miglioramento

Abbiamo raddoppiato la protezione dell'accesso ureterale con la guaina per accesso ureterale Flexor Parallel Rapid Release. La guaina Flexor Parallel offre due opzioni per il posizionamento: il posizionamento tradizionale Flexor o la tecnica di rilascio rapido. Quest'ultima è concepita per consentire di risparmiare tempo in sala operatoria e utilizzare meno prodotti eliminando la necessità di una seconda guida.

1. Pedro RN, Hendlin K, Durfee WK, et al. Physical characteristics of next-generation ureteral access sheaths: buckling and kinking. *Urology*. 2007;70(3):440-442.

Flexor

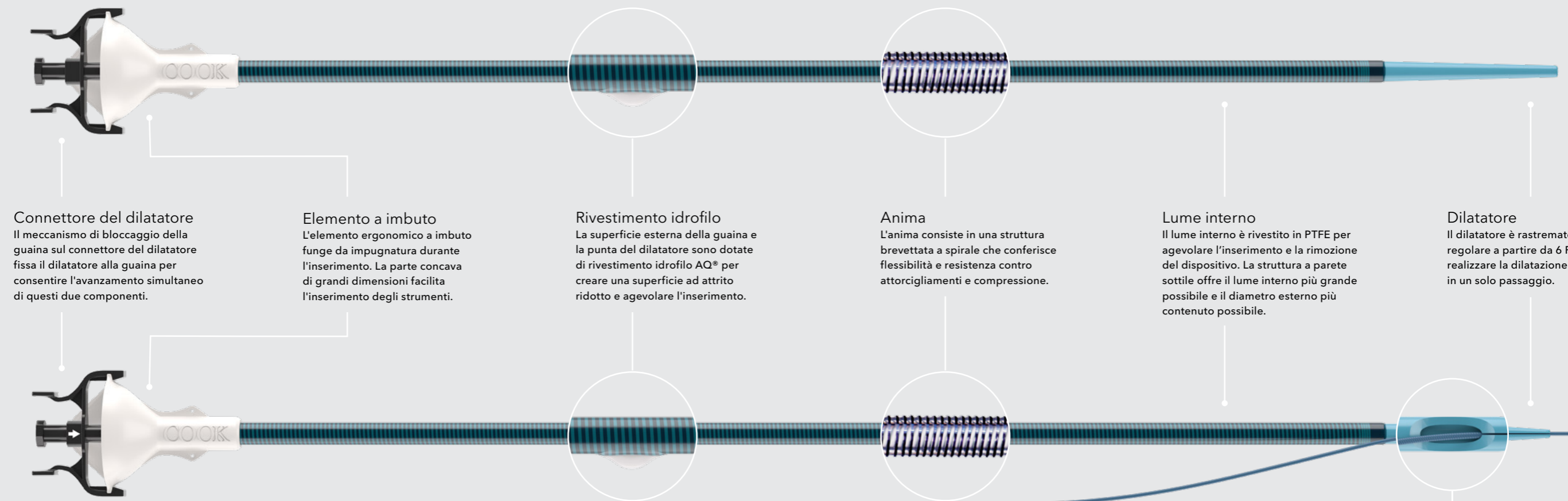

Connettore del dilatatore
Il meccanismo di bloccaggio della guaina sul connettore del dilatatore fissa il dilatatore alla guaina per consentire l'avanzamento simultaneo di questi due componenti.

Elemento a imbuto
L'elemento ergonomico a imbuto funge da impugnatura durante l'inserimento. La parte concava di grandi dimensioni facilita l'inserimento degli strumenti.

Rivestimento idrofilo
La superficie esterna della guaina e la punta del dilatatore sono dotate di rivestimento idrofilo AQ® per creare una superficie ad attrito ridotto e agevolare l'inserimento.

Anima
L'anima consiste in una struttura brevettata a spirale che conferisce flessibilità e resistenza contro attorcigliamenti e compressione.

Lume interno
Il lume interno è rivestito in PTFE per agevolare l'inserimento e la rimozione del dispositivo. La struttura a parete sottile offre il lume interno più grande possibile e il diametro esterno più contenuto possibile.

Dilatatore
Il dilatatore è rastremato in modo regolare a partire da 6 Fr per realizzare la dilatazione graduale in un solo passaggio.

Flexor Parallel

Apertura
L'apertura all'estremità distale del dilatatore consente l'uso della tecnica di rilascio rapido per posizionare la guaina.

Flexor®

URETERAL ACCESS SHEATH

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Diametro Fr	Lunghezza cm	Codice di ordinazione	Codice prodotto	Diametro Fr	Lunghezza cm
G19177	FUS-095020	9,5	20	G19168	FUS-120035	12,0	35
G19176	FUS-095028	9,5	28	G46168	FUS-120045	12,0	45
G19174	FUS-095035	9,5	35	G19169	FUS-120055	12,0	55
G46167	FUS-095045	9,5	45	G30391	FUS-140020	14,0	20
G19175	FUS-095055	9,5	55	G30393	FUS-140028	14,0	28
G34877	FUS-107020	10,7	20	G30389	FUS-140035	14,0	35
G34878	FUS-107028	10,7	28	G46169	FUS-140045	14,0	45
G34879	FUS-107035	10,7	35	G30390	FUS-140055	14,0	55
G34880	FUS-107045	10,7	45	Pediatrica			
G34881	FUS-107055	10,7	55	G32853	FUS-095013	9,5	13
G19173	FUS-120020	12,0	20	G34876	FUS-107013	10,7	13
G19172	FUS-120028	12,0	28	G32852	FUS-120013	12,0	13

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Delivery.

Flexor® Parallel™

RAPID RELEASE™ URETERAL ACCESS SHEATH

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Diametro Fr	Lunghezza cm	Codice di ordinazione	Codice prodotto	Diametro Fr	Lunghezza cm
G56428	FUS-095020-P	9,5	20	G56433	FUS-120020-P	12,0	20
G56429	FUS-095028-P	9,5	28	G56434	FUS-120028-P	12,0	28
G56430	FUS-095035-P	9,5	35	G56435	FUS-120035-P	12,0	35
G56431	FUS-095045-P	9,5	45	G56436	FUS-120045-P	12,0	45
G56432	FUS-095055-P	9,5	55	G56438	FUS-120055-P	12,0	55
G34871	FUS-107020-P	10,7	20	G56439	FUS-140020-P	14,0	20
G34872	FUS-107028-P	10,7	28	G56440	FUS-140028-P	14,0	28
G34873	FUS-107035-P	10,7	35	G56441	FUS-140035-P	14,0	35
G34874	FUS-107045-P	10,7	45	G56442	FUS-140045-P	14,0	45
G34875	FUS-107055-P	10,7	55	G56443	FUS-140055-P	14,0	55

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Delivery.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



CC, URO-A4