



Zadbaj o bezpieczne przejście

Dynamiczny duet zapewniający bezpieczny dostęp moczowodowy

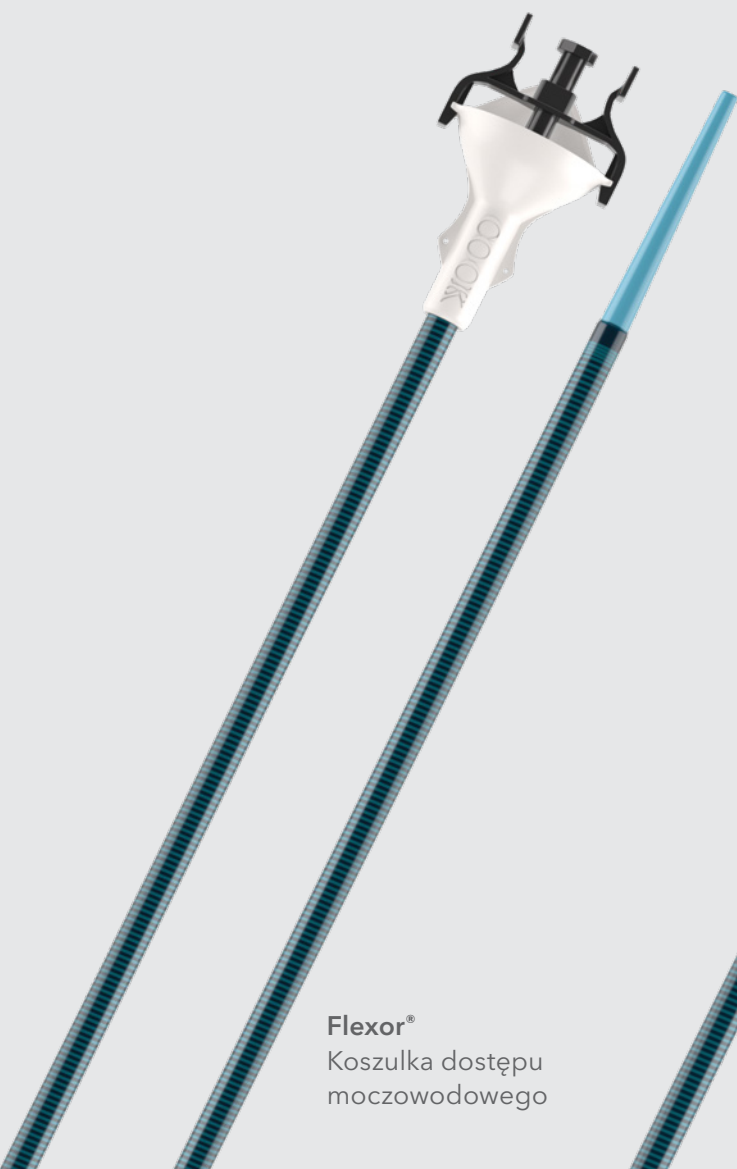

Flexor®
Koszulka dostępu
moczowodowego

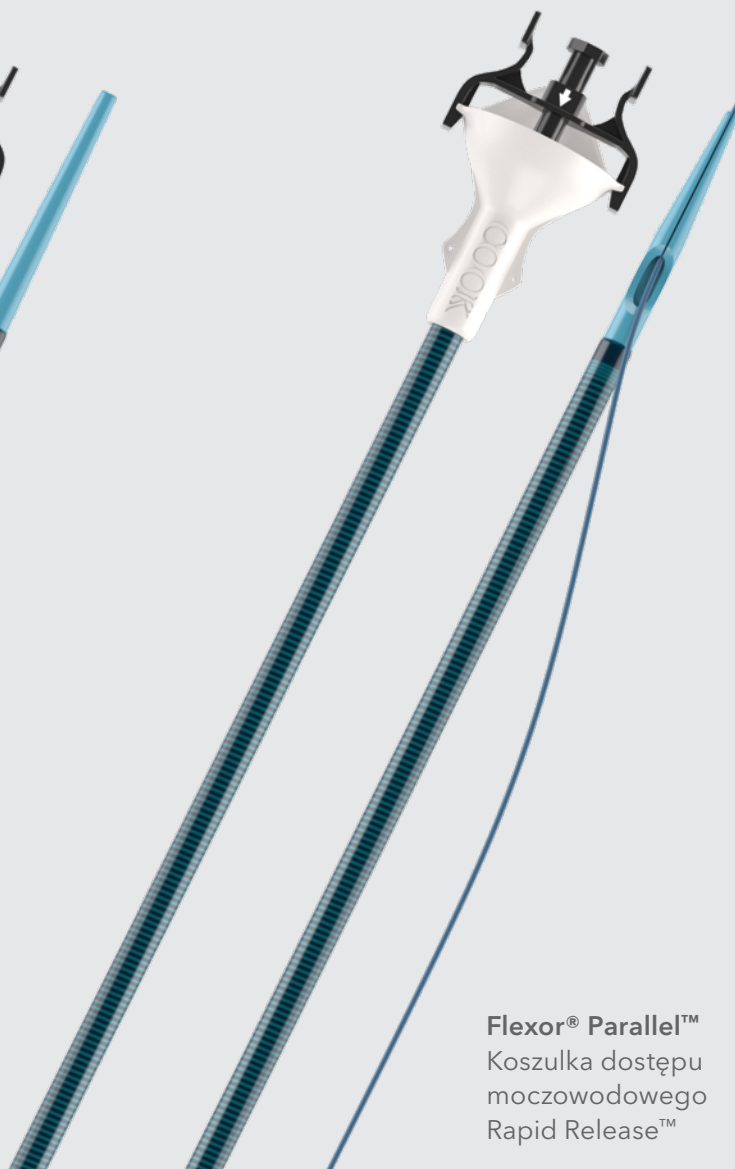

Flexor® Parallel™
Koszulka dostępu
moczowodowego
Rapid Release™

Jako pierwsi opracowaliśmy koszulkę dostępu moczowodowego z rdzeniem wzmocnionym spiralą, który sprawia, że jest odporna na zginanie i ściskanie oraz z powłoką hydrofilną ułatwiającą jej umieszczanie.

Jedyna w swoim rodzaju


Koszulka dostępu moczowodowego Flexor jest stosowana do stworzenia drogi dostępu podczas endoskopowych zabiegów urologicznych, ułatwiając wprowadzanie do dróg moczowych endoskopów i innych narzędzi. Kanał roboczy koszulki chroni moczowód w trakcie wielokrotnych wymian narzędzi, a także zabezpiecza delikatne narzędzia i mniejsze, giętkie endoskopy przed uszkodzeniem. Wykazano, że prawdopodobieństwo odkształcenia się koszulki Flexor podczas wprowadzania do moczowodu jest mniejsze niż w przypadku kilku konkurencyjnych produktów.¹

Udoskonalenie

Wprowadzając koszulkę dostępu moczowodowego Flexor Parallel Rapid Release, podwoiliśmy wysiłki, aby zwiększyć ochronę podczas dostępu moczowodowego. Koszulka Flexor Parallel oferuje dwie możliwości wprowadzania: tradycyjny sposób umieszczania koszulki Flexor lub zastosowanie techniki z szybkim zwolnieniem. Druga możliwa opcja została opracowana, aby umożliwić oszczędność czasu na sali operacyjnej, a także, dzięki eliminacji potrzeby użycia drugiego prowadnika, na zużycie mniejszej liczby produktów.

1. Pedro RN, Hendlin K, Durfee WK i in. Physical characteristics of next-generation ureteral access sheaths: buckling and kinking. *Urology*. 2007;70(3):440-442.

Flexor

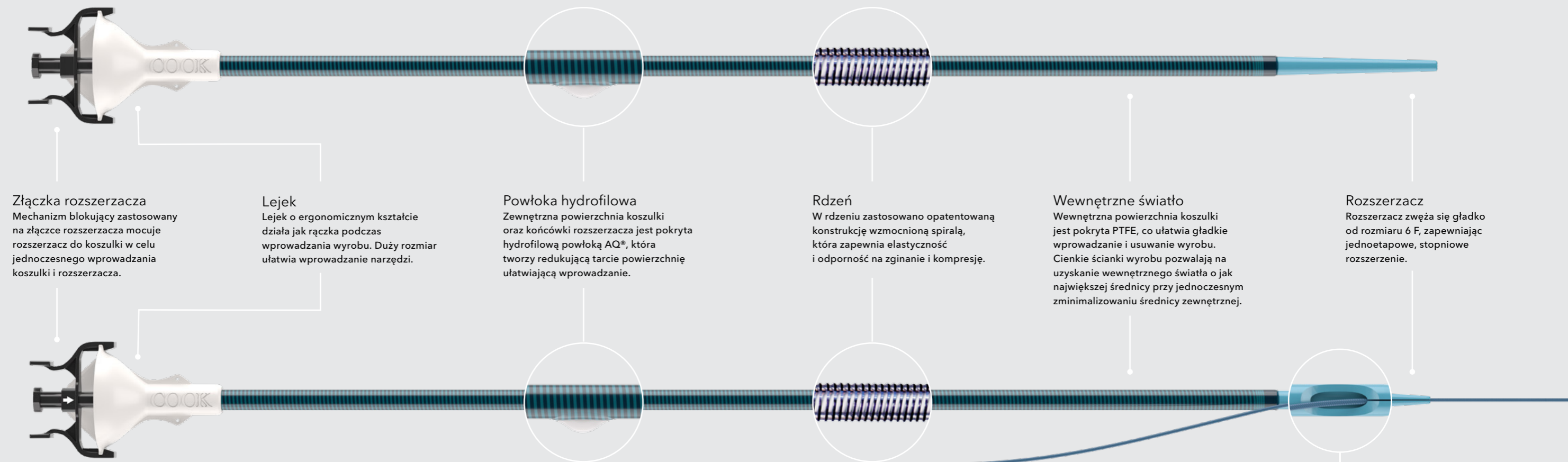

Złączka rozszerzacza
Mechanizm blokujący zastosowany na złączce rozszerzacza mocuje rozszerzacz do koszulki w celu jednoczesnego wprowadzania koszulki i rozszerzacza.

Lejek
Lejek o ergonomicznym kształcie działa jak rączka podczas wprowadzania wyrobu. Duży rozmiar ułatwia wprowadzanie narzędzi.

Powłoka hydrofilowa
Zewnętrzna powierzchnia koszulki oraz końcówki rozszerzacza jest pokryta hydrofilową powłoką AQ®, która tworzy redukującą tarcie powierzchnię ułatwiającą wprowadzanie.

Rdzeń
W rdzeniu zastosowano opatentowaną konstrukcję wzmocnioną spiralą, która zapewnia elastyczność i odporność na zginanie i kompresję.

Wewnętrzne światło
Wewnętrzna powierzchnia koszulki jest pokryta PTFE, co ułatwia gładkie wprowadzanie i usuwanie wyrobu. Cienkie ścianki wyrobu pozwalają na uzyskanie wewnętrznego światła o jak największej średnicy przy jednoczesnym zminimalizowaniu średnicy zewnętrznej.

Rozszerzacz
Rozszerzacz zwięża się gładko od rozmiaru 6 F, zapewniając stopniowe rozszerzenie.

Flexor Parallel

Otwór
Otwór na dystalnym końcu rozszerzacza umożliwia zastosowanie techniki z szybkim zwolnieniem podczas umieszczania koszulki.

Flexor®

URETERAL ACCESS SHEATH

Numer zamówienia	Numer referencyjny części	Śr. wewn. Fr	Długość cm
G19177	FUS-095020	9,5	20
G19176	FUS-095028	9,5	28
G19174	FUS-095035	9,5	35
G46167	FUS-095045	9,5	45
G19175	FUS-095055	9,5	55
G34877	FUS-107020	10,7	20
G34878	FUS-107028	10,7	28
G34879	FUS-107035	10,7	35
G34880	FUS-107045	10,7	45
G34881	FUS-107055	10,7	55
G19173	FUS-120020	12,0	20
G19172	FUS-120028	12,0	28

Numer zamówienia	Numer referencyjny części	Śr. wewn. Fr	Długość cm
G19168	FUS-120035	12,0	35
G46168	FUS-120045	12,0	45
G19169	FUS-120055	12,0	55
G30391	FUS-140020	14,0	20
G30393	FUS-140028	14,0	28
G30389	FUS-140035	14,0	35
G46169	FUS-140045	14,0	45
G30390	FUS-140055	14,0	55

Pediatriczny

G32853	FUS-095013	9,5	13
G34876	FUS-107013	10,7	13
G32852	FUS-120013	12,0	13

Niektóre produkty lub numery części mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. Szczegóły można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Cook lub w dziale obsługi klienta i dostaw.

Flexor® Parallel™

RAPID RELEASE™ URETERAL ACCESS SHEATH

Numer zamówienia	Numer referencyjny części	Śr. wewn. Fr	Długość cm
G56428	FUS-095020-P	9,5	20
G56429	FUS-095028-P	9,5	28
G56430	FUS-095035-P	9,5	35
G56431	FUS-095045-P	9,5	45
G56432	FUS-095055-P	9,5	55
G34871	FUS-107020-P	10,7	20
G34872	FUS-107028-P	10,7	28
G34873	FUS-107035-P	10,7	35
G34874	FUS-107045-P	10,7	45
G34875	FUS-107055-P	10,7	55

Numer zamówienia	Numer referencyjny części	Śr. wewn. Fr	Długość cm
G56433	FUS-120020-P	12,0	20
G56434	FUS-120028-P	12,0	28
G56435	FUS-120035-P	12,0	35
G56436	FUS-120045-P	12,0	45
G56438	FUS-120055-P	12,0	55
G56439	FUS-140020-P	14,0	20
G56440	FUS-140028-P	14,0	28
G56441	FUS-140035-P	14,0	35
G56442	FUS-140045-P	14,0	45
G56443	FUS-140055-P	14,0	55

Niektóre produkty lub numery części mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. Szczegóły można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Cook lub w dziale obsługi klienta i dostaw.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



CC, URO-A4