



Garantice un paso seguro.

Una pareja dinámica para proteger el acceso ureteral

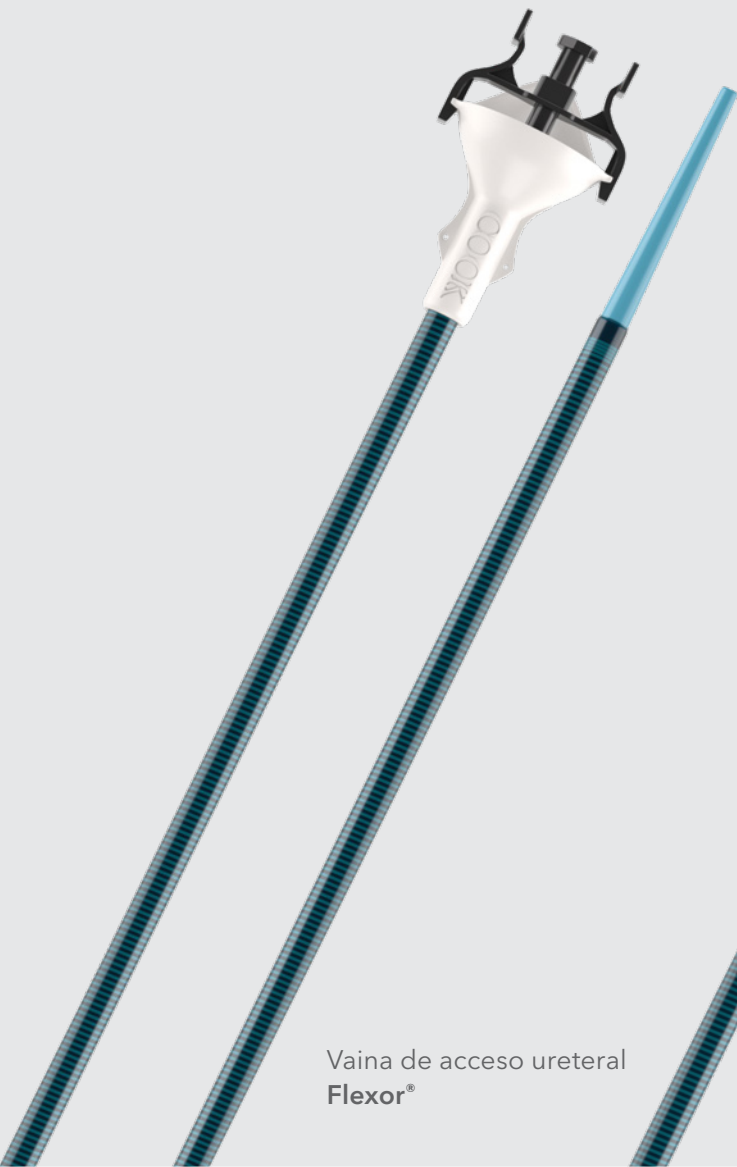

Vaina de acceso ureteral
Flexor®

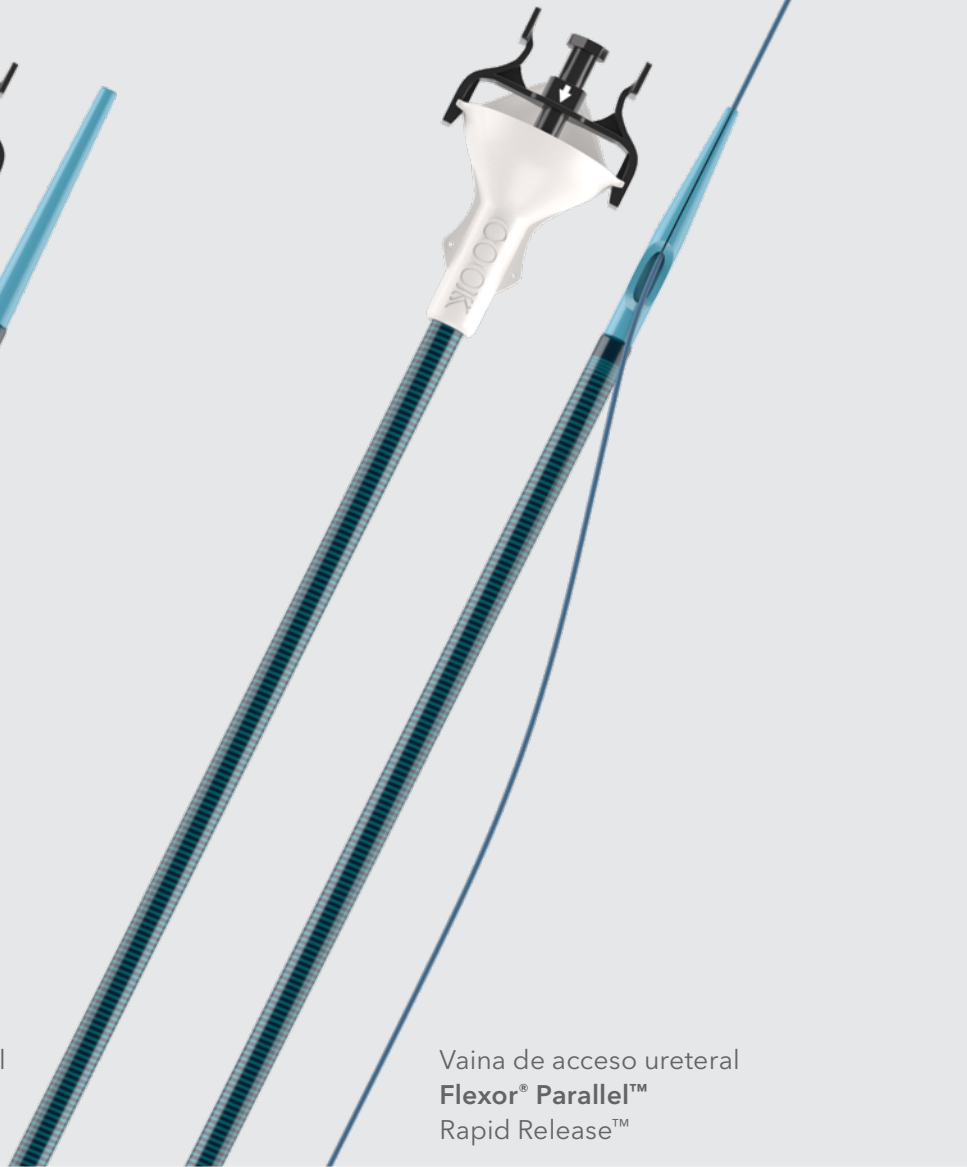

Vaina de acceso ureteral
Flexor® Parallel™
Rapid Release™

Hemos sido uno de los primeros en fabricar una vaina de acceso ureteral con un núcleo en espiral (para resistir el acodamiento y la compresión) y con un revestimiento hidrofílico para facilitar la colocación.

La original

La vaina de acceso ureteral Flexor se utiliza para establecer un conducto durante procedimientos urológicos endoscópicos con objeto de facilitar el paso de endoscopios y otros instrumentos en las vías urinarias. El canal de trabajo de la vaina protege la uretra durante los constantes cambios de instrumentos y también ofrece protección a los instrumentos delicados y endoscopios flexibles más pequeños para que no se dañen. En comparación con varias vainas de los competidores, la vaina Flexor ha mostrado una menor probabilidad de doblarse a la hora de hacerla avanzar por la uretra.¹

La versión mejorada

Cuando introdujimos la vaina de acceso ureteral Flexor Parallel Rapid Release redoblamos la protección del acceso ureteral. La vaina Flexor Parallel brinda dos opciones de colocación: la colocación Flexor tradicional o bien la técnica de liberación rápida. Esta última técnica está diseñada para ahorrar tiempo en el quirófano y economizar en producto ya que elimina la necesidad de una segunda guía.

1. Pedro RN, Hendlin K, Durfee WK, et al. Physical characteristics of next-generation ureteral access sheaths: buckling and kinking. *Urology*. 2007;70(3):440-442.

Flexor



Conector del dilatador

El mecanismo de bloqueo de la vaina en el conector del dilatador asegura el dilatador a la vaina para el avance simultáneo de la vaina y el dilatador.

Embudo

El embudo ergonómico actúa como mango durante la introducción. La depresión de gran tamaño facilita la introducción del instrumento.

Revestimiento hidrofílico

La superficie externa de la vaina y la punta del dilatador están recubiertas con revestimiento hidrofílico AQ® para crear una superficie de baja fricción a fin de facilitar el proceso de introducción.

Núcleo

El núcleo consiste en una estructura espiral patentada para ofrecer flexibilidad y resistencia al acodamiento y a la compresión.

Luz interna

La luz interna tiene un revestimiento de PTFE para facilitar la introducción y extracción suaves del dispositivo. La estructura de pared delgada ofrece la mayor luz interna posible, al tiempo que minimiza el diámetro exterior.

Dilatador

El dilatador se estrecha suavemente desde 6 Fr para ofrecer una dilatación gradual en un solo paso.

Flexor Parallel



Orificio alargado

El orificio alargado en el extremo distal del dilatador permite utilizar la técnica de liberación rápida para colocar la vaina.

Flexor®

URETERAL ACCESS SHEATH

Referencia	Referencia de producto	DI Fr	Longitud cm
G19177	FUS-095020	9,5	20
G19176	FUS-095028	9,5	28
G19174	FUS-095035	9,5	35
G46167	FUS-095045	9,5	45
G19175	FUS-095055	9,5	55
G34877	FUS-107020	10,7	20
G34878	FUS-107028	10,7	28
G34879	FUS-107035	10,7	35
G34880	FUS-107045	10,7	45
G34881	FUS-107055	10,7	55
G19173	FUS-120020	12,0	20
G19172	FUS-120028	12,0	28

Referencia	Referencia de producto	DI Fr	Longitud cm
G19168	FUS-120035	12,0	35
G46168	FUS-120045	12,0	45
G19169	FUS-120055	12,0	55
G30391	FUS-140020	14,0	20
G30393	FUS-140028	14,0	28
G30389	FUS-140035	14,0	35
G46169	FUS-140045	14,0	45
G30390	FUS-140055	14,0	55
Pediátrico			
G32853	FUS-095013	9,5	13
G34876	FUS-107013	10,7	13
G32852	FUS-120013	12,0	13

Algunos productos o referencias de producto pueden no estar disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local o con atención al cliente de Cook para obtener más información.

Flexor® Parallel™

RAPID RELEASE™ URETERAL ACCESS SHEATH

Referencia	Referencia de producto	DI Fr	Longitud cm
G56428	FUS-095020-P	9,5	20
G56429	FUS-095028-P	9,5	28
G56430	FUS-095035-P	9,5	35
G56431	FUS-095045-P	9,5	45
G56432	FUS-095055-P	9,5	55
G34871	FUS-107020-P	10,7	20
G34872	FUS-107028-P	10,7	28
G34873	FUS-107035-P	10,7	35
G34874	FUS-107045-P	10,7	45
G34875	FUS-107055-P	10,7	55
G56433	FUS-120020-P	12,0	20

Referencia	Referencia de producto	DI Fr	Longitud cm
G56434	FUS-120028-P	12,0	28
G56435	FUS-120035-P	12,0	35
G56436	FUS-120045-P	12,0	45
G56438	FUS-120055-P	12,0	55
G56439	FUS-140020-P	14,0	20
G56440	FUS-140028-P	14,0	28
G56441	FUS-140035-P	14,0	35
G56442	FUS-140045-P	14,0	45
G56443	FUS-140055-P	14,0	55

Algunos productos o referencias de producto pueden no estar disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local o con atención al cliente de Cook para obtener más información.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



CC, URO-A4