

De la citología a la histología: seguimos aumentando los valores predictivos




EchoTip ProCore®

AGUJA DE BIOPSIA POR ECOGRAFÍA DE ALTA DEFINICIÓN

Llegue al diagnóstico en todo el tracto digestivo

EchoTip ProCore permite obtener muestras de histología con citología, además de permitir el acceso a todo el tracto digestivo, donde puede abordar lesiones más pequeñas con un mayor rendimiento y con menos pases de la aguja.¹

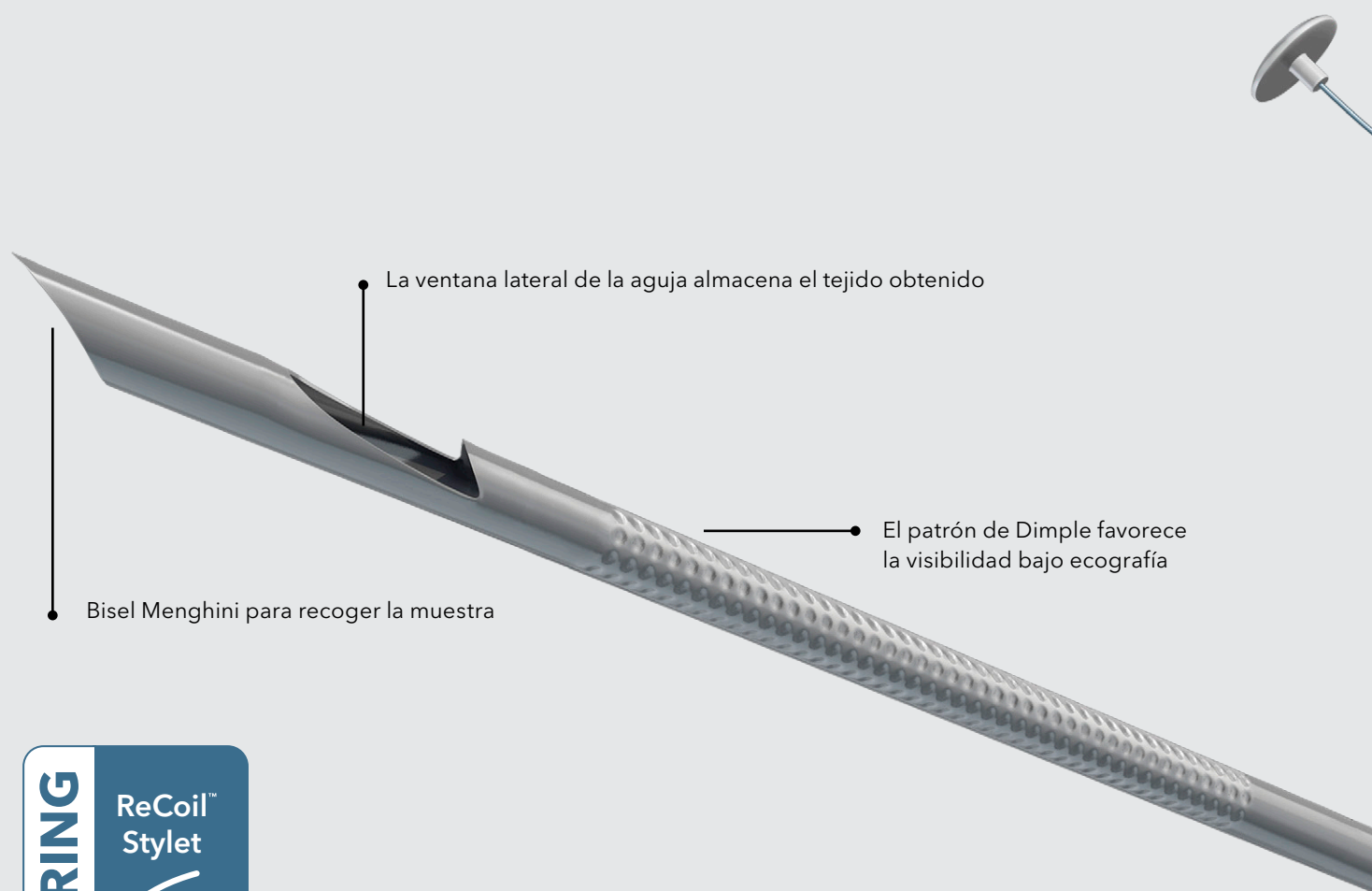


¹Kamata K, Kitano M et al. Histologic diagnosis of pancreatic masses using 25-gauge endoscopic ultrasound needles with and without a core trap: a multicenter randomized trial Endoscopy 2016; Volume 48(07)




El estilete ReCoil™ le ayuda a manejar con facilidad el estilete y minimizar así el riesgo de contaminación

Un mango de contorno anatómico permite el control preciso de la aguja y le aporta estabilidad

Más resultados, menos pases de la aguja

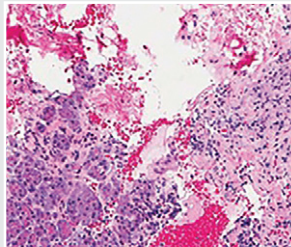

Bloque celular

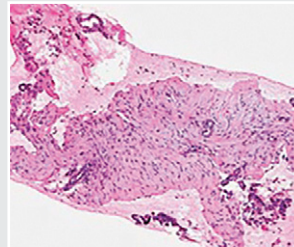


Biopsia con aguja gruesa

Imágenes ecográficas por cortesía del Dr. Kenneth Chang,
H. H. Chao Comprehensive Digestive Disease Center,
University of California-Irvine.


Imágenes de patología por cortesía del Dr. James Farrell
Sección de endoscopias intervencionistas y enfermedades pancreáticas del
Departamento de Enfermedades Digestivas, Yale University School of Medicine.

La vaina en espiral favorece la flexibilidad de la aguja

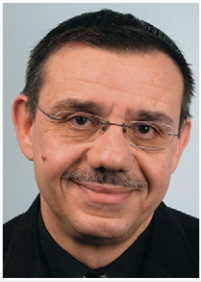

«La citología no es suficiente para diagnosticar y tratar todas las lesiones. Se necesita una cantidad de material suficiente para caracterizar correctamente los tumores y las afecciones».

**Dr. Marc Giovannini, Unidad de endoscopias,
Institut Paoli-Calmettes, Marsella, Francia**

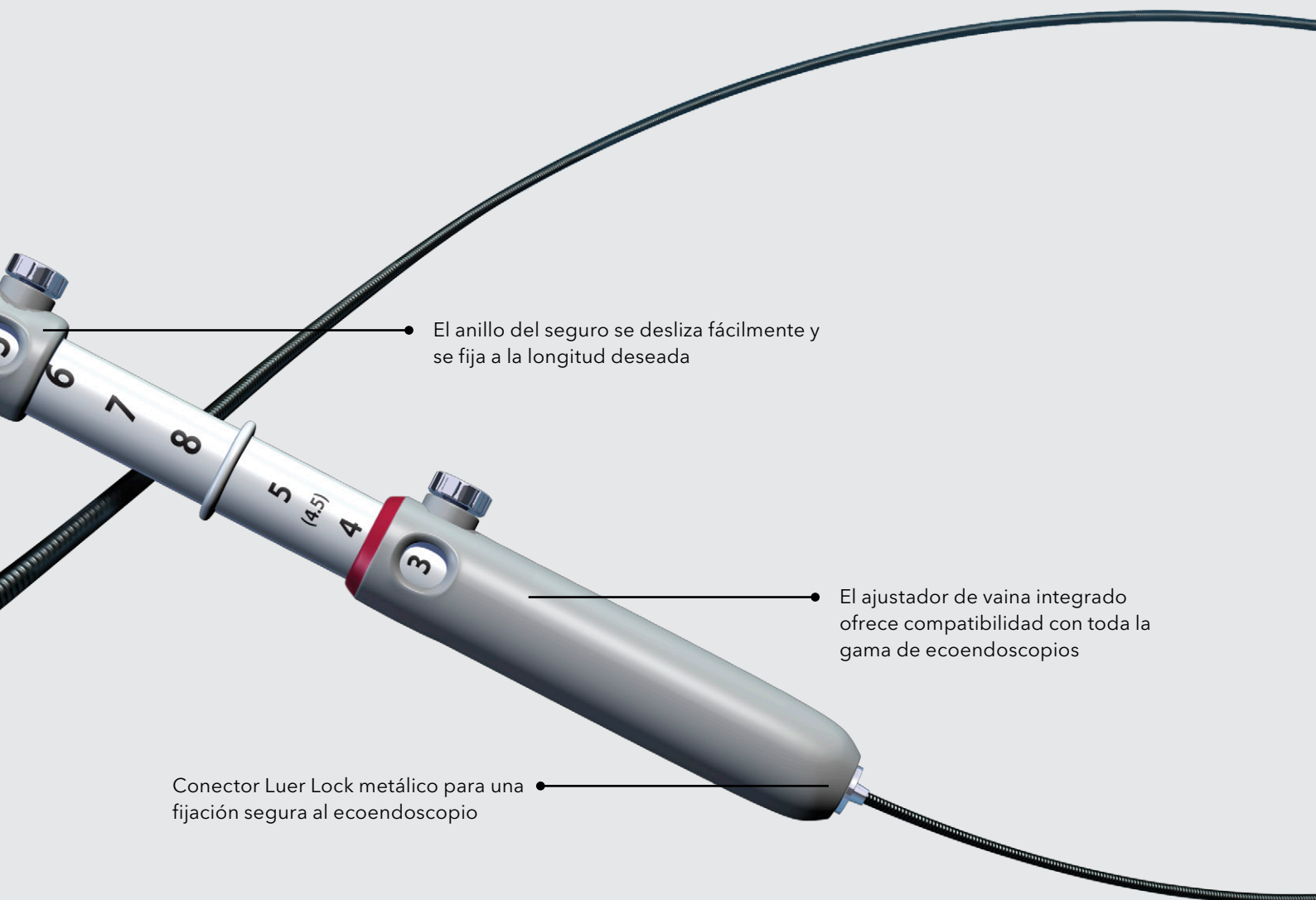

El anillo del seguro se desliza fácilmente y se fija a la longitud deseada

El ajustador de vaina integrado ofrece compatibilidad con toda la gama de ecoendoscopios

Conector Luer Lock metálico para una fijación segura al ecoendoscopio

La imagen del producto muestra una
EchoTip ProCore de calibre 20.

Liderando la innovación en ecoendoscopia desde 1998

A lo largo de todos estos años, nuestros clientes nos han transmitido qué es lo que les importa y nosotros los hemos escuchado. Hemos incorporado la extensa información recabada de los médicos, y le ofrecemos nuestras últimas innovaciones en cuanto a flexibilidad y obtención de muestras diagnósticas, adaptadas a usted y a las necesidades de su anatomopatólogo, con el sólido respaldo de datos clínicos publicados.

Aguja de calibre 19 G



Aguja de calibre 20 G



Aguja de calibre 22 G



Aguja de calibre 25 G



Especificaciones del producto

Este dispositivo se utiliza con un ecoendoscopio para la biopsia con aguja fina (FNB) de lesiones submucosas, masas mediastinales, ganglios linfáticos y masas intraperitoneales dentro del tracto digestivo o adyacentes a este.

Se suministra estéril y es desechable; indicado para un solo uso.

Referencia	Referencia de producto	Tamaño de la aguja calibre G	Tamaño de la vaina Fr	Extensión de aguja ajustable cm	Punta del estilete	Canal de accesorios mínimo mm
G53585	ECHO-HD-19-C	19	4,8	0-8	punta de bola retraída	2,8
G34785	ECHO-HD-3-20-C*	20	7,95	0-8	punta de bola retraída	3,7
G55736	ECHO-HD-22-C	22	5,2	0-8	punta de bola retraída	2,8
G55738	ECHO-HD-25-C	25	5,2	0-8	biselada	2,8

Algunos productos o referencias de producto pueden no estar disponibles en todos los mercados. Consulte los detalles con su representante local o centro de atención al cliente de Cook.

*El estilete ReCoil solo está disponible en la EchoTip ProCore calibre de 20 G.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001633, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-A4