

Un nuevo enfoque
para el acceso.

Acrobat® 2
CALIBRATED TIP WIRE GUIDE

AT LEAST
35%
GREATER
TIP FLEXIBILITY
THAN MAJOR
COMPETITORS*

Equilibrio entre capacidad de empuje y flexibilidad.

Los objetivos de sus procedimientos son siempre los mismos: tener un acceso sencillo y fiable en todos sus procedimientos de CPRE. Tanto si tiene previsto realizar una CPRE de rutina o el procedimiento más complejo y desafiante, Acrobat 2 es la guía de referencia que redefine el acceso al proporcionar la combinación óptima de flexibilidad de la punta y capacidad de empuje mejorada para unas prestaciones fiables en la práctica diaria.

Diseño de punta atraumática

Punta flexible de muelle espiral calibrada, diseñada para proporcionar un contacto suave con los tejidos delicados de la estructura anatómica pancreatobiliar

Muelle espiral de platino para obtener visibilidad mediante fluoroscopia

Punta de muelle espiral de 4 cm para facilitar la visualización fluoroscópica durante todo el procedimiento

Acceso suave

El revestimiento hidrofílico de 5,8 cm reduce la fricción para proporcionar maniobrabilidad y navegación por estructuras anatómicas complicadas




Aplicación de la tecnología de acceso de radiología intervencionista a una guía de CPRE.

La flexibilidad de la punta es la clave para conseguir el acceso. Esa es la razón por la que seguimos el ejemplo del papel pionero de Cook en radiología intervencionista (RI). Al adaptar esa experiencia específicamente a CPRE, hemos creado una de las guías con la punta más flexible del mercado. Eso significa que obtiene las mismas prestaciones de acceso de las que llevan dependiendo los radiólogos intervencionistas desde hace más de 50 años. De hecho, Acrobat 2 tiene al menos una flexibilidad de la punta un 35 % mayor que las ocho principales guías estudiadas.*

Prueba de flexibilidad de la punta de Acrobat 2



Al menos un 35 % más de flexibilidad

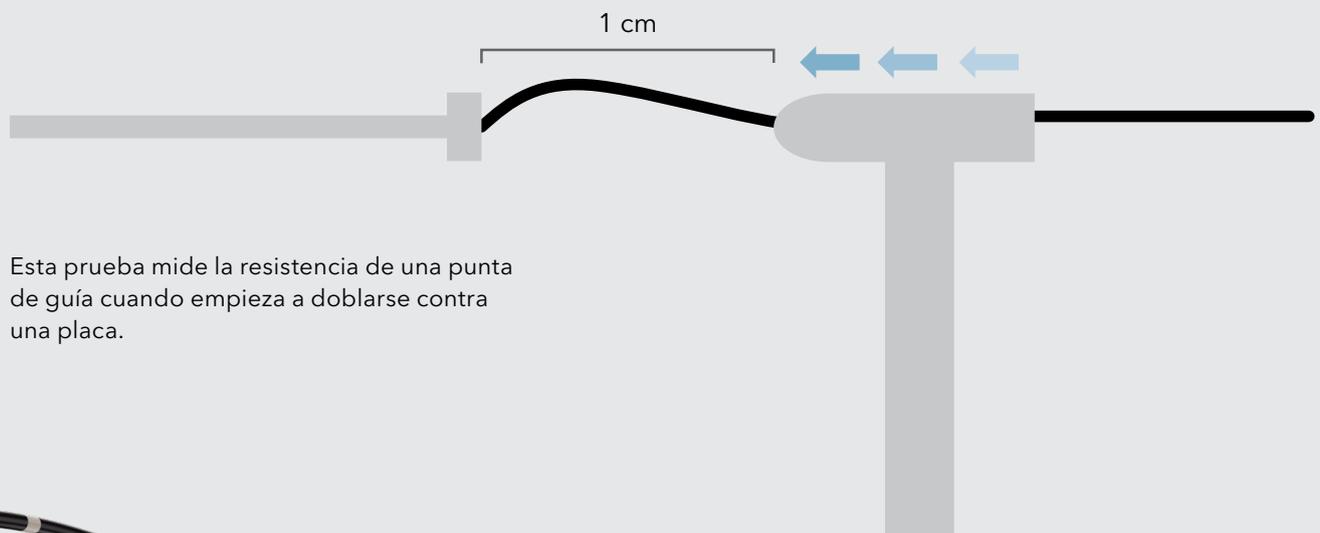

Esta prueba mide la resistencia de una punta de guía cuando empieza a doblarse contra una placa.

Capacidad de torsión 1:1

Acrobat 2, disponible con punta recta y angulada, le ofrece una capacidad de torsión 1:1 para obtener una rotación precisa de la guía cuando sea necesario para la canulación selectiva y la navegación de conductos.

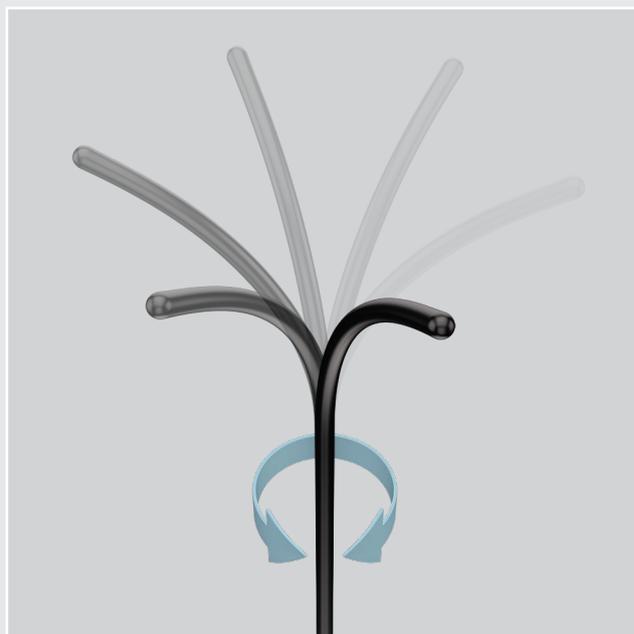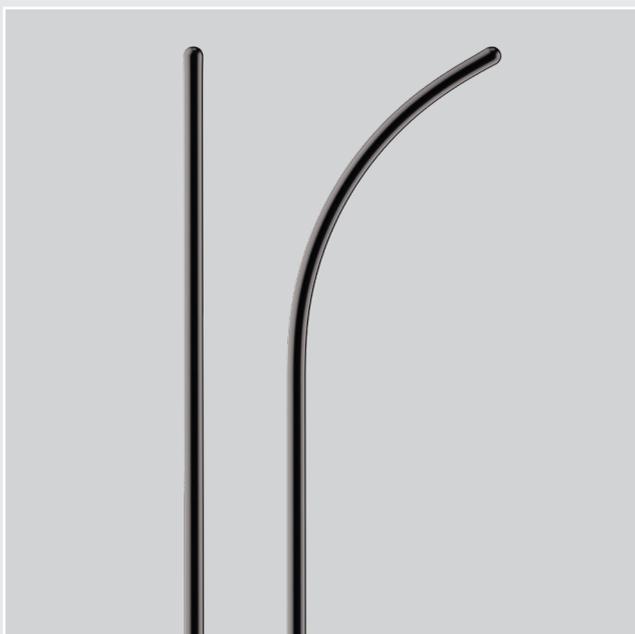

Capacidad de empuje un 29 % mayor

Núcleo de nitinol de mayor tamaño para una mejora del 29 % en la capacidad de empuje de la guía en relación con la guía Acrobat de 0,035 inch original






Visualización de la posición y el movimiento

Mark V System® proporciona una visualización de alto contraste del movimiento y la profundidad de inserción

Inspirando confianza todos los días.

Todos los aspectos de Acrobat 2 están diseñados para proporcionar prestaciones de confianza. Desde su punta flexible de muelle espiral de platino y su mejor capacidad de empuje, hasta su capacidad de torsión 1:1, pasando por el innovador Mark V System, todo ello contribuye a crear una guía que le proporciona confianza durante todos sus procedimientos de CPRE.

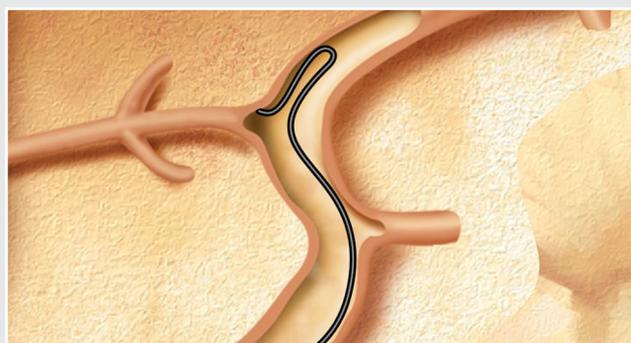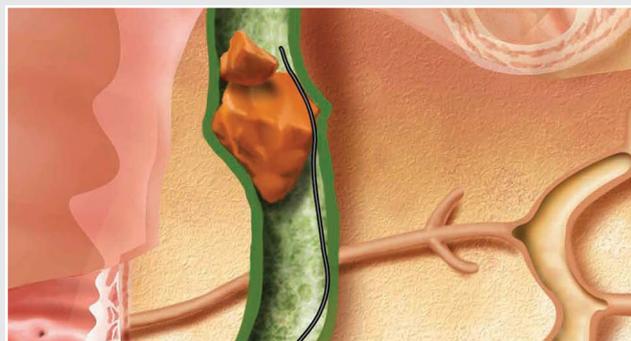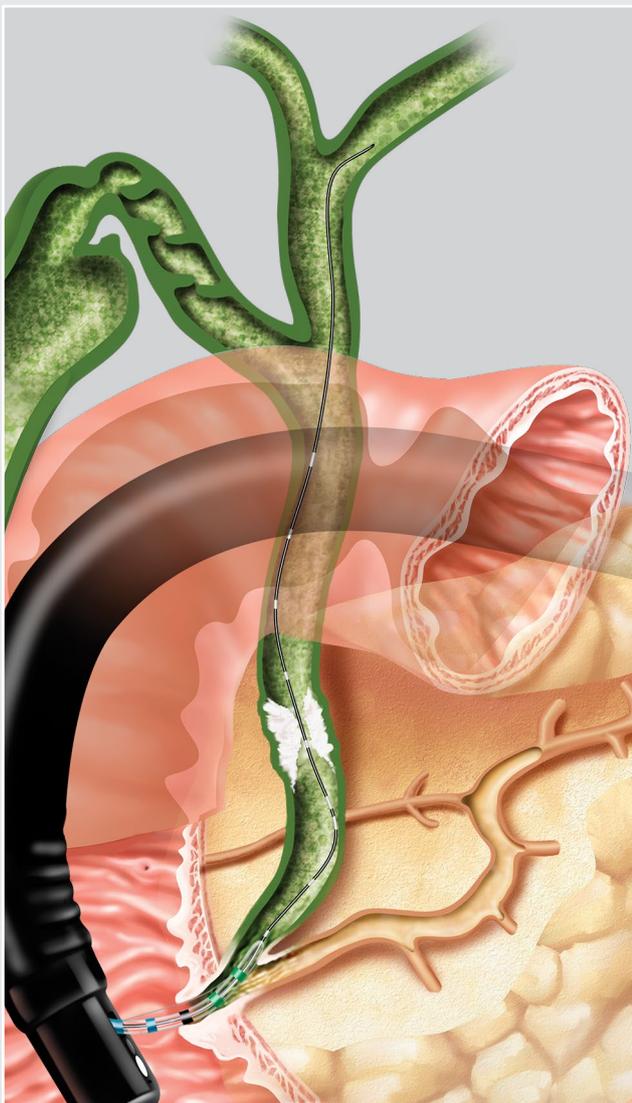

Especificaciones del producto

Para facilitar la canulación de los conductos biliar y pancreático y para facilitar el paso a través de estenosis difíciles durante la CPRE.

Se suministra estéril y es desechable; indicado para un solo uso.

Referencia	Referencia de producto	Guía Diámetro inch	Guía Longitud cm	Longitud punta radiopaca cm	Revestimiento hidrofílico Longitud cm	Punta Forma
G47608	AWG2-25-260	0,025	260	4	5,8	Recta
G47609	AWG2-25-260-A	0,025	260	4	5,8	Angulada
G47610	AWG2-25-450	0,025	450	4	5,8	Recta
G47611	AWG2-25-450-A	0,025	450	4	5,8	Angulada
G47612	AWG2-35-205	0,035	205	4	5,8	Recta
G47613	AWG2-35-205-A	0,035	205	4	5,8	Angulada
G47614	AWG2-35-260	0,035	260	4	5,8	Recta
G47615	AWG2-35-260-A	0,035	260	4	5,8	Angulada
G47616	AWG2-35-450	0,035	450	4	5,8	Recta
G47617	AWG2-35-450-A	0,035	450	4	5,8	Angulada

Puede dejarse colocada durante las esfinterotomías. **Aviso:** Este producto no está diseñado para utilizarse con dispositivos de puntas metálicas.

Algunos productos o referencias de producto pueden no estar disponibles en todos los mercados. Consulte los detalles con su representante local o centro de atención al cliente de Cook.

Esfinterótomos precargados con Acrobat® 2

Para la canulación del árbol biliar y para esfinterotomía.

Se suministra estéril y es desechable; indicado para un solo uso.

Referencia	Referencia de producto	Tamaño Fr del catéter	Forma de la punta	Guía Diámetro inch	Guía Longitud cm	Canal de accesorios mínimo mm
G57298	DASH-AWG2-25-450	6,3	DomeTip	0,025	450	2,8
G57299	DASH-AWG2-35-260	6,6	DomeTip	0,035	260	2,8
G57300	DASH-AWG2-35-450	6,6	DomeTip	0,035	450	2,8
G57301	FS-OMNI-AWG2-35-205	7,5	DomeTip	0,035	205	3,2
G57302	FS-OMNI-AWG2-35-260	7,5	DomeTip	0,035	260	3,2
G57303	FS-OMNI-AWG2-35-450	7,5	DomeTip	0,035	450	3,2

Algunos productos o referencias de producto pueden no estar disponibles en todos los mercados. Consulte los detalles con su representante local o centro de atención al cliente de Cook.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001633, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com-A4



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-A4